

Tärkeä huomautus

QIAsymphony®-laboratoriotarvikepaketin SOW-516-9 julkaisu

Hyvä asiakas

Haluamme ilmoittaa sinulle päivitetyn QIAsymphony-laboratoriotarvikepaketin julkaisusta QIAsymphony SP/AS -laitteellesi.

Tähän pakettiin tehdyt muutokset vaikuttavat seuraaviin QIAsymphony-sarjoihin.

- QIAsymphony DSP Circulating DNA Kit -sarja (tuotenro 937556)
- QIAsymphony DSP HPV Media Kit -sarja (tuotenro 937358)
- QIAsymphony DNA Maxi Kit -sarja (tuotenro 937266)
- QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit -sarja (tuotenro 937055) ja QIAsymphony Virus/Bacteria Mini Kit -sarja (tuotenro 931036)

Taulukko 1. QIAsymphony-laboratoriotarvikepaketin päivitykset

Sarja	Protokolla	Muutostiedot
QIAsymphony DSP Circulating DNA Kit	circDNA_1000_DSP_V1	Lisätyt tämän äskettäin käyttöön otetun protokollan kanssa käytettäväksi tarvittavat laboratoriotarvikesuosittelut.
QIAsymphony DSP Circulating DNA Kit	circDNA_2000_DSP_V3 circDNA_4000_DSP_V3	Poistettu BD_FIX_#352051 FalconPP 17x100 suositelluista näytteenotto-putkista näiden protokollien version 3 julkaisun yhteydessä.
QIAsymphony DSP HPV Media Kit	SP800_HC2_V1_DSP	Lisätyt SAR#72.693 T2.0 Screw suositeltavaksi näytteenotto-putkeksi.
QIAsymphony DNA Maxi Kit	DNA_Blood_2000_V1 DNA_Blood_4000_V1	Lisätyt edellisestä laboratoriotarvikepaketistä puuttuneiden Proteinase K -putkien laboratoriotarvikesuosittelut.
QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit QIAsymphony Virus/Bacteria Mini Kit	Cellfree500_V5_DSP	Lisätyt syöttömäärää 750 mikrolittrasta 850 mikrolitraan, kun näytteiden syöttämiseen käytetään BD_352051_FalconPP_17x100 -putkea.

Asianomaisten protokollien käyttäjien tulee varmistaa, että he päivittävät QIASymphony SP/AS -laitteensa laboratoriotarvikepaketin mahdollisimman pian varmistaakseen QIAGEN-työnkulun jatkuvan noudattamisen.


Laboratoriotarvikepaketti voidaan päivittää QIASymphony Management Console -ohjelman avulla tai suoraan laitteessa USB:n kautta.

Katso lisätietoja tiedostojen käsittelystä QIASymphony SP/AS:n yhdistetyn käyttöoppaan osiosta 6.

Asennetun QIASymphony-laboratoriotarvikepaketin tunnistaminen

Suosittelimme, että kaikki käyttäjät tarkistavat käyttävänsä uusinta laboratoriotarvikepakettia laitteissaan.

Laitteeseesi asennetun laboratoriotarvikepaketin version määrittämistä varten on ladattava ProtocollabwareMapping-tiedosto Labware SP -kansioista. Tämä voidaan ladata QIASymphony Management Console -ohjelman avulla tai suoraan laitteessa USB:n kautta.

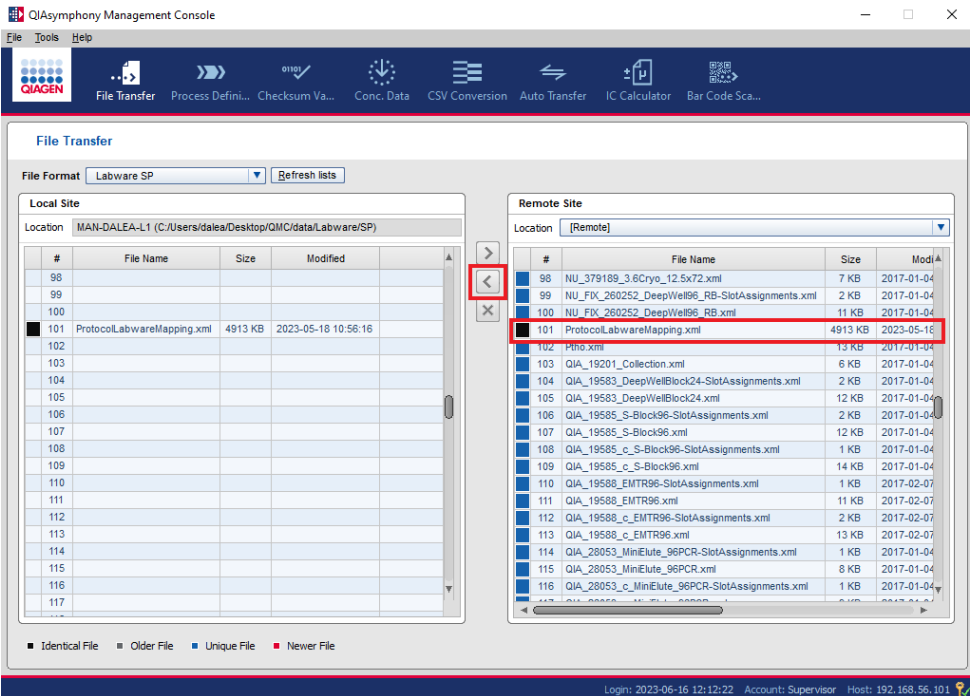

Kuva 1. ProtocolLabwareMapping-tiedoston lataaminen QIASymphony Management Console -ohjelman avulla.

Kun ProtocolLabwareMapping-tiedosto on ladattu, se voidaan avata Notepadissa tai vastaavassa tekstieditorissa.

Laboratoriotarvikepaketin versio mainitaan tiedoston otsikon Abstract-osiossa. Katso kuva 2.

```

ProtocolLabwareMapping - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ProtocolLabwareMap Type="Object" Class ="ProtocolLabwareMap">
  <Header Type="Object" Class ="LabwareHeader">
    <Author Type="String">dalea</Author>
    <LastModified Type="String">2023-06-22 10:13:00</LastModified>
    <Editable Type="Bool">1</Editable>
    <ReleaseState Type="String"></ReleaseState>
    <Abstract Type="String">For labware 516-9</Abstract>
  </Header>

```

Kuva 2. Näkymä ProtocolLabwareMapping-tiedostosta Notepadissa.

Jos tämä kenttä on tyhjä, ladattua laboratoriotarvikepakettia ei suositella käytettäväksi QIASymphony-käyttöohjelmiston uusimman version (versio 5.0.4) kanssa ja se on päivitettävä.

Alla olevassa taulukossa näkyy laboratoriotarvikepaketin vähimmäisversio, joka vaaditaan, jotta voidaan varmistaa oikeat laboratoriotarvikesuositukset kullekin QIASymphony-sarjalle.

Sarjan nimi	Tuotenro	Laboratoriotarvikkeiden vaadittava vähimmäisversio
QIASymphony Bisulfite FPFE Kit	931206	SOW-516-8
QIASymphony Bisulfite Kit	931106	SOW-516-8
QIASymphony Bisulfite LyseAll Kit	931306	SOW-516-8
QIASymphony Certal Residual DNA Kit	931855	SOW-516-7
QIASymphony Certal Vaccine NA Kit	931955	SOW-516-7
QIASymphony Investigator® Kit	931436	SOW-516-8
QIASymphony DNA Maxi Kit	937266	SOW-516-9
QIASymphony DNA Midi Kit	931255	SOW-516-7
QIASymphony DNA Mini Kit	931236	SOW-516-7
QIASymphony DSP DNA Midi Kit	937255	SOW-516-7
QIASymphony DSP DNA Mini Kit	937236	SOW-516-7
QIASymphony DSP Circulating DNA Kit	937556	SOW-516-9
QIASymphony DSP HPV Media Kit	937358	SOW-516-9

Sarjan nimi	Tuotenro	Laboratoriotarvikkeiden vaadittava vähimmäisversio
QIASymphony Virus/Bacteria Midi Kit	931055	SOW-516-7
QIASymphony Virus/Bacteria Mini Kit	931036	SOW-516-7
QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit	937055	SOW-516-7
QIASymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit	937036	SOW-516-7
QIASymphony <i>mericon</i> [®] Bacteria Kit	931156	SOW-516-7
QIASymphony PAXgene [®] Blood ccfDNA Kit	768536	SOW-516-7
QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit (CE-IVD)	768566	SOW-516-8
QIASymphony PAXgene Blood RNA Kit	762635	SOW-516-7
QIASymphony PowerFecal [®] Pro DNA Kit	938036	SOW-516-8
QIASymphony RNA Kit	931636	SOW-516-7

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä QIAGENin tekniseen palveluun (yhteystiedot käsikirjan takakannessa ja osoitteessa www.qiagen.com).

Tavaramerkit: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], QIASymphony[®], Investigator[®], *mericon*[®], PowerFecal[®] (QIAGEN Group). PAXgene[®] (PreAnalytiX GmbH). Tässä asiakirjassa käytettyjä rekisteröityjä nimiä, tavaramerkkejä jne., vaikka niitä ei ole erityisesti merkitty sellaisiksi, ei pidetä lain suojaamattomina. Tässä asiakirjassa käytettyjä rekisteröityjä nimiä, tavaramerkkejä jne., vaikka niitä ei ole erityisesti merkitty sellaisiksi, ei pidetä lain suojaamattomina.

06-2023 HB-3521-001 © 2023 QIAGEN, kaikki oikeudet pidätetään.