

April 2022

Användarhandbok till QIAcube[®] Connect MDx

För användning med programversion 1.0 eller senare

QIAcube Connect MDx är avsedd för *in vitro*-diagnostisk användning.



IVD

CE

REF

9003070



QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND

R2 **MAT**

Innehåll

1	Inledning.....	6
1.1	Om denna användarhandbok.....	6
1.2	Allmän information	7
1.2.1	Teknisk support	7
1.2.2	Produktpolicy	7
1.3	Avsedd användning för QIAcube Connect MDx.....	8
1.3.1	Användningsbegränsningar	8
1.3.2	Krav för användare av QIAcube Connect MDx	8
1.4	Material som behövs men inte medföljer	9
1.5	Ordlista.....	9
1.6	Tillbehör	9
2	Säkerhetsinformation	10
2.1	Korrekt användning	11
2.2	Elsäkerhet.....	14
2.3	Miljö.....	15
2.3.1	Driftsförhållanden	15
2.4	Biologisk säkerhet.....	16
2.5	Kemisk säkerhet	17
2.5.1	Giftiga gaser	17
2.6	Avfallshantering	18
2.7	Mekaniska risker	18
2.7.1	Centrifug	19
2.8	Värmefara	20
2.9	Säkerhet vid underhåll	20
2.10	Strålningssäkerhet.....	22
2.11	Symboler på QIAcube Connect MDx.....	23
3	Allmän beskrivning.....	25
3.1	QIAcube Connect MDx-princip	26
3.2	Externa egenskaper hos QIAcube Connect MDx	28

3.3	Inre egenskaper hos QIAcube Connect MDx	34
3.4	Förbrukningsvaror	41
4	Installationsprocedurer	42
4.1	Installationsmiljö	42
4.1.1	Laboratoriekrav	42
4.1.2	Strömkrav	43
4.1.3	Jordningskrav	44
4.2	Packa upp QIAcube Connect MDx	45
4.3	Installera QIAcube Connect MDx	46
4.3.1	Borttagning av QIAcube Connect MDx tillbehör och frakmaterial	46
4.3.2	Installation av växelströmssladd	47
4.3.3	Installation av extern streckkodsläsare	47
4.3.4	Installation av centrifugrotorn och bågare	48
4.3.5	Installera skakapparatadaptern	49
4.3.6	Programuppgradering	50
4.4	Ompaketering och transport av QIAcube Connect MDx	53
4.5	Konfiguration av QIAcube Connect MDx	55
4.5.1	Systemkonfiguration	56
4.5.2	Konfiguration av inställningar	58
4.5.3	Nätverkskonfiguration	59
5	Driftsprocedurer	64
5.1	Använda QIAcube Connect MDx-programmet	68
5.2	Slå på och av QIAcube Connect MDx	71
5.3	Logga in och logga ut	72
5.4	Ställa in en protokollkörning	73
5.4.1	Val av material	77
5.4.2	Protokollval	77
5.4.3	Parameterdefinition	78
5.4.4	Definiera antal prover	79
5.4.5	Ladda buffertflaskor	79
5.4.6	Ladda spetsar och enzymer	82

5.4.7	Laddning av centrifugen	84
5.4.8	Ladda skakapparaten	91
5.5	Starta en protokollkörning	93
5.6	Stoppa en protokollkörning.....	96
5.7	Spara körningsrapporter till USB-flashminnet.....	97
5.8	Ont om utrymme på flashminnet	99
5.9	Oberoende drift av värmare/skakapparat.....	100
5.10	Oberoende körning av centrifug.....	101
5.11	Hantera protokoll	105
5.11.1	Installera nya protokoll	105
5.11.2	Radera alla protokoll	106
5.11.3	Spara protokoll	107
5.12	Användarhantering.....	108
5.12.1	Skapa en ny användare	108
5.12.2	Ändra data för en befintlig användare.....	111
5.12.3	Radera eller tillfälligt avaktivera en användare.....	112
5.12.4	Byt lösenord.....	113
6	Rengöring och underhåll	115
6.1	Rengöringsmedel.....	116
6.2	Dekontaminera ytorna på QIAcube Connect MDx.....	116
6.3	Regelbundet underhåll	119
6.4	Dagligt underhåll.....	120
6.5	Månadsunderhåll	121
6.6	Periodiskt underhåll	123
6.6.1	Rengöra robotarmmodulerna	123
6.6.2	Rengöra centrifugen.....	124
6.6.3	Använda centrifugen efter rengöring.....	129
6.7	Valfritt underhåll	130
6.7.1	UV-körningen	130
6.7.2	Täthetstest.....	132
6.8	Dekontaminera QIAcube Connect MDx.....	133

6.9	QIAcube Connect MDx-reparation.....	134
7	Felsökning.....	135
7.1	Skapa ett supportpaket.....	136
7.2	Användning.....	137
7.2.1	Protokollavbrott.....	139
7.2.2	Centrifug.....	140
7.2.3	Detektion av reagensvolym och ultraljudsrör.....	142
7.2.4	Pekskärm.....	142
7.2.5	Byte av O-ring.....	144
8	Ordlista.....	150
9	Bilaga A – Tekniska uppgifter.....	151
9.1	Miljömässiga förhållanden – driftsförhållanden.....	151
9.2	Transportförhållanden.....	151
9.3	Förvaring.....	151
9.4	Mekaniska data maskinvarufunktioner.....	151
10	Bilaga B – Juridiskt.....	153
10.1	Deklaration om överensstämmelse.....	153
10.2	Elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).....	153
10.3	EMC-deklaration.....	154
10.4	Klausul om skadeståndsskyldighet.....	155
11	Bilaga C – Tillbehör till QIAcube Connect MDx.....	156
11.1	Beställningsinformation.....	156
12	Dokumentrevisjoner.....	159

1 Inledning

Tack för att du valt QIAcube Connect MDx. Vi är säkra på att den kommer att bli en väsentlig del av ditt laboratorium. Innan du använder QIAcube Connect MDx är det viktigt att du läser igenom denna användarhandbok noga och ägnar uppmärksamhet åt säkerhetsinformationen. Anvisningarna och säkerhetsinformationen i användarhandboken måste följas för att säkerställa en säker drift av instrumentet och för att hålla instrumentet i ett säkert skick.

1.1 Om denna användarhandbok

Den här användarhandboken ger information om QIAcube Connect MDx i följande avsnitt:

- Inledning
- Säkerhetsinformation
- Allmän beskrivning
- Installationsprocedurer
- Driftsprocedurer
- Rengöring och underhåll
- Felsökning
- Ordlista
- Dokumentrevisioner

Bilagorna innehåller följande information:

- Bilaga A – Tekniska uppgifter
- Bilaga B – Juridiskt
- Bilaga C – Tillbehör till QIAcube Connect MDx

1.2 Allmän information

1.2.1 Teknisk support

På QIAGEN® är vi stolta över vår kvalitet och tillgången till vår tekniska support. Våra tekniska serviceavdelningar har bemannade med erfarna vetenskapsmän med omfattande praktisk och teoretisk expertis inom molekylärbiologi och användningen av QIAGEN-produkter. Kontakta oss om du har frågor om eller problem med QIAcube Connect MDx eller QIAGEN-produkter i allmänhet.

QIAGEN-kunder är huvudkällan till information om avancerad eller specialiserad användning av våra produkter. Denna information är till hjälp för andra vetenskapsmän såväl som för forskarna på QIAGEN. Därför uppmuntrar vi dig att kontakta oss om du har några förslag gällande produktprestanda eller nya tillämpningar och tekniker.

För teknisk hjälp, kontakta QIAGEN teknisk service.

Webbplats: support.qiagen.com

Du bör ha följande information tillgänglig när du ringer QIAGEN teknisk service om fel:

- Serienummer, typ och version för QIAcube Connect MDx
- Felkod (om tillämpligt)
- Tidpunkt då felet inträffade för första gången
- Frekvens för felet (dvs. om det är återkommande eller ihållande)
- Kopia av loggfiler

För uppdaterad information om instrumentet QIAcube Connect MDx, besök <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx>.

1.2.2 Produktpolicy

QIAGENS policy är att förbättra produkter i takt med att ny teknik och nya komponenter blir tillgängliga. QIAGEN förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna när som helst. Eftersom vårt mål är att producera användbar och korrekt dokumentation, uppskattar vi dina kommentarer om denna användarhandbok. Kontakta QIAGEN teknisk service.

1.3 Avsedd användning för QIAcube Connect MDx

QIAcube Connect MDx-instrumentet är utformat för att utföra automatiserad isolering och rening av nukleinsyror i molekylära diagnostiska och/eller molekylära biologiska tillämpningar. QIAcube Connect MDx-instrumentet är avsett för användning av yrkespersoner, såsom tekniker och läkare som är utbildade i molekylära biologiska metoder och användning av instrumentet.

QIAcube Connect MDx-instrumentet är avsedd för att endast användas i kombination med de QIAGEN- och PreAnalytiX-satser som indikeras för användning med QIAcube Connect MDx-instrumentet för de tillämpningar som beskrivs i satsernas handböcker.

1.3.1 Användningsbegränsningar

Använd endast instrumentet i kombination med de tillbehör som beskrivs i kapitel 1.4 och bilaga C. Andra begränsningar av tillämpningen anges i handboken till respektive kit.

1.3.2 Krav för användare av QIAcube Connect MDx

Tabellen nedan visar den allmänna kompetensnivån och den kunskap som krävs för transport, installation, användning, underhåll och service av QIAcube Connect MDx.

Åtgärd	Personal	Kompetens- och kunskapsnivå
Leverans	Inga speciella krav	Inga speciella krav
Installation, rutinanvändning och underhåll	Laboratorietechniker eller motsvarande	Korrekt utbildad och erfaren personal, som är förtrogen med användning av datorer och automatisering i allmänhet
Service och årligt underhåll	Endast QIAGEN-fältservicespecialister	Utbildade och godkända av QIAGEN

1.4 Material som behövs men inte medföljer

- Skyddsglasögon
- Handskar
- Labbrock

OBS! Använd endast tillbehör från QIAGEN.

Produkt	Innehåll	Kat.nr
Filter-Tips, 1000 µl (1024)	Engångsfilterspetsar, i rack, (8 x 128)	990352
Filter-Tips, 1000 µl, wide-bore (1024)	Engångsfilterspetsar, bred diameter, i rack (8 x 128), krävs inte för alla protokoll	990452
Filter-Tips, 200 µl (1024)	Engångsfilterspetsar, i rack (8 x 128), krävs inte för alla protokoll	990332
Rotor Adapters (10 x 24)	För 240 prepareringar: 240 rotoradapterar för engångsbruk och 240 mikrocentrifugrör (1,5 ml) för användning med QIAcube Connect MDx	990394
Rotor Adapter Holder	Hållare för 12 engångsrotoradapterar; för användning med QIAcube Connect MDx	990392
Reagent Bottles, 30 ml (6)	Reagensflaskor (30 ml) med lock (6-pack) för användning med QIAcube Connect MDx-reagensflaskställ	990393
Sample Tubes RB (2 ml)	1 000 mikrocentrifugrör med säkra lock (2 ml) för användning med QIAcube Connect MDx	990381
Sample Tubes CB (2 ml)	1 000 konformade rör med skruvlock utan bred bas (2 ml) för användning med QIAcube Connect MDx	990382
1.5 ml elution tubes	Paket med 50; för användning med QIAcube Connect MDx	1050875
O-Ring Change Tool	Verktyg för byte av O-ring för användning med QIAcube Connect MDx	9026181
O-Ring Set	Paket med 10 O-ringar för användning med QIAcube Connect MDx	9018472

1.5 Ordlista

En ordlista med termer som används i denna användarhandbok finns i avsnitt 8.

1.6 Tillbehör

Mer information om QIAcube Connect MDx-tillbehör finns i bilaga C till denna användarhandbok.



2 Säkerhetsinformation

Innan du använder QIAcube Connect MDx är det viktigt att du läser igenom denna användarhandbok noga och ägnar särskild uppmärksamhet åt säkerhetsinformationen. Anvisningarna och säkerhetsinformationen i användarhandboken måste följas för att säkerställa en säker drift av instrumentet och för att hålla instrumentet i ett säkert skick.

Möjliga faror som skulle kunna skada användaren eller leda till skada på instrumentet, anges tydligt på lämpliga ställen i denna sammanställda driftsguide.

Om utrustningen används på ett annat sätt än vad som specificeras av tillverkaren, kan det skydd som utrustningen ger försämrats.


Följande typer av säkerhetsinformation visas i *Användarhandboken till QIAcube Connect MDx*.

<p>VARNING</p> 	<p>Termen VARNING används för att informera dig om situationer som skulle kunna leda till personskada för dig eller andra personer.</p> <p>Information om dessa förhållanden anges i en ruta som denna.</p>
<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Uttrycket FÖRSIKTIGHET används för att informera dig om situationer som skulle kunna leda till skada på ett instrument eller annan utrustning.</p> <p>Information om dessa förhållanden anges i en ruta som denna.</p>


Vägledningen som ges i den här användarhandboken är avsedda att komplettera, inte ersätta de normala säkerhetskraven som gäller i användarens land.


Var medveten om att du kan behöva konsultera lokala regelverk för rapportering av allvarliga incidenter som inträffat i samband med enheten till tillverkaren och den tillsynsmyndighet där användaren och/eller patienten befinner sig.


2.1 Korrekt användning

VARNING 	Risk för personskada och materialskada Felaktig användning av QIAcube Connect MDx kan orsaka personskador eller skada på instrumentet. QIAcube Connect MDx får endast användas av kvalificerad personal, med lämplig utbildning. Service på QIAcube Connect MDx-instrumentet får endast utföras av QIAGENs fältservicespecialister.
---	---


Utför underhåll som det beskrivs i avsnitt 6, Rengöring och underhåll. QIAGEN debiterar för reparationer som måste utföras på grund av felaktigt underhåll.


VARNING 	Risk för personskada och materialskada QIAcube Connect MDx är för tung för att en person ska kunna lyfta den. Lyft inte instrumentet ensam för att undvika att du eller instrumentet skadas. Kontakta QIAGEN teknisk service om du behöver flytta instrumentet.
---	--


VARNING 	Risk för personskada och materialskada Försök inte att flytta QIAcube Connect MDx medan den används.
---	--


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Undvik att spilla vatten eller kemikalier på QIAcube Connect MDx. Skada som orsakas av vatten eller kemiskt spill gör din garanti ogiltig.
--	--


I nödfall ska du stänga AV QIAcube Connect MDx med strömbrytaren på framsidan av instrumentet och dra ur nätsladden från vägguttaget.


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Använd endast QIAGEN-kolonner och QIAcube Connect MDx-specifika förbrukningsartiklar med QIAcube Connect MDx. Skador som orsakas av användning av andra typer av kolonner eller analyser kommer att ogiltigförklara garantin.
--	---


VARNING 	Risk för personskada och materialskada Använd inte skadade rotoradapttrar. Rotoradapttrarna kan endast användas en gång. Starka g-krafter i centrifugen kan skada begagnade rotoradapttrar.
---	---

FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Töm spetsavfallsbehållaren före användning för att förhindra att spetsar fastnar i avfallslådan. Om avfallsbehållaren inte töms kan robotarmen blockeras, vilket kan orsaka körfel eller skada instrumentet.
--	--

VARNING 	Risk för personskada och materialskada Ladda provrören korrekt för att undvika plastkollisioner. Efter en plastkollision kan vassa plastpartiklar förekomma inuti centrifugen. Var försiktig när du hanterar föremål inuti centrifugen.
---	---


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Använd endast rätt volym av vätskor. Om den rekommenderade vätskevolymen överskrids kan centrifugrotorn eller instrumentet skadas.
--	---

VARNING 	Risk för brand eller explosion När du använder etanol- eller etanolbaserade vätskor på QIAcube Connect MDx ska du hantera sådana vätskor försiktigt och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Om vätska har spillts ut, torka av den och låt QIAcube Connect MDx-huven stå öppen så att brandfarliga ångor kan skingras.
---	---

VARNING 	Risk för explosion QIAcube Connect MDx är avsedd att användas tillsammans med reagenser och ämnen som levereras med QIAGEN-kit eller andra som anges i respektive bruksanvisning. Användning av andra reagenser och substanser kan leda till brand eller explosion.
---	---


Om farligt material spills på eller inuti QIAcube Connect MDx ansvarar användaren för att utföra lämplig dekontaminering.


OBS! Placera inte objekt ovanpå QIAcube Connect MDx-huven.


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Luta dig inte mot pekskärmen när den är utdragen.
--	---

2.2 Elsäkerhet

Obs! Dra ut nätsladden från nätanslutningsporten före service.

<p>VARNING</p> 	<p>Elektrisk fara</p> <p>Eventuell störning av skyddsledaren (jord) inuti eller utanför instrumentet eller fränkoppling av skyddslederterminalen kan göra instrumentet farligt.</p> <p>Avsiktlig störning är förbjuden.</p> <p>Dödliga spänningar inuti instrumentet</p> <p>När instrumentet är anslutet till nätet kan terminaler vara spänningsförande och om man öppnar höljen eller tar bort delar kan detta exponera spänningsförande delar.</p>
---	---

<p>VARNING</p> 	<p>Skada på elektroniken</p> <p>Se till att rätt matningsspänning används innan instrumentet slås PÅ.</p> <p>Felaktig användning av matningsspänningen kan orsaka skada på elektroniken.</p> <p>Se specifikationerna som anges på instrumentets märkplåt.</p>
---	--

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för elektrisk stöt</p> <p>Öppna inte några paneler på QIAcube Connect MDx.</p> <p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Utför endast underhåll som specifikt beskrivs i denna användarhandbok.</p>
---	--

För att säkerställa QIAcube Connect MDx fungerar säkert och korrekt bör du följa nedanstående råd:

- Säkerställ att nätsladden är ansluten till ett nätuttag som är jordat.
- Instrumentet ska installeras på sådant sätt att nätsladden är åtkomlig och kan anslutas/kopplas bort.
- Använd endast nätsladden som levererats av QIAGEN.

- Justera eller ersätt inte interna instrumentdelar.
- Driv inte instrumentet med några höljen eller delar borttagna.
- Om vätska har spillts inuti instrumentet, stäng av det, koppla från det från nätströmmen och kontakta QIAGEN:s tekniska service.

Om instrumentet blir elektriskt osäkert förhindra annan personal från att använda det och kontakta QIAGEN teknisk service.


Instrumenten kan vara elektriskt osäkra när:


- Instrumentet eller nätsladden är skadad.
- Det har lagrats under ogynnsamma förhållanden under en längre period.
- Det har utsatts för stora transportpåfrestningar.


2.3 Miljö

Parametrar som temperaturintervall och fuktighetsintervall beskrivs i avsnitt 9, Bilaga A – Tekniska uppgifter.

2.3.1 Driftsförhållanden

VARNING 	Explosiv omgivning QIAcube Connect MDx är inte utformad för användning i explosiv atmosfär.
---	---


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Direkt solljus kan bleka delar av instrumentet och skada plastdelar. QIAcube Connect MDx måste placeras utanför direkt solljus.
--	--

FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Använd inte QIAcube Connect MDx i närheten av källor till stark elektromagnetisk strålning (till exempel oskärmade, avsiktligt drivna källor som avger högfrekvent strålning eller mobila radioenheter) då dessa kan störa systemets drift.
--	---

2.4 Biologisk säkerhet

Prover och reagenser som innehåller humant material bör behandlas som potentiellt smittsamt. Använd säkra laboratorieprocedurer som beskrivs i publikationer såsom Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, HHS (<https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2020-P.pdf>).

Prover kan innehålla smittfarliga ämnen. Du bör vara medveten om den hälsorisk sådana ämnen utgör och du bör använda, förvara och kassera sådana prover i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.


<p>WARNING</p> 	<p>Prover innehållande smittsamma ämnen</p> <p>Vissa prover som används med detta instrument kan innehålla smittsamma ämnen. Hantera sådana prover med stor försiktighet och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.</p> <p>Använd alltid skyddsglasögon, 2 par handskar och laboratorierock.</p> <p>Ansvarig person (t.ex. laboratoriechef) måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den omgivande arbetsplatsen är säker och att instrumentanvändarna är korrekt utbildade och inte exponeras för farliga nivåer av smittsamma ämnen, såsom definieras i de tillämpliga säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheet, MSDS) eller OSHA-, * ACGIH-† eller COSHH‡-dokument.</p> <p>Ventilation för ångor och kassering av avfall måste ske i enlighet med alla nationella och lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter och lagar.</p>
---	---

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Amerikanska arbetsmiljöverket) (USA).

† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikanska konferensen för statliga industrihygienister) (USA).


‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Kontroll av hälsofarliga ämnen) (Storbritannien).


2.5 Kemisk säkerhet

VARNING 	Farliga kemikalier Vissa kemikalier som används med detta instrument kan vara farliga eller kan bli farliga efter fullbordande av protokollkörningen. Använd alltid säkerhetsglasögon, handskar och en labbrock. Ansvarig person (t.ex. laboratoriechef) måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den omgivande arbetsplatsen är säker och att instrumentanvändarna är korrekt utbildade och inte exponeras för farliga nivåer av giftiga ämnen (kemiska eller biologiska), såsom definieras i de tillämpliga säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheet, MSDS) eller OSHA-,* ACGIH-† eller COSHH‡-dokumenten. Ventilation för ångor och kassering av avfall måste ske i enlighet med alla nationella och lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter och lagar.
---	--

2.5.1 Giftiga gaser

Om du arbetar med flyktiga lösningsmedel, giftiga substanser etc., måste du tillhandahålla ett effektivt ventileringssystem för laboratoriet, för att avlägsna ångor som kan bildas.

VARNING 	Giftiga gaser Använd inte blekmedel för att rengöra eller desinficera QIAcube Connect MDx. Blekmedel i kontakt med salter från buffertarna kan producera giftiga gaser.
---	---

VARNING 	Giftiga gaser Använd inte blekmedel för att desinficera laboratorieutrustning. Blekmedel i kontakt med salter från de buffertar som används kan producera giftiga gaser.
---	--

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Amerikanska arbetsmiljöverket) (USA).


† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikanska konferensen för statliga industrihygienister) (USA).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Kontroll av hälsofarliga ämnen) (Storbritannien).

2.6 Avfallshantering

Begagnad laboratorieutrustning, t.ex. provrör, QIAGEN-kolonner, filterspetsar, buffertflaskor och enzymrör eller rotoradapterar, kan innehålla farliga kemikalier eller smittämnen från reningsprocessen. Sådant farligt avfall måste uppsamlas och avyttras i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter.


Mer information om hur du kasserar QIAcube Connect MDx finns i avsnitt 10.2, Elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).


VARNING 	Farliga kemiska och smittsamma ämnen Detta avfall kan innehålla giftigt material och måste avyttras på lämpligt sätt. Se dina lokala säkerhetsföreskrifter för lämpliga avyttringsprocedurer.
---	---

2.7 Mekaniska risker

Huven på QIAcube Connect MDx måste förbli stängd när instrumentet används. Öppna enbart huven om handboken uppmanar till detta.


När du laddar arbetsbordet ska du alltid hålla dig borta från instrumentet. Luta dig inte mot arbetsbordet när instrumentets robotarm rör sig för att nå laddningspositionen med locket öppet. Vänta tills robotarmen har slutfört sina rörelser innan du börjar ladda på eller ur.

VARNING 	Rörliga delar Undvik kontakt med rörliga delar under användning av QIAcube Connect MDx. Lägg inte under några omständigheter händerna under robotarmen när den sänks. Försök inte att flytta spetsställ eller provrör medan instrumentet körs.
---	--


VARNING 	Rörliga delar För att undvika kontakt med rörliga delar under användning av QIAcube Connect MDx måste instrumentet användas med huven stängd. Om huvsensorerna eller låsen inte fungerar korrekt, kontakta QIAGEN teknisk service.
---	---


2.7.1 Centrifug


Kontrollera att rotorn och bågarna är korrekt installerade. Alla bågare måste fästas före protokollkörningen, oavsett antalet prover som ska bearbetas. Om rotorn eller bågarna visar tecken på mekanisk skada eller korrosion ska du inte använda QIAcube Connect MDx. Kontakta QIAGEN teknisk service.


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet QIAcube Connect MDx måste användas om centrifuglocket är trasigt eller om låslocket har skadats. Se till att inget löst material förekommer inuti centrifugen under drift. Kontrollera att rotorn är korrekt monterad och att alla behållare är korrekt monterade, oavsett hur många prover som ska bearbetas. Ladda endast rotorn enligt anvisningarna i programvaran. Använd endast rotorerna, bågarna och förbrukningsartiklar som är avsedda att användas tillsammans med QIAcube Connect MDx. Skador som orsakas av användning av andra förbrukningsvaror gör din garanti ogiltig. Vi rekommenderar att centrifugrotorn och behållarna byts ut efter 20 000 cykler, vilket motsvarar 9 års användning med två körningar per dag i 220 dagar varje år. För mer information, kontakta QIAGEN teknisk service.
--	--

Om strömavbrott uppstår kan centrifuglocket öppnas manuellt för att ta bort proverna (se avsnitt 7.2.2).

VARNING 	Rörliga delar Om strömavbrott skadar systemet bör nätsladden avlägsnas. Vänta 10 minuter innan du försöker öppna centrifuglocket manuellt.
---	--


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Efter ett strömavbrott ska du inte flytta z-modulen (robotarmen) manuellt framför instrumentet. Skador kan uppstå om QIAcube Connect MDx-huven är stängd och kolliderar med z-modulen.
--	--

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Lyft centrifuglocket försiktigt. Locket är tungt och kan orsaka skador om det faller.</p>
---	---


<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Risk för överhettning</p> <p>För att säkerställa korrekt ventilation måste det finnas ett minsta spelrum på 10 cm bakom och på båda sidorna om QIAcube Connect MDx.</p> <p>Öppningar som säkerställer ventilationen av QIAcube Connect MDx får inte täckas över.</p>
--	--







2.8 Värmefara


QIAcube Connect MDx-arbetsbordet innehåller en uppvärmd skakapparat.


<p>VARNING</p> 	<p>Mycket varm yta</p> <p>Skakapparaten kan uppnå temperaturer på upp till 70 °C. Undvik att vidröra ytan när den är het. Ta bort proverna försiktigt efter körning.</p>
---	---

2.9 Säkerhet vid underhåll


<p>VARNING</p> <p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Utför endast underhåll som specifikt beskrivs i denna användarhandbok.</p>
--	--


<p>VARNING</p> 	<p>Risk för explosion</p> <p>När du rengör QIAcube Connect MDx med alkoholbaserade desinficeringsmedel ska du lämna QIAcube Connect MDx-huven öppen för att låta brandfarliga ångor avdunsta.</p> <p>Rengör endast QIAcube Connect MDx när arbetsbordets komponenter har svalnat.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>Brandfara</p> <p>Låt inte rengöringsvätska eller saneringsmedel komma i kontakt med QIAcube Connect MDx elektriska delar.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Dra åt muttrarna ordentligt med rotornyckeln som medföljer QIAcube Connect MDx för att förhindra att rotormuttrarna lossnar under centrifugen.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>UV-strålningsrisk</p> <p>Ett mekaniskt lås säkerställer att huven måste stängas för att UV-lysdioden ska fungera.</p> <p>Om huvsensorerna eller låsen inte fungerar korrekt, kontakta QIAGEN teknisk service.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Kontrollera att locken på kolonnerna och 1,5 ml-mikrocentrifugrören är på rätt plats och har skjutits ner hela vägen till botten på skårorna på rotoradapters sidor. Felaktigt placerade lock kan brytas under centrifugeringen.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Kontrollera att locket har avlägsnats helt från kolonnen. Kolonner med delvis borttagna lock kanske inte tas bort korrekt från rotorn, vilket innebär att protokollkörningen kraschar.</p>

<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Skada på instrumentet</p> <p>Använd inte klorin, lösningsmedel, eller reagenser som innehåller syror, baser eller polermedel för att rengöra QIAcube Connect MDx.</p>
--	---








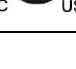




<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Skada på instrumentet</p> <p>Använd inte sprayflaskor med alkohol eller desinfektionsmedel för att rengöra ytorna på QIAcube Connect MDx. Sprayflaskor bör endast användas för att rengöra artiklar som avlägsnats från arbetsborden.</p>
--	---










2.10 Strålningssäkerhet

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada</p> <p>Utsätt inte huden för UV-C-ljus från UV-lysdioden.</p>
---	--

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada</p> <p>Varning laserljus nivå 2: Titta inte in i ljusstrålen när du använder en handhållen streckkodsläsare.</p>
---	---

2.11 Symboler på QIAcube Connect MDx

Symbol	Plats	Beskrivning
	Intill skakapparaten	Värmefara – Skakapparaten temperatur kan nå upp till 70 °C.
	Nära centrifugen, nära robotarmen	Mekanisk fara – Undvik kontakt med rörliga delar.
	På instrumentet, nära flaskstället	Brandfara – Användning av etanol i flaskställ.
	Framför arbetsbordet	Biologisk fara – Vissa prover som används med detta instrument kan innehålla smittsamma ämnen och måste hanteras med skyddshandskar.
	Inuti avfallslådan	Biologisk fara – Avfallslådan kan vara kontaminerad med biologiskt smittfarligt material och måste hanteras med handskar.
	Typskylt på baksidan av instrumentet	CE-märkning för Europa
	Typskylt på baksidan av instrumentet	CSA-märkning för Kanada och USA
	Typskylt på baksidan av instrumentet	FCC-märke för USA:s Federal Communications Commission
	Typskylt på baksidan av instrumentet	RCM-märkning för Australien och Nya Zeeland
	Typskylt på baksidan av instrumentet	RoHS-märkning för Kina (regler för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning)
	Typskylt på baksidan av instrumentet	Elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) för Europa
	Typskylt på baksidan av instrumentet	Laglig tillverkare

Symbol	Plats	Beskrivning
	På instrumentets baksida	Se bruksanvisningen.
	Typskylt på baksidan av instrumentet	Se varningar och försiktighetsåtgärder.
	Typskylt på baksidan av instrumentet	In vitro-diagnostisk medicinsk produkt
	Typskylt på baksidan av instrumentet	Unik enhetsidentifierare
	Typskylt på baksidan av instrumentet	Unik enhetsidentifierare (UDI) som en 2D-streckkod i Data Matrix-format.
	Typskylt på baksidan av instrumentet	GSI-artikelnnummer.
	Typskylt på baksidan av instrumentet	Serienummer.
	Typskylt på baksidan av instrumentet	Katalognummer
	Typskylt på baksidan av instrumentet	Tillverkningsdatum

3 Allmän beskrivning

QIAcube Connect MDx utför helt automatiserad isolering och rening av nukleinsyror i molekylära diagnostiska och molekylära biologiska tillämpningar.

Den kan bearbeta upp till 12 prover i varje körning. QIAcube Connect MDx är utformad för att automatisera valda QIAGEN DSP- och icke-DSP-kit och PAXgene Blood RNA Kit. QIAcube Connect MDx styr integrerade komponenter, inklusive centrifug, uppvärmd skakapparat, pipetteringssystem, UV-lysdiod och robotgriparm.

Med QIAcube Connect MDx går det att starta ett protokoll antingen i IVD-läge (endast för validerade IVD-tillämpningar) eller i Research-läge (forskning) för programvaran (endast för molekylära biologitillämpningar och anpassade tillämpningar). Användning av IVD-protokoll är endast möjligt och strikt begränsat till programvarans IVD-läge. Denna användarhandbok fokuserar på användning av QIAcube Connect MDx i IVD-programvaruläget. Detaljerade instruktioner om hur du använder QIAcube Connect MDx med hjälp av läget Research (Forskning) i programvaran (med MBA-protokoll eller anpassade protokoll) finns i *Användarhandboken till QIAcube Connect* (finns på QIAcube Connect-produktwebbsidan under fliken Product Resources (Produktresurser)).

QIAcube Connect MDx har olika protokoll och motsvarande analyskontrolluppsättningar förinstallerade för bearbetning av QIAGEN-kolonner för rening av RNA, genomiskt DNA och virala och bakteriella nukleinsyror. Ytterligare protokoll finns tillgängliga i programmets Research-läge (Forskning) för till exempel plasmid-DNA och proteinrening samt DNA- och RNA-rengöring. Användaren väljer först programvaruläge för den typ av tillämpning som ska utföras med pekskärmen, väljer sedan ett program eller skannar en kitstreckkod och läser in labbmaterial, prover och reagenser på QIAcube Connect MDx-arbetsbordet. Användaren stänger redan huven och startar protokollet, vilket ger alla nödvändiga kommandon för rening och lysning av prover med QIAGEN-kolonner. En helautomatisk laddningskontroll hjälper till att kontrollera att arbetsbordet är korrekt laddat.

Tack vare utökat användargränssnitt förblir användarna anslutna till sitt instrument via den inbyggda skärmen och är fjärranslutna till en dator eller en mobilenhet (t.ex. en surfplatta) och QIASphere App med hjälp av det tillhörande QIASphere-anslutningspaketet (se avsnitt 11, Bilaga C – Tillbehör till QIAcube Connect MDx), vilket möjliggör snabba insatstider och möjlighet att övervaka körningar samtidigt när de inte är vid instrumentet.


OBS! Inställning av en körning på en mobilenhet (till exempel en surfplatta) och överföring av informationen till QIAcube Connect MDx är endast möjligt med programvarans Research-läge (Forskning). Programvarans IVD-läge har inget stöd för den här funktionen. Istället måste användaren vara framför instrumentet och använda pekskärmen på instrumentet för att konfigurera en körning.

3.1 QIAcube Connect MDx-princip

Provberedningen med QIAcube Connect MDx följer samma steg som den manuella proceduren (dvs. lysning, bindning, tvätt och eluering). Beroende på vald tillämpning kan proceduren avvika eller vissa steg inte behövas. Om du går vidare till laboratorieautomatisering krävs ingen ändring av reningskemikalierna eftersom du helt enkelt fortsätter att använda betrodda QIAGEN-kolonnsatser.


1. Prover lyseras i skakapparaten som kan värmas om protokollet kräver det.
2. Varje lysat överförs till en kolonn i en rotoradapter. Om lysatet måste homogeniseras eller renas överförs det först till rotoradapterns mittposition.
3. Nukleinsyror eller proteiner binds till kiselmembranet eller reningsytan i QIAGEN-kolonnen och tvättas för att avlägsna föroreningar.
4. Kolonnen överförs till ett mikrocentrifugrör för eluering av reade nukleinsyror eller protein.

Ett exempel på ett arbetsflöde med hjälp av en QIAGEN-kolonnsats finns i flödesschemat på nästa sida.

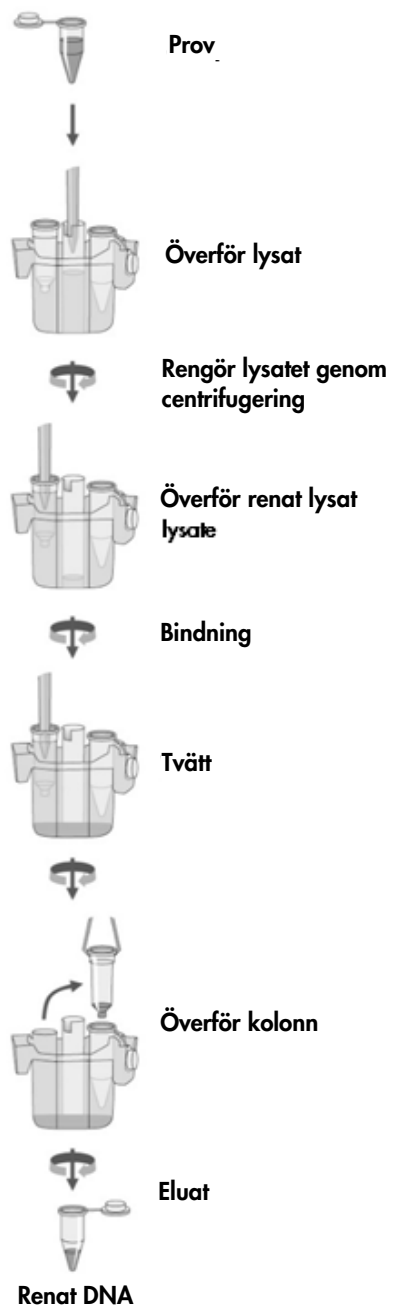

Exempel på flödesschema över proceduren.

3.2 Externa egenskaper hos QIAcube Connect MDx

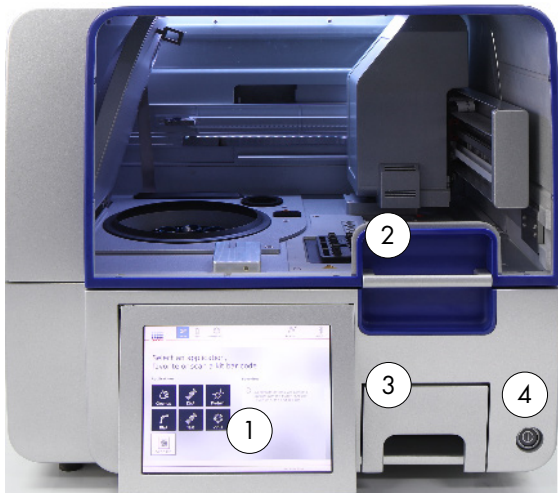


Vy framifrån av QIAcube Connect MDx.



Utdragen pekskärm.



Vy bakifrån av QIAcube Connect MDx.

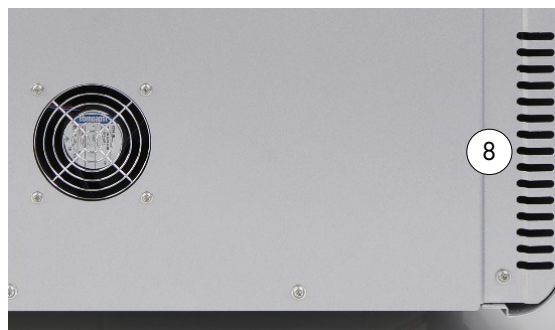

Vy bakifrån av QIAcube Connect MDx.

- | | | | |
|---|--------------|---|--|
| 1 | Pekskärm | 5 | 2 USB-portar till vänster om pekskärmen, 2 Usb-portar bakom pekskärmen (Wi-Fi-modulen är ansluten till 1 USB-port) |
| 2 | Huv | 6 | RJ-45 Ethernet-port |
| 3 | Avfallslåda | 7 | Nätsladdsuttag |
| 4 | Strömbrytare | 8 | Utlopp för kylluft |
| | | 9 | Extern streckkodsläsare (ej på bild) |

Pekskärm


QIAcube Connect MDx styrs via en vridbar pekskärm. Pekskrmen gör att användaren kan använda instrumentet och vägleder användaren genom konfigurationen av arbetsbordet. Under provbearbetningen visar pekskrmen protokollstatusen och återstående tid.



Utdragen pekskärm.

Huv

QIAcube Connect MDx-huven skyddar användare från robotarmen i rörelse och från potentiellt smittsamt material på arbetsbordet. Huven kan öppnas manuellt för att komma åt arbetsbordet. Vid drift av QIAcube Connect MDx måste huven vara stängd och får enbart öppnas när du blir anvisad om det av programvaran. Därför har ett lås införts på huven för att undvika att den öppnas vid fel tillfälle.

<p>VARNING</p> 	<p>Rörliga delar</p> <p>För att undvika kontakt med rörliga delar under användning av QIAcube Connect MDx måste instrumentet användas med huven stängd.</p> <p>Om huvsensorerna eller låsen inte fungerar korrekt, kontakta QIAGEN teknisk service.</p>
---	--

Strömbrytare

Strömbrytare sitter på framsidan av QIAcube Connect MDx och används för att slå på och av instrumentet.

RJ-45 Ethernet-port

RJ-45 Ethernet-porten på baksidan av instrumentet bredvid nätsladdsuttaget används endast för att ansluta QIAcube Connect MDx till det lokala nätverket via sladd.

USB-portar

QIAcube Connect MDx har fyra USB-portar. Två är belägna till vänster om pekskärmen och två bakom pekskärmen.

USB-portarna till vänster om pekskärmen används för att ansluta QIAcube Connect MDx till ett USB-flashminne. Datafiler, såsom supportpaket, protokoll och rapportfiler, kan också flyttas via USB-porten från QIAcube Connect MDx till USB-minnet. USB-porten kan också användas för att koppla in den medföljande externa streckodsläsaren.

USB-portarna under pekskärmen kan användas till att sätta in en Wi-Fi adapter för anslutning via Wi-Fi till ett lokalt nätverk.

Viktigt: Använd endast USB-flashminnet från QIAGEN. Anslut inte andra USB-flashminnen till USB-portarna.

Viktigt: Ta inte bort USB-flashminnet vid hämtning eller överföring av data eller programvara till eller från instrumentet.

Viktigt: Stäng alltid av QIAcube Connect MDx när du ansluter eller kopplar ur USB-enheten för Wi-Fi-anslutning. Plug-and-play för USB-enheten för Wi-Fi när instrumentet är på stöds inte.

Avfallslåda

Använda engångsfilterspetsar kasseras genom två skårar i arbetsbordet och samlas i avfallslådan. Använda kolonner (t.ex. QIAshredder-kolonner) kasseras också direkt i den här lådan.

FÖRSIKTIGHET



Skada på instrumentet


Töm spetsavfallsbehållaren före användning för att förhindra att spetsar fastnar i avfallslådan. Om avfallsbehållaren inte töms kan robotarmen blockeras, vilket kan orsaka körfel eller skada instrumentet.


VARNING



Farliga kemiska och smittsamma ämnen

Detta avfall kan innehålla giftigt material och måste avyttras på lämpligt sätt. Se dina lokala säkerhetsföreskrifter för lämpliga avyttringsprocedurer.

<p>VARNING</p> 	<p>Farliga kemikalier</p> <p>Vissa kemikalier som används med detta instrument kan vara farliga eller kan bli farliga efter fullbordande av protokollkörningen.</p> <p>Använd alltid säkerhetsglasögon, handskar och en labbrock.</p> <p>Ansvarig person (t.ex. laboratoriechef) måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den omgivande arbetsplatsen är säker och att instrumentanvändarna är korrekt utbildade och inte exponeras för farliga nivåer av giftiga ämnen (kemiska eller biologiska), såsom definieras i de tillämpliga säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheet, MSDS) eller OSHA-*, ACGIH-† eller COSHH‡-dokumenten.</p> <p>Ventilation för ångor och kassering av avfall måste ske i enlighet med alla nationella och lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter och lagar.</p>
---	---

<p>VARNING</p> 	<p>Prover innehållande smittsamma ämnen</p> <p>Vissa prover som används med detta instrument kan innehålla smittsamma ämnen. Hantera sådana prover med stor försiktighet och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.</p> <p>Använd alltid skyddsglasögon, 2 par handskar och laboratorierock.</p> <p>Ansvarig person (t.ex. laboratoriechef) måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den omgivande arbetsplatsen är säker och att instrumentanvändarna är korrekt utbildade och inte exponeras för farliga nivåer av smittsamma ämnen, såsom definieras i de tillämpliga säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheet, MSDS) eller OSHA-*, ACGIH-† eller COSHH‡-dokumenten.</p> <p>Ventilation för ångor och kassering av avfall måste ske i enlighet med alla nationella och lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter och lagar.</p>
---	--


* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Amerikanska arbetsmiljöverket) (USA).


† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikanska konferensen för statliga industrihygienister) (USA).


‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Kontroll av hälsofarliga ämnen) (Storbritannien).

Nätsladdsuttag

Nätsladden sitter längst bak på QIAcube Connect MDx och möjliggör anslutning av QIAcube Connect MDx till ett eluttag via den medföljande nätsladden.


VARNING 	Risk för elektrisk stöt Eventuell störning av skyddsledaren (jord) inuti eller utanför instrumentet eller fränkoppling av skyddsledarterminalen kan göra instrumentet farligt. Avsiktlig störning är förbjuden. Dödliga spänningar inuti instrumentet När instrumentet är anslutet till nätet kan terminaler vara spänningsförande och om man öppnar höljen eller tar bort delar kan detta exponera spänningsförande delar.
---	---

VARNING 	Skada på elektroniken Se till att rätt matningsspänning används innan instrumentet slås PÅ. Felaktig matningsspänning kan skada elektroniken. Se specifikationerna på instrumentets typskylt för information om den rekommenderade matningsspänningen.
---	--

VARNING 	Risk för elektrisk stöt Öppna inte några paneler på QIAcube Connect MDx. Risk för personskada och materialskada Utför endast underhåll som specifikt beskrivs i denna användarhandbok.
---	--


Utlopp för kylluft

Kylluftutloppen finns på baksidan av QIAcube Connect MDx och möjliggör kylning av de interna komponenterna i QIAcube Connect MDx.


FÖRSIKTIGHET 	Risk för överhettning För att säkerställa korrekt ventilation måste det finnas ett minsta spelrum på 10 cm bakom och på båda sidorna om QIAcube Connect MDx. Öppningar som säkerställer ventilationen av QIAcube Connect MDx får inte täckas över.
--	---

Extern streckodsläsare

QIAcube Connect MDx är utrustad med en handhållen 2D-streckodsläsare för streckodsavläsning av för kit och prov.

VARNING 	Risk för personskada Varning laserljus nivå 2: Titta inte in i ljusstrålen när du använder en handhållen streckodsläsare.
---	---

3.3 Inre egenskaper hos QIAcube Connect MDx

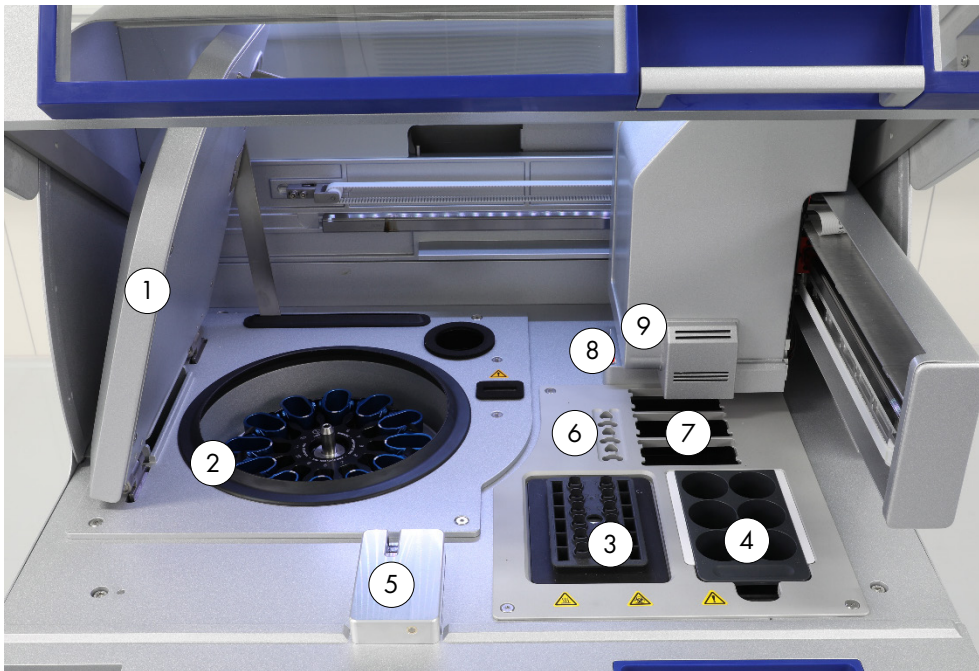

QIAcube Connect MDx sedd inifrån.


- | | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| 1 | Centrifuglock | 6 | Fack för mikrocentrifugrör |
| 2 | Centrifug | 7 | 3 platser för spets hållare |
| 3 | Skakapparät | 8 | Kasseringsfack för spetsar och kolonner |
| 4 | Ställ för reagensflaskor | 9 | Robotarm (inklusive griparm, pipetteringsystem, optisk sensor, ultraljudssensor och UV-lysdiod) |
| 5 | Spets sensor och lås för huv | | |


Centrifug

Centrifugen är utrustad med 12 swing-out-bägare, som var och en kan hålla en engångsrotoradapter. Upp till 12 prover kan bearbetas per körning. För enkel användning och hög bearbetnings säkerhet markerar en grå linje den sida av bägaren som måste vara vänd mot rotorns mitt. Alla centrifugbägare måste fästas före körningen, oavsett antalet prover som ska bearbetas. Följ de laddningsinstruktioner som tillhandahålls av programvaran för att säkerställa korrekt laddning av centrifugen.

Centrifugen kan också köras manuellt via pekskärmen (se avsnitt 6.6.3, Använda centrifugen efter rengöring).

Obs! Följ de centrifugladdningsinstruktioner som tillhandahålls av programvaran.

VARNING 	Risk för personskada och materialskada Ladda provrören korrekt för att undvika plastkollisioner. Efter en plastkollision kan vassa plastpartiklar förekomma inuti centrifugen. Var försiktig när du hanterar föremål inuti centrifugen.
---	---

VARNING 	Risk för personskada och materialskada Lyft centrifuglocket försiktigt. Locket är tungt och kan orsaka skador om det faller.
---	--

Skakapparat


Den uppvärmda orbitala skakapparaten möjliggör fullständigt automatiserad lysering av upp till 12 prover. Det finns två typer av skakapparatadaptorer för 2 ml mikrocentrifugrör och 2 ml rör med skruvlock. Provrören placeras i ett ställ som passar på skakapparatadaptorn. Locket på varje mikrocentrifugrör eller kontakten till skakapparatstället på rör med skruvlock placeras i en skåra på skakapparatställets kant. Därmed kan mikrocentrifugrören inte förflyttas under provbearbetningen och det är möjligt att kontrollera skakapparatens laddning. Skakapparaten kan också köras manuellt via pekskärmen (se avsnitt 5.1, Använda QIAcube Connect MDx-programmet).




Provrörslocken hålls i fack vid skakapparatställets kant

Skakapparatställ med 2 ml mikrocentrifugrör.

Obs! Följ programvarans anvisningar för laddning av skakapparaten.

<p>WARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Ladda provrören korrekt för att undvika plastkollisioner. Efter en plastkollision kan vassa plastpartiklar förekomma inuti centrifugen. Var försiktig när du hanterar föremål inuti centrifugen.</p>
---	--

<p>WARNING</p> 	<p>Mycket varm yta</p> <p>Skakapparaten kan uppnå temperaturer på upp till 70 °C. Undvik att vidröra ytan när den är het. Ta bort proverna försiktigt efter körning.</p>
---	---





Ställ för reagensflaskor

Stället för reagensflaskor rymmer upp till sex 30 ml QIAcube Connect MDx-specifika reagensflaskor och passar endast in på QIAcube Connect MDx-arbetsbordet i rätt riktning för enkel användning och hög bearbetningssäkerhet. Vätskan aspireras från flaskorna av pipettsystemet. En etikettremsa ska fästas på stället för reagensflaskor. För ökad bekvämlighet och användarvänlighet passar märkningsremsan endast i rätt riktning på reagensflaskostället. Med hjälp av etikettremsan kommer stället att placeras korrekt på arbetsbordet för vätskenivådetektion.

Obs! Reagensflaskor som är avsedda att användas tillsammans med QIAcube Connect MDx och som tillhandahålls av QIAGEN måste användas. Annars kan fel uppstå i samband med vätskedetektion.



Ställ för reagensflaskor med vita etikettremsor på sidorna.

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för brand eller explosion</p> <p>När du använder etanol- eller etanolbaserade vätskor på QIAcube Connect MDx ska du hantera sådana vätskor försiktigt och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Om vätska har spillts ut, torka av den och låt QIAcube Connect MDx-huven stå öppen så att brandfarliga ångor kan skingras.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>Risk för explosion</p> <p>QIAcube Connect MDx är avsedd att användas tillsammans med reagenser och ämnen som levereras med QIAGEN-kit eller andra som anges i respektive bruksanvisning. Användning av andra reagenser och substanser kan leda till brand eller explosion.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Ladda provrören korrekt för att undvika plastkollisioner. Efter en plastkollision kan vassa plastpartiklar förekomma inuti centrifugen. Var försiktig när du hanterar föremål inuti centrifugen.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>Mycket varm yta</p> <p>Skakapparaten kan uppnå temperaturer på upp till 70 °C. Undvik att vidröra ytan när den är het. Ta bort proverna försiktigt efter körning.</p>

Spetsensor

Under provberedningen kontrollerar spetsensorn att spetsadaptorn har plockat upp en spets och kontrollerar om den har en 200 µl eller 1000 µl filterspets.

Fack för mikrocentrifugrör

Utöver de 12 rören som skakapparaten kan rymma kan upp till 3 ytterligare mikrocentrifugrör användas i mikrocentrifugens tillbehörsposition. Dessa fack används i tillämpningar där t.ex. Proteinase K eller annat enzym krävs för reningsprotokollet.

Spets hållarfack

Tre spetsställ kan placeras på QIAcube Connect MDx-arbetsbordet. Spetsar kan köpas i förfyllda spetsställ med 200 µl filterspetsar eller 1000 µl filterspetsar, regelbundna eller breda.

Obs! Filterspetsar som är avsedda att användas tillsammans med QIAcube Connect MDx och som tillhandahålls av QIAGEN måste användas.


Kasseringsfack för spetsar och kolonner


Engångsfilterspetsar kasseras omväxlande genom de två rundade spetsavfallsskåror i avfallslådan. Det hindrar att kasserade spetsar fastnar i avfallslådan.

Begagnade kolonner (t.ex. QIAshredder-kolonner) kasseras genom det kvadratiska kasseringshålet i avfallslådan.

Robotarm


Robotarmen ger korrekt och exakt positionering av robotgriparmen och pipetteringssystemet på QIAcube Connect MDx-arbetsbordet. Den har en optisk sensor och en ultraljudssensor, samt en UV-lysdiod.

VARNING 	Rörliga delar För att undvika kontakt med rörliga delar under användning av QIAcube Connect MDx måste instrumentet användas med huven stängd. Om huvsensorerna eller låsen inte fungerar korrekt, kontakta QIAGEN teknisk service.
---	---

VARNING 	Rörliga delar Undvik kontakt med rörliga delar under användning av QIAcube Connect MDx. Lägga inte under några omständigheter händerna under robotarmen när den sänks. Försök inte att flytta spetsställ eller provrör medan instrumentet körs.
---	---

Robotgriparm

Robotgriparmen flyttar kolonnerna. Vid flyttning av en kolonn håller en stabiliseringsstav rotoradaptern på plats så att den förbli stadigt på plats i centrifugbägaren. Robotgriparen sitter bakom panelen som täcker robotarmen.

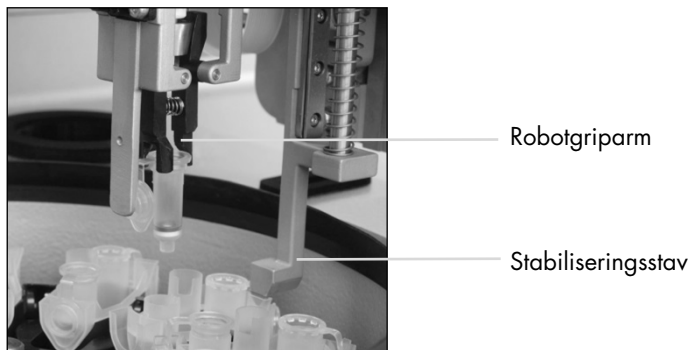

Robotgriparmen automatiserar kolonnbearbetningen.

Pipetteringssystem

QIAcube Connect MDx är utrustad med ett enkanalspipetteringssystem som rör sig i X-, Y- och Z-led. Utspädaren, som är utrustad med en spetsadapter, är ansluten till en precisionssprutpump som möjliggör korrekt överföring av vätskor. Spetsadaptern gör det möjligt att aspirera och fördela vätska genom en ansluten engångsspets. Engångsfilterspetsar (200 µl, 1 000 µl och 1 000 µl bred diameter) används för provbearbetning för att minimera risken för korskontaminering.

Optisk sensor

Under laddningskontrollen kontrollerar den optiska sensorn att antalet rotoradapterar motsvarar antalet prover i skakapparaten och att både skakapparaten och rotorn är korrekt laddade. Den optiska sensorn kontrollerar även den typ av spetsar som har laddats på arbetsbordet och om det finns tillräckligt med spetsar för protokollkörningen.

Ultraljudssensor

Under laddningskontrollen kontrollerar ultraljudssensorn att buffertflaskorna i reagensflaskstället innehåller tillräckligt med buffert för protokollkörningen.

Obs! Ultraljudssensorn är försedd med en svart strålkollimator. Om strålkollimatoren faller av eller saknas av någon anledning kommer instrumentet att visa ett felmeddelande för att meddela användaren om att kollimatoren saknas och att körningen inte kan startas. För att byta strålkollimatoren (se bilderna nedan) skjuter du in den manuellt i dess startläge. Om du fortfarande har problem och felmeddelandet kvarstår, kontakta din lokala tekniska support för ytterligare hjälp.



Ultraljudssensorns svarta strålkollimator (se röd cirkel).

Högtalare

Systemet är utrustat med högtalare med olika ljudsignaler för att meddela om olika instrumenttillstånd, till exempel:


- Run completed (Körning slutförd)
- Error (Fel)
- Aborted run (Avbruten körning)

Inre lysdiod

QIACube Connect MDx är utrustad med en invändig lysdiod som lyser upp arbetsbordet för att underlätta användningen. Lysdioden kan också informera om instrumentets status (, t.ex. fel) genom att blinka.

UV-lysdiod


QIACube Connect MDx är utrustad med en UV-lysdiod för att underlätta dekontaminering. Under dekontamineringsproceduren flyttas UV-lysdioden över arbetsbordet. Huven och avfallslådan måste stängas innan proceduren påbörjas och får inte öppnas under proceduren.

VARNING 	Risk för personskada Utsätt inte huden för UV-C-ljus från UV-lysdioden.
---	---

3.4 Förbrukningsvaror


Rotoradapter


En engångsrotoradapter håller en QIAGEN-kolonn och ett mikrocentrifugrör i en centrifugbägare under provbearbetningen. Om protokollet kräver det kan ytterligare en kolonn (t.ex. en QIAshredder-kolonn) placeras i rotoradaptorns mittposition. För enkel användning och hög bearbetningssäkerhet är rotoradaptorna konstruerade så att de endast passar in i centrifugbägaren i rätt riktning. Kolonnen och mikrocentrifugrörens lock hålls på plats säkert på rotoradaptorns kant.

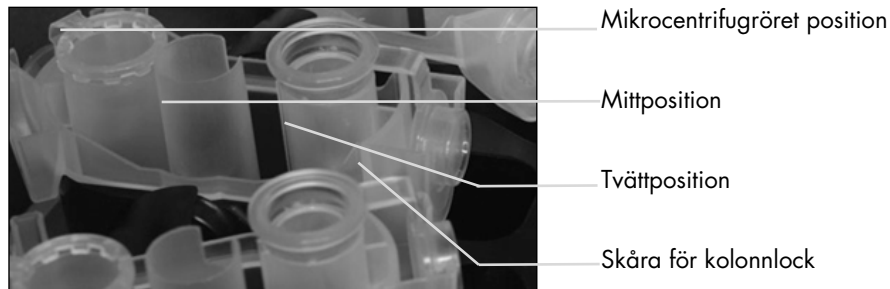

Montering av rotoradaptorn.

Rotoradaptorns tvättposition är öppen längst ner, vilket gör det möjligt för tvättbuffertar att flöda genom och samlas i botten av rotoradaptorn under centrifugeringen. De andra två positionerna i rotoradaptorn är stängda. Följ de laddningsinstruktioner som tillhandahålls av programvaran.

VARNING 	Risk för personskada och materialskada Använd inte skadade rotoradaptor. Rotoradaptorna kan endast användas en gång. Starka g-krafter i centrifugen kan skada begagnade rotoradaptor.
---	---

VARNING 	Risk för personskada och materialskada Ladda provrören korrekt för att undvika plastkollisioner. Efter en plastkollision kan vassa plastpartiklar förekomma inuti centrifugen. Var försiktig när du hanterar föremål inuti centrifugen.
---	---

4 Installationsprocedurer

Det här avsnittet innehåller instruktioner om krav på installationsmiljö samt om att packa upp, installera, konfigurera och förpacka QIAcube Connect MDx.

4.1 Installationsmiljö

4.1.1 LaboratoriekraV

QIAcube Connect MDx får inte placeras i direkt solljus, måste hållas borta från värmekällor och vibrationskällor samt från elektrisk interferens. Se Bilaga A – Tekniska uppgifter för driftförhållanden (temperatur och luftfuktighet). Installationsplatsen ska inte vara för dragig, fuktig, dammig och inte utsättas för stora temperaturförändringar.

Använd en plan arbetsbänk som är tillräckligt stor och stadig för att hålla QIAcube Connect MDx. Se Bilaga A – Tekniska uppgifter beträffande vikt och dimensioner för QIAcube Connect MDx.

Kontrollera att arbetsbänken är torr, ren, vibrationsfri och att den har ytterligare utrymme för tillbehör.


Använd inte instrumentet nära källor till stark elektromagnetisk strålning (t.ex. oskärmade källor som avger högfrekvent strålning) eftersom de kan störa instrumentets drift.


QIAcube Connect MDx måste placeras inom 1,5 m avstånd från ett korrekt jordat växelströmsuttag. Nätsladden till instrumentet bör vara spänningsreglerad och kortslutningskyddad. Kontrollera att QIAcube Connect MDx är placerad så att det är lätt att komma åt strömkontakten på baksidan av instrumentet och startknappen på framsidan och att det är enkelt att stänga AV instrumentet och koppla från det.


OBS! Det rekommenderas att instrumentet ansluts direkt till sitt eget eluttag och inte delas med någon annan laboratorieutrustning. Placera inte QIAcube Connect MDx på en vibrerande yta eller nära vibrerande föremål.

WARNING**Explosiv omgivning**

QIAcube Connect MDx är inte utformad för användning i explosiv atmosfär.

<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Risk för överhettning</p> <p>För att säkerställa korrekt ventilation måste det finnas ett minsta spelrum på 10 cm bakom och på båda sidorna om QIAcube Connect MDx.</p> <p>Öppningar som säkerställer ventilationen av QIAcube Connect MDx får inte täckas över.</p>
--	--


<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>QIAcube Connect MDx är för tung för att en person ska kunna lyfta den. Lyft inte instrumentet ensam för att undvika att du eller instrumentet skadas.</p>
---	---


<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Skada på instrumentet</p> <p>Direkt solljus kan bleka delar av instrumentet och skada plastdelar.</p> <p>QIAcube Connect MDx måste placeras utanför direkt solljus.</p>
--	---

4.1.2 Strömkrav

QIAcube Connect MDx drivs med: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 650 VA. Den kan anslutas till en avbrottsfri strömförsörjning (UPS).


Se till att märkdata för QIAcube Connect MDx är kompatibel med installationsplatsens växelströmsspänning. Nätaggregatets spänningsvariationer får inte överskrida 10 % av nominell matarspänning.

<p>WARNING</p> 	<p>Skada på elektroniken</p> <p>Se till att rätt matningsspänning används innan instrumentet slås PÅ.</p> <p>Felaktig matningsspänning kan skada elektroniken.</p> <p>Se specifikationerna på instrumentets typslykt för information om den rekommenderade matningsspänningen.</p>
---	---


<p>WARNING</p> 	<p>Risk för elektrisk stöt</p> <p>Eventuell störning av skyddsledaren (jord) inuti eller utanför instrumentet eller fränkoppling av skyddsledarterminalen kan göra instrumentet farligt.</p> <p>Avsiktlig störning är förbjuden.</p> <p>Dödliga spänningar inuti instrumentet</p> <p>När instrumentet är anslutet till nätet kan terminaler vara spänningsförande och om man öppnar höljen eller tar bort delar kan detta exponera spänningsförande delar.</p>
---	--

4.1.3 Jordningskrav

NEMA (National Electrical Manufacturers' Association) rekommenderar att QIAcube Connect MDx är korrekt jordat för att skydda användarna. Instrumentet har en nätsladd för växelström med tre ledare, som när den ansluts till ett korrekt växelströmsuttag, jordar instrumentet. Du ska inte ansluta instrumentet till en strömkälla utan jordad anslutning för att bibehålla den här skyddsfunktionen.

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för elektrisk stöt</p> <p>Eventuell störning av skyddsledaren (jord) inuti eller utanför instrumentet eller fränkoppling av skyddslederterminalen kan göra instrumentet farligt.</p> <p>Avsiktlig störning är förbjuden.</p> <p>Dödliga spänningar inuti instrumentet</p> <p>När instrumentet är anslutet till nätet kan terminaler vara spänningsförande och om man öppnar höljen eller tar bort delar kan detta exponera spänningsförande delar.</p>
---	--

4.2 Packa upp QIAcube Connect MDx

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>QIAcube Connect MDx är för tung för att en person ska kunna lyfta den. Lyft inte instrumentet ensam för att undvika att du eller instrumentet skadas.</p>
--	---

1. Innan du packar upp QIAcube Connect MDx ska du flytta paketet till installationsplatsen och kontrollera att pilarna på paketet pekar uppåt. Kontrollera också om förpackningen är skadad. Kontakta QIAGEN teknisk service om förpackningen är skadad.
2. Öppna den övre delen av transportlådan för att ta bort *Snabbstartsguide för QIAcube Connect MDx*, streckodsläsaren och nätsladden innan du lyfter lådan.
3. Ta bort det svarta skumlocket och lyft lådan.
4. När du lyfter QIAcube Connect MDx, för in fingrarna under båda sidor av arbetsstationen och håll ryggen rak.

Viktigt: Håll inte i pekskärmen medan du packar upp eller lyfter QIAcube Connect MDx, då detta kan skada instrumentet.
5. Kontrollera om dokumentet med förpackningslistan finns med efter att du har packat upp QIAcube Connect MDx.
6. Läs förpackningslistan för att kontrollera att du har tagit emot alla objekt. Kontakta QIAGEN:s tekniska service om något saknas.
7. Kontrollera att QIAcube Connect MDx inte är skadad och att inga delar är lösa. Kontakta QIAGEN:s tekniska service om något är skadat. Kontrollera att QIAcube Connect MDx har anpassat sig till omgivningstemperaturen innan den används.

8. Behåll paketet i händelse av du behöver transportera QIAcube Connect MDx i framtiden. Se avsnitt 4.4 Ompaketering och transport av QIAcube Connect MDx för mer information. Genom att använda originalförpackningen minskar du risken för skador under transport av QIAcube Connect MDx.

4.3 Installera QIAcube Connect MDx

I det här avsnittet beskrivs viktiga åtgärder som måste utföras innan QIAcube Connect MDx används. Dessa åtgärder omfattar:

- Borttagning av QIAcube Connect MDx tillbehör och fraktmaterial.
- Installation av växelströmssladden.
- Installation av extern streckkodsläsare
- Installation av centrifugrotorn och bägare.
- Om installationen måste kvalificeras (IQ/OQ) som del av konfigurationen för ditt laboratorium kan denna tjänst beställas tillsammans med instrumentet. För mer information, kontakta QIAGEN teknisk service.

4.3.1 Borttagning av QIAcube Connect MDx tillbehör och fraktmaterial


1. Ta bort nätsladden, streckkodsläsaren och snabbstartguiden från skumförpackningsmaterialet ovanpå QIAcube Connect MDx.
2. Ta bort USB-flashminnet, rotornyckeln, rotormuttern, insexnyckeln, S2-skakapparatadaptern och skakapparatställets kontakter från avfallslådan.
3. Dra försiktigt bort skyddsfilmen från QIAcube Connect MDx-huven.
4. Dra skumskyddet försiktigt mot dig för att ta bort skumskyddet omkring robotarmen (se bilden nedan). När du har tagit bort skyddet för robotarmen måste du stänga QIAcube Connect MDx-huven.




Skumskydd för robotarmen.

4.3.2 Installation av växelströmssladd

1. Lyft ut nätsladden från skumförpackningsmaterialet ovanpå QIAcube Connect MDx.
Obs! Använd endast nätsladden som medföljer QIAcube Connect MDx.
2. Kontrollera att strömbrytaren är AV: ytterläget är AV och innerläget är PÅ.
3. Kontrollera att spänningen på etiketten på baksidan av QIAcube Connect MDx motsvarar den spänning som används på installationsplatsen.
4. Sätt in nätsladden i instrumentets kontakt.
5. Sätt in nätsladden i ett jordat eluttag.

VARNING 	Skada på elektroniken Se till att rätt matningsspänning används innan instrumentet slås PÅ. Felaktig matningsspänning kan skada elektroniken. Se specifikationerna på instrumentets typskylt för information om den rekommenderade matningsspänningen.
---	--

VARNING 	Risk för elektrisk stöt Eventuell störning av skyddsledaren (jord) inuti eller utanför instrumentet eller fränkoppling av skyddslederterminalen kan göra instrumentet farligt. Avsiktlig störning är förbjuden. Dödliga spänningar inuti instrumentet När instrumentet är anslutet till nätet kan terminaler vara spänningsförande och om man öppnar höljen eller tar bort delar kan detta exponera spänningsförande delar.
---	---

4.3.3 Installation av extern streckkodsläsare

1. Ta ut streckkodsläsaren från transportlådan.
2. Koppla in streckkodsläsarens USB-kontakt till en av USB-portarna till vänster om QIAcube Connect MDx pekskärm.


4.3.4 Installation av centrifugrotorn och bågare


Centrifugrotorn och bågarna är förinstallerade i QIAcube Connect MDx. När QIAcube Connect MDx ställs in för första gången, slå på instrumentet (se avsnitt 5.2, Slå på och av QIAcube Connect MDx) och ta bort transportskummet från centrifugen när den har öppnats. Om centrifugrotorn och bågarna har avlägsnats manuellt (till exempel under underhåll) följer du nedanstående anvisningar för att installera om dem.


1. Rotorn kan endast monteras i en riktning. Stiftet på rotoraxeln passar i en skåra på rotorns undersida direkt under rotorns position 1.
2. Rikta in position 1 med stiftet på rotoraxeln och sänk försiktigt ned rotorn på axeln.
3. Installera rotormuttern ovanpå rotorn och dra åt den ordentligt med rotornyckeln som medföljer QIAcube Connect MDx. Kontrollera att rotorn sitter fast ordentligt. Om rotormuttern inte dras åt ordentligt kan den lossna när centrifugen används och skada instrumentet allvarligt. Sådana skador omfattas inte av garantin.
4. Sätt in rotorbågarna. Den sida av rotorbågaren som måste vara vänd mot rotoraxeln markeras med en grå linje. Håll bågaren vinklad mot den grå linjen vänd mot rotorns mittpunkt och häng bågaren på rotorn. Kontrollera att alla bågare är ordentligt upphängda och kan svänga fritt.

Viktigt: Alla centrifugbågare måste monteras innan en körning påbörjas.

Innan du startar nästa protokollkörning måste du följa anvisningarna i avsnitt 6.6.3, Använda centrifugen efter rengöring.

VARNING 	Risk för personskada och materialskada Dra åt muttrarna ordentligt med rotornyckeln som medföljer QIAcube Connect MDx för att förhindra att rotormuttrarna lossnar under centrifugen.
---	---

VARNING 	Risk för personskada och materialskada Lyft centrifuglocket försiktigt. Locket är tungt och kan orsaka skador om det faller.
---	--

<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Skada på instrumentet</p> <p>QIAcube Connect MDx måste användas om centrifuglocket är trasigt eller om låslocket har skadats.</p> <p>Se till att inget löst material förekommer inuti centrifugen under drift.</p> <p>Kontrollera att rotorn är korrekt monterad och att alla behållare är korrekt monterade, oavsett hur många prover som ska bearbetas. Ladda endast rotorn enligt anvisningarna i programvaran.</p> <p>Använd endast rotorerna, bågarna och förbrukningsartiklar som är avsedda att användas tillsammans med QIAcube Connect MDx. Skador som orsakas av användning av andra förbrukningsvaror gör din garanti ogiltig.</p> <p>Vi rekommenderar att centrifugrotorn och behållarna byts ut efter 20 000 cykler, vilket motsvarar 9 års användning med två körningar per dag i 220 dagar varje år. För mer information, kontakta QIAGEN teknisk service.</p>
--	---

4.3.5 Installera skakapparatadaptorn

En skakapparatadapter måste installeras innan skakapparaten kan användas. Två typer av skakapparatadaptorer finns tillgängliga:

- Adapter för 2 ml mikrocentrifugrör med säkra lock (märkt med "2")
- Adapter för 2 ml-rör med skruvlock (märkt med "S2").

QIAcube Connect MDx levereras med skakapparatadaptorn för 2 ml mikrocentrifugrör med säkra lock redan installerad. Om du behöver installera skakapparatadaptorn för 2 ml rör med skruvlock gör du så här:

1. Ta bort skakapparatstället.
2. Ta bort skakapparatadaptorn för 2 ml mikrocentrifugrör med säkra lock genom att skruva loss fästskruvarna. Använd insexnyckeln som medföljer QIAcube Connect MDx.
3. Placera skakapparatadaptorn för 2 ml rör med skruvlock på skakapparaten.
4. Spänn de 2 fästskruvarna med insexnyckeln.


Obs! Se till att använda rätt adapter enligt anvisningen på pekskärmen under körningen. Därmed säkerställs optimal instrumentprestanda. Om du använder en felaktig skakapparatadapter kan pipetteringsprestandan och protokollresultatet försämrats.

4.3.6 Programuppgradering

Om en uppdaterad programvaruversion kan hämtas finner du den på <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx>; se fliken Product Resources (Produktresurser). Nedladdningen skapar en zip-fil.

Programvaran kan endast uppdateras av användare med administratörsroll. Vi rekommenderar att du hämtar alla körningsrapporter innan du uppdaterar programvaran och skapar ett supportpaket, eftersom körningsrapporter och supportpaket kommer att gå förlorade under programuppdateringen (se avsnitt 5.7, Spara körningsrapporter till USB-flashminnet och avsnitt 7.1, Skapa ett supportpaket). Skapa dessutom en säkerhetskopia av alla protokollfiler i enlighet med kapitel 5.11.3.

1. På menyraden trycker du på ikonen Configuration (Konfiguration) (⚙️).
2. Skapa en säkerhetskopia av protokollet i enlighet med kapitel 5.11.3.
3. Tryck på fliken System.
4. Den aktuella programvaruversionen visas till höger.

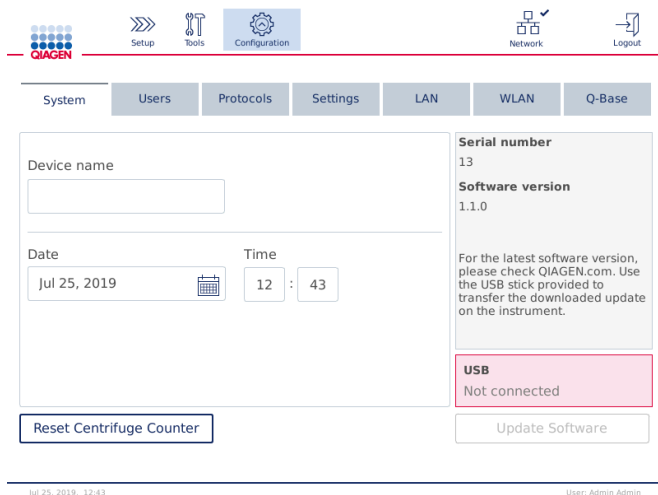

Skärmen Systemkonfiguration.

5. På en dator med Microsoft Windows hämtar och överför du zip-filen med programvaran till huvudmappen på USB-flashminnet som medföljer QIAcube Connect MDx och extraherar zip-filen där.


Obs! Se till att alla filer från zip-filen extraheras till USB-flaschenhetens huvudmapp efter extrahering.

Uppdateringen fungerar inte om någon av filerna saknas eller har bytt namn. Kontrollera att endast filerna för en programvaruversion finns i USB-flashminnets huvudmapp.

6. Anslut USB-flashminnet till instrumentet med hjälp av en av USB-portarna till vänster om pekskärmen.


Viktigt: Kontrollera att alla körda rapporter och supportpaket har säkerhetskopierats innan du fortsätter till nästa steg. Se avsnitt 5.7, Spara körningsrapporter till USB-flashminnet och avsnitt 7.1, Skapa ett supportpaket.

7. Tryck på Update Software (Uppdatera programvaran) för att starta programvaruuppdateringen. Följ anvisningarna som visas på skärmen.

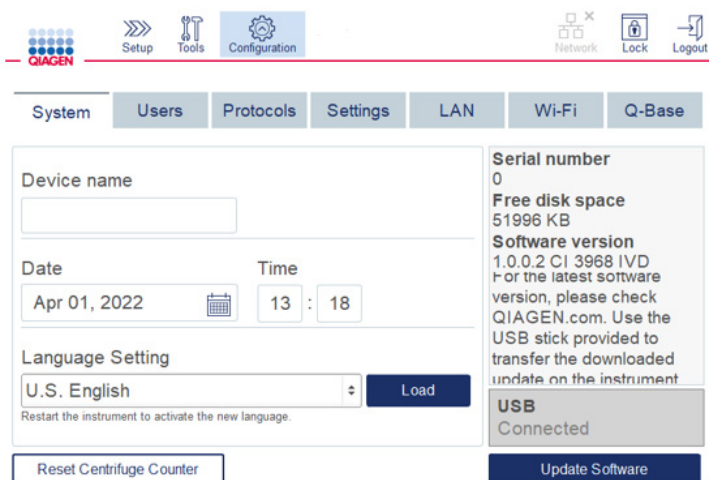

Skärmen Systemkonfiguration.


8. Programvaruuppdateringsverktyget visas. Tryck på Start update (Starta uppdateringen) för att starta programvaruuppdateringen.

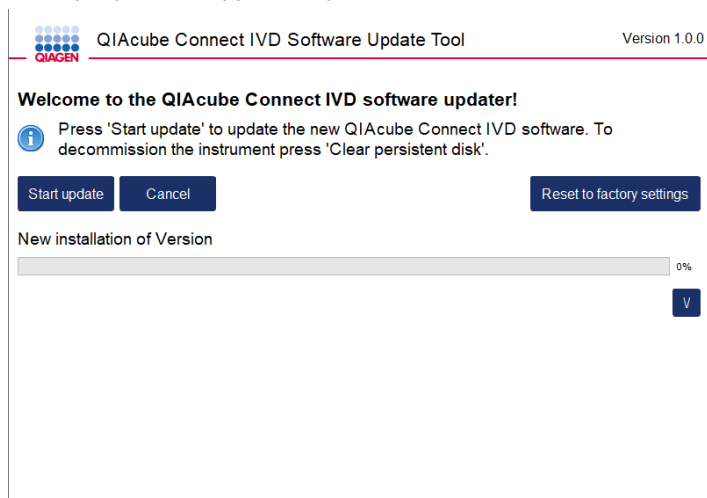

Skärmen Software update tool (Programvaruuppdateringsverktyg).

Tryck på **Cancel** (Avbryt) om du inte vill uppdatera programmet. I detta fall initieras instrumentet utan att programvaran uppdateras. På den här skärmen kan du även återställa systemet till fabriksinställningarna. Denna procedur rekommenderas innan ett instrument kasseras.

9. Vänta tills uppdateringen är klar.
10. Tryck på pilknappen för att öppna skärmen Details(Information).

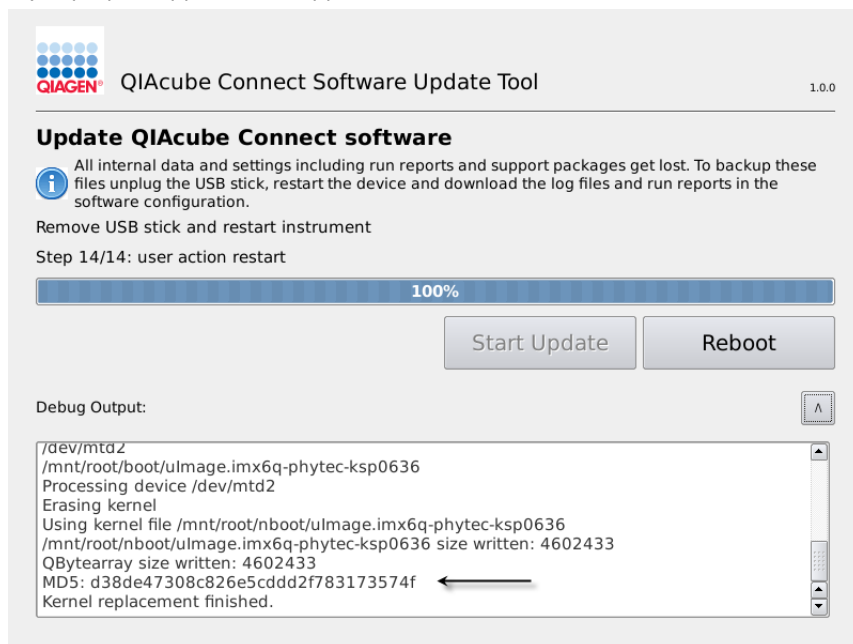


Programuppdateringsverktyg med uppdateringsinformation som visar MD5-kontrollsumman.

11. Jämför MD5-kontrollsumman på skärmen med den kontrollsumma som uppges på nedladdningssidan för programvaran. Om kontrollsummorna inte är identiska, kontakta QIAGEN:s tekniska service.
12. Ta bort USB-flashminnet från USB-porten när du ser denna anvisning på skärmen.
13. Tryck Reboot (Starta om) för att fortsätta. Instrumentet initieras med den uppdaterade programvaran.
14. Använd en dator med Microsoft Windows för att ta bort tidigare hämtade programfiler från USB-flashminnet.
15. Efter en lyckad omstart visas standardspråket "English" (Engelska). Om du vill arbeta med andra språk måste du överföra ett språkpaket i enlighet med kapitel 4.5.1 (steg 7).
16. Ominstallera säkerhetskopian av protokollet i enlighet med kapitel 5.11.1.

4.4 Ompaketering och transport av QIAcube Connect MDx

När du ompaketerar QIAcube Connect MDx för transport måste originalförpackningsmaterialet användas. Om originalförpackningsmaterialet inte finns tillgängligt, kontakta QIAGEN teknisk service. Se till att instrumentet har förberetts på rätt sätt (se Rengöring och underhåll) innan paketering och kontrollera att det inte utgör någon biologisk eller kemisk fara.

WARNING 	Risk för personskada och materialskada QIAcube Connect MDx är för tung för att en person ska kunna lyfta den. Lyft inte instrumentet ensam för att undvika att du eller instrumentet skadas.
---	--

Innan QIAcube Connect MDx transporteras måste instrumentet först dekontamineras. Se avsnitt 6.8 Dekontaminera QIAcube Connect MDx för mer information. Förbered sedan instrumentet på följande vis:

1. Förbered förpackningsmaterialet. De material som behövs är kartongen, pallen med skumblocken, skumlocket och skumskyddet för robotarmen.
Obs! Centrifuglocket måste vara öppet för att komma åt centrifugens insida. Om locket inte är öppet, utför steg 2-5 nedan. Om locket redan är öppet går du vidare till steg 6.
2. Stäng instrumenthuven.
3. På menyraden trycker du på knappen **Tools** (Verktyg).
4. På menyn **Tools** (Verktyg) trycker du på fliken **Run Modules** (Körningsmoduler).
5. På menyn **Run Modules** (Körningsmoduler) trycker du på fliken **Centrifuge** (Centrifug) och sedan på **Open Centrifuge Lid** (Öppna centrifuglocket).
6. Lossa rotormuttern ovanpå rotorn med hjälp av rotornyckeln och lyft försiktigt av rotorn från rotoraxeln.
7. Stäng huven.
8. På menyraden trycker du på knappen **Tools** (Verktyg).
9. På menyn **Tools** (Verktyg) trycker du på fliken **Run Modules** (Körningsmoduler).
10. På menyn **Run Modules** (Körningsmoduler) trycker du på fliken **Centrifuge** (Centrifug) och sedan på **Close centrifuge lid** (Stäng centrifuglocket).
11. När centrifuglocket är stängt slår du AV QIAcube Connect MDx och öppnar huven.
12. Sätt in skumskyddet i instrumentets främre del.

13. Tryck ner skummet mellan centrifugen och robotarmen.



Skumskyddet har placerats mellan centrifugen och robotarmen.

14. Tryck ner skummet tills den bakre delen vidrör instrumentets bakre vägg. Kontrollera att armen hålls fast stadigt och inte kan flytta sig.

15. Kontrollera att QIAcube Connect MDx-huven kan stängas ordentligt. Huven ska snudda vid skummet.

16. Placera tillbehören i avfallslådan. Följande tillbehör bör packas i bubbelplast:

- Rotornyckel
- Insexnyckel
- Rotormutter
- USB-flashminne
- WLAN-modulen
- Kontakter till skakapparatställ
- Skakapparatadapter

17. Placera den handhållna streckkodsläsaren i sin låda.

18. Placera QIAcube Connect MDx på pallen och lägg det svarta skumlocket ovanpå instrumentet. Placera omedelbart lådan på instrumentet.

Viktigt: När du lyfter QIAcube Connect MDx, för in fingrarna under båda sidor av instrumentet och håll ryggen rak.

Viktigt: Håll inte i pekskärmen medan du lyfter QIAcube Connect MDx, då detta kan skada instrumentet.

VARNING



Risk för personskada och materialskada

QIAcube Connect MDx är för tung för att en person ska kunna lyfta den. Lyft inte instrumentet ensam för att undvika att du eller instrumentet skadas.

19. Placera tillbehören i det svarta skumlocket. Följande tillbehör bör packas i bubbelplast:

- Rotor med swing-out-bägare
- Nätsladd

20. Förslut kartongens ytterkanter med tejp för att skydda mot fukt.

Obs! Genom att använda originalförpackningen minskar du risken för skador under transport av QIAcube Connect MDx.


4.5 Konfiguration av QIAcube Connect MDx

När du använder QIAcube Connect MDx för första gången bör du ställa in de nödvändiga inställningarna. Andra inställningar kan ställas in senare vid behov.

Mer information om hur du använder pekskärmen och programvaran finns i avsnitt 5.1, Använda QIAcube Connect MDx-programmet.

Följ stegen nedan för att konfigurera QIAcube Connect MDx.

1. Stäng instrumenthuven.
2. Växla strömbrytaren till det inre läget ON (På) på instrumentet. Startskärmen visas och ljudsignalen ljuder (om detta har aktiverats i ljudinställningarna). Instrumentet utför själv initialiseringstestet. Om centrifuglocket är stängt kommer det att öppnas.
3. Inledningsvis är endast ett användarkonto tillgängligt: den förinstallerade standardanvändaren. Tryck på **OK** på pekskärmen för att bekräfta meddelandet.
4. Om inget underhåll ännu har registrerats initieras underhållsstatusen med hjälp av en standardfil. Tryck **OK** för att bekräfta meddelandet.
5. Skärmen **Login** (Logga in) visas efter start.

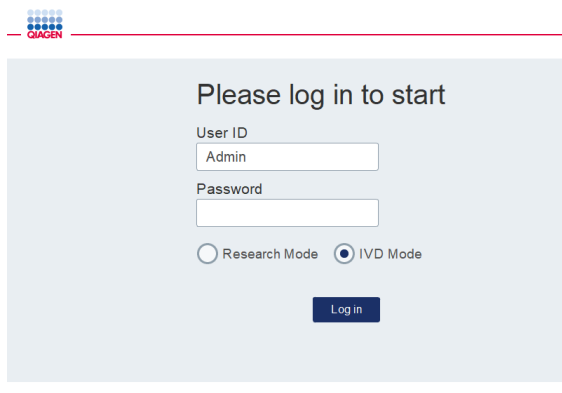

QIAcube

Please log in to start

User ID
Admin

Password

Research Mode IVD Mode

Log in

Inloggningskärm


6. Inledningsvis är endast en standardanvändare tillgänglig. I sådant fall anger du **Admin** i fälten **User ID** (Användar-ID) och **Password** (Lösenord) med hjälp av skärmtangentbordet. Tryck på inmatningsfältet för att öppna tangentbordet. Mer information om att mata in text eller siffror finns i avsnitt 5.1, Använda QIAcube Connect MDx-programmet. Välj dessutom vilket programvaruläge (IVD eller Forskning) som ska startas.

Information om programvarulägen finns i avsnitt 5.1, Använda QIAcube Connect MDx-programmet. Efter den första inloggningen kommer systemet att be dig att ändra lösenordet för användaren Admin.

7. Tryck på **Log in** (Logga in). Skärmen **Setup** (Inställningar) visas.



Skärmen **Setup** (Inställningar)

8. Om du behöver återgå till skärmen **Setup** (Inställningar) från en annan skärm trycker du på ikonen **Setup** (Inställningar) ().

4.5.1 Systemkonfiguration

I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in följande systemkonfigurationer:

- Namn på QIAcube Connect MDx
- Aktuellt datum och tid
- Systemspråk

Dessa inställningar kan endast göras av användare med administratörsroll. När du använder QIAcube Connect MDx för första gången bör du ställa in aktuellt datum och tid.

Viktigt: Ändringar av systemkonfigurationerna som utförs i programvarans Research-läge (Forskning) tillämpas även automatiskt i programvarans IVD-läge.

1. På menyraden trycker du på ikonen Configuration (Konfiguration) (⚙️).
2. Tryck på fliken System. Den här fliken är endast tillgänglig för användare med administratörsroll.

QIAGEN Setup Tools Configuration Network Lock Logout

System Users Protocols Settings LAN Wi-Fi Q-Base

Device name

Date May 25, 2020 Time 10 : 51

Language Setting United States Load

Restart the instrument to activate the new language.

Reset Centrifuge Counter

Serial number 0

Free disk space 51996 KB


Software version 0.9.0.0 CI 3565 IVD
For the latest software version, please check QIAGEN.com. Use the USB stick provided to transfer the downloaded update on the instrument

USB Not connected

Update Software

Skärmen Systemkonfiguration.

3. Du kan välja att ange ett namn på QIAcube Connect MDx. Enhetens namn fungerar som nätverks-/värdnamn när du ansluter instrumentet till nätverket.
Namnet kan innehålla upp till 24 tecken: bokstäver A–Z, a–z, siffror 0–9 och ett bindestreck (-).
Namnet måste börja på en bokstav och får inte sluta på ett bindestreck (-).
4. I fälten **Date** (Datum) och **Time** (Tid) anger du aktuellt datum och tid för instrumentet. Dessa används för att spåra en körnings start- och sluttid och ingår också i körningsrapporten.
Datum och tid synkroniseras inte genom av nätverket. Om du vill ändra datum trycker du på kalenderikonen (📅) och väljer datumet.
5. Använd vänster- och högerpilsikonerna för att ändra månad. Tryck sedan på aktuell dag och tryck på OK för att bekräfta.

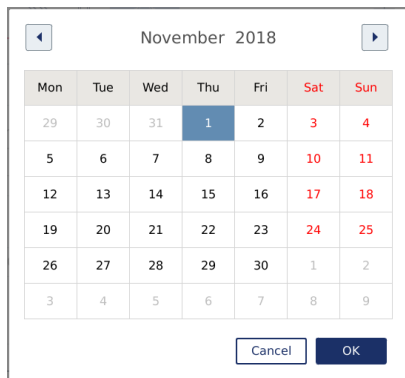

Kalenderfönster med datumväljare.

6. I fältet Language Setting (Språkinställning) finns ett urval av tillgängliga språk enligt ländernas lokala krav. Välj önskat språk i listrutan för att köra programmet i en översatt version. Instrumentet måste startas om för att aktivera den nya språkinställningen.
7. Ytterligare språkpaket kan laddas upp när de blir tillgängliga via knappen Load (Ladda upp). Ett språkpaket består av en översättning av det grafiska användargränssnittet och översatta protokoll. Överföringen av ett nytt språkpaket är en tvåstegsprocess. Först laddas det översatta grafiska användargränssnittet upp via knappen Load (Ladda upp). Därefter måste de översatta protokollen laddas upp genom att följa instruktionerna i avsnitt 5.11.1 (Installera nya protokoll). För ytterligare information, kontakta QIAGEN teknisk service.


4.5.2 Konfiguration av inställningar

I det här avsnittet beskrivs de valfria inställningarna som kan definieras av varje användare:

- Ljudvolym
- Ljusstyrka för display
- Innerbelysning

Dessa inställningar gäller för den aktuella användaren.

1. På menyraden trycker du på ikonen **Configuration** (Konfiguration) (⚙️).
2. Tryck på fliken **Inställningar**. Den här fliken är tillgänglig för alla användare.

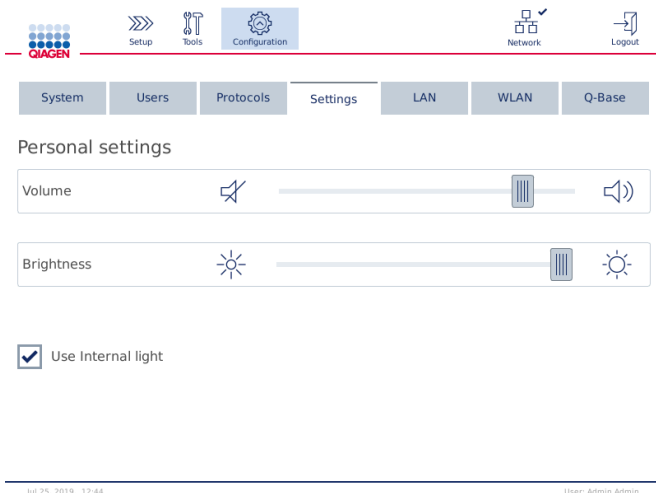

Skärmen Settings (Inställningar).

3. För att justera ljudvolymen eller displayens ljusstyrka pekar du på önskad position på den virtuella skjutlisten på skärmen. För ljudvolymen spelas ett ljud upp med den inställda volymen.
4. Markera rutan bredvid Use internal light (Tänd innerbelysning) för att tända lysdioden inuti instrumentet. Avmarkera rutan för att släcka den.
5. För att återgå till skärmen Setup (Inställningar) trycker du på ikonen Setup (Inställningar) (⏪).

4.5.3 Nätverkskonfiguration

QIAcube Connect MDx kan anslutas via intranät, vilket möjliggör övervakning av realtidsstatus på en dator eller en mobil enhet (t.ex. en surfplatta). Den här konfigurationen kräver att QIAcube Connect MDx samt QIASphere Base (levereras med QIASphere-anslutningspaketet, se avsnitt 11, Bilaga C – Tillbehör till QIAcube Connect MDx) ansluts till nätverket. I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter QIAcube Connect MDx-instrumentet till nätverket, antingen via ett lokalt nätverk (LAN) eller Ethernet-kabeln eller via trådlös anslutning. Mer information om QIASphere Base-nätverkskonfigurationen och hur du ansluter båda enheterna till varandra finns i *Användarhandbok till QIASphere Base*, som finns på www.qiagen.com.

Viktigt: QIASphere Base kommunicerar med nya QIASphere App och även med QIASpheres moln. QIASphere App hjälper till att övervaka instrumentets status, till exempel om instrumentet körs, är tillgängligt eller behöver underhåll. Om din QIASphere Base är ansluten till QIASphere-molnet överförs körningsrapporter som genererats av QIAcube Connect MDx (inklusive prov-ID:n) till QIASphere-molnet. Om denna överföring av information inte överensstämmer med dina lokala

föreskrifter eller med dina laboratorieföreskrifter måste anslutningen mellan QIASphere Base och QIASphere-molnet avaktiveras manuellt. För att avbryta anslutningen mellan QIASphere Base och QIASphere-molnet, se anvisningarna i *Användarhandbok till QIASphere*.

Endast användare som tilldelats rollen som administratör kan ändra nätverkskonfigurationen. Vi rekommenderar att du rådfrågar nätverksadministratören när du konfigurerar nätverket. För kommunikation med QIASphere Base används utgående TCP-port 443 (https) och ping stöds.

Konfigurera en kabelansluten nätverksanslutning

1. Anslut QIAcube Connect MDx till ett LAN med hjälp av en Ethernet-kabel och RJ45 Ethernet-porten på baksidan av QIAcube Connect MDx.
2. På menyraden trycker du på ikonen **Configuration** (Konfiguration) (⚙️).
3. Tryck på fliken **LAN**.
4. Om du vill konfigurera nätverket automatiskt via DHCP markerar du rutan **DHCP enabled** (DHCP aktiverat). Lämna alla fält tomma när du använder den här inställningen. Den tilldelade IP-adressen visas under rutan.

The screenshot shows the QIAcube Connect MDx web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, and Logout. Below this is a secondary navigation bar with tabs for System, Users, Protocols, Settings, LAN, WLAN, and Q-Base. The 'LAN' tab is currently selected. The main content area is titled 'Device network settings' and contains a form with the following fields and options:

- IP Address: [Empty text box]
- Subnet Mask: [Empty text box]
- DHCP enabled: (checked)
- 10.10.10.100 (displayed below the DHCP checkbox)
- DNS Server: [Empty text box]
- Gateway: [Empty text box]
- Hardware Address: 50:2D:F4:13:58:93 (displayed in a text box)
- Test... (button)
- Apply (button)

Skärmen Device network settings (Nätverksinställningar).

5. Om du vill konfigurera nätverket manuellt avmarkerar du rutan **DHCP enabled** (DHCP aktiverat). Ange **IP address** (IP-adress), **Subnet mask** (Nätmask) och **Gateway** (Gateway) i respektive fält med hjälp av IPv4-formatet som visas på bilden ovan. Det är valfritt att ange en **DNS server** (DNS-server). Dessa inställningar kommer inte att valideras av QIAcube Connect MDx.

QIAcube Connect MDx configuration interface showing the 'Device network settings' screen. The interface includes a top navigation bar with 'Setup', 'Tools', 'Configuration', 'Network', and 'Logout' icons. Below this is a secondary navigation bar with 'System', 'Users', 'Protocols', 'Settings', 'LAN', 'Wi-Fi', and 'Q-Base' tabs. The 'Device network settings' section contains several input fields: 'IP Address' (192.168.255.201), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), 'DNS Server' (empty), 'Gateway' (192.168.255.0), and 'Hardware Address' (50:2D:F4:13:58:30). There is an unchecked checkbox for 'DHCP enabled'. At the bottom of the settings area are 'Test...' and 'Apply' buttons. The footer shows the date 'Jul 08, 2019, 17:07' and the user 'User: Admin Admin'.

Skärmen **Device network settings (Nätverksinställningar)** med inmatade värden för manuell nätverkskonfiguration.

6. Tryck på **Apply** (Verkställ) för att bekräfta och spara de inställningar som gjorts.


Konfigurera en trådlös anslutning

QIACube Connect MDx stöder endast WPA-PSK och WPA2-PSK. Dessutom måste SSID för Wi-Fi-nätverket vara synligt. En anslutning till ett dolt SSID stöds inte.

Innan Wi-Fi kan konfigureras måste den trådlösa USB-enheten som medföljer QIACube Connect MDx vara ansluten till en av USB-portarna bakom pekskärmen.

Viktigt: Stäng alltid av QIACube Connect MDx innan du ansluter eller kopplar ur USB-enheten för Wi-Fi-anslutning. Plug-and-play för USB-enheten för Wi-Fi när instrumentet är på stöds inte.

1. På menyraden trycker du på ikonen **Configuration** (Konfiguration) (⚙️).
2. Tryck på fliken **Wi-Fi**.
3. Tryck på **Scan** (Scanna) för att söka efter tillgängliga nätverk. Näten listas utifrån signalstyrkan.

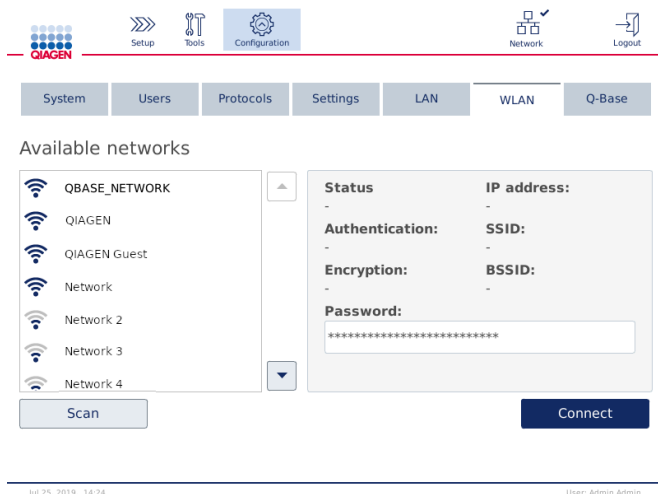

Skärmen Available networks (Tillgängliga nätverk).

4. Välj ett av de tillgängliga nätverken i listan. Information om det valda nätverket visas till höger.

The screenshot shows the QIAGEN network configuration interface. At the top, there are navigation icons for Setup, Tools, Configuration, Network, and Logout. Below these are tabs for System, Users, Protocols, Settings, LAN, WLAN, and Q-Base. The main content area is titled "Available networks" and features a list of networks on the left and a details panel on the right. The networks listed are QBASE_NETWORK, QIAGEN, QIAGEN Guest (highlighted), Network, Network 2, Network 3, and Network 4. The details panel for the selected network shows: Status: Not connected, IP address: -, Authentication: -, SSID: QIAGEN Guest, Encryption: -, BSSID: -, and a Password field. A "Scan" button is at the bottom left and a "Connect" button is at the bottom right. The footer shows the date "Jul 25, 2019, 14:24" and the user "User: Admin Admin".

Skärmen Available networks (Tillgängliga nätverk) före nätverksanslutning.

5. Ange lösenordet för det trådlösa nätverket och tryck på **Connect** (Anslut) för att ansluta till nätverket. Det anslutna nätverket är markerat i listan.

The screenshot shows the QIAGEN network configuration interface after successful connection. The navigation and tabs are the same as in the previous screenshot. In the "Available networks" list, QBASE_NETWORK is now highlighted with a checkmark. The details panel for QBASE_NETWORK shows: Status: Connected, IP address: 10.10.10.101, Authentication: WPA2-PSK, SSID: QBASE_NETWORK, Encryption: CCMP + TKIP, BSSID: d8:0d:17:55:12:08, and a Password field. The "Scan" button remains at the bottom left, but the "Connect" button has been replaced by a "Disconnect" button. The footer shows the date "Jul 25, 2019, 14:24" and the user "User: Admin Admin".

Skärmen Available networks (Tillgängliga nätverk) med etablerad nätverksanslutning.

Obs! Om ett nätverk har konfigurerats tidigare och en anslutning har upprättats minst en gång ansluts instrumentet automatiskt till detta nätverk.


6. Tryck på **Disconnect** (Koppla från) för att koppla från Wi-Fi.

5 Drifts procedurer


Detta avsnitt beskriver hur man använder QIAcube Connect MDx.


Innan du fortsätter rekommenderar vi att du bekantar dig med instrumentets funktioner genom att läsa igenom avsnitt 3.2 Externa egenskaper hos QIAcube Connect MDx och avsnitt 3.3, Inre egenskaper hos QIAcube Connect MDx.


Viktigt: QIAcube Connect MDx är endast avsedd för användning med QIAGEN-kolonner. Formen på kolonner som tillverkats av andra leverantörer är kanske inte kompatibel med QIAcube Connect MDx.


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Använd endast QIAGEN-flödesceller och QIAcube Connect MDx-specifika förbrukningsartiklar med QIAcube Connect MDx. Skador som uppstår från användning av andra typer av flödesceller eller förbrukningsvaror ogiltigförklarar garantin.
---	--


Huven på QIAcube Connect MDx måste förbli stängd när instrumentet används. Öppna enbart huven vid anvisning av programvaran.


VARNING 	Rörliga delar För att undvika kontakt med rörliga delar under användning av QIAcube Connect MDx måste instrumentet användas med huven stängd. Om huvsensorerna eller låsen inte fungerar korrekt, kontakta QIAGEN teknisk service.
---	---


VARNING 	Risk för personskada och materialskada Försök inte att flytta QIAcube Connect MDx medan den används.
---	--





<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Felaktig användning av QIAcube Connect MDx kan orsaka personskador eller skada på instrumentet. QIAcube Connect MDx får endast användas av kvalificerad personal, med lämplig utbildning.</p> <p>Service på QIAcube Connect MDx får endast utföras av QIAGENs fältservicespecialister.</p>
---	--

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Använd inte skadade rotoradapttrar. Rotoradapttrarna kan endast användas en gång. Starka <i>g</i>-krafter i centrifugen kan skada begagnade rotoradapttrar.</p>
---	---

<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Skada på instrumentet</p> <p>Töm spetsavfallsbehållaren före användning för att förhindra att spetsar fastnar i avfallslådan. Om avfallsbehållaren inte töms kan robotarmen blockeras, vilket kan orsaka körfel eller skada instrumentet.</p>
---	---

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Ladda provrören korrekt för att undvika plastkollisioner. Efter en plastkollision kan vassa plastpartiklar förekomma inuti centrifugen. Var försiktig när du hanterar föremål inuti centrifugen.</p>
---	--


<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Skada på instrumentet</p> <p>Använd endast rätt volym av vätskor.</p> <p>Om den rekommenderade vätskevolymen överskrids kan centrifugrotorn eller instrumentet skadas.</p>
--	--


<p>VARNING</p> 	<p>Risk för brand eller explosion</p> <p>När du använder etanol- eller etanolbaserade vätskor på QIAcube Connect MDx ska du hantera sådana vätskor försiktigt och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Om vätska har spillts ut, torka av den och låt QIAcube Connect MDx-huven stå öppen så att brandfarliga ångor kan skingras.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>Risk för explosion</p> <p>QIAcube Connect MDx är avsedd att användas tillsammans med reagenser och ämnen som levereras med QIAGEN-kit eller andra som anges i respektive bruksanvisning. Användning av andra reagenser och substanser kan leda till brand eller explosion.</p>
<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Skada på instrumentet</p> <p>Luta dig inte mot pekskärmen när den är utdragen.</p>
<p>VARNING</p> 	<p>Prover innehållande smittsamma ämnen</p> <p>Vissa prover som används med detta instrument kan innehålla smittsamma ämnen. Hantera sådana prover med stor försiktighet och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.</p> <p>Använd alltid skyddsglasögon, 2 par handskar och laboratorierock.</p> <p>Ansvarig person (t.ex. laboratoriechef) måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den omgivande arbetsplatsen är säker och att instrumentanvändarna är korrekt utbildade och inte exponeras för farliga nivåer av smittsamma ämnen, såsom definieras i de tillämpliga säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheet, MSDS) eller OSHA,* ACGIH-† eller COSHH‡-dokument.</p> <p>Ventilation för ångor och kassering av avfall måste ske i enlighet med alla nationella och lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter och lagar.</p>


* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Amerikanska arbetsmiljöverket) (USA).


† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikanska konferensen för statliga industrihygienister) (USA).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Kontroll av hälsofarliga ämnen) (Storbritannien).

<p>VARNING</p> 	<p>Farliga kemikalier</p> <p>Vissa kemikalier som används med detta instrument kan vara farliga eller kan bli farliga efter fullbordande av protokollkörningen.</p> <p>Använd alltid säkerhetsglasögon, handskar och en labbrock.</p> <p>Ansvarig person (t.ex. laboratoriechef) måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att den omgivande arbetsplatsen är säker och att instrumentanvändarna är korrekt utbildade och inte exponeras för farliga nivåer av giftiga ämnen (kemiska eller biologiska), såsom definieras i de tillämpliga säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheet, MSDS) eller OSHA-, * ACGIH-† eller COSHH‡-dokumenten.</p> <p>Ventilation för ångor och kassering av avfall måste ske i enlighet med alla nationella och lokala hälso- och säkerhetsföreskrifter och lagar.</p>
---	--

<p>VARNING</p> 	<p>Rörliga delar</p> <p>Undvik kontakt med rörliga delar under användning av QIACube Connect MDx. Lagg inte under några omständigheter händerna under robotarmen när den sänks. Försök inte att flytta spetsställ eller provrör medan instrumentet körs.</p>
---	---

<p>VARNING</p> 	<p>Mycket varm yta</p> <p>Skakapparaten kan uppnå temperaturer på upp till 70 °C. Undvik att vidröra ytan när den är het. Ta bort proverna försiktigt efter körning.</p>
---	---

<p>VARNING FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Utför endast underhåll som specifikt beskrivs i denna användarhandbok.</p>
---	--

* OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Amerikanska arbetsmiljöverket) (USA).

† ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikanska konferensen för statliga industrihygienister) (USA).

‡ COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Kontroll av hälsofarliga ämnen) (Storbritannien).

5.1 Använda QIAcube Connect MDx-programmet

Med QIAcube Connect MDx går det att starta ett protokoll antingen i IVD-läge (endast validerade IVD-tillämpningar) eller i Research-läge (Forskning) för programvaran (endast MBA och anpassade tillämpningar). Användning av IVD-protokoll är endast möjligt och strikt begränsat till programvarans IVD-läge. Denna användarhandbok fokuserar på användning av QIAcube Connect MDx i IVD-programvaruläget. Detaljerade instruktioner om hur du använder QIAcube Connect MDx med hjälp av läget Research (Forskning) i programvaran finns i *Användarhandbok till QIAcube Connect* (finns på QIAcube Connects produktwebbplats under fliken Product Resources (Produktresurser)).

För att ändra programvaruläget måste användaren först logga ut från det aktuella programvaruläget innan det går att logga in på ett annat läge. Längst ned på pekskärmen visar systemet vilket programvaruläge som används.
















QIAcube Connect MDx styrs via en pekskärm som hjälper dig steg för steg genom korrekt laddning av arbetsdäcket och val av protokoll.

OBS! Instrumentets pekskärm stöder inte svepning och multigester.


QIAcube Connect MDx-pekskärmens allmänna funktioner beskrivs på nästa sida.

Obs! En röd lampa på den nedtryckta knappen indikerar en längre reaktionstid.


Pekskärmsknappar och ikoner – översikt för allmän användning

Knapp/ikon	Funktion
	Låter användaren bläddra uppåt i en lista.
	Låter användaren bläddra nedåt i en lista.
	Programvaran bekräftar åtgärden och fortsätter till nästa skärm.
	Återgår till föregående skärm.
	Återgår till föregående skärm utan att spara några ändringar.
	Låter användaren ändra vissa inställningar (t.ex. redigera ett användarkonto).
	Låter användaren ta bort vissa inställningar (t.ex. ta bort en användare).
Textfält	Används för att redigera text eller ett värde. Ett skärmtangentbord används för dessa ändringar.
Rad i tabeller	Tryck på dessa för att välja motsvarande rad. Antingen objektet eller raden kommer att markeras.
	Tryck för att visa ytterligare information om varje objekt.
	Tryck för att visa viktig information som måste följas under körningskonfigurationen för varje objekt.
 Sample information ...	Tryck för att visa ytterligare information om varje objekt.
 Sample information ...	Tryck för att visa viktig information som måste följas under körningskonfigurationen för varje objekt.
	Navigering tillbaka till skärmen Inställningar
	Verktogs-/underhållsfunktioner
	Konfiguration
	Logga ut från instrumentet


Tryck på respektive fält för att mata in text eller siffror. Motsvarande skärmtangentbord visas.

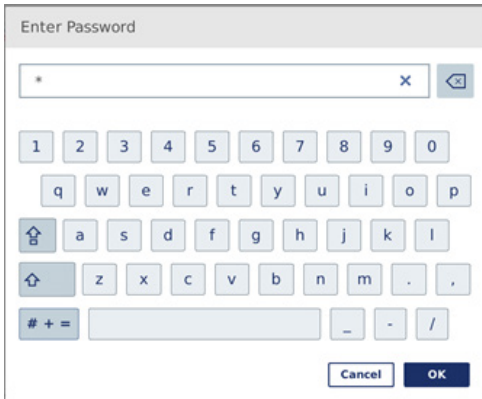

Tangentbord för att mata in ett lösenord.

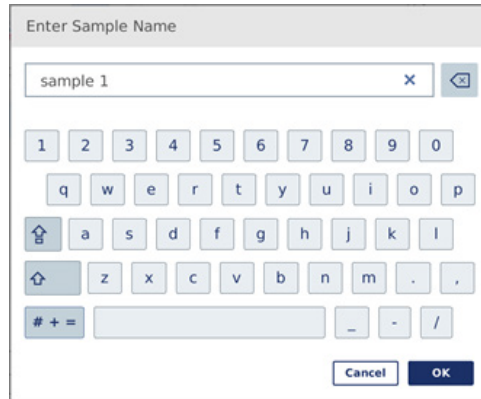

Tangentbord för att mata in ett provnamn.

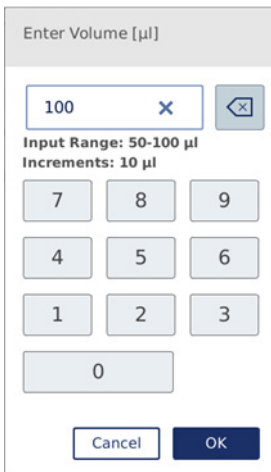









Tangentbord för att redigera en protokollparameter.

Värdeområdet visas för protokollparametrar. I exemplet som visas på skärmbilden ovan kan värden från 50 till 100 µl matas in, men endast i steg om 10 µl. Om det inmatade värdet inte är korrekt kommer fältets ram ändras till rött. Det går inte att fortsätta till nästa skärm i detta fall. Tryck på fältet igen och korrigera värdet enligt det intervall som visas intill fältet.

Knappar och ikoner på skärmtangentbordet beskrivs nedan.

Pekskärmsknappar och ikoner på skärmtangentbordet

Knapp/ikon	Funktion
	Ta bort tecknet till vänster.
	Ta bort allt från fältet.
	Så här skriver du nästa bokstav i versaler. När bokstaven har skrivits kommer tangentbordet att visa gemener igen.
	Växla till versaler. Gör det möjligt att skriva flera versaler. Tryck på symbolen igen för att återgå till gemener.
	Visa specialtecken.
	Återgå till bokstäver.
	Bekräfta och stäng.
	Kassera och stäng.

5.2 Slå på och av QIAcube Connect MDx

Slå på QIAcube Connect MDx

1. Stäng instrumenthuven.
2. Slå på instrumentet genom att växla startknappen till det inre läget. Ett ljud hörs (om ljudinställningarna är aktiverade) och en startskärm visas. Instrumentet utför själv initialiseringstestet. Om centrifuglocket var stängt kommer det att öppnas.

Stänga av QIAcube Connect MDx


1. Stäng av instrumentet genom att växla startknappen till det inre läget.
Obs! När QIAcube Connect MDx har stängts av måste du vänta några sekunder innan du slår på instrumentet igen. Systemet kanske inte startar om du inte låter QIAcube Connect vila i ett par sekunder innan du startar om det.

5.3 Logga in och logga ut

Logga in

1. Stäng instrumenthuven.
2. Slå på instrumentet.

När starten är klar visas skärmen **Login** (Logga in).

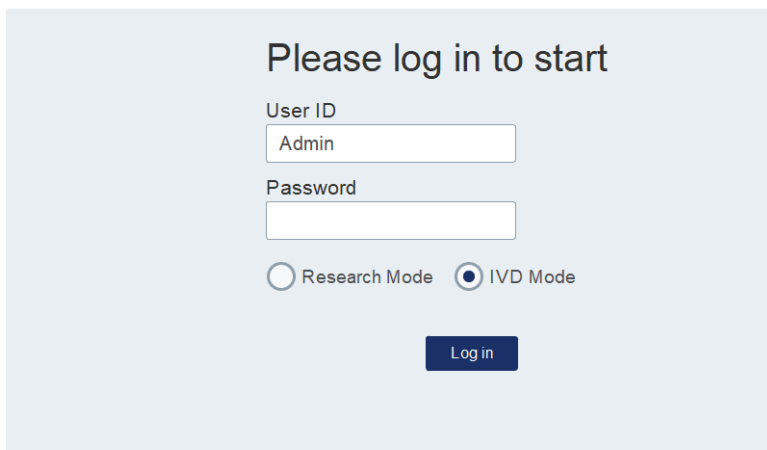A screenshot of the login interface. At the top, it says "Please log in to start". Below this are two input fields: "User ID" with "Admin" entered, and "Password" which is empty. There are two radio buttons for "Research Mode" and "IVD Mode", with "IVD Mode" selected. A "Log in" button is at the bottom.

Inloggningskärm.

3. Ange **User ID** (Användar-ID) och **Password** (Lösenord) med skärmtangentbordet.
4. Välj programvaruläge (IVD eller Research (Forskning)).
Obs! Det valda programvaruläget visas längst ner på skärmen så länge du är inloggad.
5. Tryck på **Log in** (Logga in).
6. Skärmen **Setup** (Inställningar) visas.

Vid misslyckad inloggning visas en utropsteckenikon (❗) och en informationskärm. Peka på respektive fält för att ange **User ID** (Användar-ID) och **Password** (Lösenord) för att bekräfta att du angav rätt information. **User ID** (Användar-ID) är skifflägeskänsligt.



Please log in to start

User ID
Admin

Password
•

Research Mode IVD Mode

❗
You have entered wrong credentials.

Log in

Informationsskärm från misslyckad inloggning, till exempel på grund av felaktigt inmatat lösenord.

Logga ut

1. Tryck på Logout (Logga ut) längst upp till höger på skärmen.
2. Bekräfta meddelandet med OK för att logga ut. Tryck på Cancel (Avbryt) för att fortsätta vara inloggad.

Obs! Systemet loggar ut automatiskt om du är inaktiv under en viss tid.

Administratören kan ställa in antalet minuter för automatisk utloggning.

3. Inloggningsskärmen visas.

Obs! Efter en automatisk utloggning kan endast samma användare som tidigare har använt instrumentet eller en administratör logga in.

5.4 Ställa in en protokollkörning

Vanliga QIAGEN-standardprotokoll (Life Science och DSP-protokoll) är installerade på QIAcube Connect MDx vid leverans. Tillgängliga QIAGEN IVD-protokoll kan hämtas från fliken Product Resources (Produktresurser) på produktsidan för QIAcube Connect MDx: <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx>.

För instruktioner om hur du installerar nedladdade protokoll, se avsnitt 5.11.1, Installera nya protokoll.

Viktigt: Innan du startar något protokoll ska du noga läsa motsvarande QIAGEN-handbok.

Protokollinställningarna startar från skärmen Inställningar. Peksärmsprogrammet kommer att vägleda dig genom protokollkörningsinställningarna och steg för steg för att ladda arbetsbordet. Skärmarna varierar beroende på vilket protokoll som används och kan se annorlunda ut än de skärmar som visas i detta avsnitt.

Obs! Om du behöver pausa installationen klickar du på låsikonen på huvudskärmen. För att låsa upp skärmen måste du ange dina autentiseringsuppgifter. Endast samma användare som tidigare har använt instrumentet eller en administratör kan låsa upp skärmen.



Låsknappen på huvudskärmen.

1. Bered de prover som ska bearbetas med det protokoll som anges på protokollvalsskärmen. Se kithandboken för mer information vid behov. Den nödvändiga förbehandlingen av provet finns i respektive kithandbok.
2. För att starta körningsinställningarna i IVD-läge skannar du 2D-streckkoden på QIAGEN-kitet. Tryck på Scan kit (Skanna kit) och använd den handhållna streckkodsläsaren. Det går också att bara läsa av streckkoden utan att trycka på Scan kit (Scanna kit).

Följande information från kitstreckkoden kommer att läggas till i körningsrapporten som skapas i slutet på körningen:

- kitets namn
- materialnummer
- lotnummer
- utgångsdatum
- om kitet har upphört att gälla (om utgången kit körs flaggas körningen som Ogiltigt).
Obs! Använd endast QIAGEN IVD-kit inom deras utgångsdatum. Körningen är inte längre giltig om du använder ett kit med ett utgången utgångsdatum och körningsresultaten kan därför inte användas för diagnostisk användning.


Det rekommenderas inte heller att starta en körning i slutet av dagen (nattkörning) och samla in eluaten nästa dag. Eftersom QIACube Connect MDx inte har någon teknisk kapacitet för att kyla eluaten efter en körning kan eluatens kvalitet försämrats efter en längre förvaring i rumstemperatur.

Om skanningen av kitets streckkod misslyckas kan du även skriva in kitets streckkod via användargränssnittet. Kodens struktur på följande sätt:


Streckkodsstruktur för kit

Position	Längd	Värde	Beskrivning
1 till 2	2	01	Identifierare "GTIN"
3 till 16	14		GTIN, används inte av systemet, se etikett
17 till 18	2	17	Identifierare för "Utgångsdatum"
19 till 24	6		Utgångsdatum (ÅÅÅMMDD), se etikett. Om den inte används: 000000
25 till 26	2	10	Identifierare för "Lot"
27 till "]"	4 till 10		Lotnummer, varierande längd, se etikett
	1]	Markör för slutet på lotnumret
	3	240	Identifierare för "Produktkod"
efter "240"	0 till 15		Materialnummer (REF) innehåller antingen ett katalognummer eller ett materialnummer, se etiketten.

Exempelstreckkodsetiketten nedan innebär att streckkoden för denna etikett vore 010405322800290117181231101151234567]24061704:

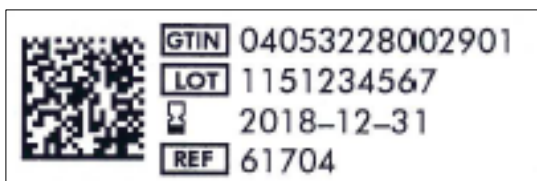

Exempel på en kitsreckkodsetikett.

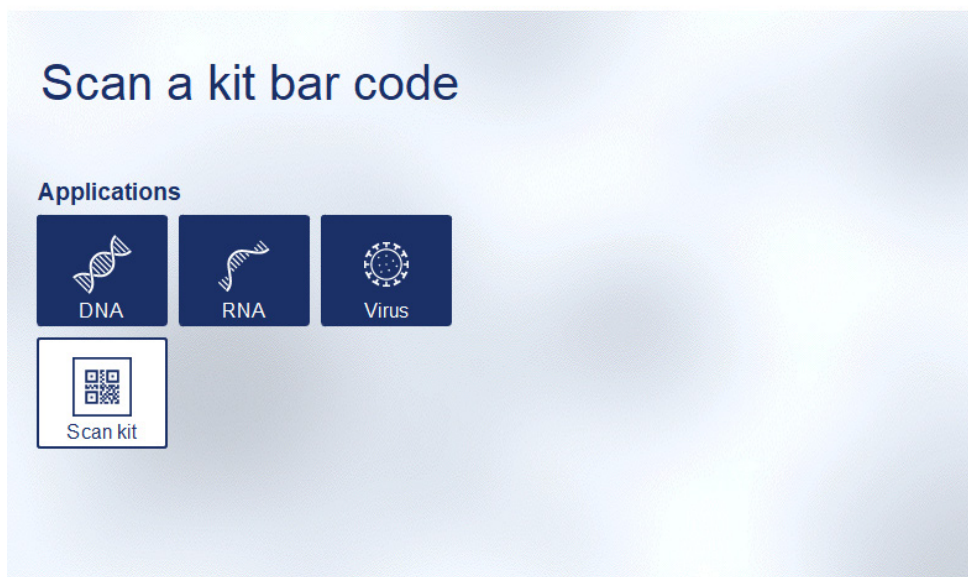

Skärmen Setup (Inställningar).

Programmet fortsätter automatiskt till nästa skärm. Beroende på den skannade kitstreckkoden kan programmet hoppa över skärmarna **Material** och/eller **Protocol Selection** (Protokollval). Programmet hoppar över valskärmen om den information som krävs tillhandahålls av kitets streckkod.

3. Följ instruktionerna i avsnitten nedan för att ange information på följande skärmar. Beroende på dina val kan skärmarnas antal och ordning variera på instrumentet.


Varje sektion nedan innehåller en skärmbild. Följ informationen i det avsnittet med motsvarande skärm som visas på ditt instrument.

I allmänhet trycker du på **Next** (Nästa) för att fortsätta till nästa skärm eller på **Back** (Bakåt) för att återgå till föregående skärm. **Next** (Nästa) är endast aktiv om all nödvändig information har matats in på den aktuella skärmen.

Viktigt: Använd inte knappen Next (Nästa) medan robotarmen fortfarande rör sig.

Många skärmar har pilikoner Upp (▲) och Ner (▼) för att bläddra. Se till att rulla ner alla texter till slutet och följa anvisningarna helt.


5.4.1 Val av material

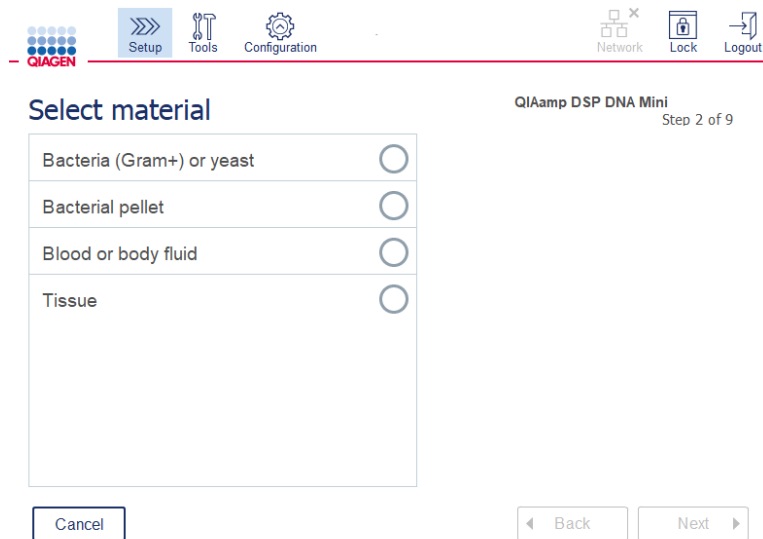

Skärmen **Select material (Välj material)**.

1. Välj provmaterial genom att trycka på motsvarande rad. Endast en typ av provmaterial kan väljas per körning.
2. Tryck på **Next** (Nästa) för att fortsätta att definiera protokollet.

5.4.2 Protokollval

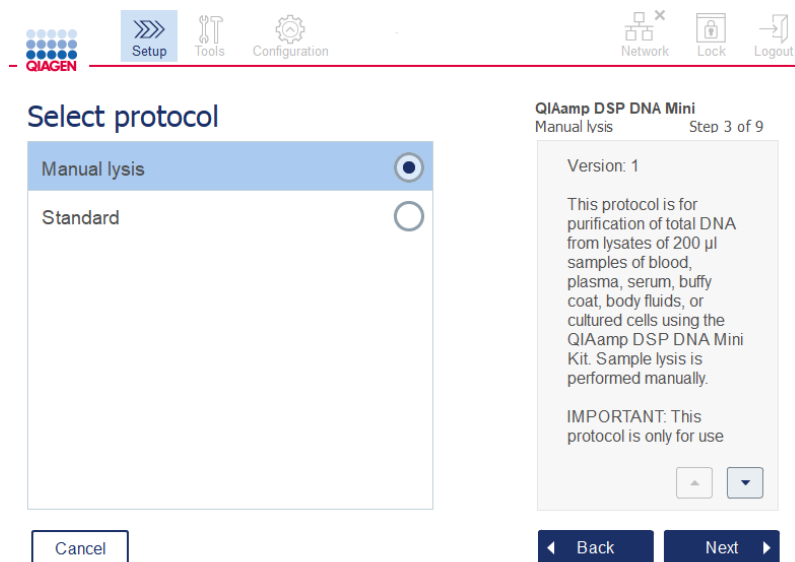

Skärmen **Select protocol (Välj protokoll)**.

1. Välj protokoll genom att trycka på motsvarande rad. Endast ett protokoll kan väljas per körning.

Viktigt: Se till att läsa all viktig och kritisk information i det högra fältet (bläddra ner vid behov) innan du fortsätter till nästa steg.

2. Tryck på **Next** (Nästa) för att fortsätta att definiera körningsparametrarna.

5.4.3 Parameterdefinition

Beroende på det valda protokollet måste vissa parametrar definieras. Vissa protokoll tillåter inte ändring av parametrar. Dessa parametrar är fasta eftersom de är validerade för proceduren. För protokoll med redigerbara parametrar definieras standardinställningar, men dessa kan ändras. Följ instruktionerna i informationsfönstret till höger om hur värdena ändras och vilka ökningssteg som kan användas.

Parameter name	Value
1st elution vol (Default: 100 µl)	100 µl
2nd elution vol (Default: 100 µl)	100 µl

QIAamp DSP DNA Mini
Manual lysis Step 4 of 9


1st elution vol 50-100 µl in increments of 10 µl

2nd elution vol 50-100 µl in increments of 10 µl

Skärmen **Define parameters** (Definiera parametrar).

1. Vid behov trycker du på fältet **Value** (Värde) för att ändra ett parametervärde med skärmtangentbordet. Se avsnitt 5.11.1, Installera nya protokoll, för detaljer om skärmtangentbordet.
2. Tryck på **Next** (Nästa) för att fortsätta att definiera provnumret. Programvaran bekräftar åtgärden och fortsätter till nästa skärm. Följ instruktionerna i motsvarande avsnitt nedan.


5.4.4 Definiera antal prover

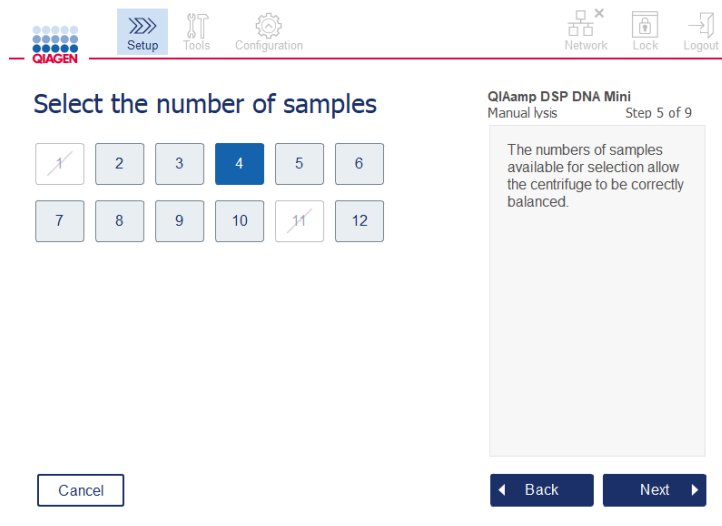

Skärmen Define sample numbers (Definiera antal prover).

1. För att välja antalet prover för körningen trycker du på motsvarande nummer på skärmen. Provnummer (1 och 11) som skulle leda till obalans under centrifugeringen kan inte väljas.
2. Tryck på **Next** (Nästa) för att fortsätta att ladda reagenserna.

5.4.5 Ladda buffertflaskor

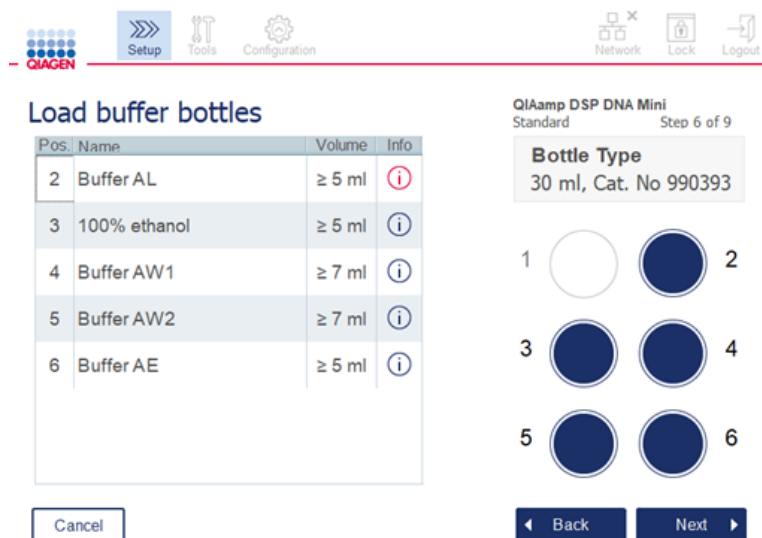

Skärmen Load buffer bottles (Ladda buffertflaskor).

Skärmen **Load buffer bottles** (Ladda buffertflaskor) vägleder dig genom inställningen av nödvändiga buffertar för körningen. Läs all viktig och kritisk information innan du går vidare till nästa steg.

Obs! För att undvika körningsproblem och garantera korrekt placering av buffertflaskstället måste buffertflaskstället vara utrustat med etikettrensor.

Beroende på valt protokoll behöver buffertflaskorna kanske inte laddas. I detta fall indikerar programvaran att detta steg kan hoppas över.

1. Förbered reagenserna enligt anvisningarna på skärmen. Se respektive kithandbok för ytterligare information och se till att rätt buffertar används på varje position (se den blåskuggade cirkeln på pekskärmen). Kontrollera att bufferten inte skummar eller innehåller stora luftbubblor.

Obs! Håll en reagensvolym som är så nära som möjligt till de volymer som krävs för det valda protokollet och motsvarande antal behandlade prover (som anges i reagenstabellen på pekskärmen).


The screenshot shows the 'Load buffer bottles' screen. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, Lock, and Logout. The main content is divided into two sections. On the left is a table with the following data:

Pos.	Name	Volume	Info
2	Buffer AL	≥ 5 ml	
3	100% ethanol	≥ 5 ml	
4	Buffer AW1	≥ 7 ml	
5	Buffer AW2	≥ 7 ml	
6	Buffer AE	≥ 5 ml	

Below the table is a 'Cancel' button. On the right side, the text reads 'QIAamp DSP DNA Mini Standard Step 6 of 9'. Below this is a 'Bottle Type' section showing '30 ml, Cat. No 990393'. A visual representation of the bottle tray shows six positions, numbered 1 to 6. Position 2 is highlighted with a blue circle, indicating it is the selected buffer. Below the tray are 'Back' and 'Next' buttons.

Skärmen **Load buffer bottle** (Ladda buffertflaskor) med platsen på buffertflaskstället inringat för den valda bufferten i listan.

Innan du fortsätter till nästa steg, se till att du läser all nödvändig och kritisk information som anges med ikonen Information () markerad i rött. Tryck på ikonen för att öppna informationen.

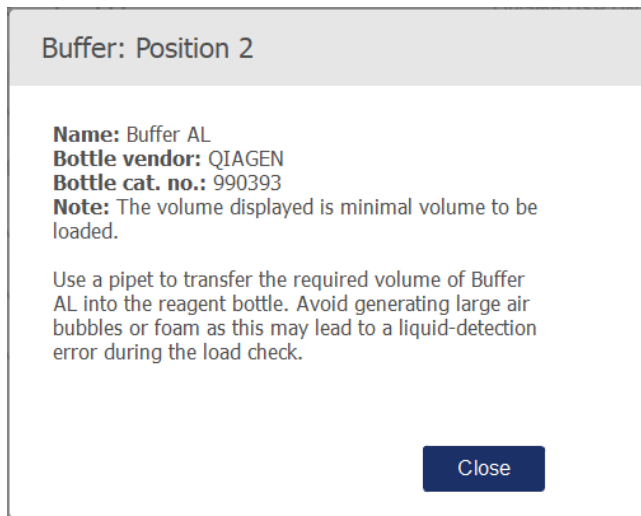

Exempel på meddelanderuta som visas genom att trycka på informationsikonen (i).

2. Kontrollera att buffertflaskorna innehåller de minimivolymer som beskrivs i kolumnen **Volume** (Volym). Varje flaska kan rymma högst 30 ml, men det rekommenderas att inte använda mer än minimivolymer.
Senare, när körningen startas, kommer instrumentet att bestämma påfyllningsvolymen. Se till att buffertflaskorna märks korrekt och i enlighet med säkerhetskraven. Buffertflaskor kan förvaras enligt förvaringsförhållandena som beskrivs i kithandböckerna. Buffertflaskorna får dock inte stå öppna på instrumentet för länge. För efterföljande körningar ska ny buffert fyllas på. Vi rekommenderar att buffertflaskorna endast återanvänds tills ett kit har förbrukats. Så snart en ny QIAGEN-sats har öppnats ska nya buffertflaskor användas.
3. Placera varje öppnad buffertflaska i rätt position på reagensflaskstället som visas på skärmen. Ställpositionerna för buffertflaskan är numrerade för enkel identifiering. Stället passar endast på arbetsbordet om det är korrekt riktat.
4. När alla buffertflaskor har placerats i reagensflaskstället placerar du stället på arbetsbordet. Kontrollera att stället är korrekt positionerat med nummer 1 överst.
Viktigt: Kontrollera att reagensflaskstället är korrekt placerat på den avsedda arbetsbordplatsen. Flaskställ som lutar kan orsaka fel under vätskedetektionen.
Viktigt: Kontrollera att buffertflaskorna är öppna. En stängd buffertflaska kommer att detekteras av instrumentet och förhindra att körningen startar.
5. Tryck på **Next** (Nästa) för att ladda spetsarna och enzymerna. Programvaran bekräftar åtgärden och fortsätter till nästa skärm. Följ instruktionerna i motsvarande avsnitt nedan.

WARNING**Risk för brand eller explosion**

När du använder etanol- eller etanolbaserade vätskor på QIAcube Connect MDx ska du hantera sådana vätskor försiktigt och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Om vätska har spillts ut, torka av den och låt QIAcube Connect MDx-huven stå öppen så att brandfarliga ångor kan skingras.

5.4.6 Ladda spetsar och enzymer

Viktigt: När skärmen **Loading tip and enzymes** (Ladda spetsar och enzymer) visas rör sig robotarmen långsamt automatiskt – även när huven är öppen – så att du kan komma åt alla laddningspositioner. Stå alltid på avstånd från instrumentet medan robotarmen rör sig. Vänta tills robotarmen har slutfört sina rörelser innan du börjar ladda eller ladda ur spetsställ eller enzymer. När du är klar med laddningen och fortsätter från den här skärmen flyttar sig robotarmen automatiskt tillbaka till sin ursprungliga position (ovanför spetsställets position 3).

Om mer än ett rack av samma spetsstyp har laddats kommer instrumentet att använda spetsstället som placerats i position 1 först och sedan fortsätta till position 2 och slutligen position 3. Om du vill använda ett delvis fyllt ställ först laddar du det i position 1.

Beroende på valt protokoll behöver eventuellt inte spetsar och enzymer laddas. I detta fall indikerar programvaran att detta steg kan hoppas över.

Pos.	Name	Amount	Info
A	QIAGEN® Proteinase K, 1.5 ml	111 µl	
2	Tip Rack, 1000 µl	13 - 32	
1	Tip Rack, 200 µl	4 - 32	

QIAcube DSP DNA Mini Standard Step 7 of 9

A 3

B 2

C 1

Empty the waste drawer

Buttons: Cancel, Move left, Move right, Back, Next

Skärmen Loading tip racks and enzymes (Ladda spetsställ och enzymer).

Om robotarmen av någon anledning hindrar dig från att nå laddningspositionen ska du inte flytta robotarmen manuellt. Gör i stället så här:

- Tryck på **Move left** (Flytta åt vänster). Robotarmen börjar röra sig. Huven kan förbli öppen under denna rörelse.
- Stå alltid på avstånd från instrumentet medan robotarmen rör sig. Vänta tills robotarmen har slutat röra sig.

Följ anvisningarna nedan för att ladda enzymer, reagenser och spetsar:

1. Bered de enzymer och/eller reagenser som anges på skärmen. Se relevant kithandbok för mer information. Innan du fortsätter till nästa steg, se till att du läser all nödvändig och kritisk information som anges med ikonen **Information** (i) markerad i rött.

2. Kontrollera att du använder rätt typ av provrör. Tryck på ikonen **Information** (i) på respektive rad för att visa informationen.

Enzymrörtyper som stöds är 1,5 ml mikrocentrifugrör (Sarstedt®, kat.nr: 72.706), 2 ml rör med skruvlock utan bred bas (QIAGEN, kat.nr: 990382), och 2 ml reaktionsrör (QIAGEN, som medföljer PAXgene Blood RNA Kit).

3. Kontrollera att du anger rätt volym enligt det som visas på skärmen. Volymen som visas på skärmen är den exakta volymen som ska laddas.

4. Placera det öppnade provröret i arbetsbordspositionen enligt tabellen på skärmen. Det är viktigt att du laddar röret i rätt arbetsbordsläge.

5. Placera locket på mikrocentrifugröret säkert i locketfacket intill röret.

6. Kontrollera att önskat antal spetsar för varje spetsstyp har laddats enligt anvisningarna på skärmen. Spetsställ kan ta slut om det minsta antalet spetsar för varje typ har laddats. Vi rekommenderar dock att du laddar fler än det begärda antalet av varje spetsstorlek.

Laddningspositionen som visas på skärmen är den rekommenderade positionen för spetsställ. Positionen kan också ändras. När körningen senare startas kontrollerar instrumentet om rätt spetsställ har placerats på arbetsbordet och om det finns tillräckligt med spetsar för protokollkörningen.

Det finns tre olika typer av spetsställ som kan användas på QIAcube Connect MDx, beroende på vilket protokoll som valts. Ett blått ställ för 200 µl filterspetsar, ett ljusgrått ställ för 1 000 µl filterspetsar och ett mörkgrått ställ för 1 000 µl breda filterspetsar. Instrumentet använder skårorna på filterspetsstället för att identifiera spetsstypen. Fyll inte på spetsställ manuellt då detta kan leda till förväxlingar som orsakar körningsfel. Använd endast spetsar som är avsedda att användas tillsammans med QIAcube Connect MDx.

Viktigt: Använd inte skadade filterspetsar. Ladda inte skadade spetsställ på arbetsbordet.

Obs! Vid användning av delvis fyllda spetsställ, överväg i vilken ordning ställen har laddats. Spetsstället i position 1 kommer att användas först.

7. Se till att tömma avfallslådan med begagnade engångsartiklar före varje körning så att avfallet inte byggs upp.
8. Tryck på **Next** (Nästa) för att ladda centrifug- eller skakapparatstället, beroende på valt protokoll.

Viktigt: När du är klar med laddningen och fortsätter från skärmen **Loading tip and enzymes** (Ladda spetsar och enzymer) flyttar sig robotarmen automatiskt tillbaka till sin startposition (ovanför spetsställets position 3). Stå alltid på avstånd från instrumentet medan robotarmen rör sig. Vänta tills robotarmen har slutat röra sig.

5.4.7 Laddning av centrifugen

Skärmen **Loading centrifuge** (Ladda centrifug) vägleder dig konfigurationen av de nödvändiga rotoradapterna och centrifugerna för körningen. Läs all viktig och kritisk information innan du går vidare till nästa steg.

Beroende på valt protokoll behöver centrifugen kanske inte laddas. I detta fall indikerar programvaran att detta steg kan hoppas över.

Rotoradapter kan placeras i en rotoradapterhållare, vilket gör det enkelt och enkelt att förbereda och ladda kolonner. Placera kolonnerna, rören eller proverna i lämpliga positioner i varje rotoradapter enligt anvisningarna i programvaran. Se till att elueringsrören märks med prov-ID.

För vissa protokoll (t.ex. PAXgene Blood RNA Kit) kan programmet uppmana dig att skära av locket på en kolonn för en viss rotoradapterposition. Gör detta innan du laddar kolonnen. Kontrollera att locket är helt borttaget från kolonnen. Kolonner med delvis borttagna lock kan eventuellt inte fattas ordentligt av rotorn vilket innebär att protokollkörningen kan krascha.



Kolonnlock felaktigt borttaget, delar av locket är kvar

Kolonnlock korrekt borttaget

Jämförelse av korrekt och felaktigt borttagna kolonnlock.

Om protokollet kräver användning av kolonner med skruvlock (Qproteome® Albumin/IgG Depletion Spin Columns) ska du ta bort skruvlocket från kolonnen och skruva på en kolonnadapterring (medföljer inte QIAcube Connect MDx, se 11, Bilaga C – Tillbehör till QIAcube Connect MDx) på kolonnen. Kolonnens adapterring gör det möjligt för robotgriparmen att flytta kolonnen under reningen. Bryt av kolonnens nedre försegling innan du ställer den i rotoradaptern.




Montera en kolonnadapterring.

Kontrollera att rören och kolonnerna har skjutits in ordentligt i rätt rotoradapterposition.

Placera locken i rätt läge på rotoradaptern enligt anvisningarna på skärmen i tabellspalten **Lid position** (Lockposition) och figuren på rotoradaptern. Se till att locken har skjutits hela vägen ner till botten av skårorna på rotoradapterns sidor. Felaktigt placerade lock kan brytas under centrifugeringen och leda till att protokollkörningen kraschar.

A

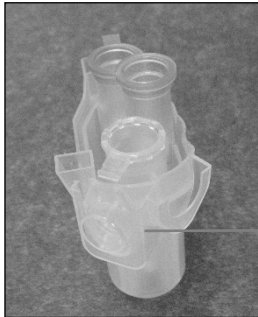


1,5 ml
mikrocentrifugrörets lock
är i rätt läge.

B




Rätt laddad rotoradapter. **A** Rotoradaptern är korrekt laddad och 1,5 ml mikrocentrifugrörlocket är i rätt läge. **B** Korrekt laddad rotoradapter sedd från sidan.

C

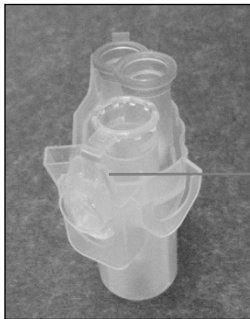


1,5 ml
mikrocentrifugrörlocket
är inte nedskjutet i
skåran

D

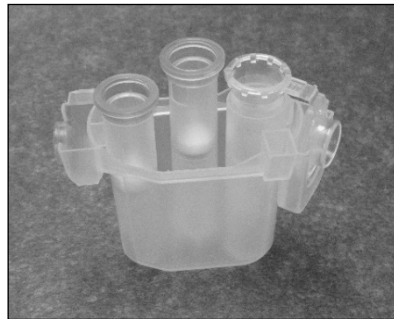


Felaktigt laddad rotoradapter. **C** Rotoradaptern är felaktigt laddad med ett 1,5 ml mikrocentrifugrör. Provrörets lock är inte korrekt nedskjutet i botten på skåran på rotoradaptern och kan brytas under centrifugeringen (jämför med del **A** i ovanstående figur). **D** Felaktigt laddad rotoradapter sedd från sidan (jämfört med del **B** i ovanstående figur).


E

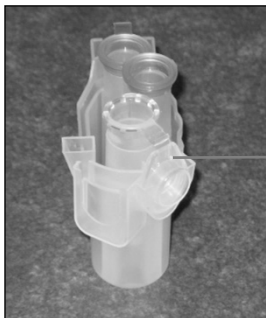



1,5 ml mikrocentrifugrör
är i fel skåra på
rotoradaptern

Rotoradaptern är felaktigt laddad med ett 1,5 ml mikrocentrifugrör. Provrörslocket är i fel skåra på rotoradaptern. Under kolonnöverföringen kan kolonnens lock kollidera med locket till 1,5 ml mikrocentrifugröret, vilket gör att protokollkörningen kraschar.

<p>WARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Ladda provrören korrekt för att undvika plastkollisioner. Efter en plastkollision kan vassa plastpartiklar förekomma inuti centrifugen. Var försiktig när du hanterar föremål inuti centrifugen.</p>
---	--

<p>WARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Använd inte skadade rotoradapterar. Rotoradapterarna kan endast användas en gång. Starka g-krafter i centrifugen kan skada begagnade rotoradapterar.</p>
---	--

<p>WARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Se till att locken från kolonnerna och 1,5 ml mikrocentrifugrören är i rätt position och hela vägen ner till botten av skårorna på rotoradapterns sidor. Felaktigt placerade lock kan brytas under centrifugeringen.</p>
---	--

<p>WARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Kontrollera att locket har avlägsnats helt från kolonnen. Kolonner med delvis borttagna lock kanske inte tas bort korrekt från rotorn, vilket innebär att protokollkörningen kraschar.</p>
---	--

Beroende på valt protokoll kan prover laddas på skakapparaten eller direkt i centrifugen. Följ instruktionerna under skärmbilden som motsvarar skärmen du ser. Din skärm kanske ser annorlunda ut beroende på valt protokoll.

Ladda centrifugen om proverna laddas på skakapparaten


I det här avsnittet beskrivs ett arbetsflöde som där skakapparaten ingår (t.ex. lysering). Provrör med prover måste laddas på skakapparaten (se avsnitt 5.4.8, Ladda skakapparaten) och centrifugen måste förberedas enligt följande beskrivning.

Load the centrifuge rotor adapter

QIAamp DSP DNA Blood Mini
Elution volume: 200 µl Step 8 of 9

Pos.	Labware	Lid position
1	QIAamp Mini spin column	L1
2	-	-
3	1.5 ml Elution tube	L3

4 x Rotor adapter

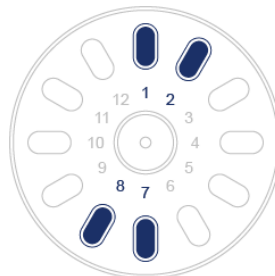

Label Elution Tubes with Sample ID or Rotor Position

Cancel

Back

Next

Aug 05, 2020, 12:53

Mode: IVD

User: a b

Skärmen **Load the centrifuge rotor adapter** (Ladda centrifug rotoradapter) när prover har laddats på skakapparaten. **Position 2** på rotoradaptern är tom.

Antalet rotoradapterar och de rörpositioner som krävs för protokollkörningen kommer att visas i tabellen och illustrationen på skärmen. Tabellen visar hur du ska ladda och placera varje rotoradapter. Spalten **Pos.** anger positionen i rotoradaptern och spalten **Lid position** (Lockposition) anger var locket på ett visst rör ska placeras.

För varje rotoradapter:

1. Placera varje provrör/kolonn på rätt position enligt tabellen på skärmen. Tryck på tabellraden för att markera en viss provrörposition i illustrationen under tabellen.
2. Kontrollera att rören och kolonnerna är ordentligt inskjutna i rätt rotoradapterposition.
3. Se till att locken har skjutits hela vägen ner till botten av skårorna på rotoradapterns sidor. Se till att du placerar locken på rätt plats.
4. Märk elueringsrören med samma prov-ID som provet på respektive inmatningsposition på skakapparaten (se avsnitt 5.4.8, Ladda skakapparaten) eller rotorpositionens nummer. Se till att använda en fästande etikett som sitter fast ordentligt.
5. Vid behov och om detta beskrivs i tabellen ska du skära bort locket eller skruva på en kolonnadapterring och bryta av kolonnens botten.
6. Upprepa steg 1–5 tills alla rotoradapterar har förberetts.

- Placera de laddade rotoradaptorna i centrifugbehållarna enligt illustrationen till höger på skärmen. För enkel användning och hög bearbetnings säkerhet passar rotoradaptorna endast i centrifugbägaren i rätt riktning.
- Tryck på Next (Nästa) för att ladda proverna i skakapparaten. Följ anvisningarna i avsnitt 5.4.8, Ladda skakapparaten. Beroende på det valda protokollet kan ordningsföljden i följande skärmar avvika.

Ladda prover i centrifugen

I det här avsnittet beskrivs ett arbetsflöde som inte inkluderar skakapparaten (t.ex. lysering). Proverna laddas direkt i centrifugen. För arbetsflöden som omfattar skakapparaten, se avsnitt 5.4.7, Laddning av centrifugen, om prover laddas på skakapparaten.

Proceduren för att ladda prover i centrifugen visas på båda sidor av skärmen. Sådana protokoll är endast tillgängliga i programvarans Research-läge (Research (Forskning)).

Förbered önskat antal rotoradaptor enligt informationen på skärmen.

Pos.	Labware	Lid position
1	MB RNA spin Column	L1
2	450 µl sample	-
3	1.5 ml Elution tube	L3

6 x Rotor adapter

RNeasy PowerMicrobiome
IRT with DNase Step 9a of 9

Rotor Adapter Position for sample loading: 2

Lyse samples mechanically according to RNeasy PowerMicrobiome Kit instruction manual.

After centrifugation in step 4, Transfer at least 450 µl of sample into Rotor Adapter position 2 (Rotor Adapter Middle Position). If the sample volume is less than 450 µl, add Solution PM1 up to the final volume. Important: It is critical that you use Solution PM1 and not water to adjust the volume. Solution PM1 is available as an accessory product (cat. no. 26000-50-1).

Buttons: Cancel, Back, Next

Skärmen **Load the centrifuge rotor adapter** (Ladda centrifug rotoradapter) när prover har laddats i centrifugen. Prover laddas i position 2 på rotoradaptorn.

Antalet rotoradaptor och de rörpositioner som krävs för körningen kommer att visas i tabellen och illustrationen. Tabellen visar hur du ska ladda varje rotoradapter. Spalten **Pos.** anger positionen i rotoradaptorn och spalten **Lid position** (Lockposition) anger var locket på ett visst rör ska placeras.

För varje rotoradapter:

1. För prover: Förbered och ladda proverna enligt anvisningarna på skärmen. Se till att ladda rätt provmängd. Se till att du läser all nödvändig och viktig information som anges i den blå rutan **Information** till höger på skärmen.
2. Placera varje provrör/kolonn på rätt position enligt tabellen på skärmen. Tryck på tabellraden för att markera en viss provrörposition i illustrationen under tabellen.
3. Kontrollera att rören och kolonnerna är ordentligt inskjutna i rätt rotoradapterposition.
4. Se till att locken har skjutits hela vägen ner till botten av skårorna på rotoradapterns sidor. Se till att du placerar locken på rätt plats.

Obs! Vid behov och om detta beskrivs i tabellen ska du skära bort locket eller skruva på en kolonnadapterring och bryta av kolonnens botten.

5. Upprepa steg 1-4 tills alla rotoradapttrar har förberetts.
6. Ladda rotoradapttrarna i centrifugen. Placera de förberedda rotoradapttrarna i centrifugbägarna enligt illustrationen på höger sida av skärmen. För enkel användning och säkerhet passar rotoradapttrarna endast i centrifugbägaren i rätt riktning. För att förhindra provförväxling måste du ladda rätt prov-ID i den definierade centrifugpositionen.
7. Ändra vid behov standardvärdet i fälten Sample ID (Prov-ID) med hjälp av skärmtangentbordet. Du kan ange värdet manuellt eller skanna provstreckkoden med hjälp av den externa streckodsläsaren. Prov-ID skapas först med formatet ÅÅÅÅMMDD-HHMM-nr. Kontrollera att samma ID finns på respektive elueringsrör på en säkert fastsatt etikett.

The screenshot shows the 'View sample details' screen in the QIAcube Connect MDx software. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, and Logout. Below the navigation bar, the screen is divided into two main sections. On the left, there is a table with the following data:

Pos.	Sample ID
01	sample 1
02	20181229-0616-02
03	20181229-0616-03
07	20181229-0616-07
08	20181229-0616-08
09	20181229-0616-09

Below the table is a 'Cancel' button. On the right side of the screen, there is a diagram of a rotor adapter with 12 numbered positions (1-12). The diagram is titled 'RNeasy PowerMicrobiome IRT with DNase Step 9b of 9'. Below the diagram are 'Back' and 'Next' buttons. At the bottom of the screen, it says 'User: Admin Admin'.

Skärmen View sample details (Visa provinformation).

OBS! Prov-ID ingår i körningsrapporterna och kan vara del av loggfiler och granskningsspår. De krypteras inte.

Viktigt: Observera att prov-ID-fältet inte får innehålla personuppgifter.

5.4.8 Ladda skakapparaten

Skärmen **Load shaker** (Ladda skakapparat) leder dig genom laddningen av skakapparaten.

Beroende på valt protokoll behöver skakapparaten kanske inte laddas. I detta fall indikerar programvaran att detta steg kan hoppas över.

Beroende på valt protokoll måste prover och/eller andra provrör laddas på skakapparaten.

Pos	Sample ID	Tube Type	Value
01	sample 1	2 ml screw-cap...	200 µl
02	20181101-0316-02	2 ml screw-cap...	200 µl
03	20181101-0316-03	2 ml screw-cap...	200 µl
07	20181101-0316-07	2 ml screw-cap...	200 µl
08	20181101-0316-08	2 ml screw-cap...	200 µl
09	20181101-0316-09	2 ml screw-cap...	200 µl

Laddning av skakapparat, lockpositionerna är fyllda med skakapparatkontakter.


I det här steget visar programmet de skakapparatpositioner, provrör och volymer som ska laddas i tabellen och flödesschemat till höger. Se till att ladda rätt typ av skakapparatställ enligt beskrivningen till höger på skärmen. Skakapparatadapter kan endast laddas i rätt riktning. Läs all viktig och kritisk information under Provinformation innan du går vidare till nästa steg.

1. Kontrollera att du använder rätt typ av skakapparatställ.
2. Ändra vid behov standardvärdet i fälten **Sample ID** (Prov-ID) med hjälp av skärmtangentbordet. Du kan ange värdet manuellt eller skanna provstreckkoden med hjälp av streckodsläsaren. Prov-ID skapas först med formatet ÅÅÅÅÅMMDD-HHMM-nr.

OBS! Prov-ID ingår i körningsrapporterna och kan vara del av loggfiler och granskningsspår. De krypteras inte.

Viktigt: Observera att prov-ID-fältet inte får innehålla personuppgifter.


3. Förbered rätt provrör. Se till att du läser all nödvändig och kritisk information som anges med ikonen **Information** (i) markerad i rött. Information om laboratorieutrustning som ska användas finns också i respektive kithandbok. Om du använder en klisteretikett på provrören ska du använda en tunn etikett som gör att röret kan föras in helt i skakapparaten.
4. Ladda provrören på rätt position i skakapparatstället. Ställpositionerna på skakapparaten är numrerade för enkel identifiering. Tryck på tabellraden för att markera en viss position i flödesschemat till höger. Se till att använda samma positionsnummer för skakapparaten och centrifugrotorbägaren för samma prov-ID.
5. Beroende på provrörstyp måste en skakapparatställkontakt eller provrörslocket placeras i skåran bredvid röret, vilket visas på skärmen eller visas i ikonen **Information** (i). Se till att locket/skakapparatställets kontakt sitter ordentligt i skåran. Ställ inte ett lock eller en skakapparatställkontakt intill en tom position på skakapparatstället.

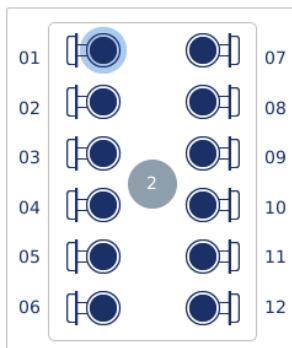


Ladda skakapparatstället med provrör som har lock



Locken på provrören måste placeras säkert i skåror på skakapparatställets kant

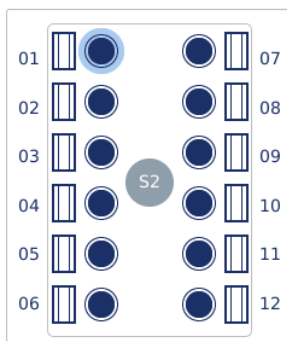


Ladda skakapparatstället med provrör som har skruvlock

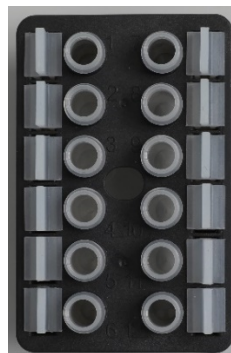

Skakapparatställkontakter måste placeras i skåror på skakapparatställets kant

- Tryck på Next (Nästa) för att starta körningen eller laddningen av centrifugen, beroende på valt protokoll.

WARNING 	Risk för personskada och materialskada Ladda provrören korrekt för att undvika plastkollisioner. Efter en plastkollision kan vassa plastpartiklar förekomma inuti centrifugen. Var försiktig när du hanterar föremål inuti centrifugen.
---	---

Viktigt: Använd inte 1,5 ml mikrocentrifugrör på skakapparaten. Dessa mikrocentrifugrör kan lead till att filterspetsar fastnar under provöverföringen. Om du det här provröret på skakapparaten kan pipetteringssystemet skadas och centrifugen krascha.

5.5 Starta en protokollkörning

Ett bekräftelsemeddelande visas när det sista steget på den sista inställningskärmen har slutförts.



- Stäng huven för att fortsätta.

OBS! Kontrollera att avfallslådan är stängd innan du startar körningen.

- Tryck på **Start** för att starta körningen. Skärmen visar den uppskattade körningstiden. Vid behov trycker du på **Back** (Bakåt) för att återgå till föregående inställningskärm.

Viktigt: När du väl har startat en körning på instrumentet och tryckt på knappen Start rekommenderar vi att du stannar några minuter framför instrumentet tills laddningskontrollen är klar. Detta gör att du kan lägga till saknade reagens eller fler tips i händelse av att instrumentet har detekterat saknade poster. Laddningskontrollen är klar när lampan på knappen Run Details (Körningsinformation) lyser blått.

Viktigt: Öppna inte instrumentets huv under en körning. Om huven öppnas under en körning kommer körningen att avbrytas. Om spetsadaptern har plockat upp en spets måste den tas bort manuellt.

Obs! För den allra första körningen är den uppskattade körningstiden inte tillgänglig.



Remaining time to finish run


10:54 min



User: Admin Admin


Skärmen för körningsstatus under en protokollkörning.

Under körningen kan du trycka på knappen **Run Details** (Körningsinformation) för att visa momenten. Om du vill gå tillbaka till föregående fönster trycker du på **Close** (Stäng).

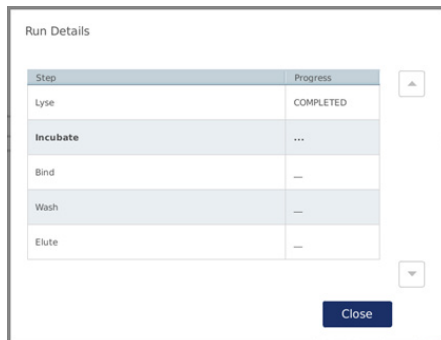

Skärmen Run details (Körningsinformation).

3. När protokollkörningen är klar visas utmatningspositionen och innehållet på höger sida av skärmen. För vissa protokoll beskrivs ytterligare behandling av prover till höger sida om skärmen. Ta bort eluaten/proverna från instrumentet direkt efter att körningen är klar och se till att du följer rätt procedurer för förvaring och hantering av proverna.

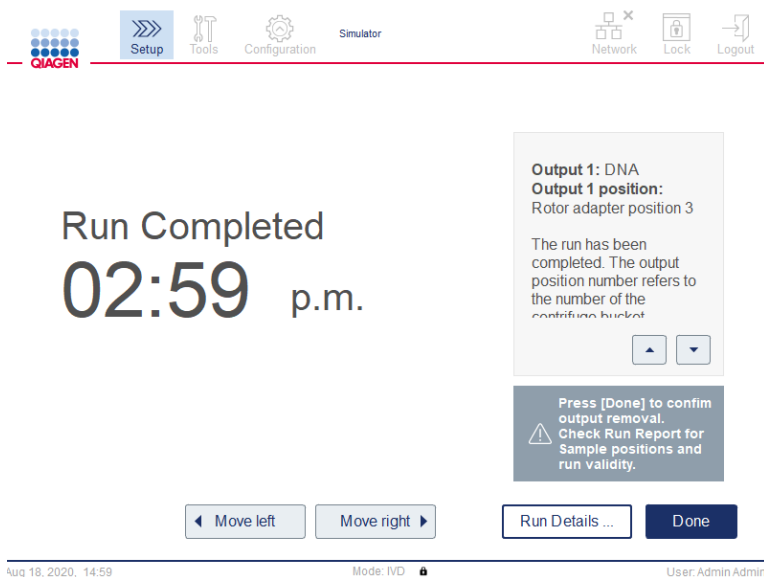

Skärmen Run completed (Körning slutförd).


4. Tryck på Done (Klar) för att generera rapportfilen. Körningsrapporten är en PDF-fil som innehåller följande information:

- protokollinformation (namn och version för den fullständiga tillämpningsprocessfilen)
- instrumentets serienummer
- programversion
- prov-ID och deras positioner
- tid, datum och användare vid körningens start
- tid och datum för körningens slut
- användaren bekräftar slutet på körningen
- kitets materialnummer, lotnummer och utgångsdatum
- fel- och varningsbeskrivningar
- körningens validitet (giltig eller ogiltig)
- körningens status (slutförd eller avbruten)
- programvaruläge (IVD eller Research (Forskning))
- körnings-ID
- elueringsvolym
- slutgiltig eluatposition

Viktigt: Vi rekommenderar att du utför regelbundet underhåll enligt beskrivningen i avsnitt 6.3, Regelbundet underhåll, innan du startar nästa körning.

5.6 Stoppa en protokollkörning

I nödfall kan en körning stoppas genom att trycka på knappen **Stop run** (Stoppa körning) på skärmen Körningsstatus (se avsnitt, 5.5, Starta en protokollkörning). Bekräfta att du vill stoppa körningen genom att trycka på Yes (Ja) i dialogrutan Stop run (Stoppa körning).

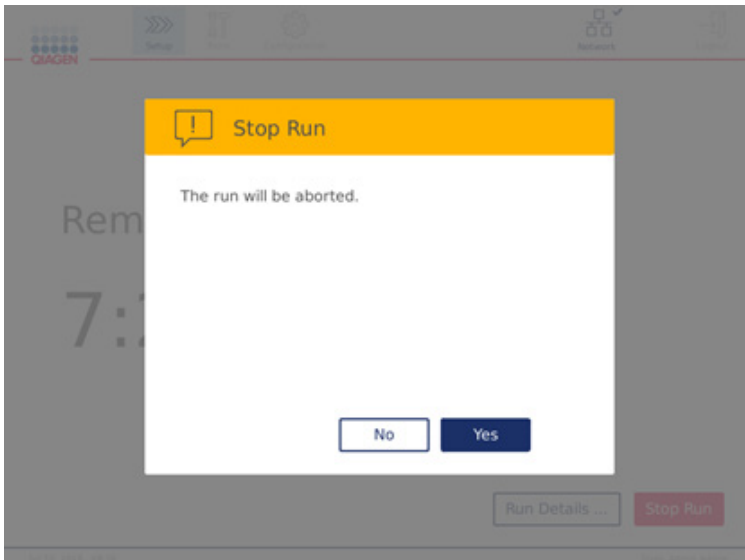


Skärmen Stop run (Stoppa körning).

Om en körning stoppas ska du utföra det dagliga underhållet enligt beskrivningen i avsnitt 6.4, Dagligt underhåll och se till att det inte förekommer några plastdelar i centrifugen innan nästa körning påbörjas. Dessutom bör du starta om systemet innan du startar nästa körning.

Obs! Om en protokollkörning stoppas kan körningen inte startas om. Du hittar det steg där protokollet stoppades under Run Details (Körningsinformation).


5.7 Spara körningsrapporter till USB-flashminnet

Kör rapporter sparas på instrumentet efter att varje körning har bekräftats genom att klicka på knappen Done (Klar). Antalet körningsrapporter på instrumentet är begränsat. Om det återstående utrymmet på den interna lagringenheten når 10 % av den totala kapaciteten uppmanas du att säkerhetskopiera rapportfilerna.

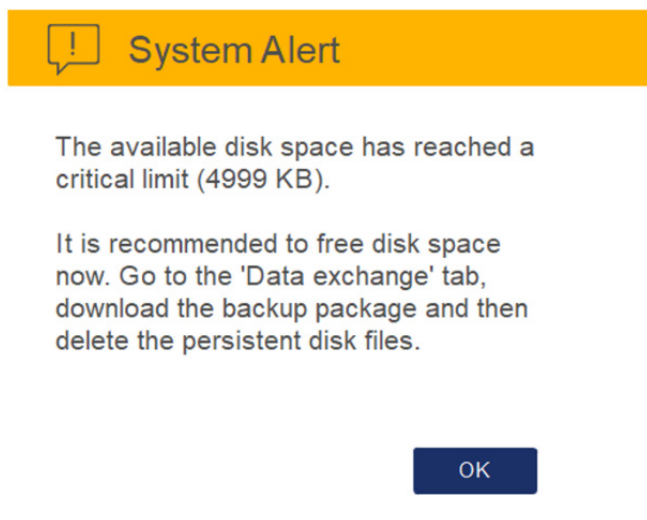

Varning om kritiskt återstående diskutrymme.


Du kan också kontrollera det lediga diskutrymmet regelbundet genom att klicka på ikonen Configuration (Konfiguration) till höger på fliken System.

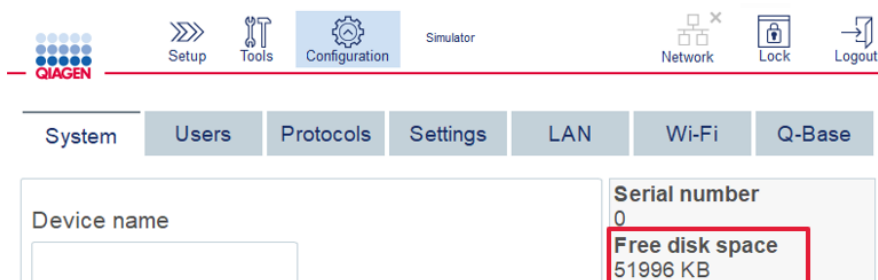

Information om ledigt diskutrymme.

Gör så här för att spara körningsrapporter till USB-flashminnet:

1. Tryck på ikonen Tools (Verktyg) (🔧) på menyraden.
2. Tryck på fliken Data exchange (Datautbyte). Antalet tillgängliga körningsrapporter visas på skärmen.

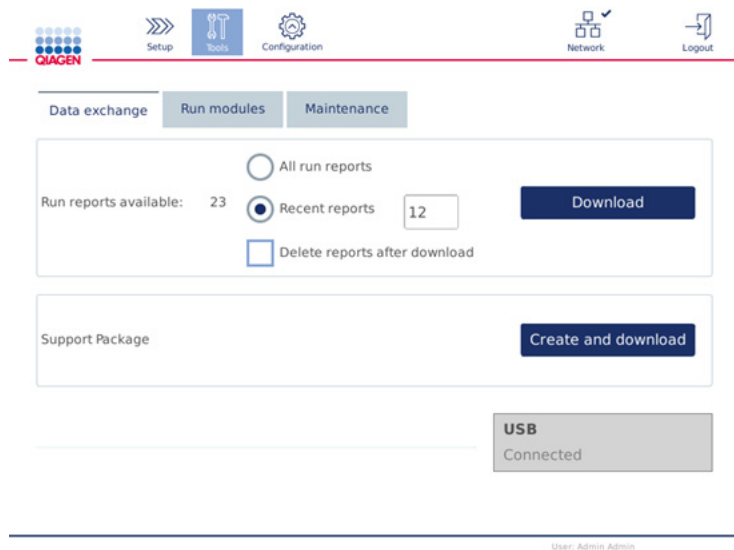

Skärmen Data exchange (Datautbyte).

3. Anslut USB-flashminnet som medföljer instrumentet om det inte redan är anslutet till en av USB-portarna till vänster om pekskärmen.
Viktigt: Använd endast USB-flashminnet som levererades med instrumentet och se till att USB-flashminnet har tillräckligt med utrymme innan du startar proceduren för att spara körningsrapporterna.
4. Om du vill spara alla tillgängliga körningsrapporter på USB-flashminnet väljer du All run reports (Alla körningsrapporter). Om du bara vill spara de senaste rapporterna väljer du Recent reports (Senaste rapporter). Om du vill ange antalet rapporter som ska sparas trycker du på fältet Recent reports (Senaste rapporter).
5. Om du vill ta bort rapporter från instrumentet efter hämtning trycker du på Delete reports after download (Ta bort rapporter efter hämtning).
Viktigt: De borttagna rapporterna kan inte återställas från instrumentet. Kontrollera att alla filer har överförts korrekt och fullständigt på USB-enheten och spara sedan filerna från USB-flashminnet på en säker plats.
6. Tryck på Download (Hämta) för att spara rapporterna på USB-flashminnet. Ett bekräftelsemeddelande om att rapporterna har sparats på USB-flashminnet visas. USB-flashminnet kan tas bort från instrumentet.

Viktigt: Ta inte bort USB-flashminnet medan filerna laddas ned. Vänta tills nedladdningen är klar.

7. På skärmen för datautbyte kan du också skapa ett hämtningspaket som innehåller ytterligare information såsom loggfiler. Du kan också kontrollera det återstående diskutrymmet.

Viktigt: Om du använder Delete Files (Ta bort filer) måste du lagra filerna från USB-flashminnet på en säker plats.

5.8 Ont om utrymme på flashminnet

Om flashminnet är fullt går det inte starta en körning. Systemet visar en varning och leder dig till nedladdningsskärmen. När du har hämtat filerna kontrollerar du om de har sparats på USB-flashminnet och lagrar sedan filerna på lämplig plats. När säkerhetskopieringen har bekräftats kan du ta bort filerna på QIAcube Connect MDx USB-flashminnet.

System alert - Disk space is full

There is not enough disk space available to continue instrument operation. Free disk space now!

Step 1: Backup disk files by pressing 'Download files'.

Step 1: Download data to USB stick	<input type="button" value="Download files"/>
Step 2: Check downloaded files on USB stick	<input type="button" value="Check done"/>
Step 3: Delete files on disk to free up disk space	<input type="button" value="Delete files"/>


USB
Connected


Systemvarning om fullt diskutrymme.


5.9 Oberoende drift av värmare/skakapparat

Värmaren/skakapparaten kan inte användas individuellt om QIAcube Connect MDx inte kör ett protokoll. Funktionerna för uppvärmning och skakning är inte sammankopplade och kan användas oberoende av varandra eller tillsammans.

Försök inte att flytta QIAcube Connect MDx medan den används.

WARNING 	Mycket varm yta Skakapparaten kan uppnå temperaturer på upp till 70 °C. Undvik att vidröra ytan när den är het. Ta bort proverna försiktigt efter körning.
---	--


1. Tryck på ikonen Tools (Verktyg) () på menyraden.
2. Tryck på fliken Run Modules (Körningsmoduler).
3. Tryck på fliken Heater Shaker (Värmare/skakapparat).

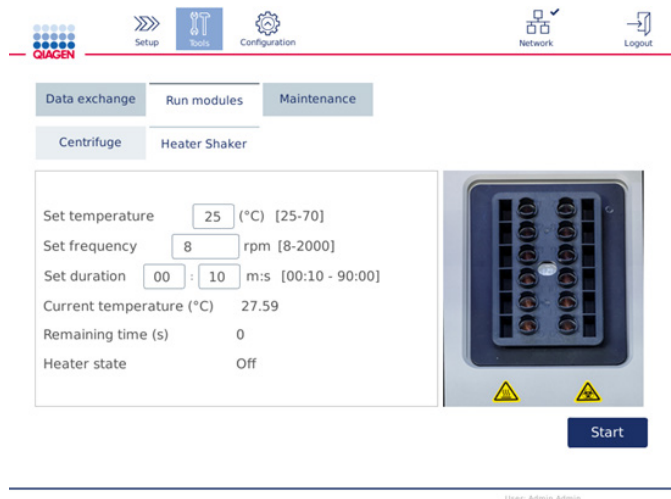

Skärmen för körning av värmare/skakapparat.

4. Tryck på lämpligt fält för att välja Frequency (Frekvens), Temperature (Temperatur) och Duration (Varaktighet) med hjälp av skärmtangentbordet.
 5. Ladda provrören i skakapparatstället som innehåller prover.
 6. Stäng huven för att starta en körning.
- Återstående tid, aktuell temperatur och status för värmaren visas på skärmen. Vänta tills körningen är klar.

Stoppa en körning genom att trycka på Stop (Stopp).

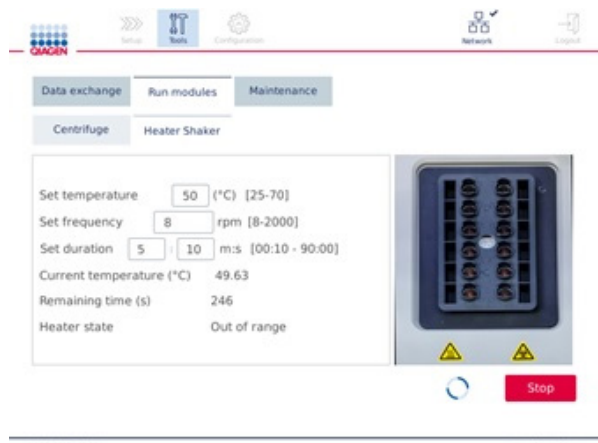



Skärmen för körning av värmare/skakapparat.


5.10 Oberoende körning av centrifug


Centrifugen kan användas individuellt om QIAcube Connect MDx inte kör ett protokoll.


Försök inte att flytta QIAcube Connect MDx medan den används.

<p>FÖRSIKTIGHET</p> 	<p>Skada på instrumentet</p> <p>QIAcube Connect MDx måste användas om centrifuglocket är trasigt eller om låslocket har skadats.</p> <p>Se till att inget löst material förekommer inuti centrifugen under drift.</p> <p>Kontrollera att rotorn är korrekt monterad och att alla behållare är korrekt monterade, oavsett hur många prover som ska bearbetas. Ladda endast rotorn enligt anvisningarna i programvaran.</p> <p>Använd endast rotorerna, bägare och förbrukningsartiklar som är avsedda att användas tillsammans med QIAcube Connect MDx. Skador som orsakas av användning av andra förbrukningsvaror gör din garanti ogiltig.</p> <p>Vi rekommenderar att centrifugrotorn och behållarna byts ut efter 20 000 cykler, vilket motsvarar 9 års användning med två körningar per dag i 220 dagar varje år. För mer information, kontakta QIAGEN teknisk service.</p>
--	--


VARNING 	Rörliga delar Om strömavbrott skadar systemet bör nätsladden avlägsnas. Vänta 10 minuter innan du försöker öppna centrifuglocket manuellt.
---	--

FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Efter ett strömavbrott ska du inte flytta z-modulen (robotarmen) manuellt framför instrumentet. Skador kan uppstå om QIAcube Connect MDx-huven är stängd och kolliderar med z-modulen.
--	--

FÖRSIKTIGHET 	Risk för överhettnig För att säkerställa korrekt ventilation måste det finnas ett minsta spelrum på 10 cm bakom och på båda sidorna om QIAcube Connect MDx. Öppningar som säkerställer ventilationen av QIAcube Connect MDx får inte täckas över.
--	--

VARNING 	Risk för personskada och materialskada Lyft centrifuglocket försiktigt. Locket är tungt och kan orsaka skador om det faller.
---	--

1. Tryck på ikonen **Tools** (Verktyg) (🔧) på menyraden.
2. Tryck på fliken **Run Modules** (Körningsmoduler).
3. Tryck på fliken **Centrifuge** (Centrifug).

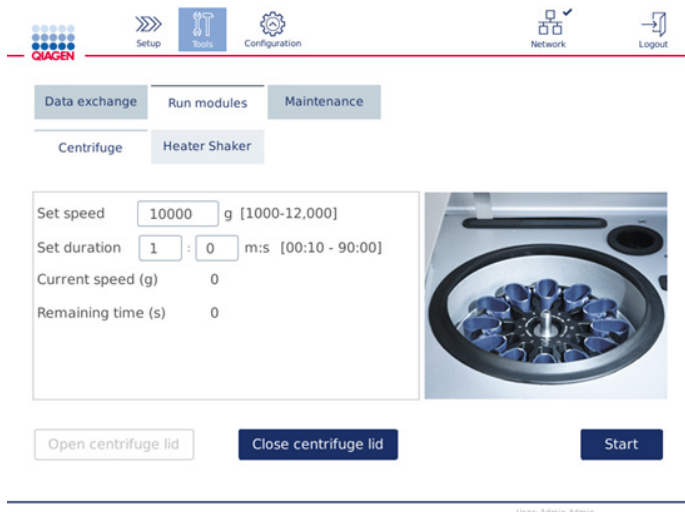

Driftsskärmen Centrifuge (Centrifug).

4. Tryck på lämpligt fält för att välja **Speed** (Hastighet) och **Duration** (Varaktighet) med hjälp av skärmtangentbordet.
5. Om centrifuglocket inte är öppet trycker du på **Open Centrifuge Lid** (Öppna centrifuglocket).
6. Ladda vid behov öppnade 1,5 ml mikrocentrifugelueringsrör och/eller QIAGEN-kolonner i rotoradapterna och placera locken i rätt fack på rotoradaptern.
7. Kontrollera att rören och kolonnerna är ordentligt inskjutna i rätt rotoradapterposition.
8. Se till att locken har skjutits hela vägen ner till botten av skårona på rotoradapterns sidor. Skär vid behov av locket.
9. Ställ rotoradapterna i centrifugen.

Viktigt: Om färre än 12 prover ska bearbetas, se till att du laddar rätt centrifugpositioner enligt beskrivningen i tabellen **Loading scheme** (Laddningsschema) nedan. Ett enda prov eller 11 prover kan inte laddas.
10. Stäng huven och tryck på **Start** för att starta centrifugeringen.

Obs! Knappen Close centrifuge lid (Stäng centrifuglocket) behövs inte för att starta en centrifugkörning eftersom locket stängs automatiskt. De behövs endast om du behöver förbereda QIAcube Connect MDx för frakt.

Laddningsschema:

Antal prover	Laddningsschema för centrifug
2	
3	
4	
5	
6	

Laddningsschema för centrifug.

Antal prover	Laddningsschema för centrifug
7	
8	
9	
10	
12	Ladda alla positioner

5.11 Hantera protokoll

Vanliga QIAGEN-standardprotokoll är installerade på QIAcube Connect MDx vid leverans. Det finns ständigt fler QIAGEN-standardprotokoll och dessa protokoll kan laddas ned utan kostnad. Se fliken Product Resources (Produktresurser) på <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx>. QIAGEN:s specialister på laboratorietillämpningar kan också anpassa dessa protokoll eller utveckla nya protokoll utifrån dina behov. Anpassade protokoll kan endast användas i programvarans Research-läge (Forskning). De är inte validerade och kan inte användas för diagnostiska ändamål. Det går också att ta bort protokoll från QIAcube Connect MDx. Protokoll kan endast hanteras av användare som tilldelats administratörsrollen.

Viktigt: Användaren kan endast radera alla protokoll samtidigt. Det går inte att ta bort enskilda protokoll.

5.11.1 Installera nya protokoll

Den här processen används för att installera nya protokoll och översätta protokoll från nya språkpaket – se avsnitt 4.5.1, Systemkonfiguration – eller för att installera om en protokollsäkerhetskopiering.

1. Hämta de nya protokollen till en dator som kör Microsoft® Windows® från den här URL:en:

Se fliken Product Resources (Produktresurser) på <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx>. Ett paket med en tidigare skapad protokollsäkerhetskopiering finns i mappen Download_Protocol eller på den använda USB-stickan.


Använd USB-flashminnet som levererades med QIAcube Connect MDx för att överföra protokollfilerna till instrumentet.

OBS! Kontrollsummebekräftelsen krävs för att tillse programvaruintegritet efter att webbhämtningen har slutförts och innan vidare hantering av programvaran. Detaljerad information om bekräftelse av programintegritet vid hämtning och filöverföring finns i dokumentet "QIAGEN software integrity verification process" (Integritetsverifieringsprocessen för QIAGEN-programvara), vilket finns att tillgå på QIAGENs webbplats.

Skapa en ny mapp på USB-flashminnet med namnet Protocol_Upload och kopiera de nya zip-filerna eller zipfilerna med protokoll från mappen Download_Protocol till den här katalogen. Extrahera inte filerna. Se till att använda rätt katalog, annars kommer QIAcube Connect MDx inte att hitta protokollen. Om du har hämtat ett språkpaket kommer rätt mappstruktur redan finns tillgänglig.

Obs! Byt inte namn på eller ändra protokollfilerna. Det leder till att de inte kan användas.

2. Anslut USB-flashminnet till QIAcube Connect MDx i en av USB-portarna till vänster om pekskärmen.
3. Välj ikonen **Configuration** (Konfiguration) (⚙️).
4. Tryck på fliken **Protocols** (Protokoll).

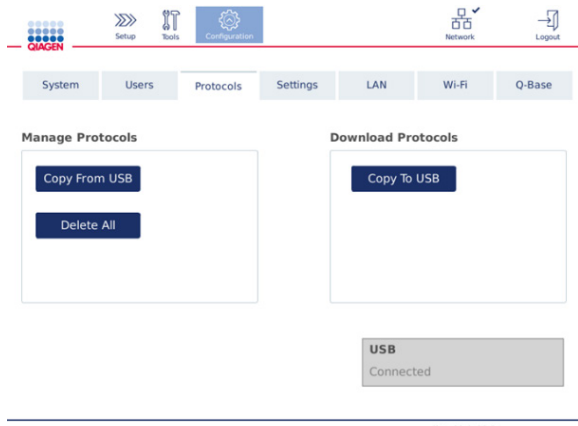

Skärmen för protokollkonfiguration.

5. Tryck på **Copy from USB** (Kopiera från USB).
6. Ett meddelande visas som visar hur många protokoll som finns på USB-flashminnet. Tryck på **Yes** (Ja) för att börja ladda upp.

Alla zip-filer med protokoll i mappen **Protocol_Upload** kommer att installeras.

OBS! Redan installerade protokoll skrivs inte över. Om du försöker installera om ett befintligt protokoll visas ett meddelande om att det inte gick att kopiera alla protokoll.

Obs! Om en ny protokollversion laddas upp kommer instrumentet automatiskt att använda den senaste versionen och visa den protokollversionen på körningskonfigurationsskärmen.


7. Vänta tills överföringen är klar. Ett meddelande visas när överföringen är klar.
8. Ta bort USB-flashminnet och stäng AV QIAcube Connect MDx.
9. Vänta några sekunder och slå sedan PÅ QIAcube Connect MDx. Logga in igen för att använda de nya protokollen.

För att överföra alla installerade protokoll till USB-flashminnet trycker du på **Copy to USB** (Kopiera till USB).

5.11.2 Radera alla protokoll

Viktigt: Innan du raderar protokoll ska du säkerhetskopiera protokollen på det USB-flashminne som medföljer instrumentet. Se avsnitt 5.11.3, Spara protokoll.

1. Välj ikonen **Configuration** (Konfiguration) (⚙️).
2. Tryck på fliken **Protocols** (Protokoll).

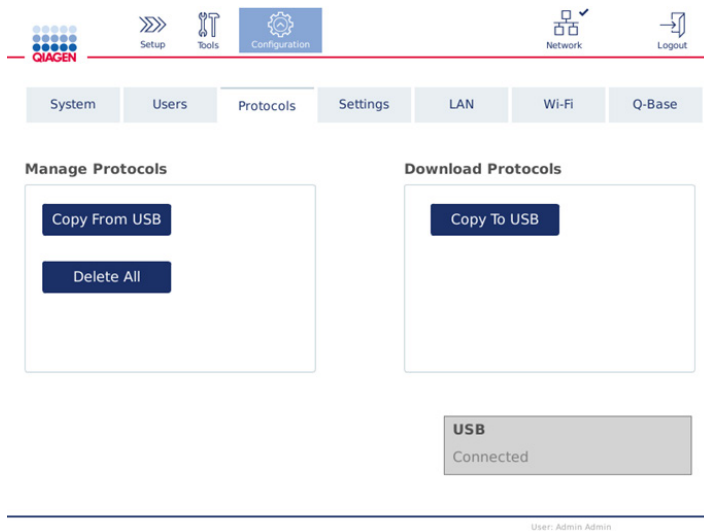

Konfigurationskärmen Protocols (Protokoll).

3. Tryck på **Delete All** (Ta bort alla) för att radera alla protokoll som är installerade på instrumentet. Det går inte att radera enskilda protokoll från QIACube Connect MDx.

Obs! När alla protokoll har raderats minskar den selektiva överföringen av protokoll alternativen under körningskonfigurationen. Detta sker genom att endast kopiera önskade protokoll från säkerhetskopian som du skapade till mappen Protocol_Upload på USB-flashminnet.

5.11.3 Spara protokoll

Protokoll kan laddas ned från instrumentet till ett USB-flashminne för att överföra dem till ett annat instrument eller spara dem före en programuppdatering. Använd USB-flashminnet från QIAGEN.

1. Anslut USB-flashminnet som levererades med instrumentet till QIACube Connect MDx i en av USB-portarna till vänster om pekskärmen.
2. Välj ikonen **Configuration** (Konfiguration) (⚙️).
3. Tryck på fliken Protocols (Protokoll).
4. I området Download Protocols (Hämta protokoll) trycker du på Copy to USB (Kopiera till USB).
Viktigt: Överföring av DSP-protokoll till ett biotekniskt instrument är inte . Detta resulterar i att IVD-statusen för arbetsflödet går förlorad.

5.12 Användarhantering

QIACube Connect MDx är utrustad med funktionen User Management (Användarhantering). Med den här funktionen kan du konfigurera flera användare med två olika roller: administratör och operatör. För varje operatör kan du ställa in vilket programvaruläge som ska användas IVD eller Research (Forskning). En operatör kan få tillgång till båda lägen eller endast till ett programläge. När du använder QIACube Connect MDx för första gången är en standardanvändare med namnet Admin redan förinstallerad och konfigurerad med båda rollerna tilldelade. Användarhanteringsfunktionen är endast tillgänglig för användare som tilldelats administratörsrollen.

5.12.1 Skapa en ny användare

1. Tryck på ikonen **Configuration** (Konfiguration) (⚙️) på menyraden.
2. Tryck på fliken **Users** (Användare).

De konfigurerade användarna visas i tabellen. Varje rad innehåller data för en användare.

User Id	First Name	Last Name	Role(s)	Edit
Admin	Admin	Admin	Administrator, Operator	

Lista över konfigurerade användare i användarhanteringen.

Obs! Med administratörsrollen måste du skapa minst en annan användare.

3. Tryck på **New** (Ny) för att lägga till en ny användare.

4. Ange respektive data för den nya användaren. Lämna rutan **Activate User** (Aktivera användare) markerad.

The screenshot shows a web form titled "Add User". At the top right, it displays "Last Login: 2020-05-25" and "Next change: 357 days". The form contains several input fields: "User Id", "First name", "Last name", "E-mail", "Enter password", and "Confirm password". To the right of the password fields are four checkboxes: "Administrator", "Operator", "Standard Mode", and "IVD Mode". Below these is a red text instruction: "Select Operator or Administrator Role". At the bottom left, there are two checkboxes: "Activate User" and "Change Password". At the bottom right, there are "Cancel" and "OK" buttons. A red rectangular box highlights the "Enter password" field.

Skärmen Add User (Lägg till användare).

Fälten **User ID** (Användar-ID), **First name** (Förnamn) och **Last name** (Efternamn) är obligatoriska. Dessa fält får innehålla upp till 30 bokstäver och siffror. Användar-ID måste vara unikt för varje användarprofil. Den måste innehålla minst en bokstav och får inte innehålla blanksteg. Användar-ID används för att logga in och skrivs ut på körningsrapporter. För- och efternamnet visas på pekskärmen för den inloggade användaren.

Fältet **Password** (Lösenord) är obligatoriskt och måste innehålla 8-40 bokstäver eller numeriska tecken. Ange samma lösenord i fältet **Confirm password** (Bekräfta lösenordet).

Välj användarroll: **Administrator** (Administratör) och/eller **Operator** (Operatör). Operatören får endast använda instrumentet medan administratören också har rätt att konfigurera systemet. En användare kan ha båda rollerna tilldelade samtidigt. Standardanvändaren **Admin** har båda användarrollerna tilldelade.

Viktigt: En nyskapad användare med administratörsrättigheter kan bara konfigurera systemet och kan inte starta en körning. Båda roller krävs för detta.

Add User Last Login: dd-mm-yyyy Next change: x days

User Id First name Last name

E-mail

Enter password

Confirm password

Administrator
 Operator
 Research Mode
 IVD Mode

Activate User Change Password

Val av användare på skärmen Add User (Lägg till användare).

Fältet **E-mail** (E-postadress) är valfritt. Systemet bekräftar inte om den angivna e-postadressen är giltig.

- Tryck på **OK** för att spara den nya användaren.

5.12.2 Ändra data för en befintlig användare

1. Tryck på ikonen **Configuration** (Konfiguration) (⚙️) på menyraden.
2. Tryck på fliken **Users** (Användare).

De konfigurerade användarna visas i tabellen. Varje rad innehåller data för en användare.

The screenshot shows the QIAGEN configuration interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, Lock, and Logout. Below this is a menu with tabs for System, Users, Protocols, Settings, LAN, Wi-Fi, and Q-Base. The 'Users' tab is selected, and within it, the 'User List' sub-tab is active. A table displays user information:

User Id	First Name	Last Name	Role(s)	Edit
Admin	Admin	Admin	Administrator, Operator	

Below the table, there is a checkbox labeled 'Show only activated user profiles' which is checked, and a 'New ...' button.

Lista över konfigurerade användare i användarhanteringen.

3. I användarprofilraden trycker du på ikonen **Edit** (Redigera) ().
4. En skärm visas som visar användarens aktuella information. Redigera informationen efter behov.

The 'Edit User' form displays the following information and fields:

- Anonymous user ID: User_1
- First name: Admin
- Last name: Admin
- E-mail: n/a
- Roles: Administrator, Operator, Research Mode, IVD Mode
- Enter password: [Redacted]
- Confirm password: [Redacted]
- Activate User: Change Password:
- Buttons: Cancel, OK

Additional information: Last Login: 2020-06-04 Next change: 49 days

Skärmen **Edit User** (Redigera användare).

Användarens lösenord visas inte. Om du trycker på lösenordsfältet raderas det befintliga lösenordet och ett nytt lösenord måste anges och bekräftas.

5. Bekräfta ändringarna genom att trycka på **OK**. Tryck på **Cancel** (Avbryt) för att stänga dialogrutan och radera ändringarna.
6. Administratören kan också ändra användarkonfigurationen på fliken Users (Användare). Administratören kan ställa in antalet inloggningsförsök, antalet dagar mellan lösenordsändring (OBS: Om 0 anges innebär det att lösenordet ska ändras varje dag), antalet minuter före automatisk inloggning.

Obs! Inmatningsintervallet för att definiera antalet inloggningsförsök är 0 till 10. Vi rekommenderar dock starkt att du undviker att ställa in antalet inloggningsförsök på 0. Detta kan skapa en risk för att systemet blir låst vid ett fel under lösenordsinmatningen och kan inte låsas upp av någon användare. Detta problem kräver att hjälp från en servicetekniker.

Genom att ställa in antalet tillåtna inloggningsförsök på 2 eller högre förminskas denna risk.



System	Users	Protocols	Settings
User List	User Config		
Settings for all users			
10	[-]	Number of login attempts before user is locked	
60	Days	Number of days between password changes	
10	Minutes	Number of minutes before user logout (0 = no forced logout)	

Skärmen för användarkonfiguration.


5.12.3 Radera eller tillfälligt avaktivera en användare

1. För att ta bort en användare trycker du på ikonen Delete (Ta bort) (✖) i användarprofilraden. Det går inte att ta bort den för närvarande inloggade administratören.
2. För att tillfälligt avaktivera en användare trycker du på ikonen Edit (Redigera) (✎) i användarprofilraden. Avmarkera rutan Activate User (Aktivera användare). Det går inte att avaktivera den för närvarande inloggade administratören.
3. För att aktivera om en användare trycker du på ikonen Edit (Redigera) (✎) i användarprofilraden. Markera rutan Activate User (Aktivera användare).

Obs! Om en användare försöker logga in med fel lösenord inaktiveras användarprofilen automatiskt efter det angivna antalet misslyckade inloggningsförsök.

Inaktiverade användare kan visas i användarlistan genom att avmarkera rutan **Show only activated user profiles** (Visa endast aktiverade användarprofiler). Om rutan är avmarkerad visas alla användarprofiler.

Om den förinstallerade administratörsanvändaren **Admin** har fler än det inställda antalet misslyckade inloggningsförsök, kan lösenordet återställas. Gör detta genom att trycka på **Reset admin user** (Återställ administratör). Logga sedan in med en annan administratörsanvändarroll som definierats tidigare. Om ingen alternativ användare med administratörsroll är tillgänglig ska du kontakta QIAGEN teknisk service.

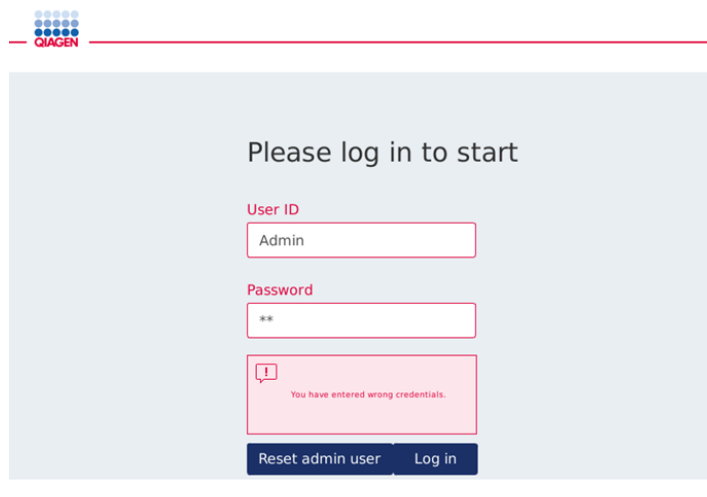

Inloggningskärm efter misslyckad inloggning som Admin.

5.12.4 Byt lösenord

Användare med administratörsroll får ändra lösenordet för alla användare genom att redigera användarprofilen. Se avsnitt 5.12.2 Ändra data för en befintlig användare för mer information. Lösenord visas aldrig i den här processen, så administratören kan inte visa lösenordet.

Användare med operatörsrollen kan ändra sitt eget lösenord. Följ nedanstående anvisningar:

1. Tryck på ikonen Configuration (Konfiguration) (⚙️) på menyraden.
2. För användare med rollen Operator (Operatör) är fliken Password (Lösenord) automatiskt aktiv.


The screenshot shows the QIAGEN configuration interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, and Logout. Below this is a menu bar with tabs for System, Password, Protocols, Settings, LAN, Wi-Fi, and Q-Base. The Password tab is selected. The main area contains three text input fields labeled 'Old password', 'New password', and 'Confirm new password'. At the bottom of the form are two buttons: 'OK' and 'Cancel'. A small text label 'User: John Doe' is visible at the bottom right of the interface.

Skärmen för att ändra lösenord.


3. Ange lösenordet i fältet Old password (Gammalt lösenord). Tryck på fältet för att öppna tangentbordet.
4. Ange ett nytt lösenord i fältet New password (Nytt lösenord) och ange det nya lösenordet igen i fältet Confirm new password (Bekräfta nytt lösenord).

OBS! Det nya lösenordet måste skilja sig från de föregående tre lösenorden.

Tryck på **OK** för att spara det nya lösenordet. Tryck på **Cancel** (Avbryt) för att ta bort eventuella ändringar och för att behålla det gamla lösenordet.

För att återgå till skärmen Setup (Inställningar) trycker du på ikonen **Setup** (inställningar) ().

6 Rengöring och underhåll

VARNING/ FÖRSIKTIGHET 	Risk för personskada och materialskada Utför endast underhåll som specifikt beskrivs i denna användarhandbok.
---	---

Viktigt: Följande underhållsprocedurer måste utföras för att säkerställa att QIAcube Connect MDx fungerar tillförlitligt:

- Regelbundet underhåll: efter varje protokollkörning
- Dagligt underhåll: efter dagens sista protokollkörning
- Månadsunderhåll: varje månad
- Periodiskt underhåll: vid behov, minst var 6:e månad


Alternativt kan dessa procedurer utföras för att kontrollera och säkerställa att QIAcube Connect MDx fungerar tillförlitligt:

- UV-körning: minskar patogen- och nukleinsyrekontaminering
- Täthetstest: säkerställer spetadapters tätt (t.ex. efter byte av O-ring)

Programmet ger steg-för-steg-vägledning under **Tools/Maintenance** (Verktyg/underhåll) för de underhållsprocedurer som anges ovan, med undantag för regelbundet underhåll.

Följ dessa procedurer för att säkerställa att QIAcube Connect MDx är fri från damm och vätskespill.

Välj rengöringsmedel enligt syftet med rengöringsproceduren, det provmaterial som används och nedströmsanalysen.

VARNING 	Risk för brand eller explosion När du använder etanol- eller etanolbaserade vätskor på QIAcube Connect MDx ska du hantera sådana vätskor försiktigt och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Om vätska har spillts ut, torka av den och låt QIAcube Connect MDx-huven stå öppen så att brandfarliga ångor kan skingras.
---	---

Innan du använder någon annan rengörings- eller dekontamineringsmetod än de som rekommenderas av tillverkaren ska du kontrollera med tillverkaren att den föreslagna metoden inte skadar utrustningen.

6.1 Rengöringsmedel

Följande desinfektionsmedel och rengöringsmedel rekommenderas för rengöring av QIAcube Connect MDx.

Obs! Om du vill använda andra desinfektionsmedel än vad som rekommenderas måste du säkerställa att deras sammansättningar liknar dem som beskrivs nedan.

Allmän rengöring av QIAcube Connect MDx:

- Milda rengöringsmedel (t.ex. Mikrozyd® AF sensitive)
- 70 % etanol (endast för rengöring av arbetsbordet, inte för rengöring av QIAcube Connect MDx-huven)

6.2 Dekontaminera ytorna på QIAcube Connect MDx

Etanolbaserade desinfektionsmedel kan användas för desinfektion av ytor, t.ex. arbetsbord eller inuti centrifugen: till exempel 25 g etanol och 35 g 1-propanol per 100 g vätska eller Mikrozyd-vätska (Schülke & Mayr GmbH, till exempel kat.nr 109203 eller 109160).

Desinfektionsmedel baserade på glyoxal- och kvaternärt ammoniumsalt kan användas för nedsänkning av arbetsbordsartiklar, centrifugrotorn och avfallsådan: till exempel 10 g glyoxal, 12 g lauryldimetylbensylammoniumklorid, 12 g myristyldimetylbensylammoniumklorid och 5–15 % icke-joniskt rengöringsmedel per 100 g vätska, Lysetol® AF (Gigasept® Instru AF i Europa, kat.nr 107410, eller DECON-QUAT® 100, Veltek Associates, Inc., kat.nr DQ100-06-167-01, i USA).

Allmänna anvisningar

- Använd inte sprayflaskor med för att spreja rengörings- eller desinficeringsmedel på ytorna på QIAcube Connect MDx-arbetsstationen. Sprayflaskor bör endast användas för artiklar som avlägsnats från arbetsstationen.
- Om lösningsmedel, eller salta, sura eller basiska lösningar spills ut på QIAcube Connect MDx eller om QIAGEN-buffertar stänker på huven ska du omedelbart torka bort den spillda vätskan.
- Följ tillverkarens säkerhetsanvisningar för hantering av rengöringsmedel.


- Följ tillverkarens anvisningar för blötläggningstid och koncentration av rengöringsmedel. Nedsänkning längre än den rekommenderade blötläggningstiden kan skada instrumentet.
- Använd inte alkohol eller alkoholbaserade desinficeringsmedel för att rengöra QIAcube Connect MDx-huven. Om QIAcube Connect MDx-huven utsätts för alkohol eller alkoholbaserade desinficeringsmedel kan sprickor uppstå på ytan. Rengör endast QIAcube Connect MDx-huven med destillerat vatten eller ett mildt rengöringsmedel.
- Sänk inte ner buffertflaskor i 70 % alkohol. Den blå ringen är inte etanolskyddad.
- Se till att ingen vätska rinner nerför pekskärmen. Vätska kan dras genom dammskyddet av kapillärkraften och skada displayen. För att rengöra pekskärmen, fukta en mjuk luddfri trasa med vatten, etanol eller ett mildt rengöringsmedel och torka försiktigt av skärmen. Torrtorka med en pappershandduk.


Borttagning av RNase-kontamination


RNaseZap® RNase Decontamination Solution (Ambion, Inc., kat.nr AM9780) kan användas för rengöring av ytor och nedsänkning av arbetsbordsföremål, centrifugrotor och avfallslåda. RNaseZap kan också användas för att utföra dekontaminering genom att spreja respektive arbetsbordsföremål.


Borttagning av kontaminering med nukleinsyror


DNA-ExitusPlus™ (AppliChem, kat.nr A7089,0100) kan användas för rengöring av ytor och nedsänkbara arbetsbordsföremål, centrifugrotorn och avfallslådan. DNA-ExitusPlus kan också användas till dekontaminering genom att spreja respektive arbetsbordsföremål (använd nukleinsyredekontamineringsmedlet enligt tillverkarens anvisningar). Även om leverantören av DNA-ExitusPlus endast rekommenderar att du rengör objekt när det finns oönskade torkade rester av reagenset, rekommenderar vi att du torkar av dem med en våt, luddfri trasa och sterilt vatten efter eget gottfinnande. Detta är särskilt viktigt för rotorn och swing-out-bägarna så att bägarna inte fastnar under centrifugering och positionering.


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Använd inte klorin, lösningsmedel eller reagenser som innehåller syror, baser eller polermedel för att rengöra QIAcube Connect MDx.
--	---


FÖRSIKTIGHET 	Skada på instrumentet Använd inte sprayflaskor med alkohol eller desinfektionsmedel för att rengöra ytorna på QIAcube Connect MDx. Sprayflaskor bör endast användas för att rengöra artiklar som avlägsnats från arbetsborden.
--	--


<p>VARNING</p> 	<p>Brandfara</p> <p>Låt inte rengöringsvätska eller saneringsmedel komma i kontakt med QIAcube Connect MDx elektriska delar.</p>
---	---


<p>VARNING</p> 	<p>Risk för elektrisk stöt</p> <p>Öppna inte några paneler på QIAcube Connect MDx.</p> <p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Utför endast underhåll som specifikt beskrivs i denna användarhandbok.</p>
---	---


<p>VARNING</p> 	<p>Farliga kemiska och smittsamma ämnen</p> <p>Detta avfall kan innehålla giftigt material och måste avyttras på lämpligt sätt. Se dina lokala säkerhetsföreskrifter för lämpliga avyttringsprocedurer.</p>
---	--

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för personskada och materialskada</p> <p>Felaktig användning av QIAcube Connect MDx kan orsaka personskador eller skada på instrumentet. QIAcube Connect MDx får endast användas av kvalificerad personal, med lämplig utbildning.</p> <p>Service på QIAcube Connect MDx får endast utföras av QIAGENS fältservicespecialister.</p>
---	--

<p>VARNING</p> 	<p>Risk för explosion</p> <p>När du rengör QIAcube Connect MDx med alkoholbaserade desinficeringsmedel ska du lämna QIAcube Connect MDx-huven öppen för att låta brandfarliga ångor avdunsta.</p> <p>Rengör endast QIAcube Connect MDx när arbetsbordets komponenter har svalnat.</p>
---	--


VARNING 	Risk för brand eller explosion <p>När du använder etanol- eller etanolbaserade vätskor på QIAcube Connect MDx ska du hantera sådana vätskor försiktigt och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Om vätska har spillts ut, torka av den och låt QIAcube Connect MDx-huven stå öppen så att brandfarliga ångor kan skingras.</p>
---	--

VARNING 	Giftiga gaser <p>Använd inte blekmedel för att rengöra eller desinficera QIAcube Connect MDx. Blekmedel i kontakt med salter från buffertarna kan producera giftiga gaser.</p>
---	--

VARNING 	Giftiga gaser <p>Använd inte blekmedel för att desinficera laboratorietrustning. Blekmedel i kontakt med salter från de buffertar som används kan producera giftiga gaser.</p>
---	--

6.3 Regelbundet underhåll

När du har kört ett protokoll ska du utföra proceduren för regelbundet underhåll enligt beskrivningen nedan.

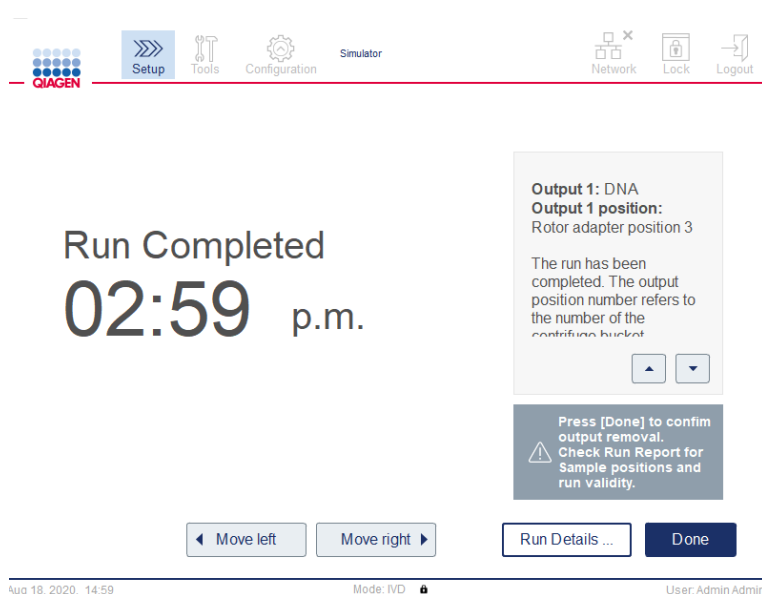

Skärmen Run completed (Körning slutförd).

1. Öppna avfallslådan och töm spetsar och kolonner (vid behov) i en lämplig behållare för laboratorieavfall.
2. Ta bort använda engångsartiklar och oönskade prover och reagenser från arbetsbordet. Kassera dem i enlighet med lokala säkerhetsprocedurer.

Obs! Om robotarmen hindrar dig från att nå en viss position ska du inte flytta robotarmen manuellt. Gör i stället så här:

Tryck på **Move left** (Flytta åt vänster) eller **Move right** (Flytta åt höger) på skärmen Run Completed screen (Körning slutförd) efter behov. Robotarmen börjar röra sig. Huven kan förbli öppen under denna rörelse.

Stå alltid på avstånd från instrumentet medan robotarmen rör sig. Vänta tills robotarmen har slutat röra sig.


3. Sätt tillbaka locken på reagensflaskorna och förslut noga. Förvara flaskorna enligt anvisningarna i kithandboken.

Du kan nu köra ett annat protokoll eller stänga av QIAcube Connect MDx.

6.4 Dagligt underhåll

Utför den dagliga underhållsproceduren efter det sista protokollet för dagen körts. Programvaran leder dig genom varje steg som ska utföras:

1. Tryck på ikonen **Tools** (Verktyg) (🔧) på menyraden för att starta det dagliga underhållet.
2. Tryck därefter på fliken **Maintenance** (Underhåll) och välj underfliken Daily (Varje dag). Skärmen visar **Last Executed** (Senaste) och datumet för **Next Due** (Nästa) dagliga underhåll.

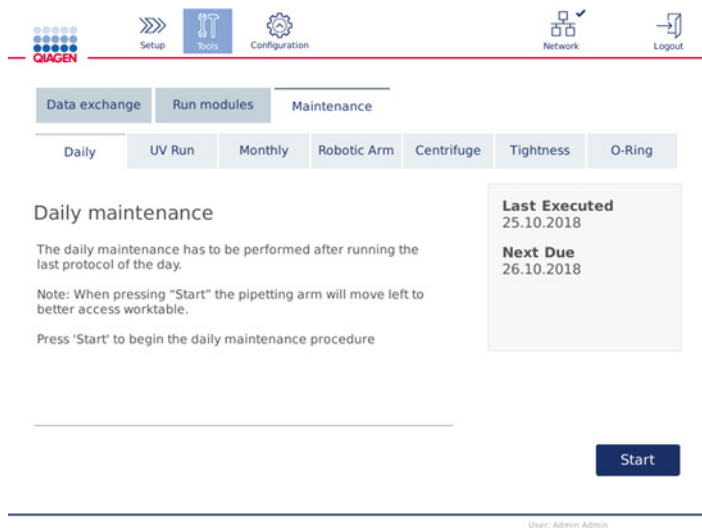


Skärmen **Daily maintenance (Dagligt underhåll)**.


3. Tryck på **Start**. Följ anvisningarna som visas på skärmen. Mer information finns i följande steg.
Robotarmen rör sig automatiskt långsamt åt vänster – även om huven är öppen – så att man kan komma åt laddningspositionerna. Stå alltid på avstånd från instrumentet medan robotarmen rör sig. Vänta tills robotarmen har slutfört sina rörelser innan du börjar ladda ur.
4. Ta bort använda engångsartiklar, adapttrar och oönskade prover och reagenser från arbetsbordet. Vid behov, kassera dem i enlighet med lokala säkerhetsprocedurer.
5. Stäng buffertflaskorna ordentligt och förvara dem enligt anvisningarna i respektive handbok. Vi rekommenderar att buffertflaskorna endast återanvänds tills kitet har förbrukats. Så snart en ny QIAGEN-sats har öppnats ska nya buffertflaskor användas.
6. Tryck på **Done** (Klar) för att bekräfta att stegen har slutförts.
7. Töm avfallslådan och kontrollera att inlägget är rent. Rengör vid behov inlägget i avfallslådan med alkoholbaserade desinfektionsservetter eller genom att blötlägga med något av de rengöringsmedel som anges ovan och skölj sedan med destillerat vatten.
8. Torka av och rengör arbetsbordet med alkoholbaserade desinficeringservetter. Inkubera efter behov, torka noggrant med destillerat vatten och torka av med luddfria pappershanddukar.
Obs! Använd inte alkohol eller alkoholbaserade desinficeringsmedel för att rengöra huven.
9. Tryck på endast **Done** (Klar) när ovanstående steg har slutförts. Datumet för det senaste dagliga underhållet uppdateras automatiskt.
Robotarmen återgår automatiskt till sin startposition (ovanför spetsställets position 3).

6.5 Månadsunderhåll

Utför proceduren för dagligt underhåll (se avsnitt 6.4, Dagligt underhåll) innan du utför proceduren för månadsunderhåll. Välj ett lämpligt rengöringsmedel för provmaterialet och nedströmsanalysen (se avsnitt 6.1, Rengöringsmedel).

1. Tryck på ikonen **Tools** (Verktyg) () på menyraden för att starta månadsunderhållet.

- Tryck därefter på fliken **Maintenance** (Underhåll) och välj underfliken Monthly (Månatligt). Skärmen visar **Last executed** (Senaste) och datumet för **Next Due** (Nästa) månadsunderhåll.

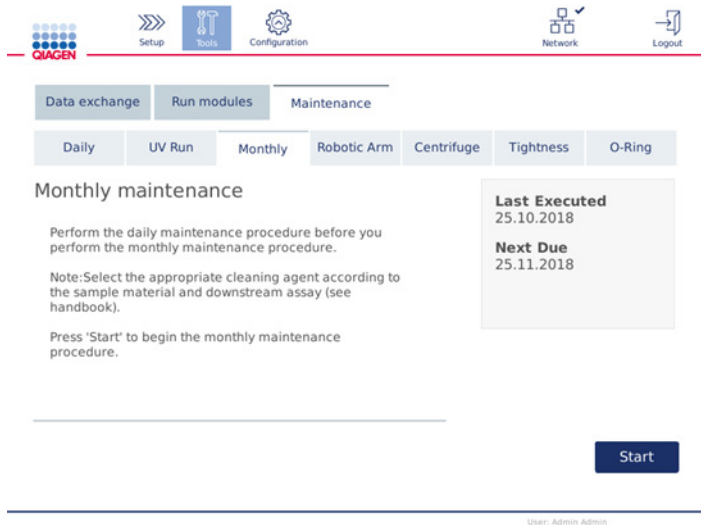

Skärmen **Monthly maintenance** (Månatligt underhåll).

- Stäng huven.
- Tryck på **Start**. Följ anvisningarna som visas på skärmen. Mer information finns i följande steg. Robotarmen flyttas till rengöringsläget.
- Rengör pekskärmen med alkoholbaserade desinficeringsserverter och torrorka sedan.
Viktigt: Se till att ingen vätska rinner nerför pekskärmen. Vätska kan dras genom dammskyddet av kapillärkraften och skada displayen. För att rengöra pekskärmen, fukta en mjuk luddfri trasa med 70 % etanol eller ett mildt desinfektionsmedel och torka försiktigt av skärmen. Torka av skärmen med destillerat vatten, beroende på vilket desinficeringsmedel som används. Torrorka med en pappershandduk.
- Rengör huvens utsida med en mjuk luddfri trasa som är fuktad med vatten eller ett mildt rengöringsmedel.
- Vid behov, inkubera skakapparatadaptorn (grå), skakapparatbrickan (metalladaptorn), buffertflaskstället och avfallslådan (om det inte sker i det dagliga underhållet) genom nedsänkning. Skölj noggrant med destillerat vatten och torka av med luddfria pappershanddukar. Kontakter till skakapparatställ används ska de behandlas på samma sätt.
- Tryck på endast **Done** (Klar) när ovanstående steg har slutförts. Datumet för det senaste månadsunderhållet uppdateras automatiskt.
Viktigt: Inspektera avfallslådan under underhållet. Kontakta QIAGEN teknisk service om du påträffar några trasiga delar.

- Överför körningsrapporterna från instrumentet till USB-flashminnet och ta bort körningsrapporterna från instrumentet. Mer information finns i avsnitt 5.7, Spara körningsrapporter till USB-flashminnet.

6.6 Periodiskt underhåll

Det periodiska underhållet består i att rengöra robotarmens moduler och centrifugen. Det bör utföras vid behov, men minst var sjätte månad.


Välj ett lämpligt rengöringsmedel för provmaterialet och nedströmsanalysen (se avsnitt 6.1, Rengöringsmedel).

6.6.1 Rengöra robotarmmodulerna

Rengöring av robotarmmodulerna måste utföras med jämna mellanrum eller kan utföras vid behov. Robotarmmodulerna måste till exempel rengöras efter vätskespill på grund av en krasch.

Obs! Utför den månatliga underhållsproceduren innan du utför rengöringsförfarandet för robotarmmodulen.

- Tryck på ikonen **Tools** (Verktyg) på menyraden för att påbörja rengöringen av robotarmmodulerna. Tryck på fliken Maintenance (Underhåll) och välj underfliken Robotic arm (Robotarm). Skärmen visar robotarmmodulernas **Last executed** (Senaste) underhållsdatum.

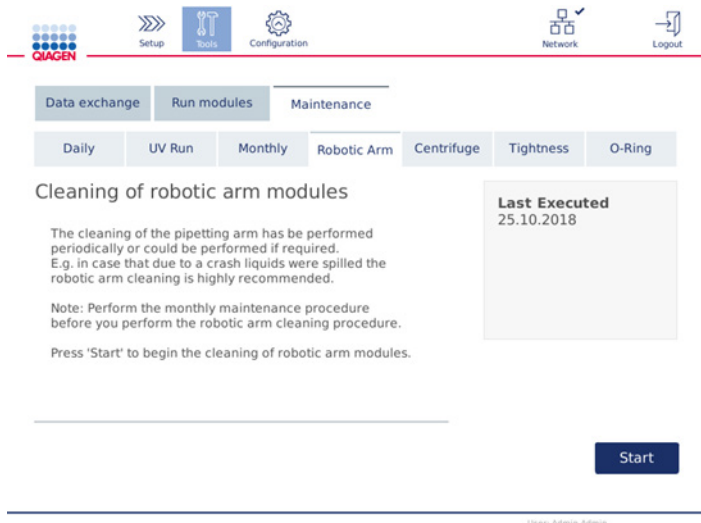

Skärmen för underhåll av robotarmen.

2. Tryck på **Start** för att påbörja rengöringen av robotarmmodulerna. Följ anvisningarna som visas på skärmen. Mer information finns i följande steg.
3. Se till att begagnad laborieutrustning, adaptrar och reagenser tas bort från arbetsbordet. Stäng huven.
4. Tryck på **Next** (Nästa) för att flytta till rengöringsläget.
5. Ta bort avfallslådan och öppna huven.
6. Öppna avfallslådan. Fukta en mjuk luddfri trasa med vatten och rengör försiktigt den optiska sensorn, spetsadaptorn, griparmen, rotoradaptorns stabiliseringsstav och kolonnlockhållaren. Torka av dessa föremål enligt anvisningarna på instrumentets pekskärm.
7. Stäng huven och tryck på **Done** (Klar) för att slutföra rengöringen av robotarmen. Datumet för den senaste rengöringen av robotarmen uppdateras automatiskt.

6.6.2 Rengöra centrifugen

Rengöring av centrifugarmen måste utföras med jämna mellanrum eller kan utföras vid behov. Centrifugen måste till exempel rengöras vid plastkrasch eller vätskespill på grund av en krasch.

VARNING




Risk för personskada och materialskada

Ladda provrören korrekt för att undvika plastkollisioner. Efter en plastkollision kan vassa plastpartiklar förekomma inuti centrifugen. Var försiktig när du hanterar föremål inuti centrifugen.

Obs! Utför månadsunderhållsproceduren innan du utför rengöringsförfarandet för centrifugen.

1. För att börja rengöra centrifugen trycker du på ikonen **Tools** (Verktyg) och på underfliken **Centrifuge** (Centrifug) under fliken **Maintenance** (Underhåll). Skärmen visar datumet för **Last Executed** (Senaste) underhållet av centrifugen.

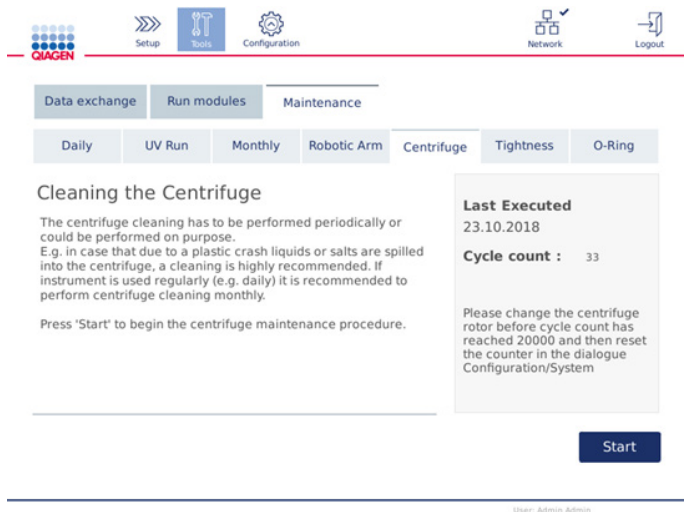

Skärmen för underhåll av Centrifuge (Centrifug).

2. Tryck på **Start** för att starta centrifugrengöringen. Följ anvisningarna som visas på skärmen. Mer information finns i följande steg.
3. Centrifuglocket måste vara öppet för att komma åt centrifugens insida. Locket ska endast öppnas efter att centrifugen har stannat helt. Om locket inte öppnas automatiskt stänger du hunden och trycker på knappen **Open Centrifuge Lid** (Öppna centrifuglocket).
4. Stäng av instrumentet och utför rengöring enligt anvisningarna i följande avsnitt (nedan):
 - Rengöra rotorn och bägarna
 - Rengöra centrifugen
 - Underhåll av rotormuttern
 - Installation av centrifugrotorn och bägare
5. När rengöringen är klar aktiverar du instrumentet och loggar in. Tryck på ikonen Tools (Verktyg) och sedan på fliken Maintenance (Underhåll). Välj underfliken Centrifuge (Centrifug).
6. Tryck på **Start** igen och tryck sedan på **Done** (Klar) för att bekräfta rengöringen. Datumet för den senaste rengöringen av centrifugen uppdateras automatiskt.

Rengöra rotorn och bägarna

Obs! Kontrollera att instrumentet är av under rengöringen.

1. Kontrollera att QIACube Connect MDx är avstängd.
2. Ta bort alla engångsrotoradapttrar, inklusive provrör och kolonner, från bägarna.

3. Avlägsna bägarna från centrifugen. Lossa rotornuttern ovanpå rotorn med hjälp av rotornyckeln och lyft försiktigt av rotorn från rotoraxeln.




Rotornyckel.

4. Sänk ner rotorn, bägarna och rotornuttern i rengöringsmedlet. Inkubera på lämpligt sätt.
5. Skölj noggrant med destillerat vatten. Använd en borste (t.ex. en tandborste eller en provrörsborste) för att rengöra alla delar som är svåra att komma åt, t.ex. bägarfästet och rotorhuvudet. Torka ytorna med en mjuk luddfri trasa. Om möjligt torka bägarna och rotorn med tryckluft.



Borsta en bägare.

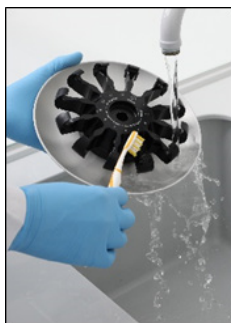

Borsta rotorn.


Viktigt: Se till att pappershanddukarna och borsten är luddfria.

Viktigt: Se till att allt kvarvarande salt avlägsnas.

Viktigt: Se till att alla spår av rengöringsmedlet avlägsnas från centrifugbägarna. Kvarvarande rengöringsmedel kan få bägarna att fastna.

6. Kontrollera noga att rotorn inte är skadad. Använd inte rotorn om den är skadad eller visar tecken på slitage eller rost. Kontakta QIAGEN teknisk service.
7. Applicera några droppar mineralolja (Anti-Corrosion Oil (rotor), kat.nr 9018543) på en mjuk, luddfri trasa och torka av bägarfästet och rotorhaken. En tunn, osynlig oljehinna bör täcka bägarfästet och rotorhaken men det bör inte synas några droppar eller utstryk.
8. Stryk olja på rotorhaken och på bägarfästet.

Viktigt: Se till att rotorn och alla bägare är helt torra innan du stryker olja på rotorbägarna.

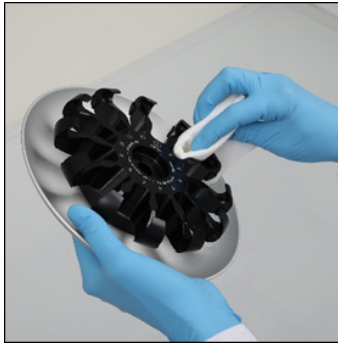

Rotorhuvud.



Bägarfästen.

Rengöra centrifugen

Obs! Kontrollera att instrumentet är av under rengöringen.


1. Fukta en mjuk luddfria trasa med rengöringsmedel och rengör insidan av centrifugen och centrifugpackningen. Inkubera på lämpligt sätt.
2. Rengör insidan av centrifugen och packningen med destillerat vatten och torka med luddfria pappershanddukar. Om möjligt, använd en dammsugare.
Viktigt: Se till att packningarna förblir på rätt plats.
3. Rengör centrifuglocket med en mjuk luddfri trasa som fuktats med rengöringsmedel. Inkubera vid behov, rengör med vatten och torka av med en pappershandduk.
4. Kontrollera om centrifugpackningen 'r skadad. Om packningen är skadad eller visar tecken på slitage, kontakta QIAGEN teknisk service.

Underhåll av rotormuttern

Obs! Kontrollera att instrumentet är av under rengöringen.


Obs! Utför alltid rengöringsförfarandet efter nedmontering av rotorn och minst två gånger om året.

Efter rengöring av rotorgängan kan du applicera några droppar mineralolja (Anti-Corrosion Oil (rotor), kat.nr 9018543) på en luddfri trasa och torka av gängan. En tunn, osynlig oljehinna bör täcka rotorgängan men det bör inte synas några droppar eller utstryck.

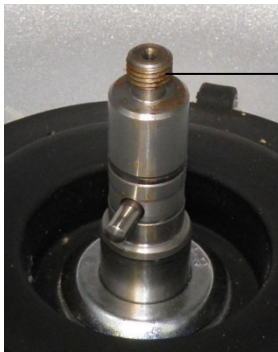

Rotorgänga

Rotorgänga.

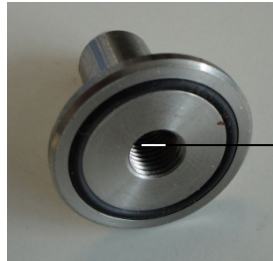

Inre
gänga

Inre gänga i rotormuttern.

Efter rengöring av rotormutterns inre gänga ska du torka av gängan med rostskyddsolja enligt beskrivningen ovan.

Installation av centrifugrotorn och bägare

Obs! Kontrollera att instrumentet är av under rengöringen.

1. Montera rotorn.
2. Rotorn kan endast monteras i en riktning. Stiftet på rotoraxeln passar i en skåra på rotorns undersida direkt under rotorns position 1. Rikta in position 1 med stiftet på rotoraxeln och sänk försiktigt ned rotorn på axeln.
3. Installera rotormuttern ovanpå rotorn och dra åt den ordentligt med rotornyckeln som medföljer QIAcube Connect MDx. Kontrollera att rotorn sitter fast ordentligt.



Rotornyckel.



Rotormutter.

Om rotormuttern inte dras åt ordentligt kan den lossna när centrifugen används och skada instrumentet allvarligt. Sådana skador omfattas inte av garantin.

VARNING**Risk för personskada och materialskada**

Dra åt muttrarna ordentligt med rotornyckeln som medföljer QIAcube Connect MDx för att förhindra att rotormuttrarna lossnar under centrifugen.

4. Sätt in rotorbägarna. Den sida av rotorbägaren som måste vara vänd mot rotoraxeln markeras med en grå linje. Håll bägaren vinklad mot den grå linjen vänd mot rotorns mittpunkt och häng bägaren på rotorn. Kontrollera att alla bägare är ordentligt upphängda och kan svänga fritt.

Viktigt: Säkerställ att rotorn och alla centrifugbägare har monterats korrekt innan du startar någon centrifugkörning.

Innan du startar nästa protokollkörning måste du följa anvisningarna i avsnitt 6.6.3, Använda centrifugen efter rengöring.


6.6.3 Använda centrifugen efter rengöring

Centrifugen måste köras fristående innan ytterligare körningar påbörjas för att kontrollera om rester av plastdelar fortfarande finns kvar i centrifugen.

Obs! Rotoradaptar och andra förbrukningsartiklar behövs inte.

Viktigt: Säkerställ att rotorn och alla centrifugbägare har monterats korrekt innan du startar någon centrifugkörning.

1. Slå på instrumentet och logga in.
2. För att starta en centrifugkörning trycker du på ikonen **Tools** (Verktyg) på menyraden och sedan på fliken **Run Modules** (Körningsmoduler). Centrifugfliken är öppen som standard.

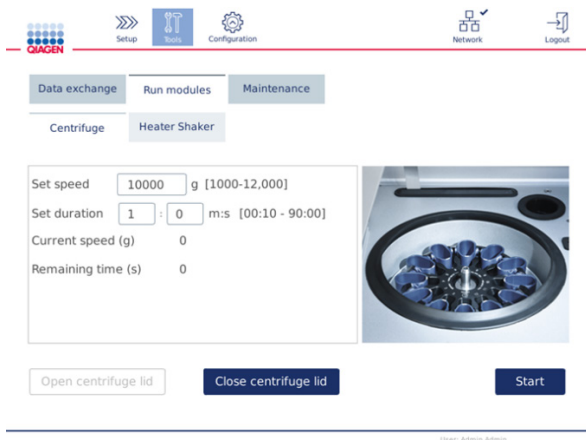

Skärmen Run Modules (Körningsmoduler).

3. I fälten **Set Speed** (Ange hastighet) och **Set duration** (Ange varaktighet) anger du hastigheten till 10 000 x g och varaktigheten till 1 min (1:0 m:s).
4. Tryck på **Start** för att starta centrifugkörningen.
5. Lyssna noga på ljudet under centrifugeringen. Se nedan för mer information om ljudet.

Ovanliga ljud under centrifugeringen

Om något skrapande, skramlande eller krossande ljud hörs under centrifugeringen kan det fortfarande finnas lösa plastpartiklar inuti centrifugen. Upprepa rengöringsproceduren enligt beskrivningen i avsnitt 6.6.2, Rengöra centrifugen.

Obs! Det kan vara nödvändigt att upprepa förfarandet flera gånger för att avlägsna alla plastpartiklar.

Inga ovanliga ljud under centrifugeringen

Om inget ovanligt ljud från lösa plastpartiklar kan höras under centrifugeringen, kan nästa protokollkörning startas.

Obs! Knapparna **Open centrifuge lid** (Öppna centrifuglocket) och **Close centrifuge lid** (Stäng centrifuglocket) behövs inte för att starta en centrifugkörning, eftersom locket stängs automatiskt. De behövs istället om du behöver förbereda QIAcube Connect MDx för leverans eller under en felsökning.

6.7 Valfritt underhåll

6.7.1 UV-körningen

UV-körningen bör utföras dagligen för dekontaminering. Det hjälper till att minska förekomsten av patogen- eller nukleinsyrekontamination på QIAcube Connect MDx-arbetsborden. Effekten av inaktivering måste bestämmas för varje specifik organism och beror t.ex. på skiktjocklek och provtyp. QIAGEN kan inte garantera fullständig utrotning av specifika patogener.

Under UV-dekontaminering rör sig robotarmen långsamt över arbetsbordet. Standardcykelnumret är 1 (ca 12 minuter) för underhåll. Vid förekomst av synliga stänk på arbetsbordet efter körningen måste du öka cykelantalet baserat på använt provmaterial/använda patogener.

Obs! Innan UV-strålningsproceduren startas, se till att dagligt underhåll utförs (se avsnitt 6.4, Dagligt underhåll), vilket omfattar att ta bort alla prover, eluat, reagenser och förbrukningsartiklar från arbetsbordet och torka av arbetsbordet.


Under varje cykel kan en genomsnittlig aggregerad dosnivå på 28 till 46 mW*s/cm² uppnås från UV-lysdioden.

1. Tryck på ikonen **Tools** (Verktyg) på menyraden för att starta UV-dekontamineringen. Tryck på fliken **Maintenance** (Underhåll) och välj underfliken **UV Run** (UV-körning). Skärmen visar datumet för den **Last Executed** (Senaste) UV-körningen och **Cycle duration** (Cykelns varaktighet).

The screenshot shows the QIAcube Connect MDx software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, and Logout. Below this, there are tabs for Data exchange, Run modules, and Maintenance. Under the Maintenance tab, there are sub-tabs for Daily, UV Run, Monthly, Robotic Arm, Centrifuge, Tightness, and O-Ring. The UV Run sub-tab is selected, displaying instructions for decontamination using UV LED light. The instructions include: 'Before starting UV light decontamination, perform the daily maintenance.', 'During UV decontamination the robotic arm will move slowly across the worktable. Make sure that - all plastics parts (including shaker adapter and buffer bottle rack) have been removed previously, to ensure that complete worktable is being exposed.', and '- the waste drawer is closed and do not open it during'. A 'Cycle' field is set to 1, with a note '12 min (1 cycle = 12 min)'. A 'Start' button is visible at the bottom right. A 'Last Executed' box shows the date '29.12.2018' and a 'Duration' of '4 min'. The user is identified as 'Admin Admin' at the bottom.

Skärmen UV run (UV-körning).

2. I fältet **Cycle** (Cykel) ändrar du antalet cykler. Standardcykelnumret är 1 (ca 12 minuter).
3. Kontrollera att alla förbrukningsartiklar har tagits bort från arbetsbordet.
Viktigt: Se till att avfallslådan är stängd. Öppna den inte under UV-körningen. Säkerställ att rotorn och rotorbägarna har monterats i centrifugen.
4. Stäng huven och tryck på **Start** för att starta UV-körningen.
5. Tryck på **Done** (Klar) när UV-körningen är klar. Datumet för det senaste UV-körningen uppdateras automatiskt.


WARNING 	Risk för personskada Utsätt inte huden för UV-C-ljus från UV-lysdioden.
---	---

6.7.2 Täthetstest

För att säkerställa att spetsadaptorns täthet är tillräcklig för korrekt pipettering måste spetsadaptorns täthetstest utföras. Detta test måste också utföras efter byte av O-ringen för spetsadaptorn för att kontrollera att bytet utförts korrekt.

Obs! Utför dagligt underhåll och rengöring av robotarmen innan du utför täthetstestet. Se avsnitt 6.4, Dagligt underhåll och avsnitt 6.6.1, Rengöra robotarmmodulerna.

1. Tryck på ikonen **Tools** (Verktyg) på menyraden för att starta täthetstestet. Tryck på fliken **Maintenance** (Underhåll) och välj underfliken **Tightness** (Täthet). Skärmen visar datumet för det **Last Executed** (Senaste) täthetstestet.

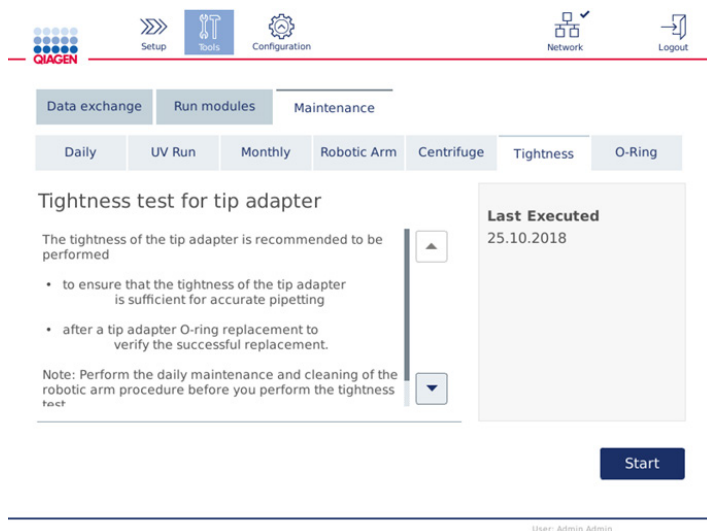

Testskärmen Tightness (Täthet).

2. Tryck på **Start** för att starta proceduren för täthetstestet. Följ anvisningarna som visas på skärmen. Mer information finns i följande steg.
3. Öppna hunden och ladda ett 1 000 µl spetsställ med minst en 1 000 µl spets i spetsställposition 1.
4. Ställ ett tomt 2 ml mikrocentrifugrör för med säkerhetslås (kat.nr 990381) i position 1 på skakapparaten (skakapparat typ 2).
5. Placera en buffertflaska fylld med ≥10 ml 96–100 % etanol i position 1.
6. Stäng hunden och tryck på **Next** (Nästa) för att starta täthetstestet.

Efter laddningskontrollen kommer robotarmen plocka upp en spets, aspirera etanol och flytta till röret. Spetsen förblir på plats ovanför röret i 2 min. Spetsen kasseras därefter i avfallsbehållaren.

7. Vänta tills testet har slutförts och tryck sedan på **Next** (Nästa).
8. När protokollet är klart öppnar du QIAcube Connect MDx-huven och tar bort buffertflaskan och spetsarna för att lagra dem på lämpligt vis.
9. Ta bort röret och kontrollera visuellt om vätska förekommer:
 - Om ingen vätska syns, tryck på **Yes** (Ja) för att registrera att testet har godkänts.
 - Om vätska förekommer, tryck på **No** (Nej) för att registrera att testet har misslyckats.
10. Om testet misslyckades ska du upprepa det. Om testet misslyckas igen bör du byta ut O-ringen (se avsnitt 7.2.5, Byte av O-ring) eller kontakta QIAGEN:s tekniska service.
11. Tryck på **Done** (Klar) för att slutföra täthetstestet. Datumet för det senaste täthetstestet uppdateras automatiskt.

6.8 Dekontaminera QIAcube Connect MDx

Om QIAcube Connect MDx kontamineras med smittsamt material bör det dekontamineras. Om farligt material spills på eller inuti QIAcube Connect MDx ansvarar användaren för att utföra lämplig dekontaminering.

QIAcube Connect MDx bör också dekontamineras för frakt (t.ex. tillbaka till QIAGEN). I detta fall måste ett intyg om dekontaminering fyllas i för att bekräfta att dekontamineringen har genomförts.

För att dekontaminera QIAcube Connect MDx följer du rutinen för dagligt, månatligt och periodiskt underhåll i avsnitt 6.4, 6.5 och 6.6 med hjälp av rekommenderade desinfektionsmedel. Utför dessutom en UV-körning med minst 5 cykler enligt beskrivningen i avsnitt 6.7.1, UV-körningen.

6.9 QIAcube Connect MDx-reparation

Kontakta din lokala QIAGEN fältservicespecialist eller din lokala distributör för ytterligare information om flexibla servicesupportkontrakt från QIAGEN.

VARNING



Risk för personskada och materialskada

Felaktig användning av QIAcube Connect MDx kan orsaka personskador eller skada på instrumentet. QIAcube Connect MDx får endast användas av kvalificerad personal, med lämplig utbildning.

Service på QIAcube Connect MDx får endast utföras av QIAGENS fältservicespecialister.

7 Felsökning

Detta avsnitt beskriver åtgärder att vidta om fel uppstår när du använder QIACube Connect MDx.

Om du behöver ytterligare hjälp, kan du kontakta QIAGEN teknisk service med kontaktinformationen nedan:

Webbplats: support.qiagen.com

När du kontaktar QIAGEN teknisk service om ett fel med QIACube Connect MDx ska du notera de steg som leder fram till felet och eventuell information som visas i dialogrutorna. Den här informationen kommer att hjälpa QIAGEN teknisk service att lösa problemet.

Du bör ha följande information tillgänglig när du ringer QIAGEN teknisk service om fel:

- Protokollets namn och version (finns i rapportfilen)
- Programvaruversion (se avsnitt 1.1, Om denna användarhandbok)
- Instrumentets serienummer finns till höger om fliken System på konfigurationsskärmen.
- Provinmatningsmaterial
- Detaljerad beskrivning av felsituationen


Den här informationen hjälper dig och representanten från QIAGEN:s tekniska service att hantera ditt problem på ett så effektivt sätt som möjligt.

Obs! Information om de senaste program- och protokollversionerna finns på www.qiagen.com. I vissa fall kan uppdateringar finnas tillgängliga för att hantera specifika problem.

7.1 Skapa ett supportpaket

Supportpaketet är en zip-fil som kan skickas till QIAGEN teknisk service för diagnos och felsökning.

1. På menyraden trycker du på ikonen **Tools** (Verktyg) (🔧).
2. Tryck på fliken **Data Exchange** (Datautbyte).
3. Anslut USB-flashminnet till en av de 2 USB-portarna bredvid pekskärmen.

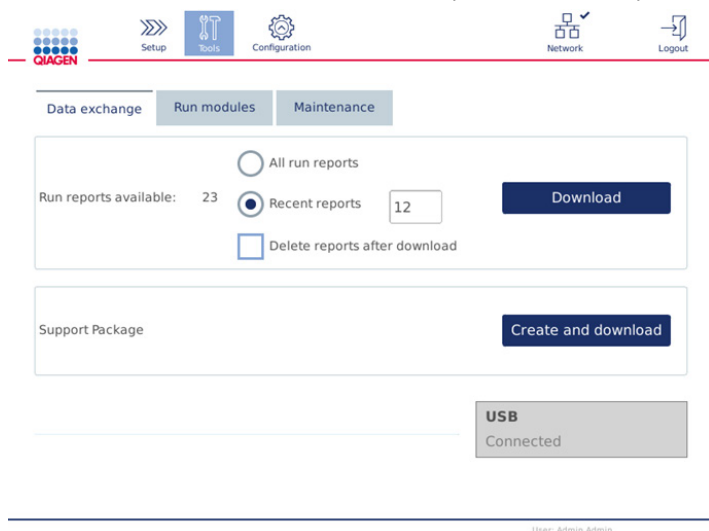

Skärmen **Data exchange** (Datautbyte).

4. Tryck på **Create and Download** (Skapa och ladda ned). Supportpaketet kommer att skapas och sparas på USB-flashminnet i mappen Support_Package. Supportpaketet innehåller alla relevanta data från de senaste 6 veckorna inklusive protokoll, körningsrapporter, granskningsspår och loggfiler.

7.2 Användning

Kommentarer och förslag på åtgärd

Centrifug

Bägaren svänger inte tillbaka på plats

Rengör centrifugen och rotorerna enligt beskrivningen i avsnitt 6, Rengöring och underhåll.

Obalans har påträffats

Kontrollera att rotorn har laddats symmetriskt baserat på anvisningarna på körningskonfigurations-skärmarna. Ta bort rotorn och kontrollera om det finns lösa plastdelar i centrifugkammaren.
Stäng AV QIAcube Connect MDx, vänta några minuter och slå PÅ den igen. Kontakta QIAGEN teknisk service om felet kvarstår.

Obalans har påträffats, starka ljud hörs under centrifugering

Kontrollera att alla lösa delar har tagits bort från arbetsbordet innan centrifugeringen så att lösa delar inte fastnar eller skadar centrifugen.

Skakapparat

Felaktig omplacering av skakapparat

Skakapparaten ska på egen hand placera sig mot höger sida när skakningen är klar. Ta bort eventuella objekt som hindrar skakapparaten från att återgå till rätt läge.

Robotarm

Robotarmen återgår inte till det inställda läget.

Kontrollera att instrumentet står på en stadig, plan och jämn yta enligt beskrivningen i avsnitt 4.1.1, LaboratoriekraV. Kontakta annars QIAGEN:s tekniska service.

Instrumentladdning

Om instrumentet inte laddas korrekt ska du läsa felmeddelandet noga. Det kommer att berätta vilken del som är fel/saknas.

Pipett

Pipettspetsarna plockas inte upp av den automatiska pipetten

Se till att spetsarna inte är skadade och är korrekt placerade på arbetsbordet.

Pipettspetsarna kasseras inte korrekt

Töm avfallslådan och kontrollera att den är hel. Kontrollera att spetsavfallsskåran inte är skadad eller blockerad. Utför regelbundet underhåll som det beskrivs i avsnitt 6.3.

Kommentarer och förslag på åtgärd

Droppar syns på arbetsbordet	Pipetten droppar vätska. Kontrollera att reagensflaskorna innehåller rätt buffertar och är korrekt placerade i reagensflaskstället. Använd rätt plastartiklar. Kontrollera volymerna i provrören och rören med tillbehörbuffertar, i förekommande fall. Överskrid inte den rekommenderade mängden startmaterial för att undvika att blockera engångsfilterspetsarna. Om spetsställen har fyllts på, kontrollera att rätt spetsar har använts. Kontrollera pipettens täthet i underhållsområdet enligt beskrivningen i avsnitt 6.7.2, Täthetstest. Om läckage påträffades, byt O-ring enligt beskrivningen i avsnitt 7.2.5, Byte av O-ring. Kontakta QIAGEN teknisk service om problemet kvarstår.
Mekanisk	
Instrumentets ram är skadad (t.ex. ojämn, ostadig eller sned)	Kontrollera att instrumentet står på en stadig, plan och jämn yta enligt beskrivningen i avsnitt 4.1.1, LaboratoriekraV.
Fel på huvsensorn, instrumentet kommer inte att fungera	Kontrollera att huven är korrekt stängd. Instrumentet kommer inte att fungera om huven är öppen.
Trasig huv	Se till att endast rengöringsmedel enligt beskrivningen i avsnitt 6, Rengöring och underhåll, används på huven.
Avfallslådan fastnar men kan fortfarande skjutas in	Töm avfallslådan. Utför dagligt underhåll som det beskrivs i avsnitt 6.4.
Felaktigt inskjuten avfallslåda	Hantera avfallslådan med båda händerna när du skjuter in eller drar ut lådan.
Pipettspetsarna kasseras inte korrekt	Se till att toppen av spetsavfallsfacket (se avsnitt 3.3, Inre egenskaper hos QIAcube Connect MDx) inte är skadad.
Repor förekommer på instrumentet	Använd alltid rengöringsprodukter enligt beskrivningen i avsnitt 6, Rengöring och underhåll. Använd inte blekmedel eller etanol eftersom de kan skada instrumentets yta.
Elektronik	
Displayen slås inte på	Vidrör inte displayen med våldsamt och använd inte frätande kemikalier för att rengöra dess yta. Kontakta QIAGEN teknisk service om du behöver reparationer.

Kommentarer och förslag på åtgärd

Fel vid kopiering av filer till USB-minnet	Stäng AV QIAcube Connect MDx, vänta några minuter och slå PÅ den igen. Spara filerna igen på USB-flashminnet. Sätt in USB-flashminnet i en dator och kontrollera att det fungerar. Kontakta QIAGEN teknisk service om felet kvarstår.
USB-enheten hittades	Använd endast USB-flashminnet som medföljer instrumentet. Stäng AV QIAcube Connect MDx, vänta några minuter och slå PÅ den igen. Sätt i ett USB-flashminne i USB-porten. Sätt in USB-flashminnet i en dator och kontrollera att det fungerar. Kontakta QIAGEN teknisk service om felet kvarstår.
Inloggningskärmen syns inte när instrumentet startas	Om pekskärmen inte visar inloggningskärmen utan ett programuppdateringsmeddelande istället stänger du AV QIAcube Connect MDx och väntar några minuter. Kontrollera att USB-flashminnet inte sitter i USB-porten. Slå PÅ QIAcube Connect MDx igen. Inloggningskärmen bör visas. Kontakta QIAGEN teknisk service om felet kvarstår.
Fel visas när USB-flashminnet sätts in i en dator med Windows	Ignorera meddelandet. I de flesta fall behövs ingen sökning. Använd USB-flashminnet som vanligt. Formatera inte om USB-minnet på Windows-datorn. Detta leder till fullständig dataförlust på USB-flashminnet och det kan inte längre användas med QIAcube Connect MDx.

7.2.1 Protokollavbrott

Om ett fel inträffar under en protokollkörning är det möjligt att fortsätta provberedningen manuellt. Viktigt: Det rekommenderas inte att avsluta körningen manuellt för QIAGEN DSP/IVD-protokoll. Körningen blir ogiltig och provresultatet från den manuella fortsättningen av protokollet får inte användas för diagnostiska ändamål. Det är ditt ansvar att fortsätta provbearbetningen manuellt, eftersom hela proceduren blir ogiltig.


Så här fortsätter du provbearbetningen:


1. Observera det steg där protokollet stoppades. Detta visas på pekskärmen under Run Details (Körningsinformation).
2. Ta bort proverna och reagenserna från QIAcube Connect MDx.
3. Se lämpligt protokoll i relevant kithandbok och fortsätt med provbearbetningen manuellt.

7.2.2 Centrifug


Öppna centrifuglocket i händelse av ett fel

I händelse av strömavbrott kan centrifuglocket öppnas manuellt för att avlägsna proverna. Följ nedanstående anvisningar för att öppna centrifuglocket.

VARNING 	Rörliga delar Om strömavbrott skadar systemet bör nätsladden avlägsnas. Vänta 10 minuter innan du försöker öppna centrifuglocket manuellt.
---	--


VARNING 	Risk för personskada och materialskada Lyft centrifuglocket försiktigt. Locket är tungt och kan orsaka skador om det faller.
---	--

1. Stäng AV QIAcube Connect MDx.
2. Koppla loss nätsladden från strömuttaget. Vänta 10 min tills rotorn stannar.
3. Öppna instrumenthuven.
4. Flytta robotarmen försiktigt till höger om arbetsbordet, längst bort från centrifuglocket.
5. Ta bort skruvskyddet ovanpå centrifuglocket. Vrid skruven moturs med hjälp av rotornyckeln.

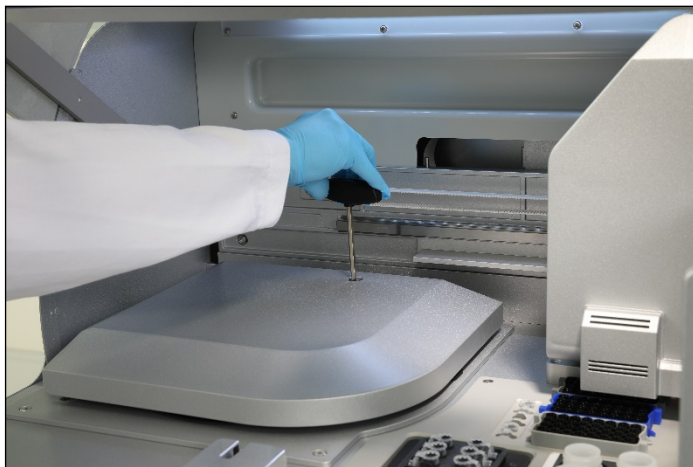

Vrida skruven i centrifuglocket.

6. Dra ut avfallslådan. Centrifugens frigöringsvajer syns på vänster sida om facket för avfallslådan.

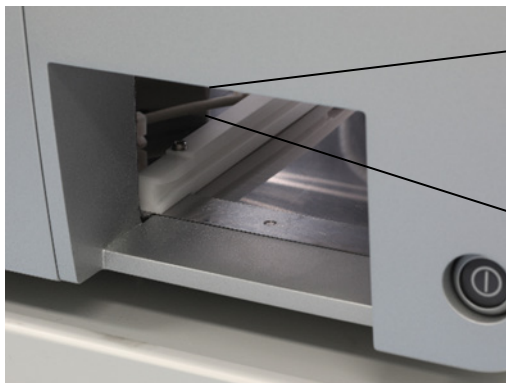


Utdragen avfallslåda.



Frigöringsvajer för centrifug.

7. Dra bestämt i vajern för att lossa locket från låset.
8. Lyft centrifuglocket manuellt.
9. Håll locket uppe och ta bort prover och rotoradapterar från rotorn.

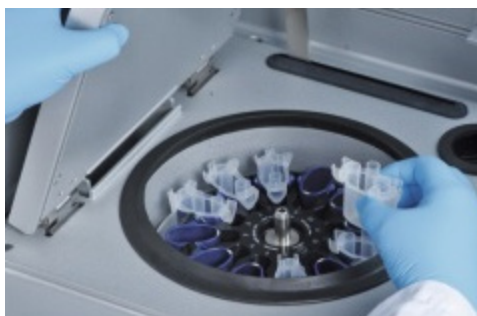

Ta bort rotoradapterar.

Kontakta QIAGEN teknisk service för instruktioner om hur du sätter tillbaka locket.

Vätskespill i centrifugen

Rotoradaptorn är utformad för användning med QIAGEN:s automatiska protokoll. Fyll inte rotoradapterarna med vätska.

Vätskespill kan uppstå om QIAGEN-kolonnen blockeras på grund av provöverlast. Överskrid inte maximimängden startmaterial.

Felaktig installation av centrifugbägarna kan också få rotoradapterarna att läcka. Kontrollera att bägarna är ordentligt installerade och kan svänga fritt.

Om det förekommer vätskespill i centrifugen ska den rengöras enligt anvisningarna i avsnitt 6, Rengöring och underhåll.

7.2.3 Detektion av reagensvolym och ultraljudsrör

För att förhindra fel vid identifiering av reagensvolym, se till att båda etikettremorna är fästa på reagensflaskstället. Dessa remor ser till att reagensflaskstället är korrekt placerat på arbetsbordet för vätskedetektion under laddningskontrollen.

Instrumentet startar inte laddningskontrollen om den svarta strålkollimatoren på ultraljudssensorn saknas. Kontrollera om kollimatoren har installerats före laddningskontrollen.



Ultraljudsensorns svarta strålkollimator (se röd cirkel).

7.2.4 Pekskärm

Varje gång användaren trycker på en knapp på pekskärmen visas ett litet rött tecken på den plats där pekskärmen känner igen kontakten. Om platsen där du trycker och igenkänningstecknet är på olika platser kan en omkalibrering av pekskärmen utföras. Kalibreringsfunktionen kan nås under instrumentets startprocedur.

Vi rekommenderar att du använder en pekpena eller en oanvänd spets för optimala kalibreringsresultat. Om du använder en spets ska den kasseras efter kalibreringen.

Så här kalibrerar du om pekskärmen:


1. Stäng av QIAcube Connect MDx.
2. Vänta ett par minuter och slå sedan på instrumentet igen.
3. Tryck på QIAGEN-logotypen på den andra skärmen.

Obs! Om du inte trycker på logotypen kommer instrumentet att fortsätta startproceduren.




Tryck på QIAGEN-logotypen.

4. Tryck på **Calibrate Touch Screen** (Kalibrera pekskärmen).

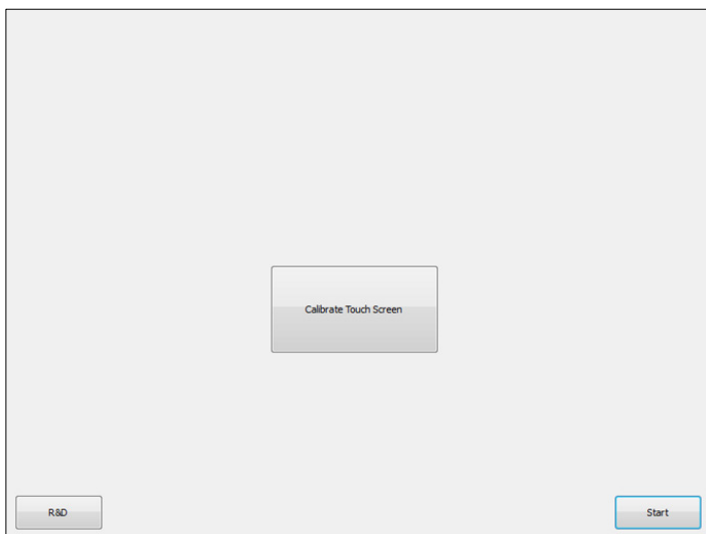

Knappen Calibrate Touch Screen (Kalibrera pekskärmen).

5. Ett informationsmeddelande visas. Meddelandet stängs automatiskt efter 10 sekunder.
6. Plustecken (+) visas på olika platser på skärmen. Tryck mitt på varje plustecken. När du har tryckt på en plats visas nästa. Bilden nedan visar platserna och i vilken ordning plustecknen kommer att visas.

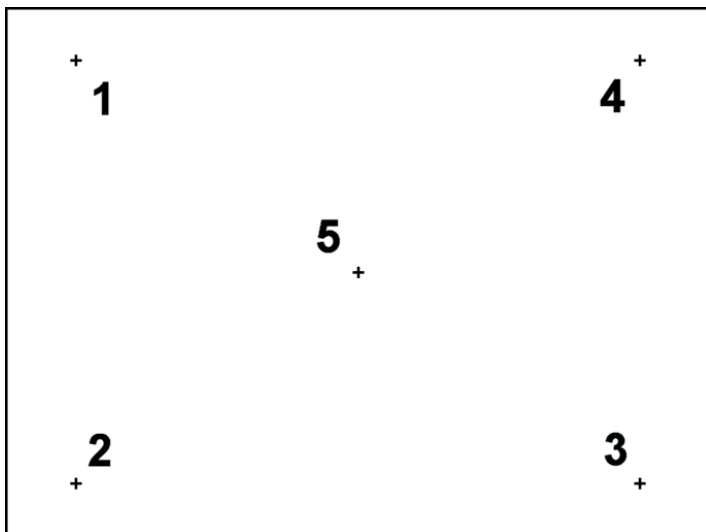

Platser och ordning för plustecknen.

7. Kalibreringen har slutförts när du har tryckt på alla fem platserna. Kalibreringsresultaten sparas automatiskt. Föregående skärm visas igen.
8. Tryck på **Start**. Instrumentet fortsätter med startproceduren med de nya kalibreringsinställningarna.

För att avbryta kalibreringsprocessen stänger du av QIAcube Connect MDx.

7.2.5 Byte av O-ring

O-ringen måste bytas om täthetstestet (se avsnitt 6.7.2, Täthetstest) misslyckades eller något av följande fel har påträffats:

- Ojämna volymöverföringar
- Droppar på arbetsbordet

I samtliga fall rekommenderar vi att du rådfrågar QIAGEN teknisk service. Du behöver ett bytesverktyg för O-ring och en ny O-ring. Se avsnitt 11, Bilaga C – Tillbehör till QIAcube Connect MDx, för beställningsinformation.



O-ringsverktyg med förberedd ny O-ring.

Bytet av O-ringen är halvautomatisk och inbegriper rörelse av robotarmen.

Obs! Utför dagligt underhåll och rengöring av robotarmen innan du byter ut O-ringen.

1. Tryck på ikonen **Tools** (Verktyg) på menyraden för att påbörja bytet av O-ringen. Tryck på fliken **Maintenance** (Underhåll) och välj underfliken **O-ring**. Skärmen visar datumet för det senaste bytet av O-ringen.

The screenshot shows the QIAGEN software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Setup, Tools, Configuration, Network, and Logout. Below this, there are tabs for Data exchange, Run modules, and Maintenance. Under the Maintenance tab, there are sub-tabs for Daily, UV Run, Monthly, Robotic Arm, Centrifuge, Tightness, and O-Ring. The O-Ring sub-tab is selected, displaying the 'Tip Adapter O-Ring Replacement' screen. This screen contains instructions on when to replace the O-ring (uneven volume transfers or dripping) and the required tools. A 'Last Replaced' date of 25.10.2018 is shown. A small image of the tool is visible, with 'Lever' and 'Stop' labels. A 'Start' button is at the bottom right. The user is identified as 'Admin Admin' at the bottom.

Skärmen **O-Ring maintenance (Underhåll av O-ringen)**.

2. Stäng huven och tryck på **Start** för att starta proceduren för att byta ut O-ringen. Följ anvisningarna som visas på skärmen. Mer information finns i följande steg.

3. Gör så här för att förbereda O-ringsverktyget:

3a. Skjut den nya O-ringen över pinnens smala ände.



Skjut på den nya O-ringen.


3b. Tryck på den grå spaken tills du når det svarta stoppet och för in pinnens smala ände i hålet.

3c. Tryck ned pinnen med den bakre delen av pincetten tills O-ringen sitter (i mitten) på den bredare delen av pinnen.




Tryck ned pinnen med hjälp av pincettens bakre del.

3d. Öppna den grå spaken och sätt in pinnen med den smala änden först i hålet enligt bilden.

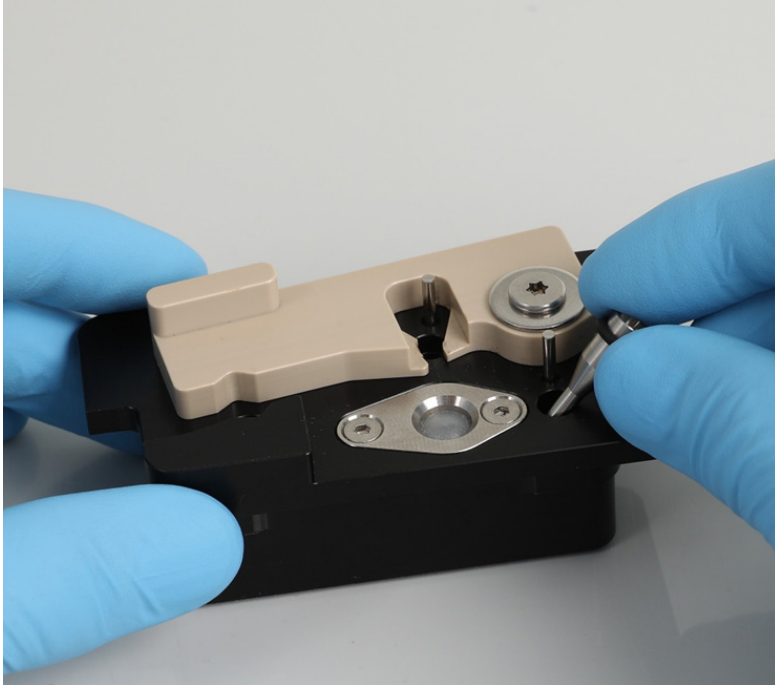

Sätt in pinnen i hålet.

4. Tryck på **Next** (Nästa) på skärmen och börja ladda O-ringsverktyget i QIAcube Connect MDx.
5. Ladda O-ringsverktyget genom att öppna den grå spaken till spetsställposition 1 (närmast användaren).

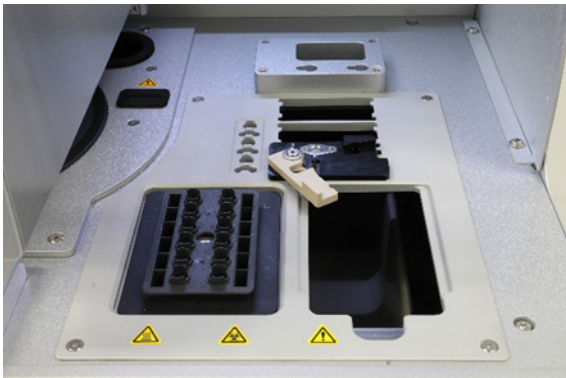


Ladda O-ringsverktyget.


6. Stäng huven och tryck på **Next** (Nästa) för att börja beskära O-ringen.

7. Gör så här för att beskära och ta bort O-ring:

7a. För att beskära O-ringens öppnar du huven och roterar den grå spaken moturs tills du når det svarta stoppet.

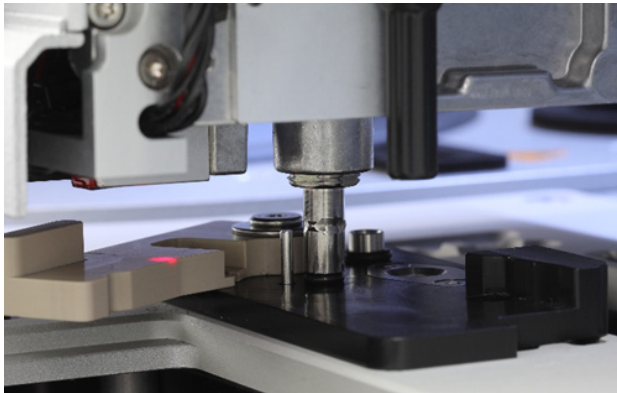

Öppna huven.

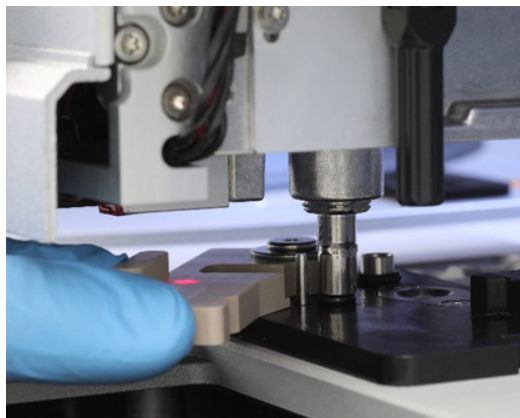

Vrid den grå spaken moturs.


7b. Öppna den grå spaken och ta bort O-ringens (med hjälp av pincetten) från pipetteringskanalen.

Obs! Upprepa skärningen vid behov tills O-ringens är helt beskuren och kan tas bort.



Öppna den grå spaken och ta bort O-ringens med hjälp av pincetten.

8. Stäng huven och tryck på **Next** (Nästa) för att plocka upp den förberedda nya O-ringen.
9. Öppna huven och kontrollera visuellt om den nya O-ringen sitter stadigt på spetsadaptorn.

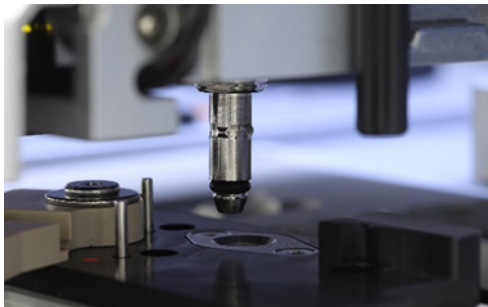

Kontrollera om den nya O-ringen sitter fast ordentligt.

Obs! Om O-ringen inte fångades upp korrekt ska du slutföra proceduren för byte av O-ringen och starta om.

10. Stäng huven och tryck på **Next** (Nästa) för att ta bort bytesverktyget för O-ringen.
11. Öppna huven och ta bort bytesverktyget för O-ringen.
12. Torka av och rengör bytesverktyget för O-ringen med alkoholbaserade desinficeringsservetter. Inkubera efter behov, skölj noggrant med destillerat vatten och torka av med luddfria pappershanddukar.
13. Tryck på **Done** (Klar) för att slutföra bytet av O-ringen. Datumet för det senaste bytet av O-ringen uppdateras automatiskt.

VARNING



Risk för personskada och materialskada

Felaktig användning av QIAcube Connect MDx kan orsaka personskador eller skada på instrumentet. QIAcube Connect MDx får endast användas av kvalificerad personal, med lämplig utbildning.

Service på QIAcube Connect MDx får endast utföras av QIAGENs fältservicespecialister.

8 Ordlista

Term	Beskrivning
Arbetsbord	Ytan på QIAcube Connect MDx där prover, reagenser och filterspetsar laddas.
Avfallslåda	En låda som samlar in begagnade filterspetsar och engångskolonner.
Centrifug	En komponent i QIAcube Connect MDx som rymmer en rotor med 12 swing-out-bägare. Varje bägare håller en engångsrotoradapter.
Fack för mikrocentrifugrör	Tre skåror på laboratoriebrickan som hyser tillbehörbuffertar i 1,5 ml eller 2 ml mikrocentrifugrör.
Felkod	Ett 3- eller 4-siffrigt nummer som anger ett fel på QIAcube Connect MDx.
Filterspets	En labbprodukt som plockas upp av en spetsadapter under drift av QIAcube Connect MDx. Vätska aspireras i och dispenseras från en filterspets.
Huv	Huvudluckan på framsidan av QIAcube Connect MDx. När den är öppen ger den fullständig åtkomst till arbetsbordet.
Initiering	En åtgärd som utförs automatiskt när QIAcube Connect MDx är påslagen samt vid behov före varje protokollkörning för att kontrollera funktionen hos QIAcube Connect MDx.
Kasseringsskåror	Skåror i QIAcube Connect MDx-arbetsbordet där begagnade och kolonner (t.ex. QIAshredder-kolonner) kasseras i avfallslådan.
Pekskärm	Användargränssnittet som gör att användaren kan använda QIAcube Connect MDx.
Pipetteringssystem/pipettenhet	Komponenten på QIAcube Connect MDx som aspirerar och fördelar vätska. Pipettsystemet rör sig uppåt och nedåt ovanför arbetsbordet och innehåller en sprutpump som är ansluten till en spetsadapter.
Protokoll	Anvisningar till QIAcube Connect MDx, som gör att instrumentet kan utföra en automatisk reningsprocedur av nukleinsyror. Protokollen körs med hjälp av pekskärmen.
Robotgriparm	En komponent i QIAcube Connect MDx-robotarmen som flyttar kolonner under provbearbetningen.
Rotoradapter	En engångsadapter av plast som passar in i en centrifugbägare och håller en QIAGEN-kolonn och ett mikrocentrifugrör under provbearbetning.
Spetsadapter	En metallprob är installerad på pipetthuvudet. Under drift av QIAcube Connect MDx plockar spetsadapterna upp filterspetsar från arbetsbordet.
Spetsavfallsskåror	Skåror i QIAcube Connect MDx-arbetsbordet där filterspetsar kasseras i avfallslådan.
Spetsställ	Ett plastställ som rymmer filterspetsar på arbetsbordet.
Ställ för reagensflaskor	Ett ställ som rymmer sex 30 ml flaskor på QIAcube Connect MDx-arbetsbordet.
Strömbrytare	En knapp på framsidan på QIAcube Connect MDx längst ner till höger. Används av användaren för att slå på och av QIAcube Connect MDx. Det inre läget är PÅ och det yttre läget är AV.

9 Bilaga A – Tekniska uppgifter

9.1 Miljömässiga förhållanden – driftsförhållanden

Effekt	100–240 V AC, 50/60 Hz, 650 VA. Nätaggregatets spänningsvariationer får inte överskrida 10 % av nominell matarspänning. OBS! Den synliga effekten kan överstiga 650 VA i upp till 2 sekunder under centrifugaccelerationen och kan nå ett ungefärligt värde på 1000 VA.
Säkring	2 x T8A L 250 V
Överspänningskategori	II
Lufttemperatur	20 till 25 °C
Relativ luftfuktighet	20–75 % (icke-kondenserande)
Höjd över havet	Upp till 2 000 m
Användningsplats	Endast för inomhusbruk
Utsläppsnivå	2
Miljöklass	3K20 (IEC 60721-3-3)

9.2 Transportförhållanden

Lufttemperatur	-25 °C till 60 °C i tillverkarens förpackning
Relativ luftfuktighet	Max 75 % (icke-kondenserande)

9.3 Förvaring

Lufttemperatur	5 °C till 40 °C i förpackning
Relativ luftfuktighet	Max 75 % (icke-kondenserande)

9.4 Mekaniska data maskinvarufunktioner

Mått (stängd huv)	Bredd:	65 cm
	Höjd:	58 cm
	Djup:	62 cm
Mått (öppenhuv)	Bredd:	65 cm
	Höjd:	86 cm
	Djup:	62 cm
Massa	QIAcube Connect MDx: 71,5 kg Tillbehör: 3 kg	
Centrifug	Max 10 640 varv/min	
	Max 12 000 x g	
	Swing-out-rotor, max. 45 °	
	12 rotorpositioner	

Skakapparat	<p>Varvtal 100-2000 varv/min</p> <p>Amplitud 2 mm</p> <p>Uppvärmningsområde för omgivningstemperatur till 70 °C</p> <p>Uppvärmningstid på < 5 minuter från omgivningstemperatur till 55 °C (± 3°C)</p> <p>Skillnad i temperatur som detekteras av den interna sensorn och provvätskans temperatur är ca -2 °C</p>
Pipetteringssystem	<p>Sprutstorlek 1 ml</p> <p>Pipetteringsområde 5 -900 µl</p>
Kapacitet	Upp till 12 prover per körning
Pekskärm	10,4" TFT pekskärm, aktivt område 211,2 x 158,4 mm, upplösning 800 * 600 SVGA
USB-flashminne	<p>USB2.0</p> <p>Kompatibelt operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 eller senare), Mac OS X 10.1 eller senare</p> <p>Drifttemperaturområde: 0 till 35°C</p> <p>Luffuktighetsområde vid drift: 10 till 90 % (utan kondensation)</p> <p>Förvaringstemperaturområde: -20 till -60 °C</p> <p>Luffuktighetsområde vid förvaring: 10 till 90 % (utan kondensation)</p> <p>Formatering: FAT32</p>
UV-lysdiod	<p>Våglängd: 278 nm</p> <p>Optisk effekt: 200–300 mW</p>
Streckkodsläsare	<p>Skanningsmönster: Bildarea (838 x 640 bildpunkter)</p> <p>Rörelsetolerans: Upp till 610 cm/s (240 tum/s) för 13 mil UPC vid optimalt fokus</p> <p>Symbolkontrast: 20 % minsta reflektansskillnad</p> <p>Avkodningsfunktion: Avläser standard 1D, PDF, 2D, postkodformat och OCR-symboler</p>
Program	<p>QIAGEN-protokoll är förinstallerade på QIAcube Connect MDx eller kan hämtas på https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx, se fliken Product Resources (Produktresurser).</p>

10 Bilaga B – Juridiskt

10.1 Deklaration om överensstämmelse

Den lagliga tillverkarens namn och adress:

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Germany

En uppdaterad deklARATION om överensstämmelse kan beställas från QIAGEN:s tekniska service.

10.2 Elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)

I det här avsnittet finns information om hur användaren hanterar elektriskt och elektroniskt avfall.

Symbolen med den överkorsade soptunnan (se nedan) betyder att denna produkt inte får kasseras tillsammans med övrigt avfall. Den måste lämnas in på godkänd hanteringsanläggning eller till återvinningsstation för återvinning enligt lokala lagar och bestämmelser.

Separat insamling och återvinning av elektronisk avfallsutrustning när denna ska kasseras hjälper till att bevara naturresurser och säkerställer att produkterna återvinns på ett sätt som skyddar mänsklig hälsa och miljön.



Återvinning kan på begäran utföras av QIAGEN mot en extra kostnad. Inom Europeiska Unionen tillhandahåller QIAGEN enligt återvinningsbestämmelserna i WEEE gratis återvinning av dess WEEE-märkta elektroniska utrustning i Europa om en ersättningsprodukt levereras av QIAGEN.

Kontakta ditt lokala QIAGEN-försäljningskontor för det erforderade returformuläret för återvinning av elektronisk utrustning. När formuläret lämnats in kommer du att kontaktas av QIAGEN, antingen för att begära uppföljningsinformation för att planera insamling av den elektroniska utrustningen eller för att ge dig en individuell offert.

10.3 EMC-deklaration

Den medicinska IVD-utrustningen uppfyller de utsläpps- och immunitetskrav som beskrivs i IEC 61326-2-6.

United States Federal Communications Commission (USFCC) (i 47 CRF 15. 105) har deklarerat att användaren av denna produkt måste informeras om följande fakta och förhållanden.

"Denna enhet uppfyller del 15 i FCC:

Följande två villkor gäller för användning av enheten: (1) Enheten får inte orsaka skadlig interferens och (2) enheten måste klara eventuell mottagen interferens, inklusive interferens som kan orsaka önskad drift."

"Denna digitala apparat av klass B uppfyller kanadensiska ICES-0003."

Uttalandet nedan gäller för produkter som omnämns i den här handboken, om inget annat sägs om detta i handboken. Uttalande för andra produkter kommer att inkluderas i den kompletterande dokumentationen.

Obs! Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital utrustning klass B enligt del 15 i FCC-reglerna och uppfyller samtliga krav i den kanadensiska standarden Interference-Causing Equipment Standard ICES-003 för digitala apparater. De här gränsvärdena är utformade för att ge ett tillräckligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostadsmiljöer. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan orsaka skadlig interferens på radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte uppstår i en installation. Om utrustningen skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller tv-mottagare, vilket kan fastställas genom att stänga av och sedan slå på utrustningen igen, kan användaren försöka åtgärda interferensen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på antennen som används för mottagning.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett nätuttag som inte ingår i samma strömkrets som den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en radio/TV-tekniker för att få hjälp.

QIAGEN GmbH Germany är inte ansvarigt för någon radio- eller TV-interferens som orsakas av icke-auktoriserade modifikationer av denna utrustning eller utbyte eller anslutning av andra anslutningskablar eller utrustning än de som specificerats av QIAGEN GmbH Germany. Användaren är själv ansvarig för interferens som orsakas av sådana otillåtna åtgärder.

10.4 Klausul om skadeståndsskyldighet

QIAGEN ska befrias från alla skyldigheter under dess garanti vid fall av reparationer eller modifikationer som utförts av andra personer än dess egen personal, förutom i fall där företaget har gett sitt skriftliga samtycke till att sådana reparationer eller modifikationer utförs.

Allt material som bytts ut under denna garanti garanteras endast under den ursprungliga garantiperioden, och inte i något fall utöver den ursprungliga garantins ursprungliga utgångsdatum, om detta inte godkänts skriftligt av en av företagets representanter. Garantin för avläsningsenheter, gränssnittsenheter och associerad programvara gäller endast under den period som anges av den ursprungliga tillverkaren av dessa produkter. Framställanden och garantier som utfärdats av någon annan person, inklusive QIAGENS representanter, som strider mot förhållandena i denna garanti ska inte vara bindande för företaget om dessa inte har framställts skriftligt och godkänts av en av QIAGENS representanter.

QIACube Connect MDx är utrustad med en Ethernet-port och en Wi-Fi USB-enhet. Köparen för QIACube Connect MDx ansvarar själv för att förhindra alla typer av datorvirus, maskar, trojaner, skadlig kod, hackers eller andra typer av cyberintrång. QIAGEN tar inget ansvar för datorvirus, maskar, trojaner, skadlig kod, hackers eller andra typer av cybersäkerhetsintrång.

11 Bilaga C – Tillbehör till QIAcube Connect MDx

Mer information och en uppdaterad lista över tillgängliga protokoll finns på <https://www.qiagen.com/QIAcube-Connect-MDx> under fliken Product Resources (Produktresurser).

11.1 Beställningsinformation

Produkt	Innehåll	Kat.nr
QIAcube Connect MDx	Instrument och ett års garanti på delar och arbete	9003070
QIAcube Connect MDx System FUL-2	Instrument- och serviceavtalspaket: installation, tillämpningsutbildning, fullständigt avtal i två år med svar inom två arbetsdagar samt två inspektionsbesök ingår.	9003071
QIAcube Connect MDx System FUL-3	Instrument- och serviceavtalspaket: installation, tillämpningsutbildning, fullständigt avtal i tre år med svar inom två arbetsdagar samt tre inspektionsbesök ingår.	9003072
QIAcube Connect MDx System PRV-1	Instrument- och serviceavtalspaket: installation, tillämpningsutbildning och ett förebyggande underhållsbesök ingår. Ett års garanti på arbete, resa och delar ingår också.	9003073
QIAcube Connect MDx Device PRV-1	Instrument och serviceavtalspaket: inkluderar ett inspektionsbesök. Ett års garanti på arbete, resa och delar ingår också. Installation och utbildning ingår inte.	9003074
QIAcube Connect MDx System PRM-1	Instrument- och serviceavtalspaket: installation, tillämpningsutbildning, Premium-avtal i 1 år med svar inom en arbetsdag samt 1 inspektionsbesök ingår.	9003075
QIAcube Connect, Premium Agreement	Reparationstjänst på plats med svarstid inom en arbetsdag. 1 inspektionsbesök samt resa, arbete och delar ingår	9245209
QIAcube Connect, Full Agreement	Reparationstjänst på plats med svarstid inom två arbetsdagar. 1 inspektionsbesök samt resa, arbete och delar ingår	9245208

QIAcube Connect, Core Agreement	Reparationstjänst på plats och ett inspektionsbesök på plats, inklusive resa, arbete och reservdelar under en period på 1 år. Svarstid inom fem arbetsdagar. 10 % rabatt på ytterligare reparationer ingår under avtalsperioden.	9245260
QIAcube Connect, Installation & Training	Installation och konfiguration av programmets maskinvara och systemprogramvara på plats. Utbildning som omfattar rutinunderhåll, grundläggande felsökning med mera för upp till 4 laboratorieanställda.	9245211
Starter Pack, QIAcube	200 µl filterspetsar (1024), 1000 µl filterspetsar (1024), 30 ml reagensflaskor (12), rotoradapterar (240), 1,5 ml elueringsrör (240), rotoradapterhållare (1)	990395
QIAcube Connect, IQ/OQ Service	Kvalificering för installation på plats och driftskvalitet.	9245232
Tillbehör		
Filter-Tips, 1000 µl (1024)	Engångsfilterspetsar, i rack, (8 x 128)	990352
Filter-Tips, 1000 µl, wide-bore (1024)	Engångsfilterspetsar, bred diameter, i rack (8 x 128), krävs inte för alla protokoll	990452
Filter-Tips, 200 µl (1024)	Engångsfilterspetsar, i rack (8 x 128), krävs inte för alla protokoll	990332
Rotor, centrifuge	Rotor för QIAcube-centrifugen	9017848
Swing-out Buckets	Swing-out-bägare för QIAcube-centrifugens rotor	9017849
Rotor Adapters (10 x 24)	För 240 prepareringar: 240 rotoradapterar för engångsbruk och 240 mikrocentrifugrör (1,5 ml) för användning med QIAcube Connect MDx	990394
Rotor Adapter Holder	Hållare för 12 engångsrotoradapterar; för användning med QIAcube Connect MDx	990392
Reagent Bottle Rack	Ställ med plats för 6 x 30 ml reagensflaskor på QIAcube Connect MDx-arbetsbänk	9026197
Reagent Bottles, 30 ml (6)	Reagensflaskor (30 ml) med lock (6-pack) för användning med QIAcube Connect MDx-reagensflaskställ	990393

Shaker Rack Plugs (12)	För användning med 2 ml provrör med skruvlock	9017854
Sample Tubes RB (2 ml)	1 000 mikrocentrifugrör med säkra lock (2 ml) för användning med QIAcube Connect MDx	990381
Sample Tubes CB (2 ml)	1 000 konformade rör med skruvlock utan bred bas (2 ml) för användning med QIAcube Connect MDx	990382
1.5 ml elution tubes	Paket med 50; för användning med QIAcube Connect MDx	1050875
USB flash drive	USB-flashminne för användning med QIAcube Connect MDx	9026881
O-Ring Change Tool	Verktyg för byte av O-ring för användning med QIAcube Connect MDx	9026181
O-Ring Set	Paket med 10 O-ringar för användning med QIAcube Connect MDx	9018472
Spin Column Adapter Rings (25)	Kolonnadaptringar för användning med kolonner med skruvlock, krävs inte för alla protokoll	990399

Uppdaterad licens och produktspecifika friskrivningsklausuler finns i respektive handbok eller användarmanual för QIAGEN-satsen. Handböcker och användarmanualer till QIAGEN-satser på www.qiagen.com eller kan beställas från QIAGEN teknisk service eller din lokala återförsäljare.

12 Dokumentrevisjoner

Datum	Ändringar
R1, december 2020	Startversion.
R2, april 2022	Lade till formulering om att rapportera incidenter. Uppdaterade URL till webbplatsen för QIAcube Connect MDx. Uppdaterade avsnittet Beställningsinformation.

Avtal om begränsad licens för QIAcube Connect MDx

Användning av denna produkt innebär att köpare eller användare av produkten godkänner följande villkor:

1. Produkten får endast användas i enlighet med de protokoll som medföljer produkten och denna bruksanvisning och får endast användas med de komponenter som ingår i satsen. QIAGEN ger ingen licens för någon av sina immateriella tillgångar för att använda eller inkludera komponenterna i denna sats med komponenter som inte ingår i denna sats förutom vad som beskrivs i de protokoll som medföljer produkten, denna bruksanvisning och ytterligare protokoll som finns på www.qiagen.com. Vissa av dessa ytterligare protokoll har tillhandahållits av QIAGEN-användare för andra QIAGEN-användare. Dessa protokoll har inte testats noggrant eller optimerats av QIAGEN. QIAGEN garanterar inte att de inte kränker tredje parts rättigheter.
2. Förutom de uttryckligen angivna licenserna kan QIAGEN inte garantera att detta kit och/eller dess användning inte kränker oberoende tredje parts rättigheter.
3. Satsen och dess komponenter är licensierade för engångsbruk och får inte återanvändas, förbättras eller säljas vidare.
4. QIAGEN avsäger sig specifikt ansvar för alla andra licenser, uttryckliga eller underförstådda, förutom de uttryckligen angivna.
5. Inköparen och användaren av denna sats samtycker till att inte vidta eller tillåta att någon annan vidtar några steg som kan leda till eller underlätta några åtgärder som är förbjudna enligt ovan. QIAGEN kan kräva upphävande av detta begränsade licensavtal i domstol och ska ersättas för alla undersöknings- och rättegångskostnader, inklusive advokatkostnader, vid eventuell åtgärd för att upprätthålla detta begränsade licensavtal eller någon av företagets immateriella rättigheter avseende satsen och/eller någon av dess komponenter.

Uppdaterade licensvillkor finns på www.qiagen.com

Varumärken: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAcube®, Qproteome® (QIAGEN Group); DNA-ExitusPlus™ (AppliChem); RNaseZap® (Ambion, Inc.); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.); Microsoft®, Windows® (Microsoft Corporation); Gigasept®, Lysetol®, Mikroziid® (Schülke & Mayr GmbH); DECON-QUAT® (Veltek Associates, Inc.). Registrerade namn, varumärken med mera som används i det här dokumentet ska inte anses som oskyddade enligt lag, även om de inte uttryckligen anges som skyddade.

HB-2794-002 04/2022 © 2022 QIAGEN, med ensamrätt.

Beställning www.qiagen.com/contact | Teknisk support support.qiagen.com | Webbplats www.qiagen.com