



2024 年 5 月

## 重要須知

### 推出 QIASymphony® Labware Package SOW-516-9

敬愛的客戶您好，

我們特此通知您，現已推出適用於 QIASymphony SP/AS 儀器的最新版 QIASymphony 實驗室器具套裝。

此套裝的變更會影響下列 QIASymphony 試劑組。

- QIASymphony DSP Circulating DNA Kit (產品編號 937556)
- QIASymphony DSP HPV Media Kit (產品編號 937358)
- QIASymphony DNA Maxi Kit (產品編號 937266)
- QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit (產品編號 937055) 和 QIASymphony Virus/Bacteria Mini Kit (產品編號 931036)

表 1. QIASymphony Labware Package 的更新

試劑組	操作程序	變更詳細資訊
QIASymphony DSP Circulating DNA Kit	circDNA_1000_DSP_V1	新增了使用此新引入操作程序所需的實驗室器具建議。
QIASymphony DSP Circulating DNA Kit	circDNA_2000_DSP_V3 circDNA_4000_DSP_V3	取消將 BD_FIX_#352051 FalconPP 17x100 作為建議樣本輸入管，同時發佈這些操作程序的第 3 版。
QIASymphony DSP HPV Media Kit	SP800_HC2_V1_DSP	增加 SAR#72.693 T2.0 螺絲作為建議的樣本輸入管。
QIASymphony DNA Maxi Kit	DNA_Blood_2000_V1 DNA_Blood_4000_V1	增加了先前實驗室器具套裝中缺少的蛋白酶 K 管的實驗室器具建議。
QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit QIASymphony Virus/Bacteria Mini Kit	Cellfree500_V5_DSP	使用 BD_352051_FalconPP_17x100 進行樣本輸入時，輸入容量從 750 µl 增至 850 µl。

受影響操作程序的使用者應確保儘快更新 QIASymphony SP/AS 上的實驗室器具套裝，以確保繼續符合 QIAGEN 工作流程。

實驗室器具套裝可以使用 QIASymphony Management Console 或直接透過 USB 在儀器上更新。

有關檔案處理程序的更多詳細資訊，請參閱 QIASymphony SP/AS 綜合操作指南的第 6 節。

### **已安裝 QIASymphony 實驗室器具套裝的識別**

我們建議所有使用者檢查他們是否在儀器上使用最新的實驗室器具套裝。

要確定儀器上目前安裝的實驗室器具套裝版本，必須從 Labware SP 資料夾中下載 ProtocolLabwareMapping 檔案。可以使用 QIASymphony Management Console 或直接透過 USB 在儀器上下載。

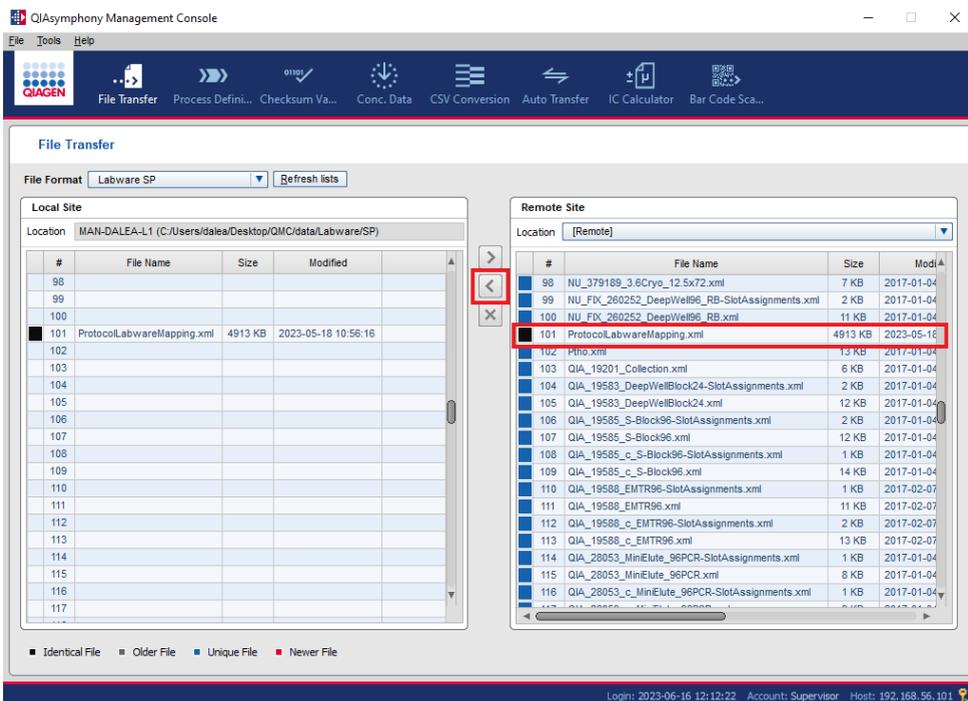


圖 1. 使用 QIASymphony Management Console 下載 ProtoCollabwareMapping 檔案。

下載後，可以在 Notepad 或同等文字編輯器中打開 ProtoCollabwareMapping 檔案。

實驗室器具套裝的版本會列在檔案標頭的摘要區段中。請參閱圖 2。

```

ProtocolLabwareMapping - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ProtocollabwareMap Type="Object" Class ="ProtocollabwareMap">
  <Header Type="Object" Class ="LabwareHeader">
    <Author Type="String">dalea</Author>
    <LastModified Type="String">2023-06-22 10:13:00</LastModified>
    <Editable Type="Bool">1</Editable>
    <ReleaseState Type="String"></ReleaseState>
    <Abstract Type="String">For labware 516-9</Abstract>
  </Header>

```

圖 2. 在 Notepad 中檢視 ProtocollabwareMapping 檔案。

如果該欄位為空，則不建議使用最新版本的 QIASymphony 操作軟體（5.0.4 版），並應進行更新。

下表顯示了為確保正確推薦每種 QIASymphony 試劑盒所需的實驗室器具套裝的最低版本要求。

試劑盒名稱	產品編號	所需的最低實驗室器具版本
QIASymphony Bisulfite FFPE Kit	931206	SOW-516-8
QIASymphony Bisulfite Kit	931106	SOW-516-8
QIASymphony Bisulfite LyseAll Kit	931306	SOW-516-8
QIASymphony Certal Residual DNA Kit	931855	SOW-516-7
QIASymphony Certal Vaccine NA Kit	931955	SOW-516-7
QIASymphony Investigator® Kit	931436	SOW-516-8
QIASymphony DNA Maxi Kit	937266	SOW-516-9
QIASymphony DNA Midi Kit	931255	SOW-516-7
QIASymphony DNA Mini Kit	931236	SOW-516-7
QIASymphony DSP DNA Midi Kit	937255	SOW-516-7
QIASymphony DSP DNA Mini Kit	937236	SOW-516-7
QIASymphony DSP Circulating DNA Kit	937556	SOW-516-9
QIASymphony DSP HPV Media Kit	937358	SOW-516-9
QIASymphony Virus/Bacteria Midi Kit	931055	SOW-516-7

試劑盒名稱	產品編號	所需的最低實驗室器具版本
QIASymphony Virus/Bacteria Mini Kit	931036	SOW-516-7
QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit	937055	SOW-516-7
QIASymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit	937036	SOW-516-7
QIASymphony <i>mericon</i> <sup>®</sup> Bacteria Kit	931156	SOW-516-7
QIASymphony PAXgene <sup>®</sup> Blood ccfDNA Kit	768536	SOW-516-7
QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit (CE-IVD)	768566	SOW-516-8
QIASymphony PAXgene Blood RNA Kit	762635	SOW-516-7
QIASymphony PowerFecal <sup>®</sup> Pro DNA Kit	938036	SOW-516-8
QIASymphony RNA Kit	931636	SOW-516-7

如果您還有其他疑問，請聯絡 QIAGEN 技術服務部（請參閱本使用手冊封底或瀏覽 [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) 網站）。

商標：QIAGEN<sup>®</sup>、Sample to Insight<sup>®</sup>、QIASymphony<sup>®</sup>、Investigator<sup>®</sup>、maricon<sup>®</sup>、PowerFecal<sup>®</sup>（QIAGEN Group）。PAXgene<sup>®</sup>（PreAnalytix GmbH）。即使沒有特別標明，本文中使用的註冊名稱、商標等也不應被視為不受法律保護。即使沒有特別標明，本文中使用的註冊名稱、商標等也不應被視為不受法律保護。

06-2023 HB-3521-001 © 2023 QIAGEN，保留所有權利。