

1 QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)


Zkumavky pro odběr krve Balení pro jednoho pacienta

(Kat. č. 622222) Pro použití od hladiny moře do 810 m. n. m.
(Kat. č. 623222) Pro použití v nadmořských výškách 1020 m až 1875 m

OBSAH

4x zkumavka pro odběr krve QFT-Plus (Nil, TB1, TB2, Mitogen)

1x příbalový leták

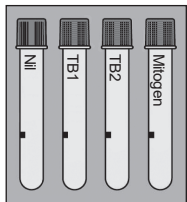


1085211CS Rev. 04 09/2018

⚠ Použití mimo specifikovaný rozsah nadmořské výšky může mít za následek změnu objemu odebírané krve.
K použití se soupravou QFT-Plus ELISA (kat. č. 622120 a 622822).



1

2 ODBĚR KRVE

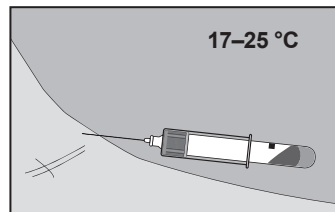

Odeberte krev ze žíly.

Pomocí vakua se do zkumavky naplní 1 ml (černá značka vyznačuje přijatelné rozmezí 0,8–1,2 ml).

Krev může téct pomalu.

Po ukončení odběru držte zkumavku na jehle po dobu 2–3 s.

Jestliže krev nedosahuje až ke značce, krev doplňte.

Technický tip


Motýlková jehla – před plněním zkumavek QFT-Plus naplňte hadičky pomocí normální zkumavky (není obsažena v dodávce).

2

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Platí standardní zásady pro zacházení s krví.
- Zkumavky skladujte a použijte při okolní teplotě laboratoře (17–25 °C).

2 ODBĚR KRVE

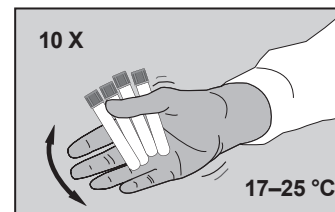

Immediately po naplnění 10x protřeptejte zkumavky tak, aby došlo ke smočení celé vnitřní stěny zkumavek krví a rozpuštění antigenů na jejich stěně.




Zkumavka by v době plnění krví měla mít teplotu 17–25 °C.

Příliš silné třepání může narušit gel a mohlo by vést k neplatným výsledkům.

Označte zkumavky příslušným způsobem.

3

3 ODESLÁNÍ/INKUBACE

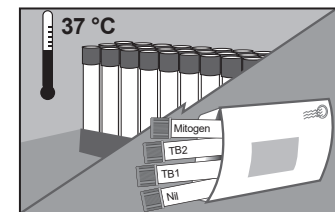

MOŽNOST 1
Inkubace
v laboratoři

Zkumavky odešlete do laboratoře při teplotě 17–27 °C. Krev se musí co nejdříve inkubovat při 37 °C (do 16 hodin od odběru).


Personál laboratoře musí před inkubací při 37 °C zkumavky okamžitě promíchat otočením 10x.

Technický tip

Zkumavky označte jako „Neinkubované“.

4

5 ODESLÁNÍ/INKUBACE

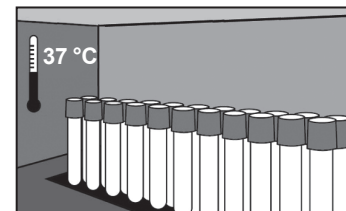

MOŽNOST 2
Inkubace na
pracovišti odběru

Krev je nutné inkubovat ve zkumavce ve vzpřímené poloze co nejdříve (do 16 hodin od odběru). Zkumavky inkubujte ve **vzpřímené** poloze při 37 °C po dobu 16–24 hodin.

Inkubátory může dodat společnost QIAGEN.


Technický tip

Vlhkost/CO₂ není nutná.

Jestliže brzy po odběru nebudou zkumavky inkubovány při 37 °C, je nutné okamžitě před inkubací zkumavky promíchat převrácením 10x.

5

6 ODESLÁNÍ/INKUBACE

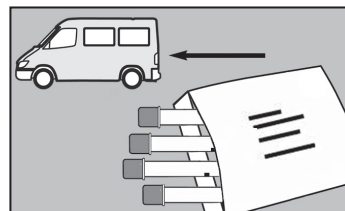

MOŽNOST 2
(pokračování)

Odešlete **inkubované** zkumavky do testující laboratoře (do 3 dnů).

Zkumavky uchovávejte při teplotě 4–27 °C.

Technický tip


Označte zkumavky jako „Inkubované“.



www.QuantiFERON.com

6

7 Odstředění

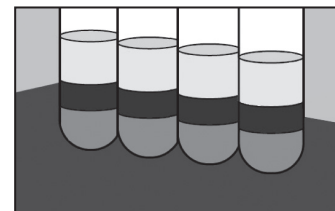

Před odběrem vzorků zkumavky odstředěte.

Otáčení nastavte na 2000–3000 g po dobu 15 minut.

Otestujte plazmu pomocí QFT-Plus ELISA nebo LIAISON® QuantiFERON-TB Gold Plus System (REF: 311010)

Plazma v odstředěných zkumavkách je stabilní po dobu 28 dní, jestliže je uložena při teplotě 2–8 °C.

Nejnovější licenční informace a prohlášení o výrobku najdete v příbalovém letáku QFT-Plus ELISA nebo LIAISON QuantiFERON-TB Gold Plus System.

7

8 KONTAKTNÍ ÚDAJE

QIAGEN

Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com

Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Middle East/Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com

Latin America (not including Brazil or Mexico):

techservice-latam@qiagen.com

Mexico: techservice-MX@qiagen.com

Brazil: techsebr@qiagen.com



QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Germany
+49-2103-29-0



IVD



4 °C – 25 °C



Antigens licensed from Statens Serum Institut
ssi.dk | serum@ssi.dk

© 2016–2018 QIAGEN, všechna práva vyhrazena.

— Sample to Insight —

