

Fuljett ta' Tagħrif dwar il-Prodott

QuantiFERON Monitor[®] LyoSpheres[™]   

Fuljett tal-Pakkett

QuantiFERON Monitor LyoSpheres	pakkett ta' 1
Nru tal-Katalgu	0650-0701
QuantiFERON Monitor LyoSphere [™]	10 kunjetti
<i>QuantiFERON Monitor LyoSpheres Fuljett ta' Tagħrif fil-Pakkett</i>	1

L-istimulanti li jifflizzati ta' QuantiFERON Monitor (QFM[®]) (LyoSpheres) huma maħsubin sabiex jintużaw biss mal-assaġġ ta' QuantiFERON Monitor. L-istruzzjonijiet li ġejjin huma relatati biss mal-użu tal-pelits QFM LyoSphere. Struzzjonijiet għall-użu, il-karatteristiċi tal-prestazzjoni, u l-interpretazzjoni tar-riżultati tal-assaġġ QFM sħiħ jistgħu jinkisbu mill-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett għal QuantiFERON Monitor 2 Plate Kit ELISA (Kat. nru. 0650-0201).

Attenzjoni: Ittratta d-demm tal-bniedem u l-plażma bħala potenzjalment infettivi. Osserva linji gwida rilevanti għat-trattment tad-demm u l-prodotti tad-demm. Armi l-kampjuni u l-materjali f'kuntatt mad-demm jew il-prodotti tad-demm skont ir-regolamenti federali, tal-Istat u lokali.

Importanti: Trid tiżdied QFM LyoSphere waħda (1) ma' 1 ml ta' demm fit-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM u titfahha tinħall. Imbagħad, it-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM irid jiġi ttrasferit f'inkubatur ta' 37°C malajr kemm jista' jkun u fi żmien 8 sigħat mill-ġbir tad-demm. Qabel l-inkubazzjoni, żomm il-kampjuni tad-demm f'temperatura ambjentali (22 ± 5°C).

Importanti: Spezzjona l-kunjetti ta' LyoSphere qabel tużahom. Tużax LyoSphere jekk il-kunjett juri sinjali ta' ħsara jew jekk is-siġill tal-lasktu jkun milqut b'xi mod. Tmissx kunjetti mkissrin. Ftu l-prekawzjonijiet ta' sikurezza xierqa biex tarmihom b'mod sikur.

Rakkomandazzjonijiet: Uża tnalja tal-kunjetti biex tiftaħ kunjetti ta' LyoSphere ħalli tnaqqas ir-riskju li twegġa' minħabba s-siġill tal-metall.

Il-proċeduri li ġejjin għandhom jiġu segwiti għall-aħjar riżultati.

Ġbir tad-demm:

L-istruzzjonijiet iddettalji għall-ġbir tad-demm jistgħu jinkisbu mill-fuljetti ta' tagħrif fil-pakkett għal QuantiFERON Monitor Blood Collection Tubes (Kat. nru. 0650-0101) u QuantiFERON Monitor 2 Plate Kit ELISA (Kat. nru. 0650-0201).

Inkubazzjoni tad-Demm u Ġbir tal-Plażma:

- Jekk tuża tubu ġeneriku tal-eparina tal-litju, agħmel tikketta xierqa fuq it-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM.**
Waħħal tikketta mat-tubu bid-dettalji tal-pazjent u l-ħin tal-ġbir tad-demm.
- Jekk id-demm ingabar f'tubu ġeneriku tal-eparina tal-litju, ittrasferixxi b'mod asettiku 1 ml demm fit-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM.**
Ara li d-demm jithallat sew permezz ta' inverżjoni bil-galbu eżatt qabel ma tqassmu fit-tubu tal-QFM.
- Ara li QFM LyoSpheres ikollhom temperatura ambjentali (22 ± 5°C) eżatt qabel ma jintużaw.**



4. Neħni t-tapp tat-tubi tal-ġbir tad-demmm.
5. Taptap bil-galbu fuq il-kunjett ta' QFM LyoSphere fuq wiċċ iebes biex tkun żgur li l-pelit ta' QFM LyoSphere tinsab f'qiegħ il-kunjett. Imbagħad, neħni t-tapp tal-kunjett ta' QFM LyoSphere billi l-ewwel tneħni t-tapp issiġillat tal-metall u mbagħad tneħni t-tapp tal-lasktu.
6. Itfa' l-pelit ta' QFM LyoSphere bir-reqqa fil-1 ml demm billi tallinja x-xoffa tal-kunjett tal-ħġieġ max-xoffa tat-tubu tal-ġbir tad-demmm, u mbagħad aqleb il-kunjett bil-galbu biex tittrasferixxi l-pelit (Figura 1).

Nota: Jekk QFM LyoSphere taqa' barra t-tubu tal-ġbir tad-demmm, armiha u iftaħ kunjett ieħor ta' QFM LyoSphere.

Nota: Thallix il-kunjett ta' QFM LyoSphere miftuħ għal perjodi twal ta' żmien. QFM LyoSphere għandha tiżdied mad-demmm malli jitneħna t-tapp tal-kunjett.

Jekk QFM LyoSphere tiżdied mad-demmm li jkun ingabar fit-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM, ara li t-tapp tat-tubu jitregġa' lura għall-kampjun it-tajjeb.

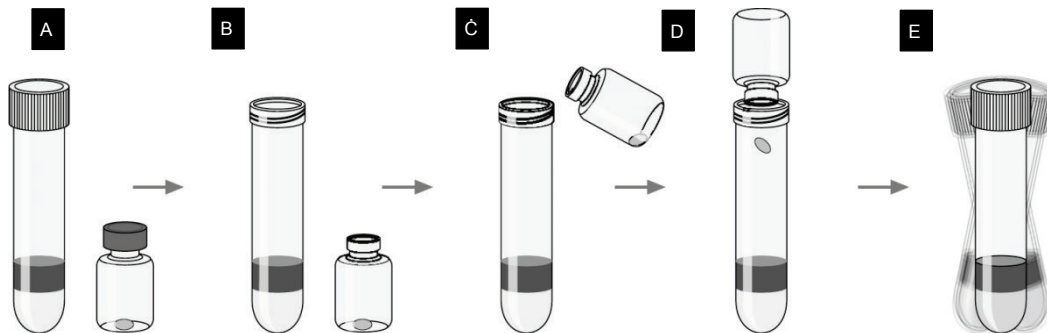


Figura 1. Tidħil ta' QFM LyoSphere.

A. Tubi tal-Ġbir tad-Demm QFM u kunjett ta' QFM LyoSphere. **B.** Neħni t-tapp mit-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM. Neħni s-siġill tal-metall u t-tapp tal-lasktu mill-kunjett ta' QFM LyoSphere. **C.** Mill-ewwel zid QFM LyoSphere fid-demmm billi tallinja x-xoffa tal-kunjett tal-ħġieġ max-xoffa tat-tubu tal-ġbir. **D.** Imbagħad, aqleb il-kunjett bil-galbu biex tittrasferixxi l-pelit fit-tubu. **E.** Erga' aghlaq it-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM u ħawdu 5 sa 10 darbiet.

7. Agħlaq it-tapp tat-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM u bil-galbu fawdu 5-10 darbiet jew sakemm il-pelit tinħall għal kollox.

QFM LyoSphere li tehel mal-wiċċ ta' gewwa tat-tubu tista' tinħall billi jingħadda d-demm minn fuqha waqt li taqleb it-tubu.

Ara li t-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM jerġa' jingħalaq bit-tapp malli tiddaħhal LyoSphere, sabiex tevita milli tiddaħhal QFM LyoSphere oħra fl-istess tubu.

Peress li QFM LyoSphere hija bajda, ladarba tinħall mhux ser tibqa' tidher fid-demm.

Taħwid eċċessiv tat-tubu jista' jikkawża xkiel għall-gel u jista' jwassal għal riżultati imprecizi.

8. Wara li QFM LyoSphere tiddaħhal u mbagħad tinħall, it-Tubu tal-Ġbir tad-Demm QFM irid jiġi ttrasferit f'inkubatur ta' $37 \pm 1^\circ\text{C}$ malajr kemm jista' jkun (u fi żmien 8 sigħat minn meta jingħabar id-demm).

9. Inkuba t-tubi WEQFIN f'temperatura ta' 37°C għal bejn 16-il siegħa sa 24 siegħa. L-inkubatur ma għandux bżonn ta' CO_2 jew ta' umidifikazzjoni.

10. Wara l-inkubazzjoni f' 37°C , it-Tubi tal-Ġbir tad-Demm QFM jistgħu jinżammu bejn 4 u 27°C għal mhux iktar minn 3 ijiem, qabel iċ-ċentrifugazzjoni.

11. Il-ġbir tal-plażma (wara l-inkubazzjoni) jithaffef biċ-ċentrifugazzjoni tat-tubi għal 15-il minuta b'2000 sa $3000 \times g$ (RCF). Il-plagg tal-gell se jissepara ċ-ċelluli mill-plażma. Jekk dan ma jseħh, it-tubi se jrin jigu ċ-ċentrifugati għal darb'oħra.

Nota importanti: Wara ċ-ċentrifugazzjoni, evita li tippipetta 'l fuq jew 'l isfel jew tħallat il-plażma b'xi mod ieħor qabel il-ħsad. Fi kwalunkwe ħin, oqgħod attent/a li ma tiddisturbax materjal fuq il-wiċċ tal-gell.

Nota importanti: Meta jingħabru kampjuni tal-plażma, iġbor tal-inqas 150 μl ta' plazma biex it-testijiet ikunu jistgħu jerġgħu jsiru jekk jinqala' l-bżonn.

Huwa possibbli li l-plażma tingħabar mingħajr iċ-ċentrifugazzjoni. Madankollu, hemm bżonn ta' attenzjoni ikbar biex titneħħa l-plażma bla ma jiġu ddisturbati ċ-ċelloli. Kampjuni tal-plażma għandhom jinħasdu biss permezz ta' pipetta.

12. Il-kampjuni tal-plażma jistgħu jitgħabbew direttament mit-tubi tal-ġbir tad-demm ċentrifugat fil-platt tal-ELISA QFM. Dan jista' jsir ukoll meta jintużaw stazzjonijiet tax-xogħol ELISA awtomatizzati.

13. Il-kampjuni tal-plażma jistgħu jinħażnu sa 28 ġurnata f'temperatura ta' 2 sa 8°C jew, jekk jingħabru, f'temperatura ta' inqas minn -20°C għal perjodi estiżi.

IFN- γ ELISA:


Struzzjonijiet iddettaljati għal IFN- γ ELISA jistgħu jinkisbu mill-fuljett ta' tagħrif għal QuantiFERON Monitor 2 Plate Kit ELISA (Kat. nru. 0650-0201).



QIAGEN
19300 Germantown Rd.
Germantown, MD 20874
L-ISTATI UNITI



www.QuantiFERON.com

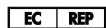

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
IL-ĠERMANJA

Żur www.qiagen.com għal appoġġ
tekniku kkuntattja lill-informazzjoni.

Marki kummerċjali: QIAGEN[®], QFM[®], QuantiFERON Monitor[®] (Grupp QIAGEN); LyoSphere[™], LyoSpheres[™] (BioLyph Inc.). Ismijiet irregistrati, marki kummerċjali, eċċ. użati f'dan id-dokument, anki meta ma jkunux immarkati b'halo tali, ma jidherx li mhumiex protetti mil-liġi. Għal liċenzjar u rinunzji speċifiċi għall-prodott aggornati, ara *L-Fuljett ta' Tagħrif fil-Pakkett ta' QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA*.
1079029MT Rev. 01 11/2014 © 2014 QIAGEN, id-drittijiet kollha riservati.

www.qiagen.com
Australia ■ 1-800-243-800
Austria ■ 0800-281011
Belgium ■ 0800-79612
Brazil ■ 0800-557779
Canada ■ 800-572-9613
China ■ 800-988-0325

Denmark ■ 80-885945
Finland ■ 0800-914416
France ■ 01-60-920-930
Germany ■ 02103-29-12000
Hong Kong ■ 800 933 965
India ■ 1-800-102-4114
Ireland ■ 1800 555 049

Italy ■ 800-787980
Japan ■ 03-6890-7300
Korea (South) ■ 080-000-7145
Luxembourg ■ 8002 2076
Mexico ■ 01-800-7742-436
The Netherlands ■ 0800-0229592
Norway ■ 800-18859

Singapore ■ 1800-742-4368
Spain ■ 91-630-7050
Sweden ■ 020-790282
Switzerland ■ 055-254-22-11
Taiwan ■ 0800-665-957
UK ■ 0808-2343665

