


# QuantiFERON<sup>®</sup> Control Panel Package Insert

**REF** 0594-0805



**QIAGEN**  
19300 Germantown Road  
Germantown, MD 20874  
L-Istati Uniti

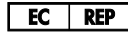

**QIAGEN GmbH**  
QIAGEN Strasse 1  
40724 Hilden  
ĠERMANJA

1075111MT Rev. 06 07/2018



[www.QuantiFERON.com](http://www.QuantiFERON.com)

Użu maħsub

QuantiFERON Control Panel fih sett ta' 3 kontrolli interferon $\gamma$  (IFN- $\gamma$ ) għal użu fakultattiv ma' assaġġi taċ-ċelloli medjati immunitarji (cell-mediated immune, CMI) ta' QuantiFERON. Il-kontrolli IFN- $\gamma$  huma pprovduti fi tliet livelli (1, 2 u 3) fil-firxa lineari tal-QuantiFERON ELISA.

Sommarju u Spjegazzjoni

QuantiFERON Control Panel fih IFN- $\gamma$  lijoġġenat tal-bniedem rikombinat u jrid jiġi rikostitwit qabel l-użu. Il-konċentrazzjoni IFN- $\gamma$  ta' kull QuantiFERON Control Panel se tvarja fost il-lottijiet. Il-valuri assenjati ta' QuantiFERON Control Panel huma indikati fuq it-tikketta tal-prodott. Prinċipji tal-Proċedura

QuantiFERON Control Panel jista' jintuża biex jivvaluta l-prestazzjoni ta' kwalunkwe QuantiFERON ELISA, li jintuża għall-identifikazzjoni ta' risposti CMI. It-3 livelli ta' kontroll fihom konċentrazzjonijiet differenti tal-IFN- $\gamma$  u jipprovdu riżultati fil-firxa ta' kwalunkwe QuantiFERON ELISA. Uża l-kontrolli bl-istess mod bħall-kampjuni tal-plasma fi kwalunkwe QuantiFERON ELISA.

## Reaġenti u Fżin

QuantiFERON Control Panel (nru. tal-kategorija 0594-0805)	Kwantità
QuantiFERON IFN- $\gamma$ Control – Level 1	3 x kunjetti
QuantiFERON IFN- $\gamma$ Control – Level 2	3 x kunjetti
QuantiFERON IFN- $\gamma$ Control – Level 3	3 x kunjetti
Package Insert	1

Aħżen il-Kontrolli li joffilizzati ta' QuantiFERON bejn 2°C u 8°C. Tużax wara d-data ta' skadenza. Il-Kontrolli ta' QuantiFERON rikostitwiti jridu jinħażnu bejn 2°C u 8°C u jistgħu jintużaw fi żmien 28 jum ta' rekostituzzjoni.

## Twissijiet u Prekawzjonijiet

### Għal użu dijanjostiku in vitro

Meta taħdem bil-kimiki, dejjem uża ġagaga tal-laboratorju, ingwanti li jintremew, u nuċċali protettivi adatti. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-iskedi ta' data ta' sigurtà (safety data sheets, SDSs) xierqa. Dawn huma disponibbli onlajn f'format PDF konvenjenti u kumpatt fuq [www.qiagen.com/safety](http://www.qiagen.com/safety) fejn inti tista' ssib, tara, u tipprintja l-SDS għal kull kitt u komponent ta' kitt.

**Importanti:** Spezzjona l-kunjetti qabel l-użu. Tużax il-kunjetti tal-panil tal-kontroll li juru sinjali ta' ħsara jew jekk is-siġill tal-lastiku jkun ġie mbaġħbas. Tqandilx kunjetti mkissrin. Hu l-prekawzjonijiet ta' sigurtà xierqa biex tarmihom b'mod sikur. Huwa rrakkomandat li: Tuża tnalja għall-kunjetti sabiex tiftaħ il-kunjetti tal-panil tal-kontroll sabiex tnaqqas ir-riskju ta' korrimment mit-tinja tal-metall.

## Direzzjonijiet għall-Użu

1. Ħalli s-sett ta' 3 kontrolli (Livelli 1, 2 u 3) jekwilibrat għat-temperatura tal-kamra (17°C sa 27°C).
2. Erġa' imla l-kunjetti b'0.25 ml ta' ilma distillat jew dejonizzat b'temperatura tal-kamra (17°C sa 27°C), filwaqt li tiżgura rispensjoni kompleta. Ħawwad b'diversi inverżjonijiet ħfief sabiex tnaqqas ir-ragħwa.
3. Żid 50  $\mu$ l ta' kkonjugat b'qawwa għall-użu ppreparat dak il-ħin fil-bjar tal-ELISA xierqa qabel il-kontroll jew iż-żieda fil-kampjun.
4. Żid 50  $\mu$ l ta' kull livell ta' kontroll rikostitwit għat-toqob tal-ELISA xierqa.

5. Żid 50 µl tal-istandards fil-bjar tal-ELISA xierqa wara l-kontroll u ż-żieda fil-kampjun, billi tnaqqas id-dewmien bejn iż-żidiet kemm jista' jkun.
6. Wara l-użu, aħžen is-sett ta' 3 kontrolli rikostitwiti bejn 2°C u 8°C immedjatament.
7. Ittestja t-3 kontrolli rikostitwiti bħala kampjuni tal-plasma, kif ordnat fil-fuljett ta' tagħrif QuantiFERON ELISA applikabbli għat-test li jkun qed jitwettaq (ara t-tabella hawn taħt għal preżentazzjonijiet issuġġeriti).

Assaġġ	Dilwent Aħdar	Livell 1	Livell 2	Livell 3
QFT	N/A	Nil	TB Antigen	Mitoġenu
QFT-Plus	Nil	TB1	TB2	Mitoġenu
QF-CMV	N/A	Nil	CMV Antigen	Mitoġenu
QFM	N/A	Mhux dilwit	1:100	1:100

#### Interpretazzjoni tar-Riżultati

Iddetermina l-validità ta' QuantiFERON ELISA kif deskritt fil-fuljett ta' tagħrif ta' QuantiFERON ELISA assoċjat. Il-panil tal-kontroll huwa maħsub bħala gwida għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-QuantiFERON ELISA f'laboratorji individwali.

Is-softwer tal-analiżi QuantiFERON jista' jintuża għall-kalkolu tal-valuri ta' QuantiFERON Control Panel. Meta tuża s-softwer tal-analiżi QuantiFERON, jekk jogħġbok agħżel il-bjar tal-Panil tal-Kontroll bħala kampjuni tal-pazjenti għall-metodu kwalitattiv. Għall-metodu alternattiv, agħżel il-bjar tal-Panil tal-Kontroll fit-tabella 2 hawn fuq u uża biss il-valuri IU/ml bħala r-riżultati għall-kontrolli.

Jekk ma tkunx qed tuża s-softwer tal-analiżi QuantiFERON fakultattiv, ikkalkula r-riżultati għall-kampjuni tal-panil tal-kontroll daqslikieku huma kampjuni tal-pazjenti, billi ssegwi d-direzzjonijiet deskritti fil-fuljett ta' tagħrif QuantiFERON ELISA rispettiv.

**Nota:** Laboratorju jista' jagħżel li jstabbilixxi l-firxa mistennija tiegħu stess għal kull lott ta' QuantiFERON Control Panel. Il-varjazzjonijiet jistgħu jiġu osservati abbażi tad-differenzi fit-teknika tal-laboratorju, l-istrumentazzjoni, il-lott tar-reagent, u żbalji sistemici jew mhux sistemici oħrajn.

Kull lott ta' QuantiFERON Control Panel huwa ttestjat bil-Kontroll tal-Kwalità bl-użu ta' lottijiet ta' kitt ta' QuantiFERON ELISA multipli biex tiġi ddeterminata l-firxa ta' konċentrazzjoni assenjata ta' IFN.γ Il-konċentrazzjoni medja hija stampata fuq it-tikketta ta' kull kunjett, u kemm il-firxiet medji kif ukoll dawk mistennija huma pprovduti fuq it-Tikketta tad-Data Teknika mwaħħla mal-parti ta' ġewwa ta' kull kaxxa tal-kit. Il-medja indikata u l-medda mistennija tal-medja huma maħsuba biss bħala gwida għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-QuantiFERON ELISA flaboratorji individwali.

## Limitazzjonijiet

Armi jekk ikun hemm xi evidenza ta' kontaminazzjoni mikrobjali jew turbidità eċċessiva. Ir-riżultati riproducibbli huma dipendenti fuq tagħmir li jiffunzjona kif suppost u kalibrat.

## Tibdil Konsiderevoli

It-tibdil konsiderevoli f'din l-edizzjoni ta' QuantiFERON Control Panel Package Insert huwa miġbur fil-qosor fit-tabella ta' hawn taft:

Taqsim	Paġna	Tibdil
Twissijiet u Prekawzjonijiet	2	Neħhi l-informazzjoni dwar GHS

## Simboli



Manifattur legali



Simbolu mmarkat CE-IVD



Għal użu dijanjostiku in vitro



Kodiċi tal-lott



Numru tal-katalgu



Numru tal-Oġġett tal-Kummerċ Globali



Uża sad-data



Limitazzjoni fit-temperatura




Ikkonsulta l-istruzzjonijiet qabel l-użu



Terġax tuża'



Żomm 'il bogħod mid-dawl tax-xemx

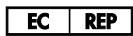

Rappreżentant awtorizzat fil-Komunità Ewropea

## Informazzjoni ta' Kuntatt

Għal assistenza teknika u għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ċempel mingħajr flus fuq 00800-22-44-6000, żur iċ-Ċentru ta' Appoġġ Tekniku tagħna fuq [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) jew ikkuntattja wieħed mid-Dipartimenti tas-Servizzi Tekniċi QIAGEN (ara l-kaver ta' wara jew żur [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)).

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, QuantiFERON® (QIAGEN Group); ProCin® (Rohm and Haas Co.).

### Ftehim għall-Fruġ ta' Liċenzji Limitati għall- QuantiFERON Control Panel

L-użu ta' dan il-prodott ifisser li kwalunkwe xerrej jew utent tal-prodott jaqbel mat-termini li ġejjin:

1. Il-prodott jista' jintuza biss skont il-protokoll pprovduti mal-prodott u f'dan il-manwal u għall-użu mal-komponenti li jinsabu fil-kitt biss. QIAGEN ma tagħti l-ebda liċenzja, taht l-ebda proprjetà intellettuali tagħha, biex wiehed juża jew jinkorpora l-komponenti magħluqa f'dan il-kitt ma' kwalunkwe komponent li ma jkunx inkluż f'dan il-kitt, hleif kif deskritt fil-protokoll pprovduti mal-prodott, f'dan il-manwal, u fi protokoll addizzjonali disponibbli fuq [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com). Uhud minn dawn il-protokoll addizzjonali ġew ipprovduti mill-utenti ta' QIAGEN għall-utenti ta' QIAGEN. Dawn il-protokoll ma gewx ittestjati jew ottimizzati bir-reqqa minn QIAGEN. QIAGEN la tiggarrantixxihom u lanqas ma titlob li dawn ma jksrux id-drittijiet ta' partijiet terzi.
2. Ghajr il-liċenzji ddiġarati espressament, QIAGEN ma titlobx li dan il-kitt u/jew l-użu(i) tiegħu ma jksrux id-drittijiet ta' partijiet terzi.
3. Dan il-kitt u l-komponenti tiegħu huma liċenzjati għal użu ta' darba u ma jstgħux jergħu jintużaw, jiġu rinovati jew jergħu jinbighu.
4. QIAGEN speċifikament tirrinunza kwalunkwe liċenzja oħra, espressa jew impliċita ghajr dawk iddiġarati espressament.
5. Ix-xerrej u l-utent tal-kitt jaqblu li ma jehdux jew ma jhallu lil hadd jiehu xi pass li jista' jwassal għal jew jiffacilita kwalunkwe att ipprobit hawn fuq. QIAGEN tista' tinforza l-projbizzjonijiet ta' dan il-Ftehim għall-Fruġ ta' Liċenzji Limitati fi kwalunkwe Qorti, u għandha tkopri l-kostijiet investigattivi u tal-Qorti kollha tagħha, inklużi t-tariffi tal-avukat, fi kwalunkwe azzjoni biex jiġi inforzat dan il-Ftehim għall-Fruġ ta' Liċenzji Limitati jew kwalunkwe wiehed mid-drittijiet ta' proprjetà intellettuali tagħha li jirrelata mal-kitt u/jew mal-komponenti tiegħu.

Għal termini tal-liċenzja aġġornati, ara [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

© 2015-2018 QIAGEN, Kull dritt huwa rizervat.

Ordinijiet [www.qiagen.com/contact](http://www.qiagen.com/contact) | Appoġġ Tekniku [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) | Sit Web [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)