

Dôležitá poznámka

Vydanie QIASymphony® Labware Package SOW-516-9

Vážený spotrebiteľ,

Radi by sme vás informovali o vydaní aktualizovaného laboratórneho balíka QIASymphony pre váš nástroj QIASymphony SP/AS.

Zmeny v tomto balíku ovplyvňujú nasledujúce súpravy QIASymphony.

- Súprava QIASymphony DSP Circulating DNA Kit (katalógové číslo 937556)
- Súprava QIASymphony DSP HPV Media Kit (katalógové číslo 937358)
- Súprava QIASymphony DNA Maxi Kit (katalógové číslo 937266)
- Súprava QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit (katalógové číslo 937055) a súprava QIASymphony Virus/Bacteria Mini Kit (katalógové číslo 931036)

Tabuľka 1. Aktualizácie balíka QIASymphony Labware Package

Súprava	Protokol	Zmeniť podrobnosti
QIASymphony DSP Circulating DNA Kit	circDNA_1000_DSP_V1	Pridanie odporúčaní pre laboratórny softvér potrebný na použitie s týmto nedávno zavedeným protokolom.
QIASymphony DSP Circulating DNA Kit	circDNA_2000_DSP_V3 circDNA_4000_DSP_V3	Odstránenie BD_FIX_#352051 FalconPP 17x100 ako odporúčanej skúmavky pre vstup vzorky v kombinácii s vydaním verzie 3 týchto protokolov.
QIASymphony DSP HPV Media Kit	SP800_HC2_V1_DSP	Pridanie SAR#72.693 T2.0 ako odporúčanej skúmavky pre vstup vzorky.
QIASymphony DNA Maxi Kit	DNA_Blood_2000_V1 DNA_Blood_4000_V1	Pridanie odporúčaní pre laboratórny softvér pre skúmavky s proteinázou K, ktoré v predchádzajúcom balíku laboratórneho softvéru chýbali.
QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit QIASymphony Virus/Bacteria Mini Kit	Cellfree500_V5_DSP	Zvýšenie vstupného objemu zo 750 µl na 850 µl pri použití BD_352051_FalconPP_17x100 pre vstup vzorky

Používatelia dotknutých protokolov sa musia uistiť, že čo najskôr aktualizujú balík laboratórneho softvéru na svojom prístroji QIASymphony SP/AS, aby sa zabezpečilo nepretržité dodržiavanie pracovného postupu QIAGEN.


Balík laboratórneho softvéru je možné aktualizovať pomocou riadiacej konzoly QIASymphony alebo priamo na prístroji cez USB.

Ďalšie podrobnosti o postupoch narábania so súbormi nájdete v časti 6 Súhrnná prevádzková príručka QIASymphony SP/AS.

Identifikácia nainštalovaného balíka QIASymphony Labware Package

Odporúčame, aby si všetci používatelia skontrolovali, či na svojich prístrojoch používajú najaktuálnejší balík laboratórných pomôcok.

Na určenie verzie balíka laboratórných pomôcok aktuálne nainštalovaného vo vašom prístroji je potrebné stiahnuť súbor ProtocolLabwareMapping z priečinka Labware SP. Dá sa stiahnuť pomocou riadiacej konzoly QIASymphony alebo priamo z USB zariadenia.

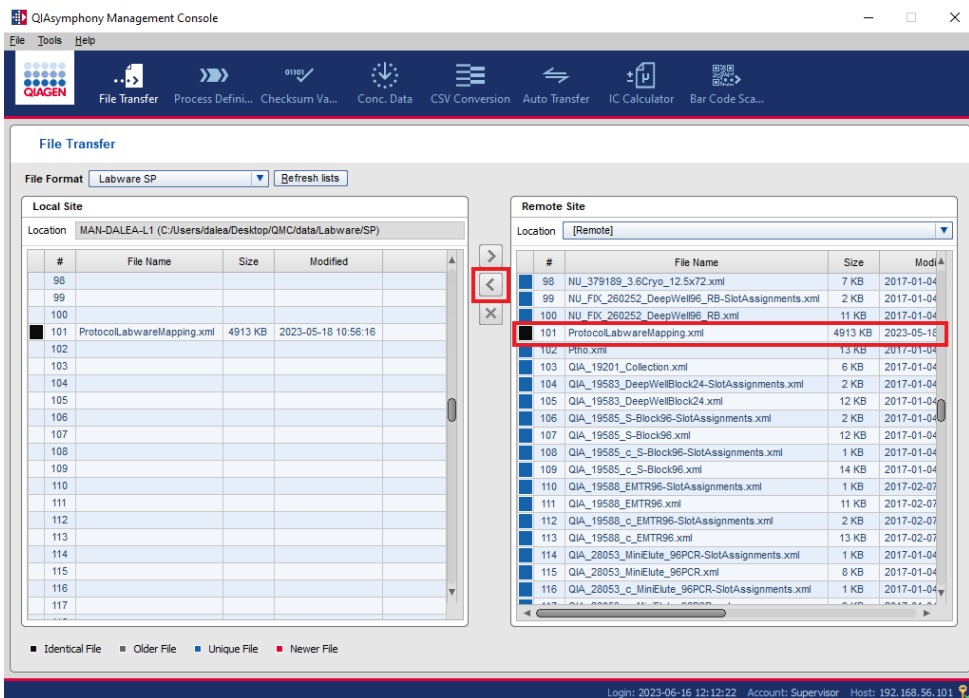

Obrázok 1. Stiahnite si súbor ProtocolLabwareMapping pomocou riadiacej konzoly QIASymphony.

Po stiahnutí je možné súbor ProtocolLabwareMapping otvoriť v programe Poznámkový blok alebo ekvivalentnom textovom editore.

Verzia balíka laboratórných pomôcok je uvedená v sekcii Abstrakt v hlavičke súboru. Pozri obrázok 2.

```

ProtocolLabwareMapping - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ProtocolLabwareMap Type="Object" Class ="ProtocolLabwareMap">
  <Header Type="Object" Class ="LabwareHeader">
    <Author Type="String">dalea</Author>
    <LastModified Type="String">2023-06-22 10:13:00</LastModified>
    <Editable Type="Bool">1</Editable>
    <ReleaseState Type="String"></ReleaseState>
    <Abstract Type="String">For labware 516-9</Abstract>
  </Header>

```

Obrazok 2. Zobrazenie súboru ProtocolLabwareMapping v programe Poznámkový blok.

Ak je toto pole prázdne, načítaný balík laboratórných pomôcok sa neodporúča používať s najnovšou verziou operačného softvéru QIASymphony (verzia 5.0.4) a musí sa aktualizovať.

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje minimálnu požadovanú verziu balík laboratórných pomôcok Labware Package potrebnú na zabezpečenie správnych odporúčaní pre laboratórny softvér pre každú súpravu QIASymphony.

Názov súpravy	Kat. č.	Vyžaduje sa minimálna verzia laboratórných pomôcok
Súprava QIASymphony Bisulfite FFPE	931206	SOW-516-8
Súprava QIASymphony Bisulfite Kit	931106	SOW-516-8
Súprava QIASymphony Bisulfite LyseAll Kit	931306	SOW-516-8
Súprava QIASymphony Certal Residual DNA Kit	931855	SOW-516-7
Súprava QIASymphony Certal Vaccine NA Kit	931955	SOW-516-7
Súprava QIASymphony Investigator® Kit	931436	SOW-516-8
QIASymphony DNA Maxi Kit	937266	SOW-516-9
Súprava QIASymphony DNA Midi Kit	931255	SOW-516-7
Súprava QIASymphony DNA Mini Kit	931236	SOW-516-7
Súprava QIASymphony DSP DNA Midi Kit	937255	SOW-516-7
Súprava QIASymphony DSP DNA Mini Kit	937236	SOW-516-7
QIASymphony DSP Circulating DNA Kit	937556	SOW-516-9
QIASymphony DSP HPV Media Kit	937358	SOW-516-9

Názov súpravy	Kat. č.	Vyžaduje sa minimálna verzia laboratórnych pomôcok
Súprava QIASymphony Virus/Bacteria Midi Kit	931055	SOW-516-7
Súprava QIASymphony Virus/Bacteria Mini Kit	931036	SOW-516-7
QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit	937055	SOW-516-7
QIASymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit	937036	SOW-516-7
Súprava QIASymphony <i>mericon</i> [®] Bacteria Kit	931156	SOW-516-7
Súprava QIASymphony PAXgene [®] Blood ccfDNA Kit	768536	SOW-516-7
Súprava QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit (CE-IVD)	768566	SOW-516-8
Súprava QIASymphony PAXgene Blood RNA Kit	762635	SOW-516-7
Súprava QIASymphony PowerFecal [®] Pro DNA Kit	938036	SOW-516-8
Súprava QIASymphony RNA Kit	931636	SOW-516-7

V prípade ďalších otázok kontaktujte technické služby spoločnosti QIAGEN (pozri zadnú časť našich príručiek alebo navštívte stránku www.qiagen.com)

Ochranné známky: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], QIASymphony[®], Investigator[®], *mericon*[®], PowerFecal[®] (QIAGEN Group), PAXgene[®] (PreAnalytix GmbH). Registrované názvy, ochranné známky atď. použité v tomto dokumente sa nesmú považovať za známky nechránené podľa zákona, i keď neboli ako také označené príslušným symbolom. Registrované názvy, ochranné známky atď. použité v tomto dokumente sa nesmú považovať za známky nechránené podľa zákona, i keď neboli ako také označené príslušným symbolom.

06-2023 HB-3521-001 © 2023 QIAGEN, všetky práva vyhradené.