



2024 m. sausis

„QIAstat-Dx[®] Respiratory SARS-CoV-2 Panel” naudojimo instrukcijos (vadovas)



2 versija

Skirta in vitro diagnostikai

Skirta naudoti su „QIAstat-Dx Analyzer 1.0”, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0”, ir „QIAstat-Dx Rise”

IVD



REF

691214



„QIAGEN GmbH”, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden

R2

Turiny

Numatytoji paskirtis	5
Santrauka ir paaiškinimas	6
„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės aprašas	6
Informacija apie patogenus	8
Procedūros principas	10
Proceso aprašas	10
Mėginio paėmimas ir įkėlimas į kasetę	11
Mėginio paruošimas, nukleorūgštis amplifikacija ir aptikimas	13
Pateikiamos medžiagos	14
Rinkinio turinys	14
Nepateiktos, bet reikalingos medžiagos	15
Įspėjimai ir atsargumo priemonės	16
Saugos informacija	16
Atsargumo priemonės	17
Kasečių laikymas ir naudojimas	18
Bandinių naudojimas, sandėliavimas ir paruošimas	18
Skysti mėginiai transportavimo terpėje	18
Sauso tampono mėginiai	19
Vidinė kontrolinė medžiaga	19
Protokolas. Sauso tampono mėginiai	20
Mėginio paėmimas, transportavimas ir laikymas	20
Mėginio perkėlimas į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę	20
Testo vykdymas „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0”	24
Testo vykdymas su „QIAstat-Dx Rise”	31

Protokolas. Skysti mėginiai transportavimo terpėje	45
Mėginio paėmimas, transportavimas ir laikymas	45
Testo vykdymas „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“	50
Testo vykdymas su „QIAstat-Dx Rise“	57
Mėginių prioriteto nustatymas	69
Mėginio apdorojimo nutraukimas	72
Rezultatų aiškinimas.....	75
Rezultatų peržiūra su „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ..	75
Rezultatų aiškinimas su „QIAstat-Dx Rise“	86
Kokybės kontrolė	90
Apribojimai.....	90
Eksploatacinių ypatybių charakteristikos	92
Klinikinis efektyvumas	92
Analitinis efektyvumas.....	99
Tyrimo vientisumas	102
Išimtinumas (analizinis specifiškumas)	102
Aprėptis (analitinis reaktyvumas)*	104
Bendros infekcijos	108
Trukdančios medžiagos	110
Pernešimas	111
Atkuriamumas	111
Mėginio stabilumas	118
Priedai	120
A priedas. Tyrimo apibrėžimo failo diegimas.....	120
B priedas. Specialiųjų terminų žodynas	123
C priedas. Garantijų atsakomybės atsisakymas.....	125

Literatūra	126
Simboliai	128
Užsakymo informacija	129
Dokumento peržiūros istorija	130

Numatytoji paskirtis

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ – tai kokybinis testas, skirtas nazofaringinių tamponų (Nasopharyngeal Swab, NPS) mėginiams, paimtiems iš pacientų, kuriems įtariamos kvėpavimo takų infekcijos, tiriant virusinių arba bakterinių nukleorūgščių buvimą. Su „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ galima naudoti sausus tamponus ir skystus mėginius transportavimo terpėje. Tyrimas sukurtas naudoti su „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“, kuriuose integruota nukleorūgščių ekstrakcijos funkcija ir sudėtinės „real-time RT-PCR“ aptikimas.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ aptinka ir skiria* SARS-CoV-2, A gripo virusą, A gripo viruso potipį H1N1/2009, A gripo viruso potipį H1, A gripo viruso potipį H3, B gripo virusą, koronavirusą 229E, koronavirusą HKU1, koronavirusą NL63, koronavirusą OC43, paragripo virusą 1, paragripo virusą 2, paragripo virusą 3, paragripo virusą 4, kvėpavimo sincitinį virusą A/B, žmogaus metapneumovirusą A/B, adenovirusą, bokavirusą, rinovirusą/enterovirusą, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydomphila pneumoniae*, *Legionella pneumophila* ir *Bordetella pertussis*.

*„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ aptinka enterovirusą ir rinovirusą, tačiau neskiria jų.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ rezultatus būtina interpretuoti visų susijusių klinikinių ir laboratorinių tyrimų rezultatų kontekste.

Tyrimo efektyvumo charakteristikos buvo nustatytos tik asmenims, kuriems pasireiškė kvėpavimo takų sutrikimų simptomai.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ sistema skirta tik profesionaliam naudojimui ir nėra skirta savitikrai.

Skirta in vitro diagnostikai.

Santrauka ir paaiškinimas

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės aprašas

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetė yra vienkartinis plastikinis prietaisas, kurį naudojant galima atlikti visiškai automatizuotus molekulinis tyrimus, skirtus kvėpavimo takų patogenams nustatyti. Pagrindinės „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės ypatybės yra suderinamumas su sausais kvėpavimo takų tamponais („Copan® FLOQSwabs®“, kat. nr. 503CS01) ir skystais mėginiais transportavimo terpėje, hermetiškas iš anksto įdėtų reagentų, reikalingų testams, sulaukymas ir naudojimas neprižiūrint. Visi mėginių paruošimo ir tyrimo testų etapai atliekami kasetėje.

Visi testui iki galo atlikti reikalingi reagentai yra iš anksto supilstyti ir atskirai uždaryti „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetėje. Naudotojui nereikia liestis prie reagentų ir (arba) jų tvarkyti. Atliekant tyrimą reagentai tvarkomi „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“ analizės modulyje esančioje kasetėje, pneumatiniu būdu valdant skysčių mikrokiekus ir be tiesioginio kontakto su pavaromis. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“ yra įleidžiamo ir išleidžiamo oro filtrai, suteikiantys papildomą apsaugą aplinkai. Atlikus tyrimą, kasetė visą laiką lieka hermetiškai uždaryta, todėl ją ypač saugu utilizuoti.


Kasetėje automatiškai iš eilės atliekami keli žingsniai, naudojant pneumatinį slėgį mėginiams ir skysčiams per perdavimo kamerą perkelti į numatytas paskirties vietas.

Kai „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetė, kurioje yra mėginys, įstatoma į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“, toliau nurodyti tyrimo veiksmai atliekami automatiškai:

- vidinės kontrolinės medžiagos suspensijos atkūrimas;
- ląstelių lizė mechaninėmis ir (arba) cheminėmis priemonėmis;
- nukleorūgščių grynimasis membranos pagrindu;
- išgrynintų nukleorūgščių maišymas su liofilizuotais pagrindinio mišinio reagentais;
- apibrėžtų eliuato/pagrindinio mišinio alikvotinių dalių perkėlimas į skirtingų reakcijų kameras;

- sudėtinės „real-time RT-PCR“ tyrimas kiekvienoje reakcijos kameroje.

Pastaba. Fluorescencijos sustiprėjimas, rodantis tikslinės analitės aptikimą, aptinkamas tiesiogiai kiekvienoje reakcijos kameroje.

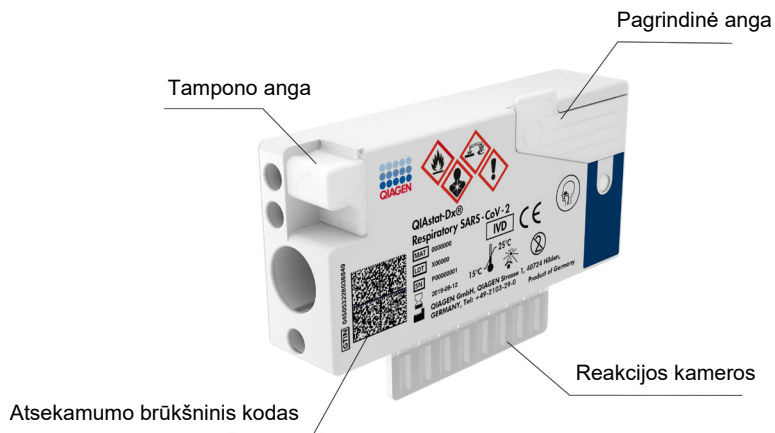

1 pav. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės išdėstymas ir jos ypatybės.

Informacija apie patogenus

Ūmias kvėpavimo takų infekcijas gali sukelti įvairūs patogenai, įskaitant bakterijas ir virusus, paprastai jos pasireiškia beveik neatskiriama klinikiniais požymiais ir simptomais. Greitai ir tiksliai nustatčius potencialaus (-ių) sukėlėjo (-ų) buvimą ar nebuvimą, galima laiku priimti sprendimus dėl gydymo, hospitalizavimo, infekcijos kontrolės ir paciento grįžimo į darbą bei šeimą. Be to, šis tyrimas gali labai prisidėti prie geresnio antimikrobinio tvarkymo ir kitų svarbių visuomenės sveikatos iniciatyvų.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetė yra vienkartinė kasetė, kurioje yra visi reagentai, reikalingi kvėpavimo takų simptomus sukeliančių 23 bakterijų ir virusų (arba jų potipių), įskaitant SARS-CoV-2*, nukleorūgštims išgauti, amplifikuoti ir aptikti. Tyrimui reikalingas nedidelio tūrio mėginys, minimaliai savarankiško darbo, o rezultatai gaunami maždaug po vienos valandos.

* „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ esantis SARS-CoV-2 taikiny s sukurtas 2020 m. pradžioje palyginus pirmųjų 170 viešosiose duomenų bazėse prieinamų SARS-CoV-2, kuris laikomas Uhane, Kinijos Hubėjaus provincijoje, prasidėjusio virusinės pneumonijos (COVID-19) protrūkio sukėlėju, genomų sekų. Iki šiol daugiau kaip dvylikos milijonų prieinamų genomų sekų aprėptis palaiko SARS-CoV-2 aptikimo aprėptį ir veiksmingumą. Šiame teste esantis SARS-CoV-2 aptinka 2 viruso genomo genus (Orf1b poligeną (Rdrp geną) ir E genus), nustatytus tuo pačiu fluorescenciniu kanalu.

Patogenai (ir jų potipiai), kuriuos galima aptikti ir identifikuoti naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“, išvardyti 1 lentelėje.

1 lentelė. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ aptinkami patogenai

Patogenas	Klasifikavimas (genomo tipas)
A gripo virusas	Ortomiksovirusas (RNR)
A gripo viruso potipis H1N1/2009	Ortomiksovirusas (RNR)
A gripo viruso potipis H1	Ortomiksovirusas (RNR)
A gripo viruso potipis H3	Ortomiksovirusas (RNR)
B gripo virusas	Ortomiksovirusas (RNR)
Koronavirusas 229E	Koronavirusas (RNR)
Koronavirusas HKU1	Koronavirusas (RNR)
Koronavirusas NL63	Koronavirusas (RNR)
Koronavirusas OC43	Koronavirusas (RNR)
SARS-CoV-2	Koronavirusas (RNR)
1 paragripo virusas	Paramiksovirusas (RNR)
2 paragripo virusas	Paramiksovirusas (RNR)
3 paragripo virusas	Paramiksovirusas (RNR)
4 paragripo virusas	Paramiksovirusas (RNR)
Kvėpavimo sincitinis virusas A/B	Paramiksovirusas (RNR)
Žmogaus metapneumovirusas A/B	Paramiksovirusas (RNR)
Adenovirusas	Adenovirusas (DNR)
Bokavirusas	Parvovirusas (DNR)
Rinovirusas/enterovirusas	Pikornavirusas (RNR)
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Bakterija (DNR)
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>	Bakterija (DNR)
<i>Legionella pneumophila</i>	Bakterija (DNR)
Bordetella pertussis	Bakterija (DNR)


Pastaba. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ aptinka enterovirusą ir rinovirusą, tačiau neskiria jų.

Procedūros principas

Proceso aprašas


Diagnostiniai testai su „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ atliekami naudojant „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“. Visus mėginio paruošimo ir analizės veiksmus „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“ atlieka automatiškai. Mėginiai surenkami ir į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę perkeliama rankiniu būdu, priklausomai nuo mėginio tipo.

1 parinktis. Tampono įdėjimas į tampono angą, naudojant sauso tampono mėginio tipą (2 pav.).

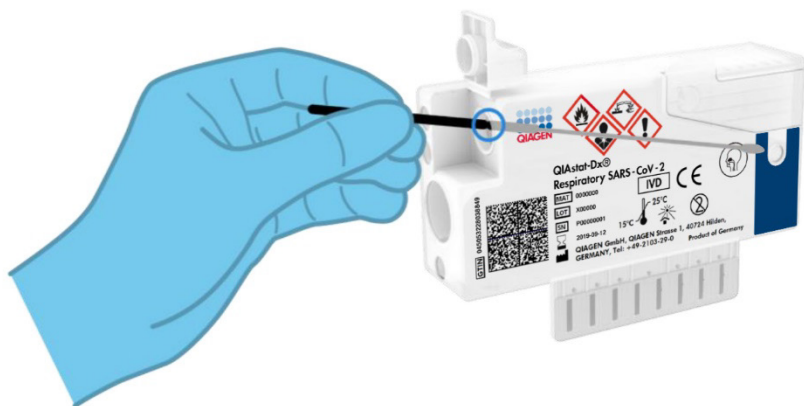

2 pav. Sauso tampono mėginio tipo įdėjimas į tampono angą.

2 parinktis. Skysto mėginio transportavimo terpėje dozavimas į pagrindinę angą naudojant perkėlimo pipetę (3 pav.).

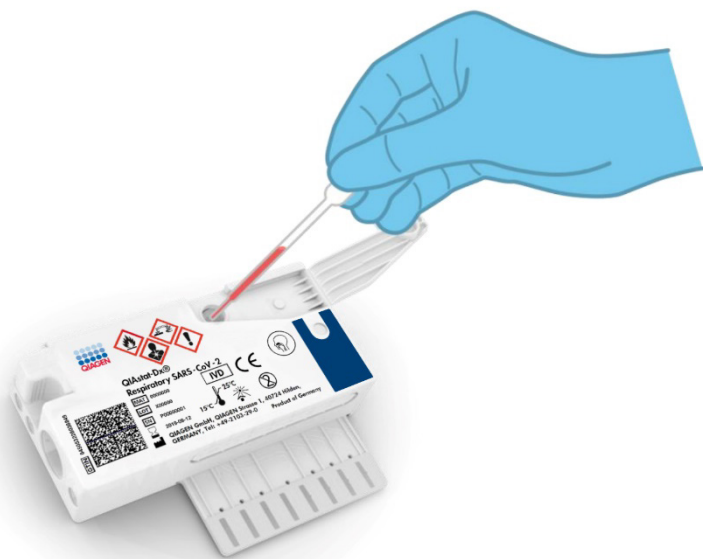

3 pav. Skysto mėginio transportavimo terpėje dozavimas į pagrindinę angą.

Mėginio paėmimas ir įkėlimas į kasetę

Imti mėginius ir po to juos perkelti į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę turėtų personalas, išmokytas saugiai tvarkyti biologinius mėginius.


Naudotojas privalo atlikti šiuos toliau nurodytus veiksmus:

1. Paimamas vienkartinio naudojimo nazofaringinio tampono mėginys.
2. Nazofaringinis tamponas perkeliamas į vienkartinio naudojimo mėgintuvėlį, pripildytą transportavimo terpe, tik jei jo tipas yra skystas mėginys transportavimo terpėje.
3. Mėginio informacija užrašoma ranka arba ant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės priklijuojama etiketė.

4. Mėginys rankiniu būdu perkeliamas į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę.

- Sauso tampono mėginio tipas. nazofaringinio tampono mėginys įdedamas į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės tampono angą.
- Skysto mėginio transportavimo terpėje tipas: 300 μl mėginio perpilama į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės pagrindinę angą, naudojant vieną iš pridedamų perkėlimo pipetėlių.

SVARBU. Kai dedamas skystas mėginys transportavimo terpėje, naudotojas vizualiai patikrina mėginį per apžiūros langelį (žr. iliustraciją toliau) ir įsitikina, kad skystas mėginys buvo įkeltas (4 pav.).

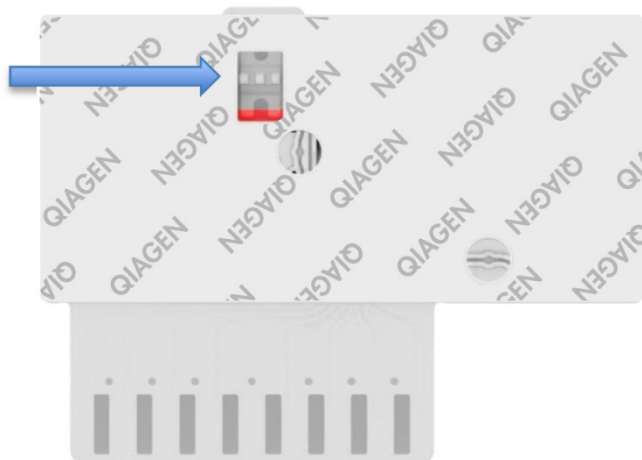

4 pav. Mėginio patikros langelis (mėlyna rodyklė).

5. Mėginio brūkšninis kodas ir „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės kodas nuskaityti „QIAstat-Dx Analyzer 1.0”, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” arba „QIAstat-Dx Rise” viduje.
6. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetė įdedama į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0”, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” ir „QIAstat-Dx Rise”.
7. Pradedamas tyrimas „QIAstat-Dx Analyzer 1.0”, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” arba „QIAstat-Dx Rise”.

Mėginio paruošimas, nukleorūgšties amplifikacija ir aptikimas

Nukleorūgščių mėginyje ekstrakciją, amplifikaciją ir aptikimą „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“ atlieka automatiškai.

1. Skystas mėginys homogenizuojamas, ląstelės lizuojamos „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės lizės kameroje, kurioje yra dideliu greičiu besisukantis rotorius.
2. Nukleorūgštys išgryninamos iš lizuoto mėginio prijungiant prie silicio dioksido membranos „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės gryninimo kameroje, naudojant chaotropines druskas ir alkoholį.
3. Išgrynintos nukleorūgštys išplaunamos iš membranos gryninimo kameroje ir sumaišomos su liofilizuotomis PGR cheminėmis medžiagomis „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės sausų cheminių medžiagų kameroje.
4. Mėginio ir PGR reagentų mišinys paskirstomas „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės PGR kameroje, kurioje yra liofilizuoti, tyrimui būdingi pradmenys ir zondai.
5. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“ sukuria optimalios temperatūros profilius, kad būtų galima efektyviai atlikti sudėtinį „real-time RT-PCR“ tyrimą, ir realiuoju laiku atlieka fluorescencijos matavimus, skirtus amplifikacijos kreivėms kurti.
6. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“ programinė įranga interpretuoja gautus duomenis, apdoroja kontrolinius mėginius ir pateikia tyrimo ataskaitą.

Pateikiamos medžiagos

Rinkinio turinys

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“

Katalogo Nr.	691214
Tyrimų skaičius	6

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetė*	6
---	---

Transfer pipettes (Perkėlimo pipetės)†	6
--	---

* 6 atskirai supakuotos kasetės su visais reagentais, reikalingais mėginiui paruošti, sudėtinė „real-time RT-PCR“ ir vidinė kontrolinė medžiaga.

† 6 atskirai supakuotos perkėlimo pipetės, skirtos skystam mėginiui paskirstyti „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetėje.

Nepateiktos, bet reikalingos medžiagos

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ skirtas naudoti su „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“. Prieš pradėdami testą, įsitikinkite, kad yra:

- „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ (bent vienas operacinis modulis ir vienas analizės modulis) su 1.3 ar naujesne programinės įrangos versija* ARBA „QIAstat-Dx Rise“ (ne mažiau kaip du analizės moduliai turi būti viduje, kad įrenginys veiktų) su 2.2 ar naujesne programinės įrangos versija, ARBA „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ (bent vienas operacinis modulis PRO ir vienas analizės modulis) su 1.6 ar naujesne programinės įrangos versija.
- „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ naudotojo vadovą (naudoti su 1.3 arba naujesnės versijos programine įranga) ARBA „QIAstat-Dx Rise“ naudotojo vadovą (naudoti su 2.2 arba naujesnės versijos programine įranga) ARBA „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ naudotojo vadovą (naudoti su 1.6 arba naujesnės versijos programine įranga);
- Operaciniame modulyje arba operaciniame modulyje PRO įdiegta „QIAstat-Dx“ naujausio tyrimo apibrėžimo failo programinė įranga, skirta „Respiratory SARS-CoV-2 Panel“

* „DiagCORE® Analyzer“ prietaisai, pagrįsti „QIAstat-Dx 1.3“ arba naujesne programine įranga, gali būti naudojami kaip alternatyva „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ prietaisams.

Pastaba. 1.6 arba naujesnės versijos taikomoji programinė įranga negali būti įdiegta „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Skirta in vitro diagnostikai.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ skirta naudoti profesionaliems laborantams, išmokytiems dirbti su „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“.

SVARBI PASTABA. Atminkite, kad „QIAstat-Dx Rise“ mėginių stalčiuje vienu metu galima naudoti iki 18 „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasečių. Taip pat atminkite, kad naudojant 2.2 arba naujesnės versijos programinę įrangą į mėginių stalčių galima vienu metu dėti ir apdoroti skirtingus testus.

Saugos informacija

Dirbdami su cheminėmis medžiagomis, visada dėvėkite tinkamą laboratorinį chalata, mūvėkite vienkartinę pirštines ir būkite užsidėję apsauginius akinius. Daugiau informacijos pateikta atitinkamuose saugos duomenų lapuose (SDL). Jie pateikiami PDF formatu internete www.qiagen.com/safety – čia galite rasti, peržiūrėti ir išspausdinti kiekvieno QIAGEN rinkinio ir jo komponentų SDL.

Visus mėginius, panaudotas kasetes ir perkėlimo pipetes tvarkykite taip, lyg jie galėtų perduoti užkrečiančias medžiagas. Visuomet laikykitės atitinkamose rekomendacijose nurodytų saugumo priemonių, pvz., „Clinical and Laboratory Standards Institute®“ (CLSI) *Laboratorijos darbuotojų apsaugos nuo darbe gautų infekcijų patvirtintose rekomendacijose* (M29) arba kituose susijusiuose dokumentuose, kuriuos pateikė:

- OSHA®: Occupational Safety and Health Administration (Profesinės saugos ir sveikatos administracija) (Jungtinės Amerikos Valstijos);
- ACGIH®: American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikos vyriausybinių pramonės higienistų konferencija, JAV);
- COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Pavojingų sveikatai medžiagų kontrolė) (Jungtinė Karalystė).

Laikykitės savo institucijos biologinių mėginių apdorojimo saugos procedūrų. Mėginius, „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetes ir perkėlimo pipetes išmeskite laikydamiesi atitinkamų taisyklių.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetė yra uždaras, vienkartinio naudojimo prietaisas, kuriame yra visi reagentai, reikalingi mėginiui paruošti ir sudėtei „real-time RT-PCR“ „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“ viduje. Nenaudokite „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės, jei jos galiojimo laikas pasibaigęs, pastebite pažeidimų arba iš jos prateka skystis. Panaudotas arba pažeistas kasetes išmeskite laikydamiesi visų nacionalinių, šalies ir vietos sveikatos ir saugos taisyklių ir teisės aktų reikalavimų.

Laikykitės standartinių laboratorijos procedūrų, kad darbo vieta išliktų švari ir neužteršta. Rekomendacijos aprašytos leidiniuose, pvz., Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre (<https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/networks/disease-and-laboratory-networks/erlinet-biosafety>).

Atsargumo priemonės

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ komponentams taikomos toliau išvardytos pavojingumo ir atsargumo frazės.



Sudėtis: etanolis, guanidino hidrochloridas, guanidino ticionatas, izopropanolis, proteinazė K, t-oktilfenoksipolietoksietanolis. Pavojus! Labai degus skystis ir garai. Kenksminga prarijus arba įkvėpus. Gali būti kenksminga susilietus su oda. Stipriai nudegina odą ir smarkiai pažeidžia akis. Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Kontaktuojama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas. Ėsdina kvėpavimo takus. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktiniu lęšiu, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS II INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išveskite žmogų į gryną orą ir padėkite jam patogiai kvėpuoti.

Kasečių laikymas ir naudojimas

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetes laikykite saugoje, švarioje vietoje kambario temperatūroje (15–25 °C). „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetes arba perkėlimo pipetes iš jų atskirų pakuočių išimkite tik prieš naudojimą. Tokiomis sąlygomis „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetes galima laikyti iki ant kiekvienos pakuotės nurodytos galiojimo datos. Be to, galiojimo data įtraukta į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės brūkšninį kodą, kurį nuskaito „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ arba „QIAstat-Dx Rise“, kai kasetė įstatoma į prietaisą atliekant testą.

Pažeistų kasečių apdorojimas aprašytas skyriuje „Saugos informacija“.

Bandinių naudojimas, sandėliavimas ir paruošimas

Skysti mėginiai transportavimo terpėje

Nazofaringiniai tamponų mėginiai turi būti paimami ir naudojami, kaip nurodyta gamintojo rekomenduojamose procedūrose.

NPS (nazofaringinių tamponų), resuspenduotų universaliosios transportavimo terpės (Universal Transport Medium, UTM) bandiniuose, rekomenduojamos laikymo sąlygos nurodytos toliau.

- Kambario temperatūroje nuo 15 iki 25 °C ne ilgiau kaip 4 val.
- Atšaldžius temperatūroje nuo 2 iki 8 °C iki 3 dienų
- Užšaldžius iki 30 dienų, esant nuo –15 iki –25 °C

Sauso tampono mėginiai

Siekdami geriausių rezultatų, naudokite šviežiai surinktus sauso tampono mėginius. Jei tyrimo iš karto atlikti neįmanoma, siekiant išlaikyti geriausius rezultatus, rekomenduojamos sauso tampono mėginių laikymo sąlygos nurodytos toliau:

- Kambario temperatūroje nuo 15 iki 25 °C ne ilgiau kaip 45 min.
- Atšaldžius temperatūroje nuo 2 iki 8 °C ne ilgiau kaip 7 val.

Vidinė kontrolinė medžiaga

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetėje yra viso proceso vidinė kontrolinė medžiaga, kuri yra titruojamas MS2 bakteriofagas. MS2 bakteriofagas yra vienos gijos RNR virusas, kasetėje jis yra sausas, o įkėlus mėginį rehidratuojamas. Ši vidinė kontrolinė medžiaga patvirtina visus analizės proceso žingsnius, įskaitant mėginio resuspendavimą/homogenizavimą, lizę, nukleorūgščių gryninimą, atvirkštinę transkripciją ir PGR.

Vidinės kontrolinės medžiagos teigiamas signalas rodo, kad visi apdoravimo veiksmai „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetėje atlikti sėkmingai.

Vidinės kontrolinės medžiagos neigiamas signalas nepanaikina jokių teigiamų aptiktų ir identifikuotų ieškomų medžiagų rezultatų, tačiau visi neigiami analizės rezultatai negalioja. Todėl, jei vidinės kontrolinės medžiagos signalas yra neigiamas, testą reikia pakartoti.

Protokolas. Sauso tampono mėginiai

Mėginio paėmimas, transportavimas ir laikymas

Paimkite nazofaringinio tampono mėginius, naudodami „Copan FLOQSwabs“ (kat. Nr. 503CS01) pagal gamintojo rekomenduojamas procedūras.

Mėginio perkėlimas į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę

Pastaba. Taikoma „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“

1. Atidarykite „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės pakuotę ties plėšimo išpjovomis pakuotės šonuose (5 pav.).

SVARBU. Atidarius pakuotę, mėginį reikia įdėti į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę ir įstatyti į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ per 120 minučių arba į „QIAstat-Dx Rise“ per 30 minučių.




5 pav. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės atidarymas.

2. Išpakuokite „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę ir laikykite taip, kad brūkšninis kodas ant etiketės būtų atsuktas į jus.
3. Užrašykite mėginio informaciją ranka arba užklijuokite mėginio informacijos etiketę ant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės viršaus. Įsitikinkite, kad etiketė yra tinkamoje vietoje ir netrukdo atidaryti dangtelio (6 pav.). Žr. skyriuje apie darbo su „QIAstat-Dx Rise“ eiga, kaip tinkamai paženklinoti kasetę.




6 pav. Mėginio informacijos uždėjimas ant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės.

4. Atidarykite tampono angos mėginio dangtį „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės kairėje pusėje (7 pav.).

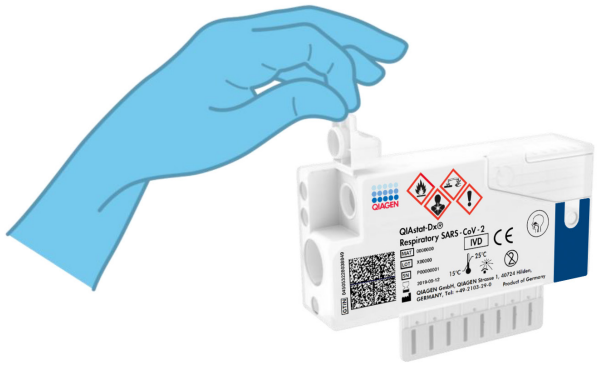


7 pav. Tampono angos mėginio dangčio atidarymas.

5. Įkiškite tamponą į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę, kol nulaužimo taškas bus sulygiuotas su prieigos anga (t. y. tamponas toliau nejudės) (8 pav.).

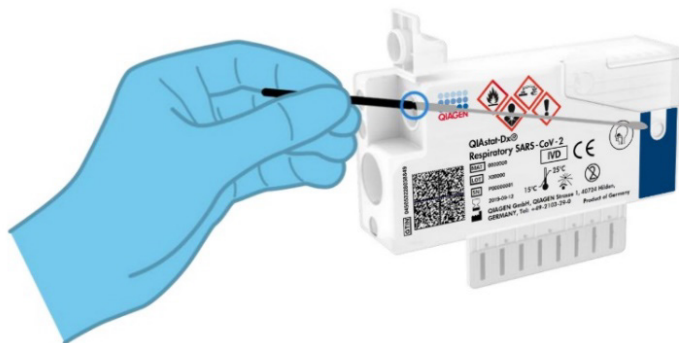

8 pav. Tampono įdėjimas į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę.


6. Nulaužkite tampono kotą ties nulaužimo tašku, palikdami likusią tampono dalį „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetėje (9 pav.).

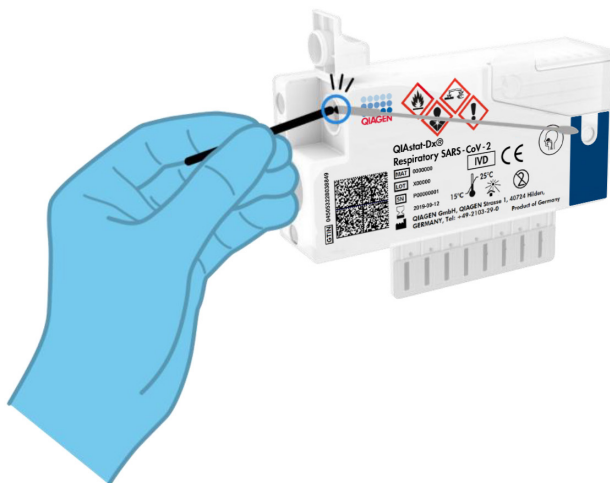

9 pav. Tampono koto nulaužimas.

7. Tvirtai uždarykite tampono angos mėginio dangtį, kol jis užsifiksuos (10 pav.).

SVARBU. Perkėlus mėginį į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę, reikia per 90 minučių kasetę įstatyti į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ nedelsiant įstatyti į „QIAstat-Dx Rise“ dėklą, kai visi mėginiai įkeliami į kasetes. Ilgiausias kasetės, jau įkeltos į „QIAstat-Dx Rise“, laukimo laikas (stabilumas sistemoje) yra apie 300 minučių. „QIAstat-Dx Rise“ automatiškai aptiks, jei kasetė bus įstatyta į prietaisą ilgesnį laiką nei leidžiama ir automatiškai įspės naudotoją.

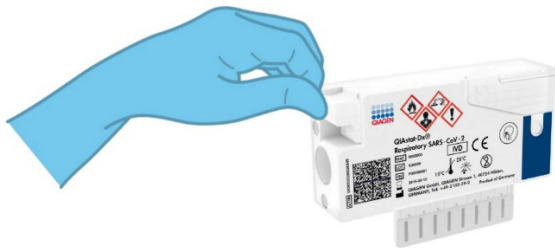

10 pav. Tampono angos mėginio dangčio uždarymas.

Testo vykdymas „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0”

1. Įjunkite „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” įjungimo/išjungimo mygtuku prietaiso priekyje.

Pastaba. Maitinimo jungiklis analizės modulio galinėje dalyje turi būti nustatytas „I” padėtyje. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” būsenos indikatorius taps mėlynas.

2. Palaukite, kol parodomas ekranas „**Main**” (pagrindinis) ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” būsenos indikatoriai pradeda šviesti žaliai ir nustoja mirksėti.
3. Prisijunkite prie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” įvesdami naudotojo vardą ir slaptažodį.

Pastaba. „**Login**” (prisijungimo) ekranas rodomas, jei suaktyvinta „**User Access Control**” (naudotojų prieigos kontrolė). Jeigu „**User Access Control**” (naudotojų prieigos kontrolė) išjungta, naudotojo vardo/slaptažodžio įvesti nereikės ir bus rodomas ekranas „**Main**” (pagrindinis).

4. Jei „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” nebuvo įdiegta tyrimo apibrėžimo failo programinė įranga, prieš vykdydami testą vadovaukitės diegimo instrukcijomis (jei reikia papildomos informacijos, žr. „A priedas. Tyrimo apibrėžimo failo diegimas”).
5. Paspauskite mygtuką „**Run Test**” (vykdyti testą) „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” viršutiniame dešiniajame jutiklinio ekrano kampe.
6. Kai bus paprašyta, nuskaitykite mėginio brūkšninį kodą ant nazofaringinio tampono mėginio (esantį ant tampono lizdinės pakuotės), arba nuskaitykite bandinio informacijos brūkšninį kodą, esantį ant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės (žr. 3 veiksmą), naudodami integruotą priekinį „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” brūkšninių kodų skaitytuvą (11 pav.).

Pastaba. Be to, „Sample ID” (mėginio ID) galima įvesti jutiklinio ekrano virtualiaja klaviatūra, paspaudus lauką „**Sample ID**” (mėginio ID).

Pastaba. Atsižvelgiant į pasirinktą sistemos konfigūraciją, šioje vietoje gali būti reikalaujama įvesti „Patient ID” (paciento ID).

Pastaba. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” instrukcijos rodomos jutiklinio ekrano apačioje esančioje instrukcijų juostoje.



11 pav. „Sample ID” (mėginio ID) brūkšninio kodo nuskaitymas.

7. Kai bus paprašyta, nuskaitykite naudojamos „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės brūkšninį kodą (12 pav.). „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” automatiškai atpažįsta atliekamą tyrimą pagal kasetės brūkšninį kodą.

Pastaba. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” nepriims „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasečių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, anksčiau naudotų kasečių arba prietaise neįdiegtų tyrimų kasečių. Tokiais atvejais bus rodomas klaidos pranešimas ir „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetė bus atmesta. Daugiau informacijos apie tyrimų diegimą pateikta „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” naudotojo vadove.



12 pav. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės brūkšninio kodo nuskaitymas.

8. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą mėginio tipą (13 pav.).

administrator Run Test Module 1 14:43 2017-03-30

1 UI administrator Resp Panel 2 Not installed 3 Not installed 4 Not installed

TEST DATA

Sample ID
2430362

Assay Type
RP SARS-Co

Sample Type

SAMPLE TYPE

Swab


UTM

Select Sample Type

Cancel

13 pav. Mėginio tipo pasirinkimas.

9. Pasirodys ekranas „**Confirm**” (patvirtinti). Peržiūrėkite įvestus duomenis ir atlikite visus reikiamus pakeitimus, pasirinkdami atitinkamus laukus jutikliniame ekrane ir redaguodami informaciją.
10. Kai visi rodomi duomenys yra teisingi, paspauskite „**Confirm**” (patvirtinti). Jei reikia, pasirinkite atitinkamą lauką, kad redaguotumėte jo turinį, arba paspauskite „**Cancel**” (atšaukti), jei norite atšaukti testą (14 pav.).

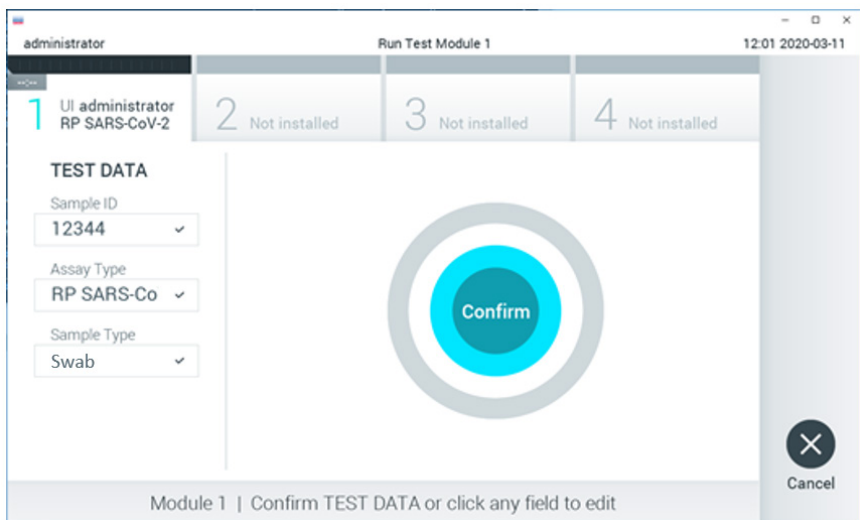

14 pav. Duomenų įvedimo patvirtinimas.

11. Įsitikinkite, kad „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės tampono angos ir pagrindinės angos mėginių dangčiai yra tvirtai uždaryti. Automatiškai atsidarius kasetės įstatymo angai „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ viršuje, įstatykite „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę, nukreipę brūkšninį kodą į kairę ir reakcijos kameras nukreipę žemyn (15 pav.).

Pastaba. Nebūtina įstumti „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“. Tinkamai įstatykite į kasetės įstatymo angą ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ automatiškai perkels kasetę į analizės modulį.



15 pav. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės įdėjimas į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0”.

12. Aptikus „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę, „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” automatiškai uždarys kasetės įstatymo angą ir pradės vykdyti testą. Daugiau jokių veiksmų operatoriui atlikti nereikia.

Pastaba. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” ir „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” priims tik testo nustatymo metu naudotą ir nuskaitytą „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę. Įstačius kitą kasetę, nei buvo nuskaityta, bus rodoma klaida ir kasetė bus automatiškai išstumta.

Pastaba. Iki šio etapo testo vykdymą galima atšaukti apatiniame dešiniajame jutiklinio ekrano kampe paspaudus mygtuką „Cancel” (atšaukti).

Pastaba. Atsižvelgiant į sistemos konfigūravimą, operatoriui gali tekti iš naujo įvesti savo naudotojo slaptažodį, kad pradėtų testo vykdymą.


Pastaba. Jeigu į angą neįstatoma „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetė, kasetės įstatymo angos dangtelis automatiškai užsidarys po 30 sekundžių. Tokiu atveju pakartokite procedūrą nuo 16 veiksmo.

13. Kol vykdomas testas, jutikliniame ekrane rodomas likęs vykdymo laikas.


14. Tyrimui pasibaigus rodomas ekranas „Eject” (išstumti) (16 pav.) ir modulio būsenos juostoje bus rodomas vienas iš toliau pateikiamų testo rezultatų:

- „**TEST COMPLETED**” (TESTAS ATLIKTAS): testas sėkmingai atliktas
- „**TEST FAILED**” (TESTAS NEPAVYKO): testo metu įvyko klaida
- „**TEST CANCELED**” (TESTAS ATŠAUKTAS): naudotojas atšaukė testą

SVARBU. Jei testas nepavyko, žr. skyrių „Trikčių šalinimas” „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” naudotojo vadove, norėdami sužinoti galimas priežastis ir instrukcijas, ką daryti toliau.

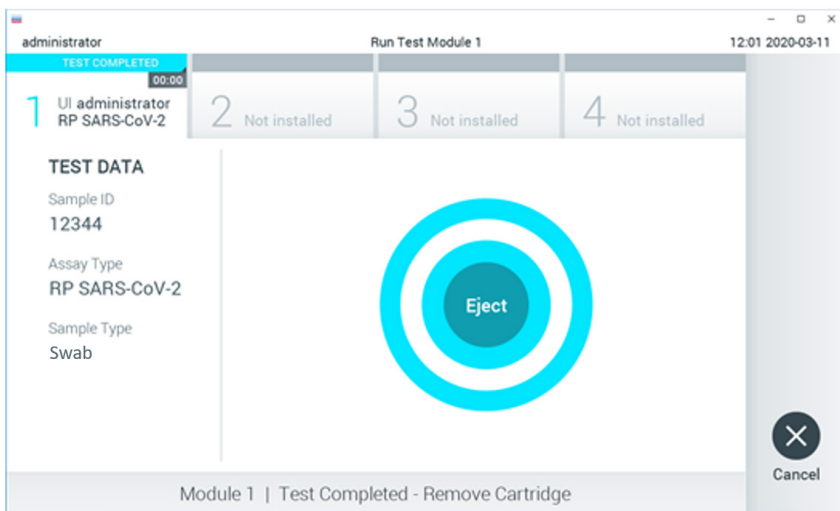

16 pav. Rodomas ekranas „Eject” (išstumti).

15. Paspauskite  „Eject” (išstumti) jutikliniame ekrane, kad išimtumėte „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę, ir išmeskite ją kaip biologiškai pavojingas atliekas, laikydamiesi vietos ir šalies sveikatos ir saugos reikalavimų ir teisės aktų nuostatų. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę reikia išimti, kai atsidaro kasetės įstatymo anga ir kasetė išstumiamą. Jeigu kasetė neišimama per 30 sekundžių, ji automatiškai įtraukiama atgal į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” analizatorių ir kasetės įstatymo angos dangtelis uždaromas. Tokiu atveju

paspauskite „**Eject**” (išstumti), kad vėl atidarytumėte kasetės įstatymo angą, ir išimkite kasetę.

SVARBU. panaudotos „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės turi būti išmestos. Neįmanoma pakartotinai naudoti kasečių, atliekant testus, kurie buvo pradėti vykdyti, tačiau vėliau operatoriaus atšaukti, arba kuriuos vykdant įvyko klaida.

16. Išstūmus „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę, rodomas rezultatų „**Summary**” (suvestinės) ekranas. Daugiau informacijos ieškokite „Rezultatų aiškinimas“. Norėdami pradėti vykdyti kitą tyrimą, paspauskite „**Run Test**” (vykdyti tyrimą).

Pastaba. Daugiau informacijos apie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” naudojimą žr. „*QIAstat-Dx Analyzer 1.0*” naudotojo vadove.

Pastaba. Daugiau informacijos apie „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” naudojimą žr. „*QIAstat-Dx Analyzer 2.0*” naudotojo vadove.

Testo vykdymas su „QIAstat-Dx Rise”


Pastaba. Šiame skyriuje pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis, priklausomai nuo tyrimo.

„QIAstat-Dx Rise” analizatoriaus paleidimas

1. Paspauskite **įjungimo/išjungimo** mygtuką „QIAstat-Dx Rise” priekyje, kad paleistumėte prietaisą.

Pastaba. Maitinimo jungiklis galinėje kairėje jungčių dėžutėje turi būti nustatytas „I” padėtyje.

2. Palaukite, kol parodomas „Login” (prisijungimo) ekranas ir įsijungia žalias LED būsenos indikatorius.
3. Prisijunkite prie sistemos, kai bus parodytas prisijungimo ekranas.

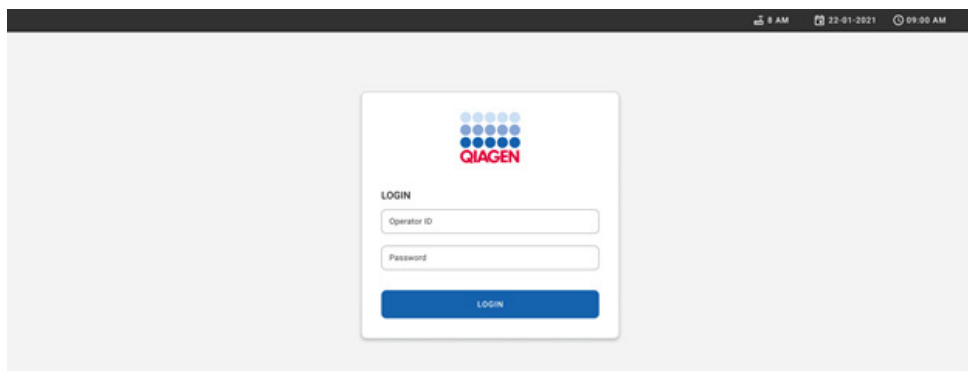

17 pav. „Log in” (prisijungimo) ekranas

Pastaba. „QIAstat-Dx Rise” sėkmingai įdiegus pirmą kartą, sistemos administratorius turi prisijungti, kad galėtų pirmą kartą sukonfigūruoti programinę įrangą.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės paruošimas

Išimkite „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę iš pakuotės. Informacijos apie mėginio įdėjimą į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę ir konkrečios

informacijos apie vykdytiną tyrimą žr. „Mėginio perkėlimas į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę.

Visada įsitikinkite, įdėjus mėginį į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę, abu mėginio dangčiai yra tvirtai uždaryti.

Mėginio brūkšninio kodo uždėjimas ant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės


Uždėkite brūkšninį kodą „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės dešinėje (nurodyta rodykle).



18 pav. „Sample ID“ (mėginio ID) brūkšninio kodo tvirtinimas

Didžiausias leistinas brūkšninio kodo dydis yra 22 mm x 35 mm. Brūkšninis kodas visada turi būti kasetės dešinėje (kaip tai nurodyta virš raudonai pažymėtos sritys), nes kairė kasetės pusė yra svarbi mėginio automatiniam aptikimui (19 pav.).

Pastaba. Norint apdoroti mėginius „QIAstat-Dx Rise“, reikia uždėti kompiuteriu įskaitomą mėginio ID brūkšninį kodą ant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės.

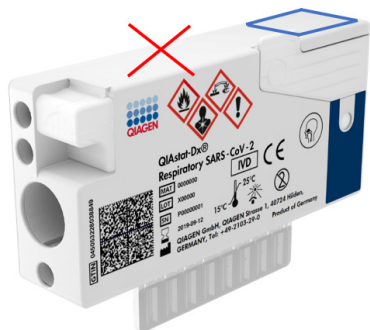

19 pav. „Sample ID” (mėginio ID) brūkšninio kodo uždėjimas

Galima naudoti vienmačius ir dvimačius brūkšninius kodus. Galima naudoti šiuos vienmačius brūkšninius kodus: EAN-13 ir EAN-8, UPC-A ir UPC-E, „Code128”, „Code39”, „Code 93” ir „Codabar”. Galima naudoti šiuos dvimačius brūkšninius kodus: „Aztec Code”, „Data Matrix” ir „QR code”.


Įsitikinkite, ar brūkšninio kodo kokybė yra tinkama. Sistema gali perskaityti C arba aukštesnės klasės spausdinimo kokybės kodą, kaip apibrėžta ISO/IEC 15416 (linijinis) arba ISO/IEC 15415 (dvimatis).

Testo atlikimo procedūra

Pastaba. Visi operatoriai, naudodami „QiAstat-Dx Rise” jutiklinį ekraną ir kasetes, turi dėvėti tinkamas asmens apsaugos priemones, pavyzdžiui, pirštines, laboratorijos chalatus ir apsauginius akinius.


1. Paspauskite mygtuką „**OPEN WASTE DRAWER**” (atidaryti atliekų stalčių), esantį apatiniame dešiniajame pagrindinio testo ekrano kampe (20 pav.).
2. Atidarykite atliekų stalčių ir išimkite per ankstesnius tyrimus panaudotas kasetes. Patikrinkite, ar atliekų stalčiuje nėra išsiliejusio skysčio. Jeigu reikia, atliekų stalčių išvalykite, kaip nurodyta „QiAstat-Dx Rise” naudotojo vadovo skyriuje „Priežiūra”.
3. Išėmę kasetes atliekų stalčių uždarykite. Sistema gali nuskaityti dėklą ir sugrįžti į pagrindinį ekraną (20 pav.). Jeigu dėklas buvo išimtas norint atlikti priežiūrą, prieš uždarydami stalčių įsitikinkite, kad dėklas buvo tinkamai įstatytas.

4. Paspauskite mygtuką „**OPEN INPUT DRAWER**” (atidaryti mėginių stalčių), esantį apatiniame dešiniajame ekrano kampe (20 pav.).

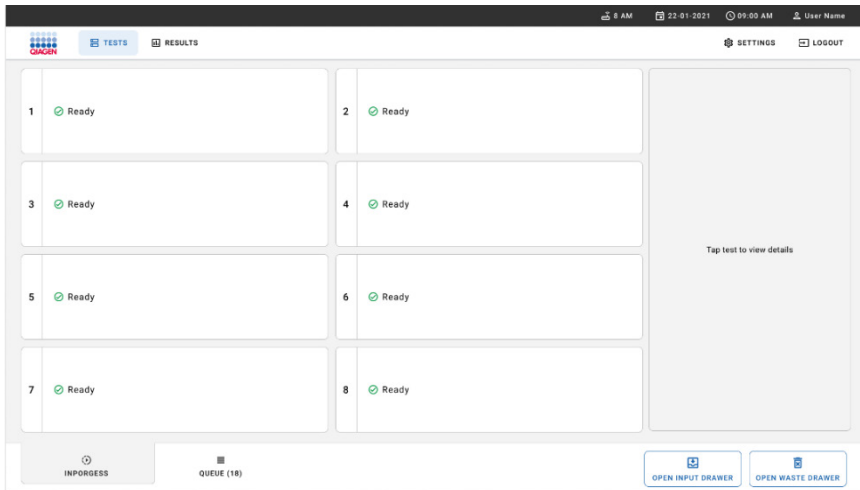


20 pav. Pagrindinio testo ekranas.

5. Palaukite, kol mėginių stalčius bus atrakintas (21 pav.).

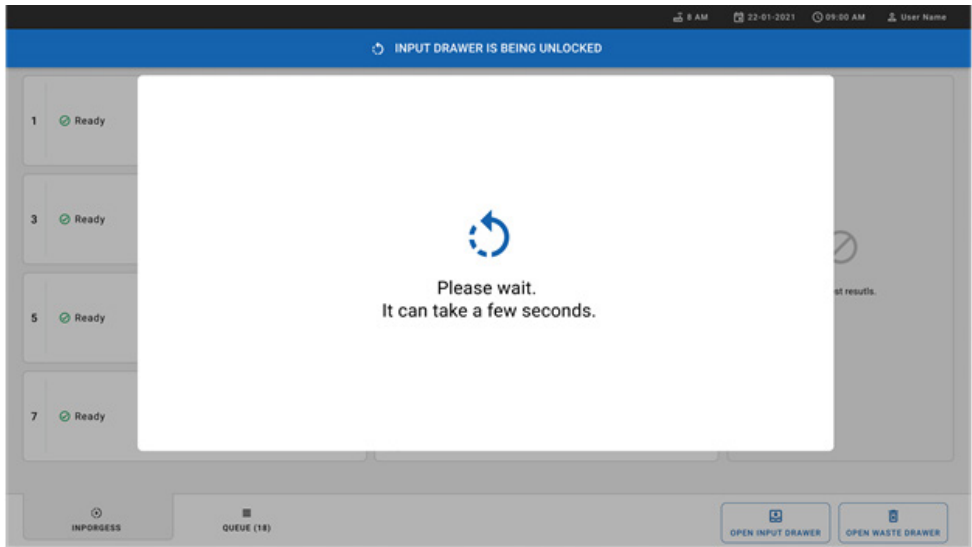


21 pav. Mėginių stalčiaus laukimo dialogo langas.

6. Kai būsite paraginti, ištraukite mėginių stalčių, kad jį atidarytumėte (22 pav.).

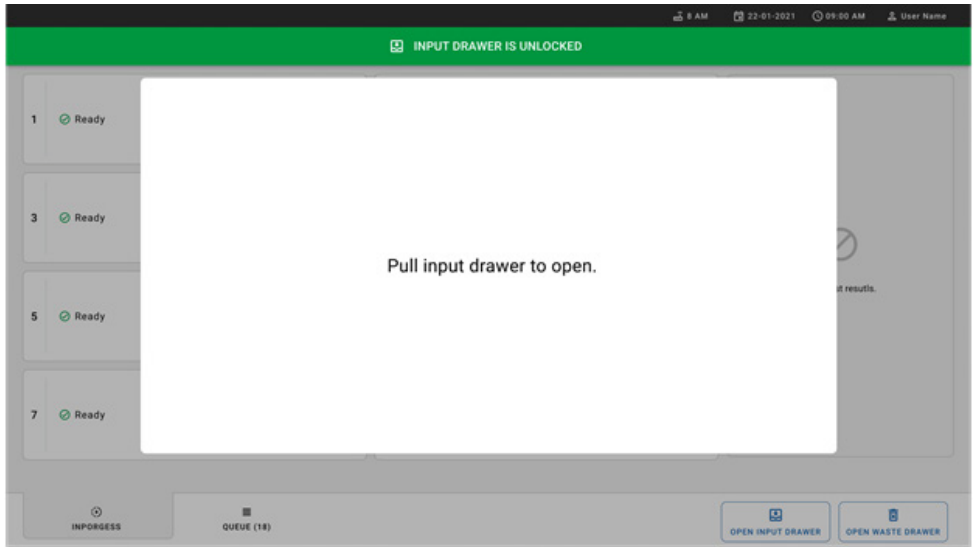

22 pav. Mėginių stalčiaus atidarymo dialogo langas.

7. Rodomas dialogas „**Add Cartridge**” (pridėkite kasetę) ir aktyvinamas prietaiso priekyje esantis skaitytuvas. Nuskaitykite mėginio ID brūkšninį kodą „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės, esančios prietaiso priekyje, viršuje (padėtis nurodyta rodykle (23 pav.).

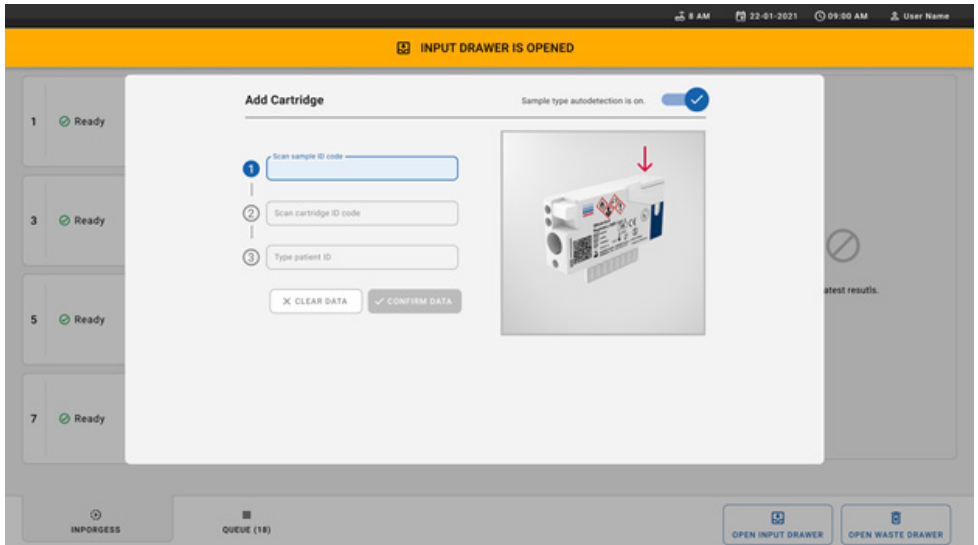


23 pav. „Sample ID” (mėginio ID) nuskaitymo ekranas.

8. Įvedę mėginio ID brūkšninį kodą, nuskaitykite naudojamos „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės brūkšninį kodą (padėtis nurodyta rodykle). „QIAstat-Dx Rise” automatiškai atpažįsta vykdytiną tyrimą pagal „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės brūkšninį kodą (24 pav.).

Pastaba. Įsitikinkite, kad įjungta („on”) funkcija „**Sample type autodetection**” (mėginio tipo automatinis aptikimas). Sistema automatiškai atpažins naudojamą mėginio tipą.


9. Jei funkcija „**Sample type autodetection**” (mėginio tipo automatinis aptikimas) išjungta („off”), gali reikėti pasirinkti tinkamą mėginio tipą neautomatiškai (jei taikoma naudojamam tyrimui).

Pastaba. „QIAstat-Dx Rise” nepriims „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasečių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, kurios buvo anksčiau naudotos arba jei „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” tyrimo apibrėžimo failas neįdiegtas prietaise. Šiuo atveju bus rodomas klaidos pranešimas.

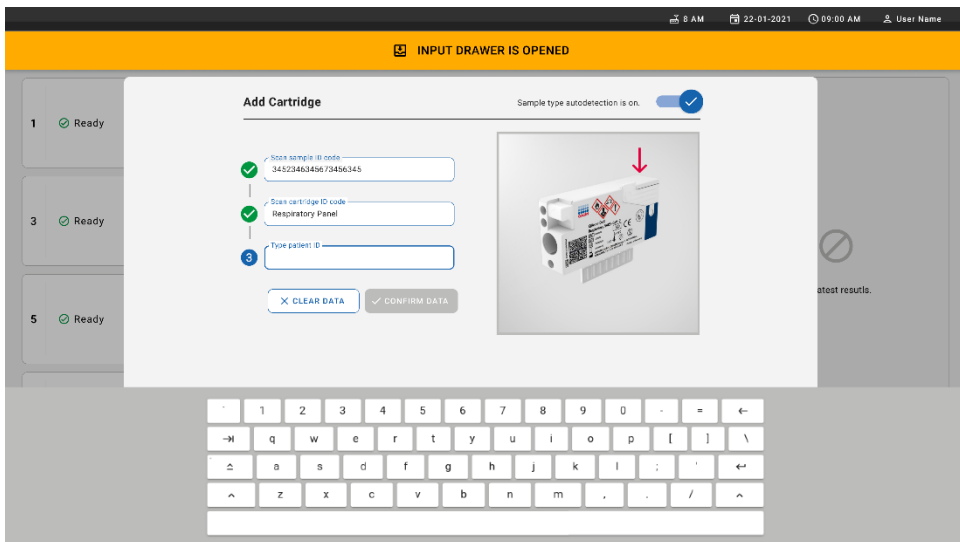


24 pav. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės ID ekrano nuskaitymas.

10. Įveskite paciento ID („Patient ID” (paciento ID) turi būti nustatyta „on” (įjungta) (25 pav.), tada patvirtinkite duomenis (26 pav.).

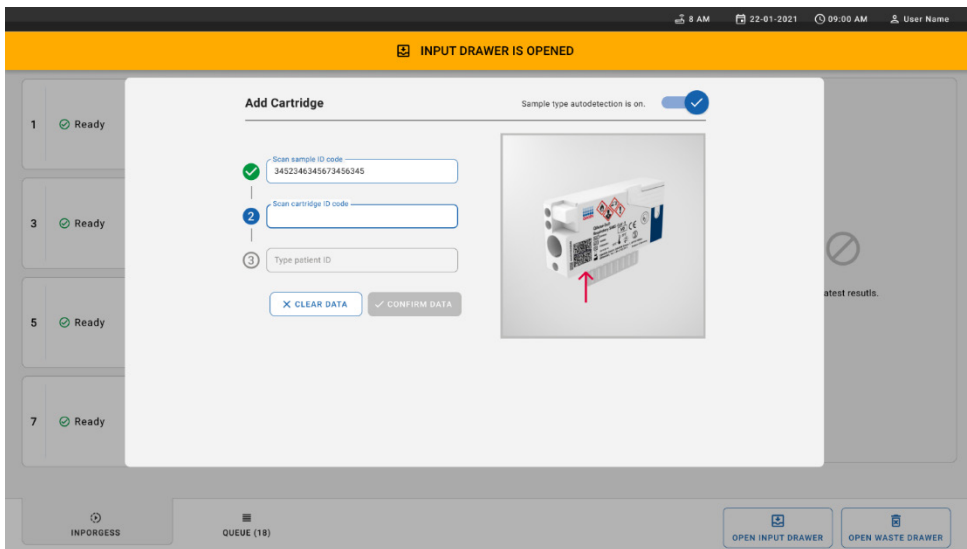


25 pav. „Patient ID” (paciento ID) įvedimas.

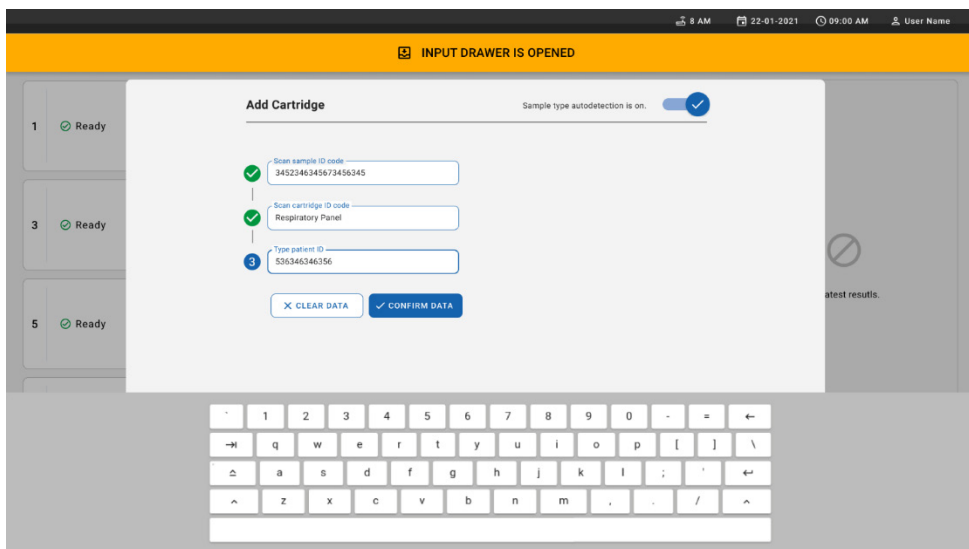

26 pav. „Patient ID” (paciento ID) įvedimo ir duomenų patvirtinimo ekranas


11. Sėkmingai nuskaičius ekrano viršuje trumpam parodomas toliau nurodytas dialogo langas (27 pav.).

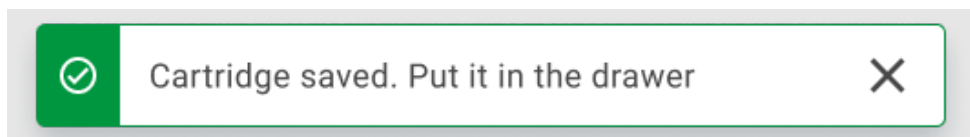

27 pav. Įrašytų kasetės duomenų ekranas


12. Įdėkite kasetę į mėginių stalčių. Įsitikinkite, kad kasetė į dėklą įdėta tinkamai (28 pav.).
13. Toliau nuskaitykite ir įdėkite kasetes atlikdami ankstesnius veiksmus. Į stalčių galite įkelti iki 18 kasečių.

SVARBI PASTABA. Atminkite, kad „QIAstat-Dx Rise” mėginių stalčiuje vienu metu galima naudoti iki 18 „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasečių. Taip pat atminkite, kad naudojant 2.2 arba naujesnės versijos programinę įrangą į mėginių stalčių galima vienu metu dėti ir apdoroti skirtingus testus.

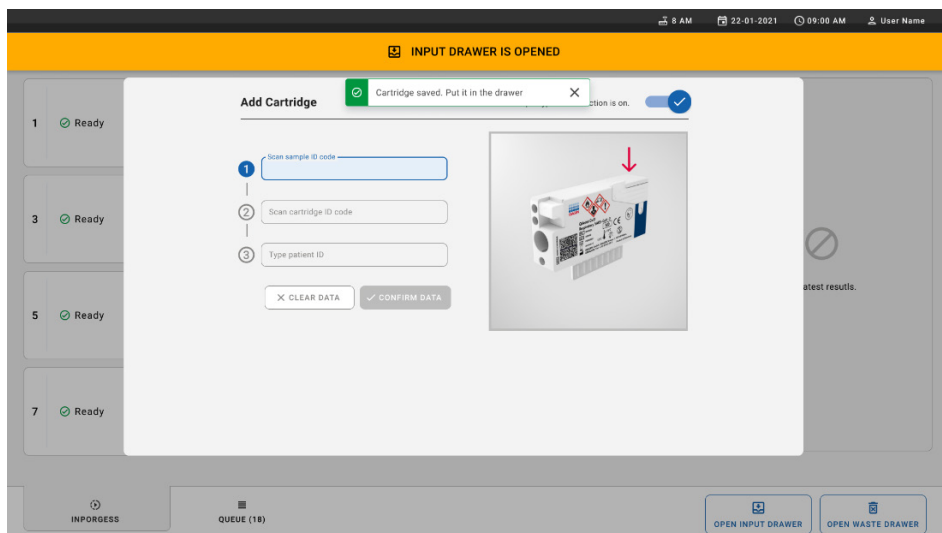

28 pav. Kasetės pridėjimo ekranas.

14. Kai visos kasetės nuskaitytos ir įdėtos, uždarykite mėginių stalčių. Sistema nuskaitys kasetes ir parengs eilę (29 pav.).

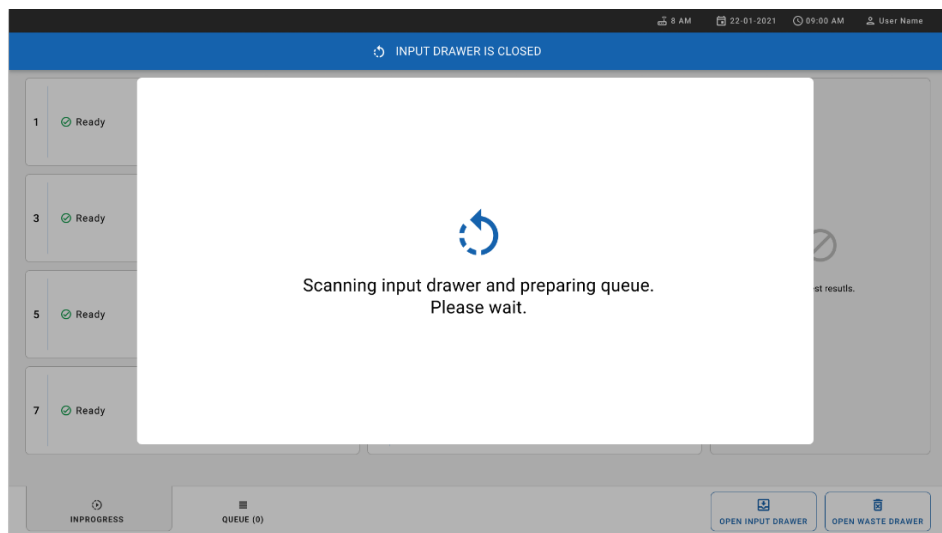

29 pav. Eilės ruošimo ekranas.

15. Sėkmingai nuskaicius eilė vėl bus rodoma (30 pav.). Peržiūrėkite rodomus duomenis. Jei įvyksta klaida, paspauskite mygtuką „OPEN INPUT DRAWER“ (atidaryti mėginių stalčių), pašalinkite atitinkamą kasetę ir iš naujo nuskaitykite kasetę, atlikdami 10–13 veiksmus.

The screenshot displays a user interface for a diagnostic panel. At the top, there are status indicators: '8 AM', 'Connected', '22-01-2021', '09:00 AM', and 'User Name'. Below this, there are tabs for 'TESTS' and 'RESULTS', and buttons for 'SETTINGS' and 'LOGOUT'. The main area contains a grid of 18 test result cards, numbered 1 through 18. Each card shows a sample ID (e.g., 3323 423435), the test name 'Respiratory SARS-CoV-2', and an 'END TIME' (e.g., 12:08PM). At the bottom of the screen, there are buttons for 'IN PROGRESS', 'QUEUE (18)', 'CONFIRM DATA TO RUN', 'OPEN INPUT DRAWER', and 'OPEN WASTE DRAWER'. A large empty box on the right side of the grid contains the text 'Tap test to view details'.

30 pav. Mėginių eilės ekranas.

Pastaba. Ekrane rodoma mėginių eilė gali neatitikti kasečių eilės mėginių stalčiuje (ji sutampa tik tada, kai visos kasetės yra įtraukiamos į eilę kartu) ir negali būti keičiama neatidarius mėginių dėklo ir neišėmus kasečių.

Mėginių eilę/apdorojimo tvarką sudaro „QIAstat-Dx Rise“ pagal šias taisykles:

- Stabilumo laikas: „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetėms, kurių trumpiausias likimo sistemoje stabilumo laikas, bus suteiktas prioritetas, neatsižvelgiant į jų padėtį įkėlimo dėkle.
- Tame pačiame tyrimo tipe įkėlimo dėklo padėtis nustato eilės tvarką.

Jei jutikliniame ekrane pasirenkate testą, ekrano skyriuje „TEST DETAILS“ (testo išsami informacija) rodoma papildoma informacija (31 pav.).

Pastaba. Sistema atmes mėginių stalčiuje esančias kasetes, kurių stabilumo laikas sistemoje viršija maksimalų (apie 300 min.)

The screenshot displays the QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel interface. At the top, there is a status bar with '8 AM', 'Connected', '22-01-2021', '09:00 AM', and 'User Name'. Below this, there are tabs for 'TESTS' and 'RESULTS'. The main area shows a grid of 18 test results, each with a sample ID, assay type, and end time. Sample 3 is highlighted in blue. To the right, a 'TEST DETAILS' panel is open for sample 3, showing fields for Sample ID, Sample Type, Assay Type, Patient ID, Operator, Operator ID, Input Tray Load time, Estimated end time, Position in Input tray, Position in Queue, Cartridge Serial Number, Cartridge Expiration Date, and Onboard time left.

31 pav. Mėginių eilės ekranas, kuriame rodoma papildoma pasirinkto tyrimo informacija.

Skryčiuje „Test Details“ (testo išsami informacija) rodoma toliau pateikiama informacija (32 pav.).

- „Sample ID“ (mėginio ID)
- „Sample Type“ (mėginio tipas) (priklauso nuo tyrimo)
- „Assay Type“ (tyrimo tipas)
- „Patient ID“ (paciento ID)
- „Operator ID“ (operatoriaus ID)
- „Input Tray Load time“ (mėginių dėklo įkėlimo laikas)
- „Estimated end time“ (planuojamas pabaigos laikas)
- „Position in Input-drawer“ (padėtis mėginių stalčiuje)
- „Position in Queue“ (Padėtis eilėje) (**Pastaba.** Padėtis gali skirtis, atsižvelgiant į mėginio stabilumo laiką)
- „Cartridge serial number“ (kasetės serijos numeris)
- „Cartridge expiration date“ (kasetės galiojimo data)
- „Onboard time left“ (likęs laikas prietaise)

Pastaba. Laikas sistemoje (apie 300 min.) inicijuoja mėginių tvarką eilėje.


TEST DETAILS
✕

Sample ID	Sample Type
83746466367738383	Swab
Assay Type	
QIAstat-Dx® Respiratory SARS-CoV-2	
Patient ID	
23423412342342354	
Operator	
OperatorID	
Input tray Load time	Estimated end time
22:10 22-10-2021	22:59
Position in input tray	Position in Queue
5	1
Cartridge Serial Number	Cartridge Expiration Date
23432452	30-10-2021

Onboard time left 120min


32 pav. Išsami testo informacija.

16. Paspauskite mygtuką „**CONFIRM DATA TO RUN**” (patvirtinti duomenis, kad būtų galima vykdyti) ekrano apačioje, kai visi rodomi duomenys yra teisingi (31 pav.). Tada, norint vykdyti testus, reikia galutinio operatoriaus patvirtinimo.
17. Kai vykdomi testai, jutikliniame ekrane rodomas likęs vykdymo laikas ir kita visų iš eilės vykdomų testų informacija (33 pav.).

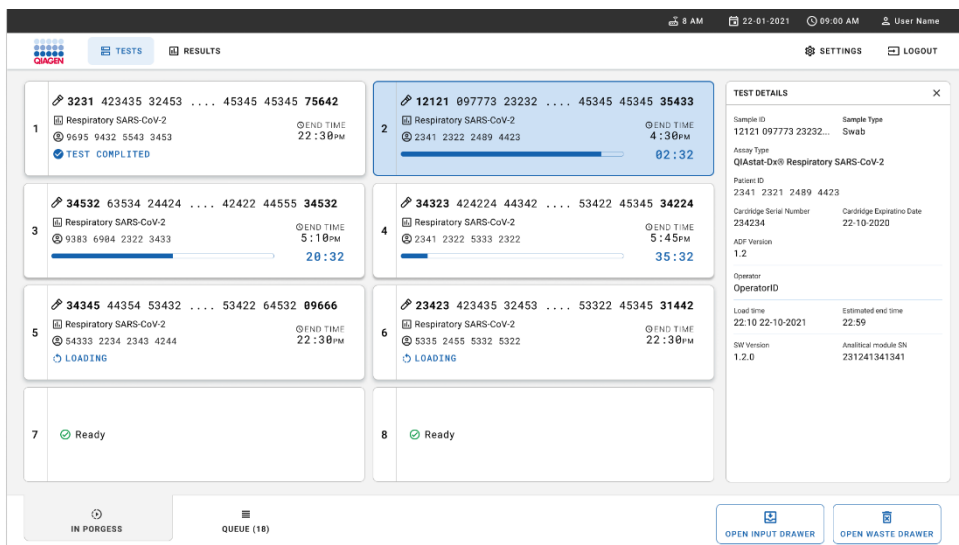



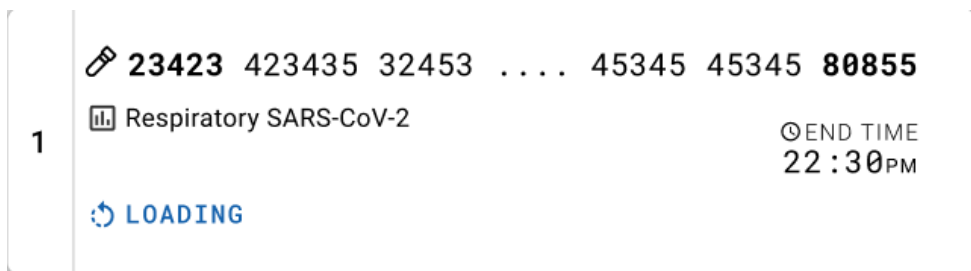

33 pav. Tyrimo vykdymo informacija eilės ekrane.

Jei–kasetė įkeliama į analizės modulį, rodomas pranešimas „LOADING” (įkeliama) ir apskaičiuotas pabaigos laikas (34 pav.).







34 pav. Pranešimas apie įkeliamą testą ir pabaigos laikas.

Jei vykdomas testas, rodomas praėjęs vykdymo laikas ir apytikris vidutinis pabaigos laikas (35 pav.).

3	 23423 423435 32453 45345 45345 80855	
	 Respiratory SARS-CoV-2	⌚ END TIME
	 9383 6904 4836 3855	5:10PM
		20:32

35 pav. Praėjusio vykdymo laiko ir apytikslio pabaigos laiko rodinys.

Jei testas atliekamas, rodomas pranešimas „test completed“ (testas atliktas) ir vykdymo pabaigos laikas (36 pav.).

1	 23423 423435 32453 45345 45345 80855	
	 Respiratory SARS-CoV-2	⌚ END TIME
	 9695 9432 5543 3453	22:30PM
	 TEST COMPLETED	

36 pav. Rodinys „Test completed“ (testas atliktas)

Protokolas. Skysti mėginiai transportavimo terpėje

Mėginio paėmimas, transportavimas ir laikymas

Paimkite nazofaringinio tampono mėginius pagal tampono gamintojo rekomenduojamas procedūras ir įdėkite tamponą į UTM.

Mėginio perkėlimas į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę

Pastaba. Taikoma tiek „QIAstat-Dx 1.0“, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“, tiek „QIAstat-Dx Rise“

1. Atidarykite „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės pakuotę ties plėšimo išpjovomis pakuotės šonuose (37 pav.).

SVARBU. Atidarius pakuotę, mėginį reikia įdėti į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę ir įstatyti į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ per 120 minučių arba į „QIAstat-Dx Rise“ per 30 minučių.




37 pav. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės atidarymas.

2. Išpakuokite „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę ir laikykite taip, kad brūkšninis kodas ant etiketės būtų atsuktas į jus.
3. Užrašykite mėginio informaciją ranka arba užklijuokite mėginio informacijos etiketę ant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės viršaus. Įsitikinkite, kad etiketė yra tinkamoje vietoje ir netrukdo atidaryti dangtelio (38 pav.).



38 pav. Mėginio informacijos uždėjimas ant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės.


4. Atidarykite pagrindinės angos mėginio dangtį „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės priekyje (39 pav.).

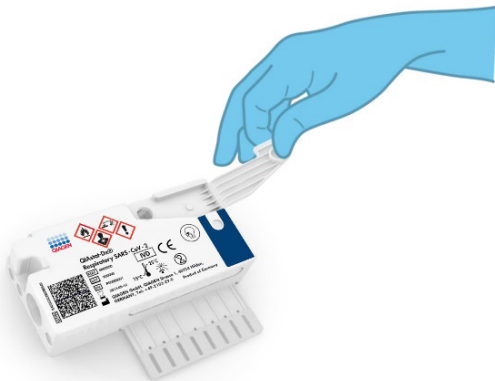

39 pav. Pagrindinės angos mėginio dangčio atidarymas.


5. Atidarykite mėgintuvėlį su mėginiu, kurį tirsite. Pateikta perkėlimo pipete pritraukite skysčio iki pipetės trečiosios užpildymo linijos (t. y. 300 µl) (40 pav.).

SVARBU. Nepritraukite į pipetę oro. Jei kaip transportavimo terpė naudojama „Copan UTM®“ universali transportavimo terpė, būkite atsargūs, kad neįsiurbtumėte vamzdelyje esančių rutuliukų. Jei į pipetę pritraukiate oro arba rutuliukų, atidžiai išstumkite skystą mėginį iš pipetės atgal į mėgintuvėlį ir pritraukite dar kartą. Jei sunaudojote visas šešias rinkinyje pateiktas pipetes, naudokite kitokias sterilias ir graduotas pipetes.

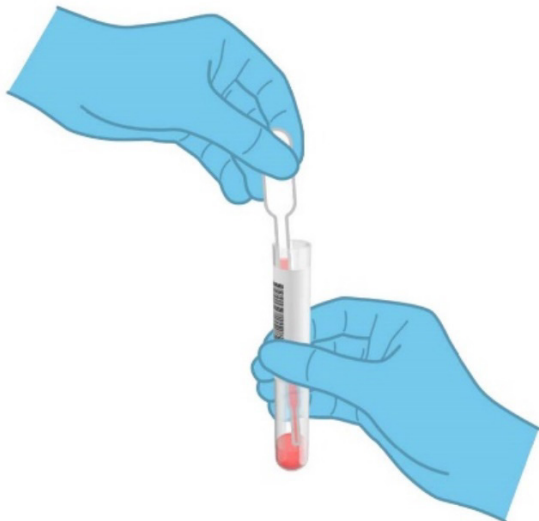

40 pav. Mėginio įtraukimas į pridėtą perkėlimo pipetę.

Atidžiai perkelkite 300 μ l mėginio tūrio į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės pagrindinę angą, naudodami pateiktą vienkartinio naudojimo perkėlimo pipetę (41 pav. kitame psl.).

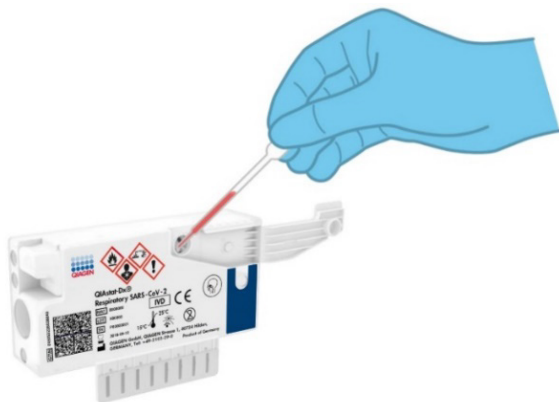

41 pav. Mėginio perkėlimas į pagrindinę „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės angą.

6. Tvirtai uždarykite pagrindinės angos mėginio dangtį, kol jis užsifiksuos (42 pav.).




42 pav. Pagrindinės angos mėginio dangčio uždarymas.

7. Apžiūrėdami įsitinkinkite, kad mėginys buvo įdėtas, patikrindami „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės mėginio patikros langelį (43 pav.).

SVARBU. Perkėlus mėginį į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę, reikia per 90 minučių kasetę įstatyti į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ nedelsiant įstatyti į „QIAstat-Dx Rise“ dėklą, kai visi mėginiai įkeliami į kasetes. Ilgiausias kasetės, jau įkeltos į „QIAstat-Dx Rise“, laukimo laikas yra apie 300

minučių. „QIAstat-Dx Rise” automatiškai aptiks, jei kasetė bus įstatyta į prietaisą ilgesnį laiką nei leidžiama ir automatiškai įspės naudotoją.

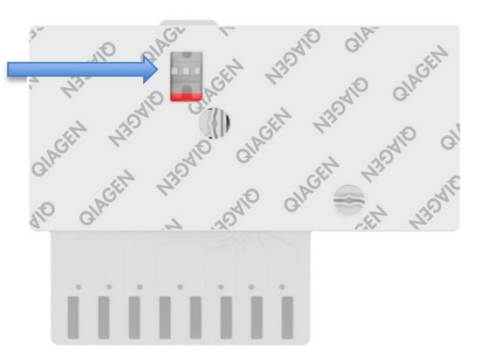

43 pav. Mėginio patikros langelis (mėlyna rodyklė).

Testo vykdymas „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0”

Pastaba. Daugiau informacijos apie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” naudojimą žr. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” naudotojo vadove.

Pastaba. Daugiau informacijos apie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” naudojimą žr. „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” naudotojo vadove.

1. Įjunkite „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” įjungimo/išjungimo mygtuku prietaiso priekyje.

Pastaba. Maitinimo jungiklis analizės modulio galinėje dalyje turi būti nustatytas „I” padėtyje. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” būsenos indikatorius taps mėlynas.

2. Palaukite, kol parodomas ekranas „**Main**” (pagrindinis) ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” būsenos indikatoriai pradeda šviesti žaliai ir nustoja mirksėti.
3. Prisijunkite prie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” įvesdami naudotojo vardą ir slaptažodį.

Pastaba. „**Login**” (prisijungimo) ekranas rodomas, jei suaktyvinta „**User Access Control**” (naudotojų prieigos kontrolė). Jeigu „**User Access Control**” (naudotojų prieigos kontrolė) išjungta, naudotojo vardo/slaptažodžio įvesti nereikės ir bus rodomas ekranas „**Main**” (pagrindinis).

4. Jei „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” nebuvo įdiegta tyrimo apibrėžimo failo programinė įranga, prieš vykdydami testą vadovaukitės diegimo instrukcijomis (jei reikia papildomos informacijos, žr. „A priedas. Tyrimo apibrėžimo failo diegimas”).
5. Paspauskite mygtuką „**Run Test**” (vykdyti testą) „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” viršutiniame dešiniajame jutiklinio ekrano kampe.
6. Kai bus paprašyta, nuskaitykite mėginio brūkšninį kodą ant UTM vamzdelio, kuriame yra mėginys, arba nuskaitykite mėginio informacijos brūkšninį kodą, esantį „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės viršuje (žr. 3 žingsnį), naudodami integruotą

priekinį „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” brūkšninių kodų skaitytuvą (44 pav.).

Pastaba. Be to, „Sample ID” (mėginio ID) galima įvesti jutiklinio ekrano virtualiaja klaviatūra, paspaudus lauką „**Sample ID**” (mėginio ID).

Pastaba. Atsižvelgiant į pasirinktą sistemos konfigūraciją, šioje vietoje gali būti reikalaujama įvesti „Patient ID” (paciento ID).

Pastaba. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” **instrukcijos rodomos** jutiklinio ekrano apačioje esančioje instrukcijų juostoje.



44 pav. „Sample ID” (mėginio ID) brūkšninio kodo nuskaitymas.

7. Kai bus paprašyta, nuskaitykite naudojamos „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės brūkšninį kodą (45 pav.). „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” automatiškai atpažįsta atliekamą tyrimą pagal kasetės brūkšninį kodą.

Pastaba. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” ir „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” nepriims „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasečių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, anksčiau naudotų kasečių arba prietaise neįdiegtų tyrimų kasečių. Tokiais atvejais bus rodomas klaidos pranešimas ir „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetė bus atmesta. Daugiau informacijos apie tyrimų diegimą pateikta „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” naudotojo vadove.



45 pav. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės brūkšninio kodo nuskaitymas.

8. – tinkamą mėginio tipą iš sąrašo (46 pav.).

administrator Run Test Module 1 20:58 2019-02-13

1 UI administrator RP	2 Available	3 Available	4 Available
--------------------------	-------------	-------------	-------------

TEST DATA

Sample ID
12345

Assay Type
RP SARS-Co

Sample Type
UTM

SAMPLE TYPE

Swab

UTM

Select Sample Type

Cancel

46 pav. Mėginio tipo pasirinkimas.

9. Pasirodys ekranas „**Confirm**“ (patvirtinti). Peržiūrėkite įvestus duomenis ir atlikite visus reikiamus pakeitimus, pasirinkdami atitinkamus laukus jutikliniame ekrane ir redaguodami informaciją.
10. Kai visi rodomi duomenys yra teisingi, paspauskite „**Confirm**“ (patvirtinti). Jei reikia, pasirinkite atitinkamą lauką, kad redaguotumėte jo turinį, arba paspauskite „**Cancel**“ (atšaukti), jei norite atšaukti testą (47 pav.).

administrator Run Test Module 1 14:44 2017-03-30

1 UI administrator Resp Panel 2 Not installed 3 Not installed 4 Not installed

TEST DATA

Sample ID
2430362

Assay Type
RP SARS-Co

Sample Type
UTM

Confirm

Cancel

Module 1 | Confirm Test Data or click any field to edit

47 pav. Duomenų įvedimo patvirtinimas.

11. Įsitikinkite, kad „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės tampono angos ir pagrindinės angos mėginių dangčiai yra tvirtai uždaryti. Automatiškai atsidarius kasetės įstatymo angai „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ ir „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ viršuje, įstatykite „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę, nukreipę brūkšninį kodą į kairę ir reakcijos kameras nukreipę žemyn (48 pav.).

Pastaba. Nebūtina įstumti „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“. Tinkamai įstatykite į kasetės įstatymo angą ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ automatiškai perkels kasetę į analizės modulį.



48 pav. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės įdėjimas į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0”.

12. Aptikus „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę, „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” automatiškai uždarys kasetės įstatymo angą ir pradės vykdyti testą. Daugiau jokių veiksmų operatoriui atlikti nereikia.

Pastaba. „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” priims tik testo nustatymo metu naudotą ir nuskaitytą „QIAstat-Dx Respiratory SARS CoV-2 Panel” kasetę. Įstačius kitą kasetę, nei buvo nuskaityta, bus rodoma klaida ir kasetė bus automatiškai išstumta.


Pastaba. Iki šio etapo testo vykdymą galima atšaukti apatiniame dešiniajame jutiklinio ekrano kampe paspaudus mygtuką „Cancel” (atšaukti).

Pastaba. Atsižvelgiant į sistemos konfigūravimą, operatoriui gali tekti iš naujo įvesti savo naudotojo slaptažodį, kad pradėtų testo vykdymą.


Pastaba. Jeigu į angą neįstatoma „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetė, kasetės įstatymo angos dangtelis automatiškai uždarys po 30 sekundžių. Tokiu atveju pakartokite procedūrą nuo 17 veiksmo.

13. Kol vykdomas testas, jutikliniame ekrane rodomas likęs vykdymo laikas.
14. Tyrimui pasibaigus rodomas ekranas „Eject” (išstumti) (49 pav.) ir modulio būsenos juostoje bus rodomas vienas iš toliau pateikiamų testo rezultatų.
- „TEST COMPLETED” (TESTAS ATLIKTAS): testas sėkmingai atliktas
 - „TEST FAILED” (TESTAS NEPAVYKO): testo metu įvyko klaida
 - „TEST CANCELED” (TESTAS ATŠAUKTAS): naudotojas atšaukė testą

SVARBU. Jei testas nepavyko, žr. skyrių „Trikčių šalinimas” „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” naudotojo vadove, norėdami sužinoti galimas priežastis ir instrukcijas, ką daryti toliau.

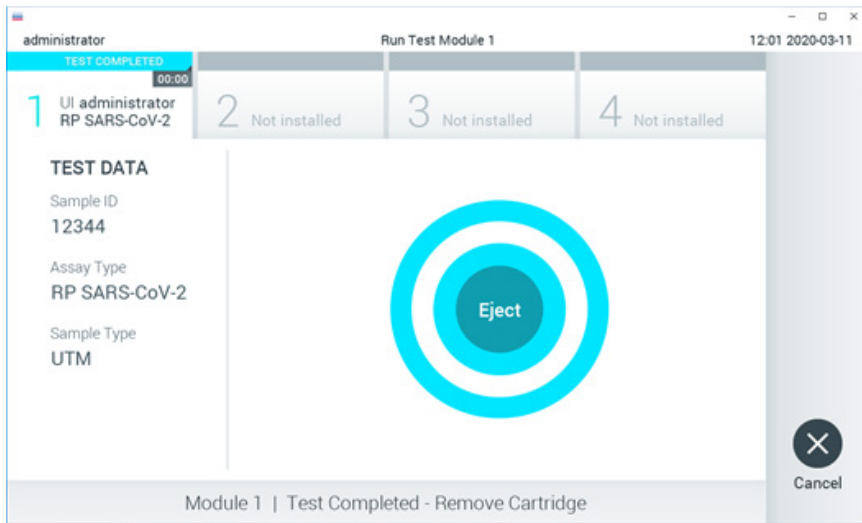

49 pav. Rodomas ekranas „Eject” (išstumti).

15. Paspauskite  „Eject” (išstumti) jutikliniame ekrane, kad išstumtume „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę, ir išmeskite ją kaip biologiškai pavojingas atliekas, laikydamiesi vietos ir šalies sveikatos ir saugos reikalavimų ir teisės aktų nuostatų. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę reikia išimti, kai atsidaro kasetės įstatymo anga ir kasetė išstumiamą. Jeigu kasetė neišimama per 30 sekundžių, ji automatiškai įtraukiama atgal į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” analizatorių ir kasetės įstatymo angos dangtelis uždaromas. Tokiu atveju

paspauskite „**Eject**” (išstumti), kad vėl atidarytumėte kasetės įstatymo angą, ir išimkite kasetę.

SVARBU. panaudotos „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės turi būti išmestos. Neįmanoma pakartotinai panaudoti kasečių atliekant testus, kurie buvo pradėti vykdyti, tačiau vėliau buvo operatoriaus atšaukti, arba kuriuos vykdant įvyko klaida.

16. Išstūmus „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę, rodomas rezultatų „**Summary**” (suvestinės) ekranas. Daugiau informacijos ieškokite „Rezultatų aiškinimas“. Norėdami pradėti vykdyti kitą tyrimą, paspauskite „**Run Test**” (vykdyti tyrimą).

Pastaba. Daugiau informacijos apie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” naudojimą žr. „*QIAstat-Dx Analyzer 1.0*” naudotojo vadove.

Pastaba. Daugiau informacijos apie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” naudojimą žr. „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” naudotojo vadove.

Testo vykdymas su „QIAstat-Dx Rise”

Pastaba. Daugiau informacijos apie „QIAstat-Dx Rise” naudojimą žr. „QIAstat-Dx Rise” naudotojo vadove.


Pastaba. Šiame skyriuje pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis, priklausomai nuo tyrimo.

„QIAstat-Dx Rise” analizatoriaus paleidimas

1. Paspauskite **įjungimo/išjungimo** mygtuką „QIAstat-Dx Rise” priekyje, kad paleistumėte prietaisą.

Pastaba. Maitinimo jungiklis galinėje kairėje jungčių dėžutėje turi būti nustatytas „I” padėtyje.

2. Palaukite, kol parodomas „Login” (prisijungimo) ekranas ir įsijungia žalias LED būsenos indikatorius.
3. Prisijunkite prie sistemos, kai bus parodytas prisijungimo ekranas (50 pav.).

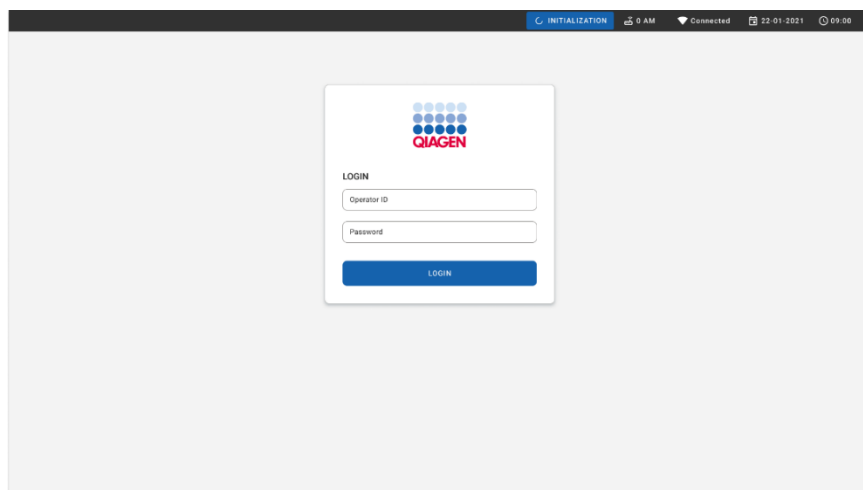

50 pav. „Log in” (prisijungimo) ekranas

Pastaba. „QIAstat-Dx Rise” sėkmingai įdiegus pirmą kartą, sistemos administratorius turi prisijungti, kad galėtų pirmą kartą sukonfigūruoti programinę įrangą.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės paruošimas universaliems skytiams mėginiams transportavimo terpėje

Išimkite „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę iš pakuotės. Informacijos apie mėginio įdėjimą į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę ir konkrečios informacijos apie vykdytiną tyrimą žr. „Mėginio perkėlimas į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę („Klaida! Literatūros šaltinis nerastas.”)

Visada įsitikinkite, įdėjęs mėginį į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę, abu mėginio dangčiai yra tvirtai uždaryti.

Mėginio brūkšninio kodo uždėjimas ant „QIAstat-Dx”

Uždėkite brūkšninį kodą ant „QIAstat-Dx” kasetės viršutinės dešinės dalies (nurodyta rodykle) (51 pav.).



51 pav. „Sample ID” (mėginio ID) brūkšninio kodo tvirtinimas

Didžiausias leistinas brūkšninio kodo dydis yra 22 mm x 35 mm. Brūkšninis kodas visada turi būti kasetės dešinėje (kaip tai nurodyta virš mėlynai pažymėtos srities), nes kairė kasetės pusė yra svarbi mėginio automatiniam aptikimui (52 pav.).

Pastaba. Norint apdoroti mėginius „QIAstat-Dx Rise“, reikia uždėti kompiuteriu įskaitomą mėginio ID brūkšninį kodą ant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Cartridge“.



52 pav. „Sample ID“ (mėginio ID) brūkšninio kodo uždėjimas


Galima naudoti vienmačius ir dvimačius brūkšninius kodus. Galima naudoti šiuos vienmačius brūkšninius kodus: EAN-13 ir EAN-8, UPC-A ir UPC-E, „Code128“, „Code39“, „Code93“ ir „Codabar“. Galima naudoti šiuos dvimačius brūkšninius kodus: „Aztec Code“, „Data Matrix“ ir „QR code“.

Įsitikinkite, ar brūkšninio kodo kokybė yra tinkama. Sistema gali perskaityti C arba aukštesnės klasės spausdinimo kokybės kodą, kaip apibrėžta ISO/IEC 15416 (linijinis) arba ISO/IEC 15415 (dvimatis).

Testo atlikimo procedūra


1. Paspauskite mygtuką „**OPEN WASTE DRAWER**“ (atidaryti atliekų stalčių), esantį apatiniame dešiniajame pagrindinio testo ekrano kampe (53 pav.).
2. Atidarykite atliekų stalčių ir išimkite per ankstesnius tyrimus panaudotas kasetes. Patikrinkite, ar atliekų stalčiuje nėra išsiliejusio skysčio. Jeigu reikia, atliekų stalčių išvalykite, kaip nurodyta „QIAstat-Dx Rise“ naudotojo vadovo skyriuje „Priežiūra“.

3. Išėmę kasetes atliekų stalčių uždarykite. Sistema gali nuskaityti dėklą ir sugrįžti į pagrindinį ekraną (53 pav.). Jeigu dėklas buvo išimtas norint atlikti priežiūrą, prieš uždarydami stalčių įsitikinkite, kad dėklas buvo tinkamai įstatytas.
4. Paspauskite mygtuką „**OPEN INPUT DRAWER**” (atidaryti mėginių stalčių), esantį apatiniame dešiniajame ekrano kampe (53 pav.).

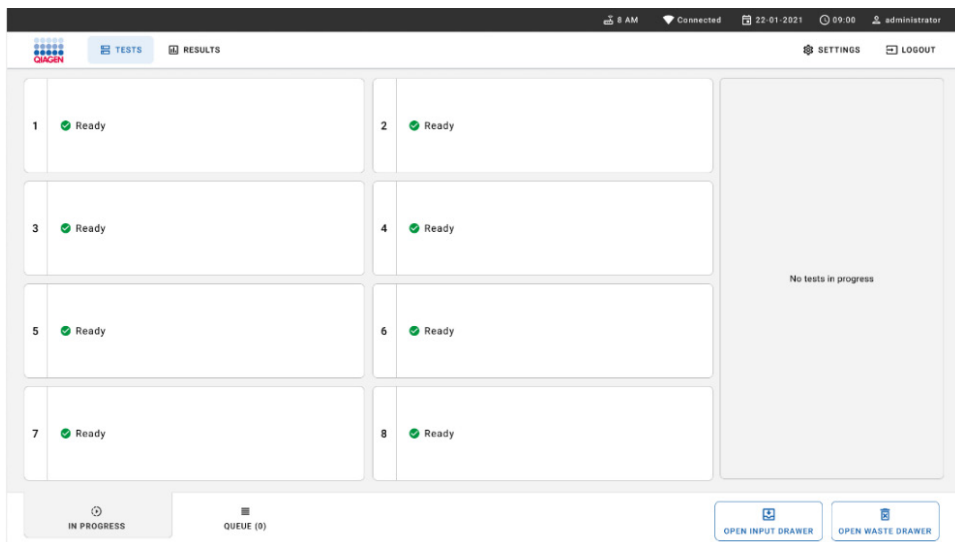


53 pav. Pagrindinio testo ekranas.

5. Palaukite, kol mėginių stalčius bus atrakintas (54 pav.).

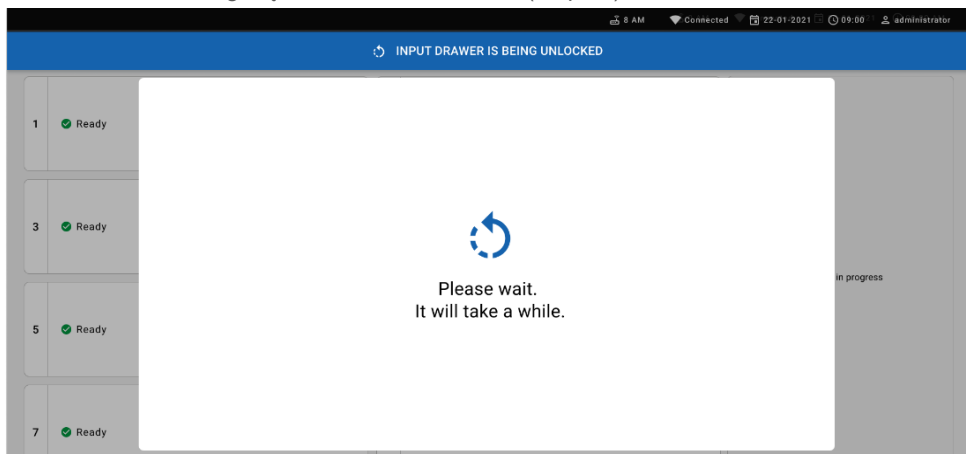


54 pav. Mėginių dėklo laukimo dialogo langas.

6. Kai būsite paraginti, ištraukite mėginių stalčių, kad jį atidarytumėte (55 pav.).

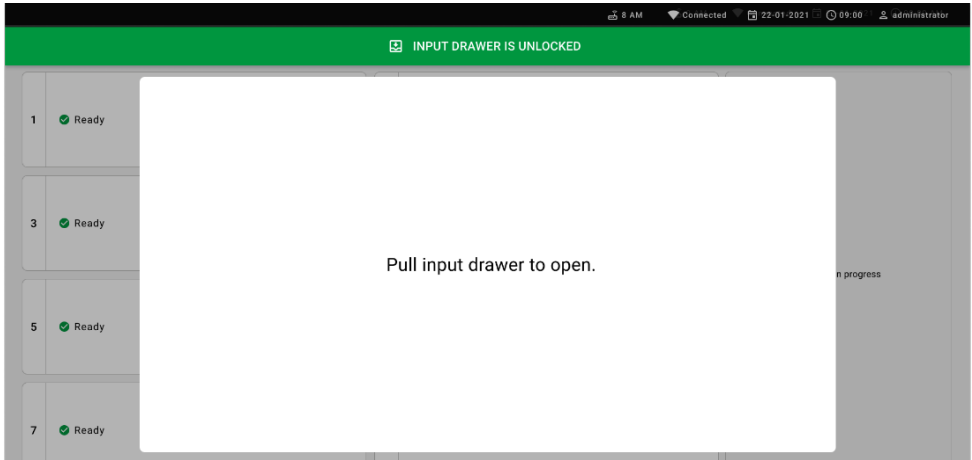

55 pav. Mėginių stalčiaus atidarymo dialogo langas.

7. Parodomas dialogo langas „Add cartridge” (įdėti kasetę) ir suaktyvinamas skaitytuvas priekyje. Nuskaitykite mėginio ID brūkšninį kodą, priklijuotą „QIAsat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės, esančios prietaiso priekyje, viršuje (padėtis nurodyta rodykle (56 pav.).

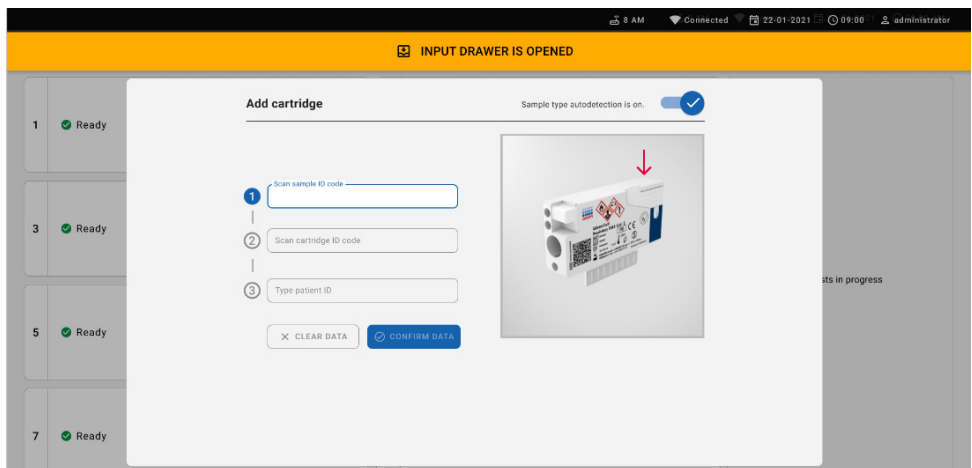


56 pav. „Sample ID” (mėginio ID) nuskaitymo ekranas

8. Įvedę mėginio ID brūkšninį kodą, nuskaitykite naudojamos „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės brūkšninį kodą (padėtis nurodyta rodykle). „QIAstat-Dx Rise“ automatiškai atpažįsta vykdytiną tyrimą pagal „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės brūkšninį kodą (57 pav.).

Pastaba. Įsitikinkite, kad įjungta („on“) funkcija „**Sample type autodetection**“ (mėginio tipo automatinis aptikimas). Sistema automatiškai atpažįsta naudojamą mėginio tipą (jeigu taikoma naudojamam tyrimui).


Jei funkcija „**Sample type autodetection**“ (mėginio tipo automatinis aptikimas) išjungta („off“), gali reikėti pasirinkti tinkamą mėginio tipą neautomatiškai (jei taikoma naudojamam tyrimui).

Pastaba. „QIAstat-Dx Rise“ nepriims „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasečių, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, anksčiau naudotų kasečių arba prietaise neįdiegtų tyrimų kasečių. Šiais atvejais bus rodomas klaidos pranešimas.

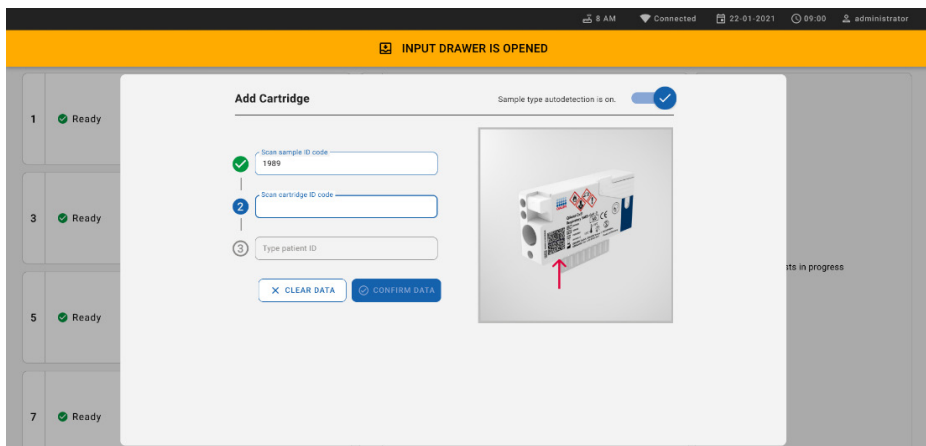


57 pav. Kasetės ID nuskaitymo ekranas

9. Įveskite paciento ID (Patient ID (paciento ID) nustatytas kaip „on” (įjungta), tada patvirtinkite duomenis (58 pav.).

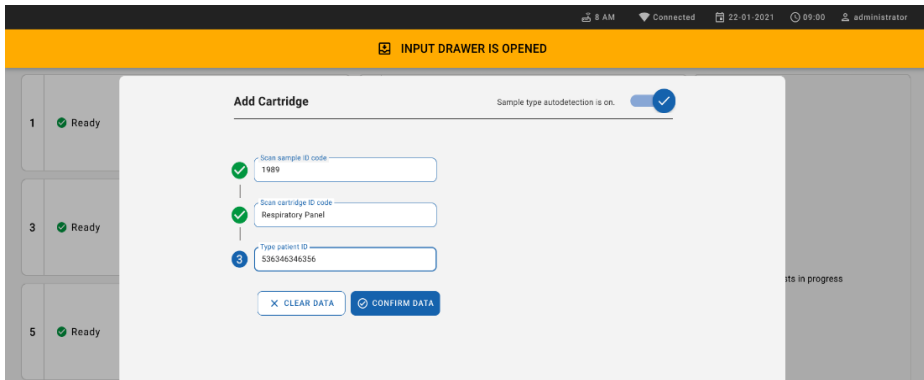

58 pav. „Patient ID” (paciento ID) įvedimas

10. Sėkmingai nuskaičius ekrano viršuje trumpam parodomas toliau nurodytas dialogo langas (59 pav.).

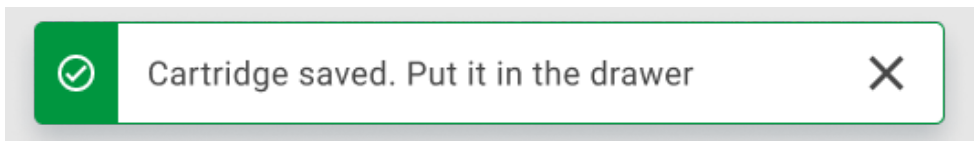


59 pav. Įrašytų kasetės duomenų ekranas

11. Įdėkite kasetę į mėginių stalčių. Įsitinkinkite, kad kasetė į dėklą įdėta tinkamai.


12. Toliau nuskaitykite ir įdėkite kasetes atlikdami ankstesnius veiksmus. Į stalčių galite įkelti iki 18 kasečių.

SVARBI PASTABA. Atminkite, kad „QIAstat-Dx Rise” mėginių stalčiuje vienu metu galima naudoti iki 18 „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasečių. Taip pat atminkite, kad naudojant 2.2 arba naujesnės versijos programinę įrangą į mėginių stalčių galima vienu metu dėti ir apdoroti skirtingus testus.

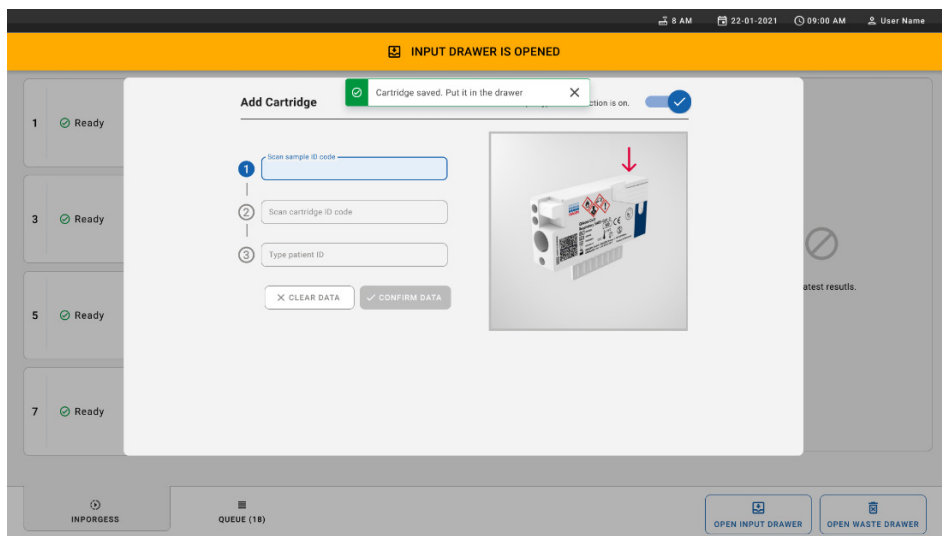


60 pav. Kasetės pridėjimo ekranas.

13. Kai visos kasetės nuskaitytos ir įdėtos, uždarykite mėginių stalčių. Sistema nuskaitys kasetes ir parengs eilę (61 pav.).

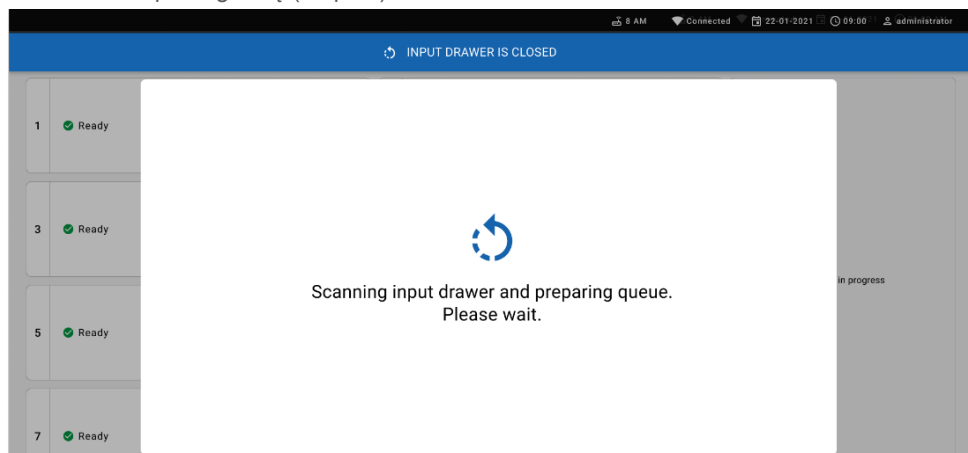

61 pav. Eilės ruošimo ekranas.

Sėkmingai nuskaičius eilė vėl bus rodoma (62 pav.). Peržiūrėkite rodomus duomenis. Jei įvyksta klaida, paspauskite mygtuką „open input drawer“ (atidaryti mėginių stalčių), pašalinkite atitinkamą kasetę ir iš naujo nuskaitykite kasetę, atlikdami 10–13 veiksmus.

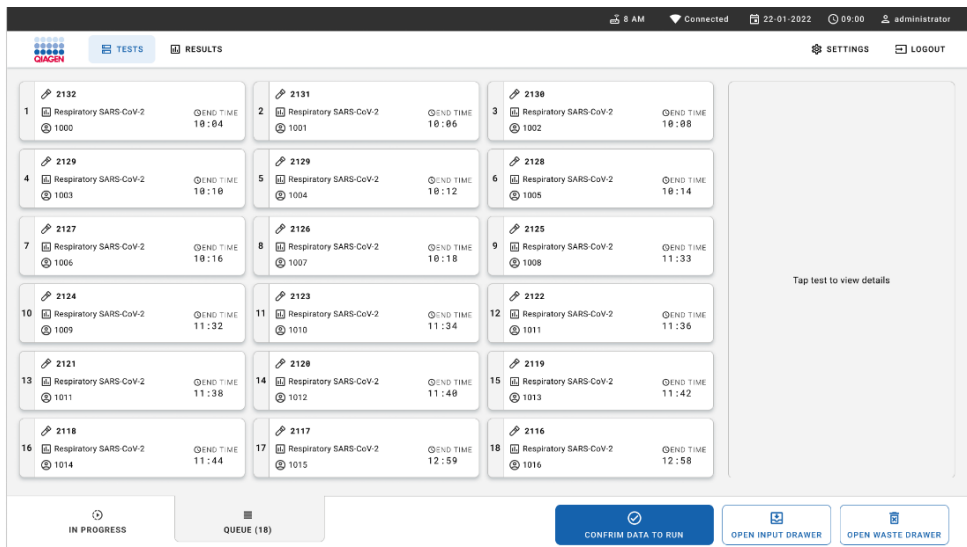

62 pav. Mėginių eilės ekranas.

Pastaba. Ekране rodoma mėginių eilė gali neatitikti kasečių eilės mėginių stalčiuje (ji sutampa tik tada, kai visos kasetės yra įtraukiamos į eilę kartu)-ir negali būti keičiama neatidarius mėginių dėklo ir neišėmus kasečių.

Mėginių eilė/apdorojimo tvarką sudaro „QIAstat-Dx Rise” pagal šias taisykles:

- Stabilumo laikas: „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetėms, kurių trumpiausias likimo sistemoje stabilumo laikas, bus suteiktas prioritetas, neatsižvelgiant į jų padėtį įkėlimo dėkle.
- Tame pačiame tyrimo tipe įkėlimo dėklo padėtis nustato eilės tvarką.

Jei jutikliniame ekrane pasirenkate testą, ekrano peržiūros **išsamios informacijos** skyriuje rodoma papildoma informacija (63 pav.).

Pastaba. Sistema atmes mėginių stalčiuje esančias kasetes, kurių stabilumo laikas sistemoje viršija maksimalų (apie 300 min.)

63 pav. Mėginių eilės ekranas, kuriame rodoma papildoma pasirinkto tyrimo informacija.

Skyriuje „test details“ (testo išsamios informacijos) rodoma toliau pateikiama informacija (64 pav.).

- „Sample ID“ (mėginio ID)
- „Sample Type“ (mėginio tipas) (priklauso nuo tyrimo)
- „Assay Type“ (tyrimo tipas)
- „Patient ID“ (paciento ID)
- „Operator ID“ (operatoriaus ID)
- „Input Tray Load time“ (mėginių dėklo įkėlimo laikas)
- „Estimated end time“ (planuojamas pabaigos laikas)
- „Position in Input-drawer“ (padėtis mėginių stalčiuje)
- „Position in Queue“ (Padėtis eilėje) (**Pastaba.** Padėtis gali skirtis, atsižvelgiant į mėginio stabilumo laiką)
- „Cartridge serial number“ (kasetės serijos numeris)
- „Cartridge expiration date“ (kasetės galiojimo data)
- „Onboard time left“ (likęs laikas prietaise)

Pastaba. Laikas sistemoje (apie 300 min.) inicijuoja mėginių tvarką eilėje.

TEST DETAILS ✕

Sample ID 83746466367738383	Sample Type UTM
Assay Type QIAstat-Dx® Respiratory SARS-CoV-2	
Patient ID 23423412342342354	
Operator OperatorID	
Input tray Load time 22:10 22-10-2021	Estimated end time 22:59
Position in input tray 5	Position in Queue 1
Cartridge Serial Number 23432452	Cartridge Expiration Date 30-10-2021

🕒 Onboard time left 120min

64 pav. Išsami testo informacija.

14. Paspauskite mygtuką „**Confirm data to run**” (patvirtinti duomenis, kad būtų galima vykdyti) ekrano apačioje, kai visi rodomi duomenys teisingi (63 pav.). Tada reikės dar vieno operatoriaus patvirtinimo, kad testai būtų vykdomi (65 pav.).

✔ **Confirm queue** ✕

Σ **8 test(s) in the queue**

N **8 New tests**

✕
CANCEL

▶
RUN TEST

65 pav. Dialogo langas „Confirm queue” (patvirtinti eilę).

Kai vykdomi testai, jutikliniame ekrane rodomas likęs vykdymo laikas ir kita visų iš eilės vykdomų testų informacija (66 pav.).

The screenshot displays the QIAstat-Dx software interface. At the top, there are navigation tabs for 'TESTS' and 'RESULTS', along with system status indicators like '8 AM', 'Connected', '22:01:2022', '09:00', and 'administrator'. The main area is a grid of test cards. Card 1 (ID 2132) shows 'QIAstat-Dx @ Respiratory SARS-CoV-2 Panel' with sample ID 1014, an end time of 17:15, and a progress bar at 28:20. Card 2 (ID 2131) is highlighted in blue, showing 'QIAstat-Dx @ Respiratory SARS-CoV-2 Panel' with sample ID 1015, an end time of 17:08, and a progress bar at 20:58. Cards 3-8 show 'Ready' status. A right-hand panel titled 'TEST DETAILS' for test 2131 provides information: Sample ID 2131, Sample Type UTM, Assay QIAstat-Dx @ Respiratory SARS-CoV-2 Panel, Patient ID 1015, Cartridge Serial Number 1123124141412412, Cartridge Expiration Date 24-12-2022, AIF version 2.1, Operator administrator, Input Drawer Load time 22-10-2022 16:45:45, Estimated End Time 22-10-2022 17:06:23, SW Version 2.0.0, and Analytical Module SN 10721033. At the bottom of this panel is a red 'ABORT' button. Below the grid are 'IN PROGRESS' and 'QUEUE (15)' buttons. At the bottom right are 'OPEN INPUT DRAWER' and 'OPEN WASTE DRAWER' buttons.

66 pav. Tyrimo vykdymo informacija eilės ekrane.

Jei-kasetė įkeliamą į analizės modulį, rodomas pranešimas „test loading“ (testas įkeliamas) ir apskaičiuotas pabaigos laikas (67 pav.).

This screenshot shows a single test card for ID 1989. It is labeled '3' and 'Respiratory SARS-CoV-2' with sample ID 1015. The status is 'LOADING', indicated by a circular arrow icon. The estimated end time is 11:11.


67 pav. Pranešimas apie įkeliamą testą ir pabaigos laikas.

Jei vykdomas testas, rodomas praėjęs vykdymo laikas ir apytikris vidutinis pabaigos laikas (68 pav.).

This screenshot shows the same test card for ID 1989. The status is now '27:47', indicating the elapsed time. A blue progress bar is shown below the elapsed time, and the estimated end time remains 11:11.

68 pav. Praėjusio vykdymo laiko ir apytikslio pabaigos laiko rodinys.

Jei testas atliekamas, rodomas pranešimas „test completed“ (testas atliktas) ir vykdymo pabaigos laikas (69 pav.).

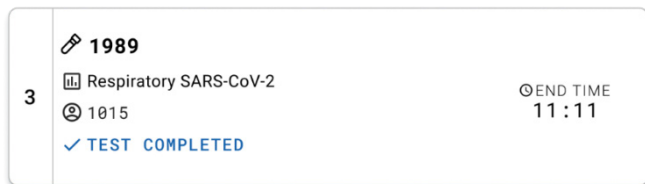

69 pav. Rodinys „Test completed“ (testas atliktas)


Mėginių prioriteto nustatymas

Jei mėginį reikia tirti skubiai, galima pasirinkti šį mėginį ekrane „Sample queue“ (mėginių eilė) ir tirti kaip pirmąjį mėginį (70 pav.). Atkreipkite dėmesį, kad negalima mėginiui suteikti prioriteto po to, kai patvirtinama eilė.

Prioriteto suteikimas mėginiui prieš pradėdant vykdyti


Prieš patvirtinant vykdymo duomenis, skubus mėginys pasirenkamas eilės ekrane ir pažymimas „**URGENT**“ (skubus) dešinėje mėginių eilės ekrano pusėje. (70 pav.). Po to mėginys perkeliamas į pirmą eilės padėtį (71 pav.). Atminkite, kad prioritetą galima suteikti tik vienam mėginiui.

Pastaba. Būtina atidaryti ir uždaryti mėginių stalčių, nes negalima suteikti prioriteto patvirtintai kasetei. Šiame etape mygtukas „**Urgent**“ (skubus) nėra aktyvus. Operatorius turi grafinėje naudotojo sąsajoje perjungti iš skirtuko QUEUE (eilė) į skirtuką **IN PROGRESS** (vykdoma), kad būtų matomas aktyvus mygtukas „**Urgent**“ (skubus).

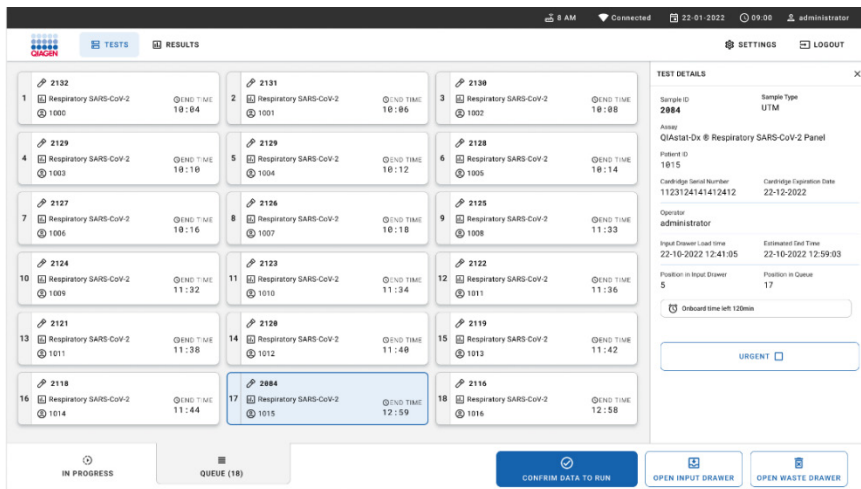


70 pav. Mėginių eilės ekranas, kai pasirinkamas mėginys, kuriam bus suteikiamas prioritetas.

Suteikus mėginiui prioritetą, gali pasibaigti kai kurių kitų mėginių stabilumo laikas. Šis įspėjimas gali būti matomas dešiniajame ekrano kampe (71 pav.).

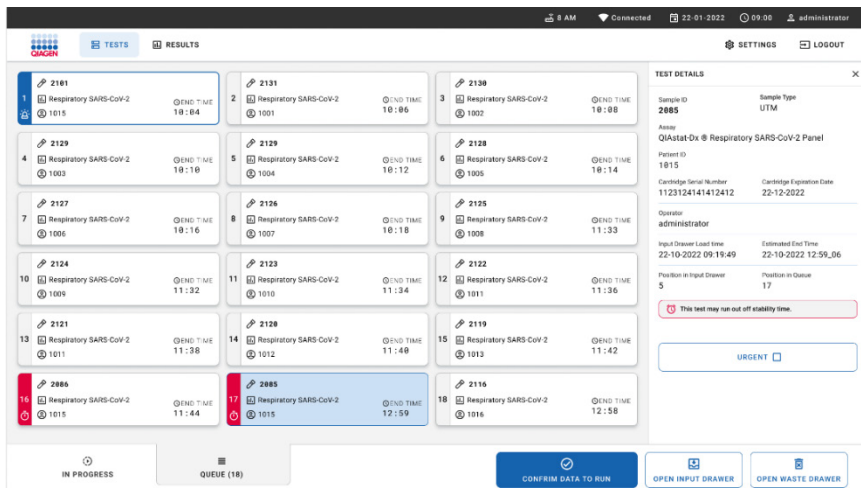

71 pav. Mėginių eilės ekranas po to, kai mėginiui suteikiamas prioritetas.


Patvirtinus eilę galima pradėti procedūrą (72 pav.).

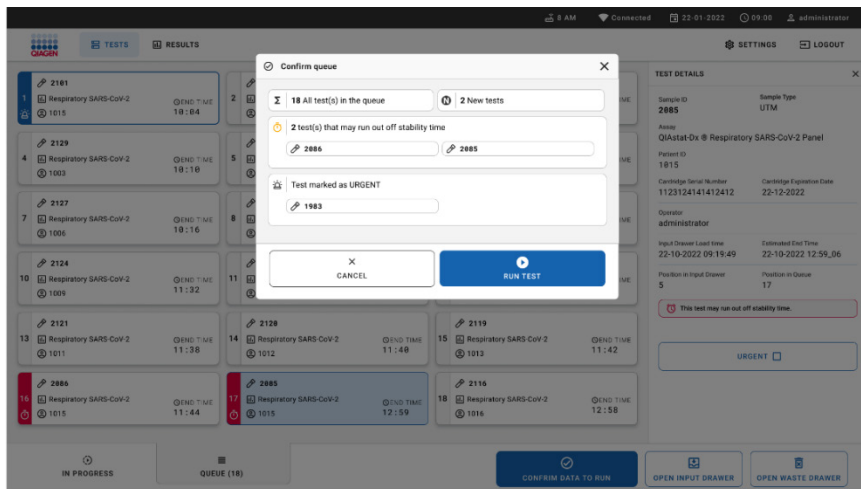

72 pav. Vykdymo ekrano patvirtinimas.

Mėginių prioriteto nustatymas procedūros metu

Mėginiui galima suteikti prioritetą dėl bet kokios priežasties vykdymo metu. Tokiu atveju, jei nėra prieinamo AM, bet kokie kiti vykdomi mėginiai turi būti atmeti, kad būtų galima nustatyti prioritetą (73 pav.).

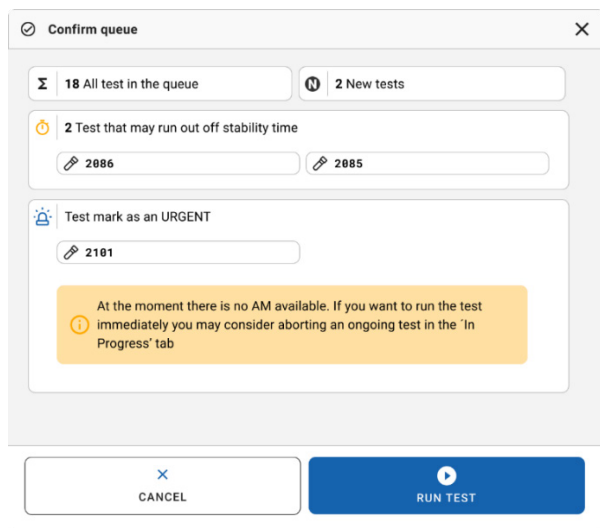

73 pav. Vykdyimo metu rodomas patvirtinimo dialogo langas.

Mėginio apdorojimo nutraukimas

Mėginį galima atmesti nuskaitymo, įkėlimo ir tyrimo metu. Atminkite, kad mėginio, kurio vykdymas nutraukiamas, nebegalima naudoti dar kartą, taip pat nebegalima naudoti mėginio, kurio apdorojimas nutraukiamas nuskaitymo arba įkėlimo metu.

Norėdami atmesti mėginį, eikite į ekrano skirtuką „**In progress**“ (vykdoma), pasirinkite mėginį ir dešiniajame ekrano kampe paspauskite parinktį „abort“ (atmesti) (74 pav.).

Negalima atmesti procedūros, kai mėginys įkeliamas į AM arba procedūra užbaigiama ir sistema nuskaityto rezultatų duomenis ir (arba) techninius žurnalus iš atitinkamo AM.

The screenshot displays the QIAstat-Dx software interface. At the top, it shows the time (8 AM), connection status (Connected), date (22-01-2022), and user (administrator). The main area is divided into a grid of test status cards and a 'TEST DETAILS' panel on the right.

Test Status Grid:

- Card 1: Sample ID 2132, QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, Patient ID 1814, End Time 17:15, 28:20.
- Card 2: Sample ID 2131, QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, Patient ID 1815, End Time 17:08, 20:58 (highlighted in blue).
- Card 3: Sample ID 2130, QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, Patient ID 1815, End Time 17:06, 18:26.
- Card 4: Ready.
- Card 5: Ready.
- Card 6: Ready.
- Card 7: Ready.
- Card 8: Ready.

TEST DETAILS Panel:

- Sample ID: 2131
- Sample Type: UTM
- Assay: QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel
- Patient ID: 1815
- Cartridge Serial Number: 11231241412412
- Cartridge Expiration Date: 24-12-2022
- ADF version: 2.1
- Operator: administrator
- Input Drawer Load time: 22-10-2022 16:45:45
- Estimated End Time: 22-10-2022 17:06:23
- SW Version: 2.0.0
- Analytical Module SN: 10721033

At the bottom, there are buttons for 'IN PROGRESS', 'QUEUE (15)', 'OPEN INPUT DRAWER', and 'OPEN WASTE DRAWER'. A red 'ABORT' button is also visible in the test details panel.


74 pav. Mėginio apdorojimo nutraukimas.

Sistemai reikia patvirtinimo, kad galėtų atmesti mėginį (75 pav.).


The screenshot shows a red 'CONFIRM ACTION' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The main text asks: 'Do you want to abort this test?'. Below the text is a text input field containing the sample ID '2131'. At the bottom, there are two buttons: a white 'CANCEL' button with a close icon (X) and a red 'ABORT TEST' button with a close icon (X).

75 pav. Mėginio apdorojimo nutraukimo patvirtinimo dialogo langas.

Po kurio laiko mėginys ekrane bus pradėtas rodyti kaip „aborted“ (atmestas) (76 ir 77 pav.).

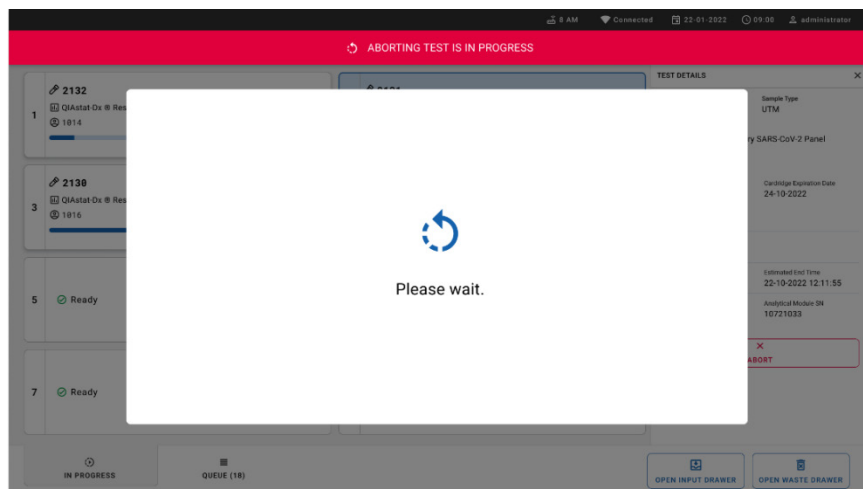

76 pav. Laukiamo mėginio apdorojimo nutraukimo langas.

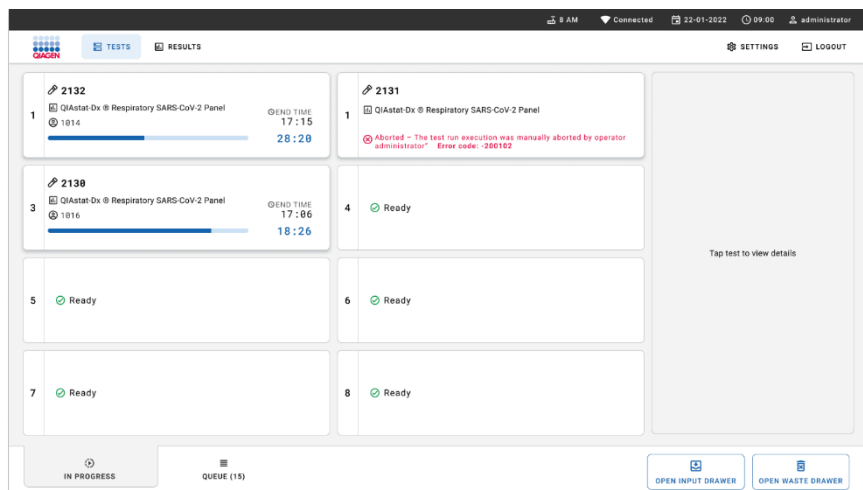


77 pav. Nutrauktas mėginio apdorojimas po nutraukimo patvirtinimo.

Rezultatų aiškinimas

Rezultatų peržiūra su „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0”

„QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” automatiškai interpretuoja ir įrašo testo rezultatus. Išštūmus „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę, automatiškai rodomas rezultatų „**Summary**” (suvestinės) ekranas (78 pav.).

78 pav. pavaizduotas „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” ekranas.

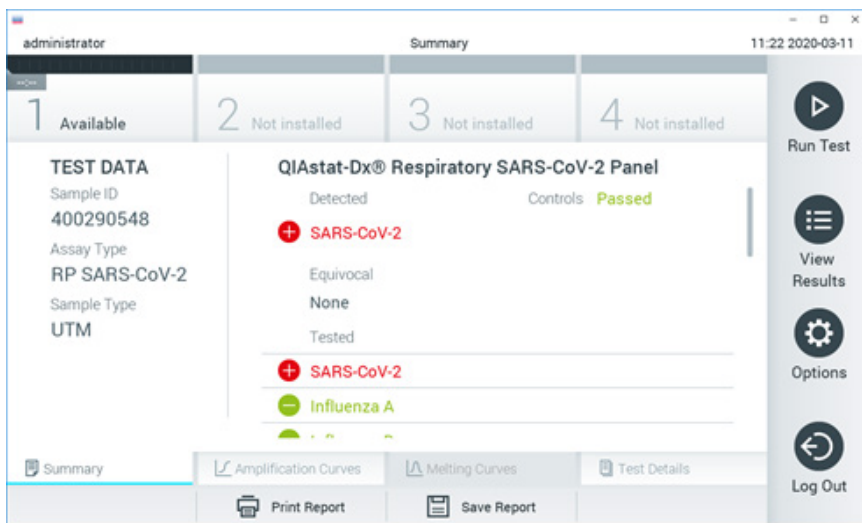


78 pav. Rezultatų ekrano „Summary” (suvestinės) pavyzdys, kurio „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” kairiajame skydelyje rodomi „Test Data” (testo duomenys), o pagrindiniame – testo „Summary” (suvestinė).

Šiame ekrane yra kiti skirtukai su išsamesne informacija, kuri bus paaiškinta skyriuose toliau:

- „Amplification Curves” (amplifikacijos kreivės).
- „Melting Curves” (lydymosi kreivės). Šis skirtukas išjungtas „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel”.
- Išsami testo informacija.

79 pav. pavaizduotas „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” ekranas.

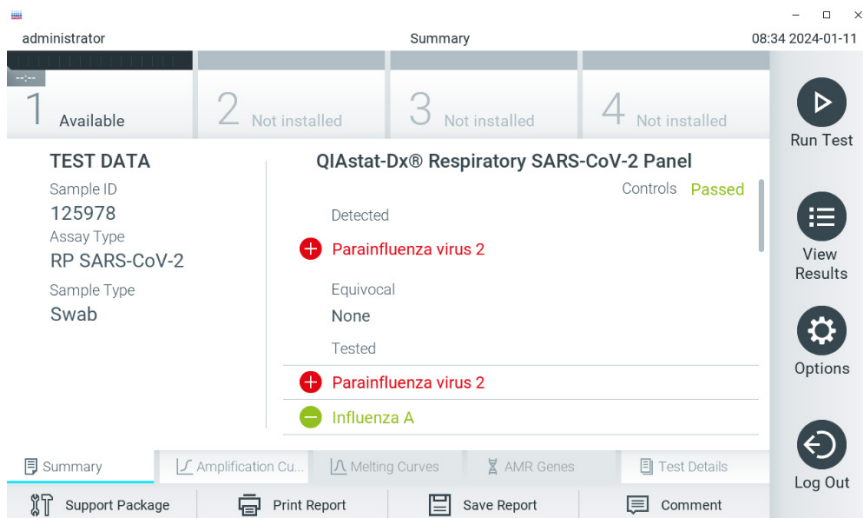


79 pav. Rezultatų ekrano „Summary” (suvestinės) pavyzdys, kurio „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” kairiajame skydelyje rodomi „Test Data” (testo duomenys), o pagrindiniame – testo „Summary” (suvestinė).



„QIAstat-Dx Analyzer 2.0” yra papildomas skirtukas:

- „AMR Genes” (AMR genai). Jis išjungtas „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel”.

Pastaba. Kalbant apie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” ir (arba) „QIAstat-Dx Analyzer 2.0”, kai aiškinamos tokios pačios funkcijos, nuo šios akimirkos bus naudojamos pavyzdinės ekranų kopijos.

Pagrindinėje ekrano dalyje pateikiami toliau nurodyti trys sąrašai ir rezultatams rodyti naudojamos kodavimo spalvos ir simboliai.

- Į pirmąjį sąrašą ties antrašte „Detected” (aptikta) įtraukti visi mėginyje aptikti ir identifikuoti patogenai, priekyje pažymėti ženklų  ir rodomi raudonai.

- Antrasis sąrašas su antrašte „Equivocal” (abejotina) nenaudojamas. „Equivocal” (abejotina) rezultatai netaikomi „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel”. Todėl sąrašas „Equivocal” (abejotina) visada bus tuščias.
- Į trečiąjį sąrašą ties antrašte „Tested” (tirta) įtraukti visi mėginysje tirti patogenai. Mėginysje aptikti ir identifiukuoti patogenai priekyje pažymėti ženklų  ir rodomi raudonai. Tirti, bet neaptikti patogenai priekyje pažymėti ženklų  ir rodomi žaliai.

Pastaba. Mėginysje aptikti ir identifiukuoti patogenai rodomi sąrašuose „Detected” (aptikta) ir „Tested” (tirta).

Jeigu testo nepavyko sėkmingai užbaigti, rodomas pranešimas „**Failed**” (nepavyko) ir konkretus klaidos kodas.

Kairėje ekrano dalyje rodomi toliau pateikiami „Test Data” (testo duomenys).


- „Sample ID” (mėginio ID)
- „Assay Type” (tyrimo tipas)
- „Sample Type” (mėginio tipas)

Daugiau tyrimo duomenų, atsižvelgiant į operatoriaus prieigos teises, yra skirtukuose ekrano apačioje (pvz., amplifikacijos diagramos ir testo išsami informacija).

Ataskaitą su tyrimo duomenimis galima eksportuoti į išorinę USB atmintinę. Prijunkite USB saugyklos įrenginį prie vieno iš „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” USB prievadų ir paspauskite „**Save Report**” (įrašyti ataskaitą) ekrano apačios juostoje. Šią ataskaitą galima eksportuoti bet kada vėliau pasirinkus tyrimą sąrašė „**View Result**” (rezultatų peržiūra).

Be to, ataskaitą galima siųsti į spausdintuvą paspaudus mygtuką „**Print Report**” (spausdinti ataskaitą) ekrano apačios juostoje.

Amplifikacijos kreivių peržiūra

Norėdami peržiūrėti patogenų amplifikacijos kreives, paspauskite skirtuką  „**Amplification Curves**” (amplifikacijos kreivės) (80 pav.).



80 pav. Ekranas „Amplification Curves” (amplifikacijos kreivės) (skirtukas „PATHOGENS” (patogenai).

Išsami informacija apie tirtus patogenus ir kontrolines medžiagas rodoma kairėje, o amplifikacijos kreivės – centre.

Pastaba. Jei „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” įgalinta „**User Access Control**” (naudotojų prieigos kontrolė), ekranas „**Amplification Curves**” (amplifikacijos kreivės) prieinamas tik operatoriams, turintiems prieigos teises.

Paspauskite skirtuką „**PATHOGENS**” (patogenai), esantį kairėje ekrano dalyje, jei norite peržiūrėti atitinkamas tirtų patogenų diagramas. Paspauskite patogeno pavadinimą, kad pasirinktumėte, kuriuos patogenus rodyti amplifikacijos diagramoje. Galima pasirinkti vieną, kelis patogenus arba nė vieno. Kiekvienam patogenui pasirinktųjų sąrašė priskiriama spalva, atitinkanti su patogenu susijusios amplifikacijos kreivės spalvą. Nepasirinkti patogenai rodomi pilkai.

Atitinkamos C_T ir galutinio taško fluorescencijos (EP) reikšmės rodomos po kiekvieno patogeno pavadinimu.

Paspauskite skirtuką „**CONTROLS**” (kontrolinės medžiagos), esantį kairėje ekrano dalyje, jei norite peržiūrėti kontrolines medžiagas amplifikacijos diagramoje. Paspauskite apskritimą šalia valdiklio pavadinimo, kad jį pasirinktumėte ar panaikintumėte žymėjimą (81 pav.).




81 pav. Ekranas „Amplification Curves” (amplifikacijos kreivės) (skirtukas „CONTROLS” (kontrolinės medžiagos).

Amplifikacijos diagramoje rodoma pasirinktų patogenų ir kontrolinių medžiagų duomenų kreivė. Jei norite perjungti logaritminę ir tiesinę Y ašies skalę, paspauskite mygtuką „**Lin**” (tiesinė) arba „**Log**” (logaritminė) diagramos apatiniame kairiajame kampe.


X ir Y ašis galima koreguoti naudojant ● mėlynus **parinkiklius** ant kiekvienos ašies. Paspauskite ir laikykite **mėlyną parinkiklį**, tada perkeltkite jį norimą vietą ant ašies. Perkelti **mėlyną parinkiklį** į ašies pradžią, jei norite gražinti numatytąsias reikšmes.

Išsamios testo informacijos peržiūra

Paspauskite  „**Test Details**” (išsami testo informacija) skirtukų meniu juostoje jutiklinio ekrano apačioje, jei norite peržiūrėti išsamesnę rezultatų informaciją. Slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte visą ataskaitą.


Ekrano centre rodomi šie „**Test Details**” (išsamūs testo duomenys) (82 pav.):


- „User ID” (naudotojo ID)
- „Cartridge SN” (kasetės serijos numeris)
- „Cartridge Expiration Date” (kasetės galiojimo data)
- „Module SN” (modulio serijos numeris)
- „Test Status” (testo būseną) („Completed” (baigta), „Failed” (nepavyko), „Canceled by operator” (atšaukė operatorius))
- „Error Code” (klaidos kodas) (jei taikoma)
- „Test Start Date and Time” (testo pradžios ir laikas)
- „Test Execution Time” (testo vykdymo laikas)
- „Assay Name” (tyrimo pavadinimas)
- „Test ID” (testo ID)
- „Test Result” (testo rezultatas):
 - „Positive” (teigiamas, jeigu aptiktas/identifikuotas bent vienas kvėpavimo takų patogenas)
 - „Negative” (neigiamas, jeigu kvėpavimo takų patogenų neaptikta)
 - „Invalid” (negalioja)
- Tyrimo metu tirtų analizių sąrašas su C_T ir galutinio taško fluorescencijos reikšme, jei signalas teigiamas
- Vidinė kontrolinė medžiaga, su C_T ir galutinio taško fluorescencija

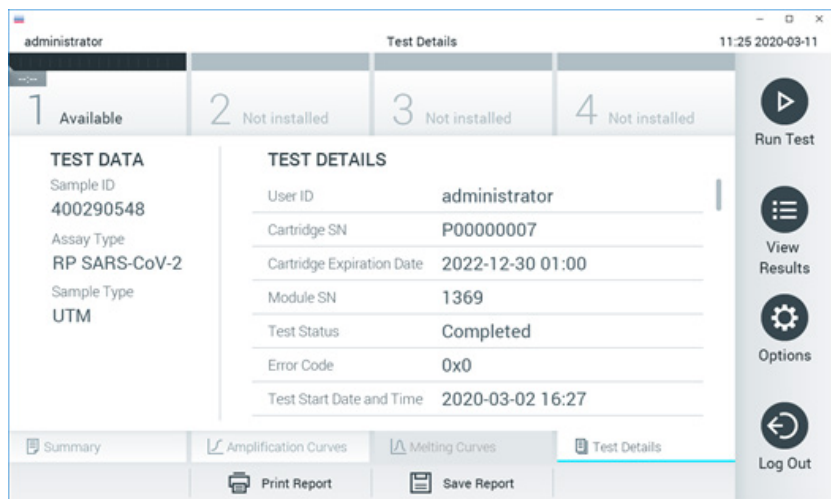

82 pav. Pavyzdinis ekranas, kurio kairiajame skydelyje rodomi „Test Data” (testo duomenys), o pagrindiniame – „Test Details” (išsamiai testo informacija).

Ankstesnių testų rezultatų naršymas

Jei norite peržiūrėti ankstesnių testų rezultatus, kurie laikomi rezultatų saugykloje, paspauskite  „View Results” (rezultatų peržiūra) pagrindinio meniu juostoje (83 pav.).

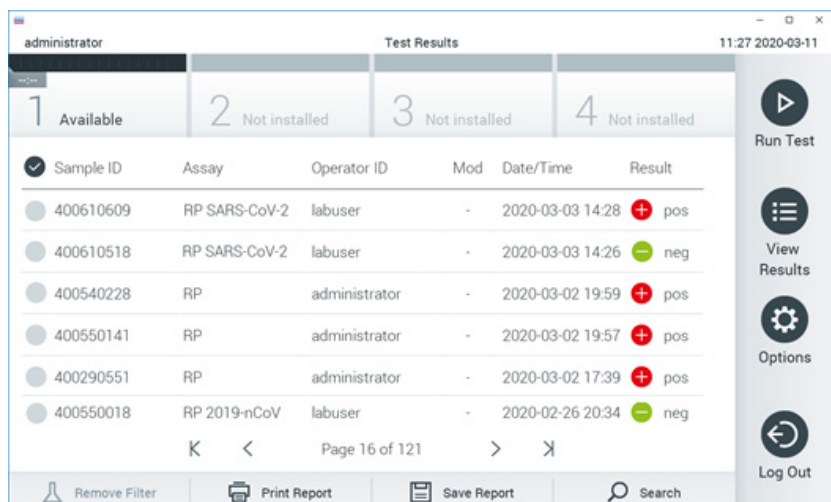

83 pav. Ekranas „View Results” (rezultatų peržiūra) pavyzdys.

Toliau pateikta kiekvieno įvykdyto testo pasiekama informacija (84 pav.):

- „Sample ID” (mėginio ID)
- „Assay” (tyrimas) (tyrimo pavadinimas „RP” reiškia „Respiratory Panel” (kvėpavimo takų multitestas)
- „Operator ID” (operatoriaus ID)
- „Mod” (analizės modulis, kuriame buvo vykdomas testas)
- „Date/Time” (data/laikas) (testo užbaigimo data ir laikas)
- „Result” (rezultatas) (testo baigtis: „positive” (teigiama) [pos], „negative” (neigiama) [neg], „failed” (nepavyko) [fail] arba „successful” (sėkminga) [suc])

Pastaba. Jei „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” įjungta „**User Access Control**” (naudotojo prieigos kontrolė), duomenys, prie kurių naudotojas neturi prieigos teisių, bus pakeisti žvaigždutėmis.

Pasirinkite vieno ar kelių testų rezultatus, paspausdami **pilką apskritimą** mėginio ID kairėje. Šalia pasirinktų rezultatų bus rodoma **varnelė**. Testo rezultatų žymėjimą panaikinkite paspausdami **varnelę**. Visą rezultatų sąrašą galima pasirinkti paspaudus **varnelės apskritimą** viršutinėje eilutėje (84 pav.).

Sample ID	Assay	Operator ID	Mod	Date/Time	Result
400610609	RP SARS-CoV-2	labuser	-	2020-03-03 14:28	pos
400610518	RP SARS-CoV-2	labuser	-	2020-03-03 14:26	neg
400540228	RP	administrator	-	2020-03-02 19:59	pos
400550141	RP	administrator	-	2020-03-02 19:57	pos
400290551	RP	administrator	-	2020-03-02 17:39	pos
400550018	RP 2019-nCoV	labuser	-	2020-02-26 20:34	neg





84 pav. Testo rezultatų pasirinkimo ekrane „View Results” (rezultatų peržiūra) pavyzdys.

Paspauskite bet kurią testo eilutės vietą, kad peržiūrėtumėte konkretaus testo rezultatą.

Paspauskite stulpelio antraštę (pvz., „**Sample ID**” (mėginio ID), kad surikiuotumėte sąrašą didėjimo arba mažėjimo tvarka pagal šį parametą. Vienu metu sąrašą galima rikiuoti tik pagal vieną stulpelį.

Stulpelyje „**Result**” (rezultatas) rodoma kiekvieno testo baigtis (2 lentelė):

2 lentelė. Testo rezultatų aprašai

Baigtis	Rezultatas	Aprašas
„Positive” (teigiamas)	 pos	Teigiamas bent vienas patogenas
„Negative” (neigiamas)	 neg	Patogenų neaptikta
„Failed” (nepavyko)	 fail	Testas nepavyko dėl jo metu įvykusios klaidos arba testą atšaukė naudotojas
„Successful” (sėkmingas)	 suc	Testas teigiamas arba neigiamas, tačiau naudotojas neturi testo rezultatų peržiūros prieigos teisių

Įsitikinkite, kad spausdintuvus prijungtas prie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” ir įdiegta tinkama tvarkyklė. Paspauskite „**Print Report**” (spausdinti ataskaitą), kad išspausdintumėte pasirinkto (-ų) rezultato (-ų) ataskaitą (-as).

Paspauskite „**Save Report**” (įrašyti ataskaitą), jei norite įrašyti pasirinkto (-ų) rezultato (-ų) ataskaitą (-as) PDF formatu išorinėje USB atmintinėje.

Pasirinkite ataskaitos tipą: „List of Tests” (testų sąrašas) arba „Test Reports” (testų ataskaitos).

Paspauskite „**Search**” (paieška), jei norite ieškoti testų rezultatų pagal „Sample ID” (mėginio ID), „Assay” (tyrimą) ir „Operator ID” (operatoriaus ID). Norėdami pradėti paiešką, pereikite į paieškos eilutę naudodami virtualiąją klaviatūrą ir paspauskite „**Enter**” (įvesti). Paieškos rezultatuose bus rodomi tik tie įrašai, kuriuose yra paieškos tekstas.

Jeigu rezultatų sąrašas buvo filtruotas, bus ieškoma tik filtruotame sąrašė.

Paspauskite ir laikykite stulpelio antraštę, jei norite taikyti filtrą pagal tą parametą. Kai kurių parametų, pvz., „**Sample ID**” (mėginio ID), atveju virtualioji klaviatūra bus rodoma taip, kad galima būtų pereiti į filtro paieškos eilutę.

Kitų parametų, pvz., „**Assay**” (tyrimas), atveju atidaromas dialogo langas su saugykloje laikomų tyrimų sąrašu. Pasirinkite vieną ar kelis tyrimus, kad filtruotumėte tik testus, kurie buvo atlikti pagal pasirinktus tyrimus.

T simbolis stulpelio antraštės kairėje rodo, kad stulpelio filtras yra aktyvus.

Filtrą galima pašalinti, paspaudus „**Remove Filter**” (pašalinti filtrą) antrinio meniu juostoje.

Rezultatų eksportavimas į USB atmintinę

Bet kuriame skirtuke ekrane „**View Results**” (rezultatų peržiūra), pasirinkite „**Save Report**” (įrašyti ataskaitą), norėdami eksportuoti ir įrašyti testo rezultatų kopiją PDF formatu USB atmintinėje. USB prievadas yra „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” ir „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” priekinėje dalyje.

Rezultatų spausdinimas

Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” ir įdiegta tinkama tvarkyklė. Paspauskite „**Print Report**” (spausdinti ataskaitą), jei norite siųsti testo rezultatų kopiją į spausdintuvą.

Rezultatų aiškinimas

Kvėpavimo takų organizmo rezultatas interpretuojamas kaip teigiamas, kai atitinkamas PGR tyrimas yra teigiamas, išskyrus A gripo virusą. A gripo viruso tyrimas „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” sukurtas aptikti A gripo virusą, taip pat ir A gripo viruso potipį H1N1/2009, A gripo viruso potipį H1 arba A gripo viruso potipį H3. Tiksliau, tai reiškia:

Jei „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” tyrimas aptinka sezoninio A H1 gripo štamą, bus sugeneruoti ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” ekrane parodyti du signalai: vienas skirtas A gripo virusui, o kitas – H1 štamui.

Jei „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” tyrimas aptinka sezoninio A H3 gripo štamą, bus sugeneruoti ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” ekrane parodyti du signalai: vienas skirtas A gripo virusui, o kitas – H3 štamui.

Jei aptinkamas pandeminis A gripo viruso A/H1N1/2009 šamas, bus sugeneruoti ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” ekrane parodyti du signalai: vienas skirtas A gripo virusui, o kitas – H1N1/2009 štamui.

SVARBU. Jeigu yra tik A gripo signalas ir nesugeneruojamas papildomas signalas bet kokiems potipiams, tai gali įvykti dėl to, kad koncentracija yra maža arba, labai retais atvejais, yra naujas variantas arba ne H1 ir H3 A gripo štamai (pvz., H5N1, kuris gali užkrėsti žmones). Jeigu aptinkamas tik A gripo signalas ir yra klinikinis nesezoninio A gripo įtarimas, testą rekomenduojama atlikti pakartotinai. Taip pat, jeigu aptinkama A gripo potipių ir nėra papildomo A gripo signalo, tai gali būti dėl žemos viruso koncentracijos.

Kiekvieno kito patogeno, aptikto mėginyje su „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” atveju, bus generuotas tik vienas signalas.

Vidinės kontrolinės medžiagos aiškinimas

Vidinių kontrolinių medžiagų rezultatai turi būti interpretuojami pagal 3 lentelę.

3 lentelė. Vidinių kontrolinių medžiagų rezultatų interpretavimas


Kontrolinės medžiagos rezultatas	Paaiškinimas	Veiksmas
„Passed” (pavyko)	Vidinė kontrolinė medžiaga sėkmingai padauginta	Testas atliktas sėkmingai. Visi rezultatai galioja ir juos galima įtraukti į ataskaitą. Aptikti patogenai ataskaitoje nurodomi kaip „positive” (teigiami), neaptikti patogenai – kaip „negative” (neigiami).
„Failed” (nepavyko)	Vidinės kontrolinės medžiagos tyrimas nepavyko	Aptiktas (-i) patogenas (-ai) įtraukiamas (-i) į ataskaitą, tačiau visi neigiami rezultatai (patogenas (-ai) tirtas (-i), bet neaptiktas (-i)) yra negaliojantys. Pakartokite tyrimą naudodami naują „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę.

Rezultatų aiškinimas su „QIAstat-Dx Rise”

Rezultatų peržiūra su „QIAstat-Dx Rise”

„QIAstat-Dx Rise” automatiškai interpretuoja ir įrašo tyrimo rezultatus. Atlikus testą rezultatai rodomi santraukos ekrane „Results” (rezultatai) (85 pav.).

Pastaba. Matoma informacija priklauso nuo operatoriaus prieigos teisių.

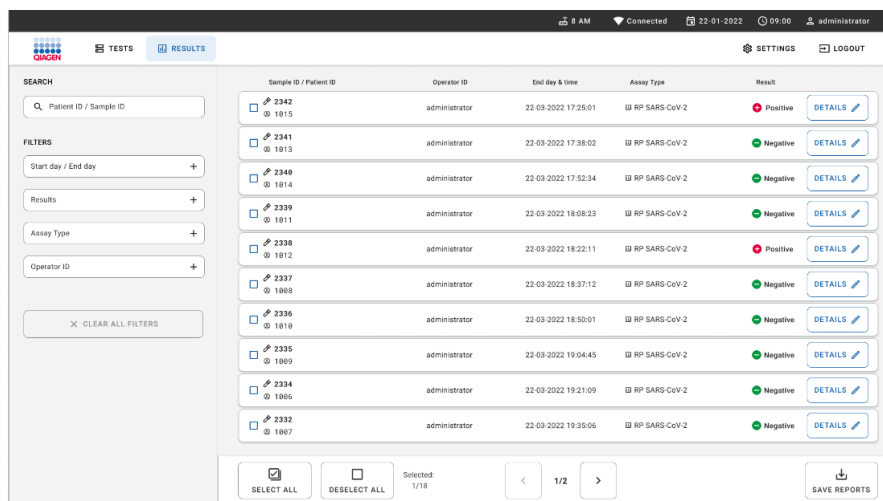




The screenshot shows the 'RESULTS' tab of the QIAstat-Dx Rise interface. It features a search bar, filter options for start/end day, results, assay type, and operator ID, and a 'CLEAR ALL FILTERS' button. The main area displays a table of test results with columns for Sample ID / Patient ID, Operator ID, End day & time, Assay Type, and Result. Each row includes a 'DETAILS' button. At the bottom, there are 'SELECT ALL', 'Deselect ALL', and 'SAVE REPORTS' buttons, along with a 'Selected 1/18' indicator and navigation arrows.

Sample ID / Patient ID	Operator ID	End day & time	Assay Type	Result
2342 1015	administrator	22-03-2022 17:25:01	RP SARS-CoV-2	Positive
2341 1013	administrator	22-03-2022 17:38:02	RP SARS-CoV-2	Negative
2340 1014	administrator	22-03-2022 17:52:34	RP SARS-CoV-2	Negative
2339 1011	administrator	22-03-2022 18:08:23	RP SARS-CoV-2	Negative
2338 1012	administrator	22-03-2022 18:22:11	RP SARS-CoV-2	Positive
2337 1008	administrator	22-03-2022 18:37:12	RP SARS-CoV-2	Negative
2336 1018	administrator	22-03-2022 18:50:01	RP SARS-CoV-2	Negative
2335 1009	administrator	22-03-2022 19:04:45	RP SARS-CoV-2	Negative
2334 1006	administrator	22-03-2022 19:21:09	RP SARS-CoV-2	Negative
2332 1007	administrator	22-03-2022 19:35:06	RP SARS-CoV-2	Negative

85 pav. Rezultatų suvestinė lentelė.

Pagrindinėje ekrano dalyje pateikiama įvykdytų tyrimų apžvalga ir rezultatams rodyti naudojamos kodavimo spalvos ir simboliai:

- Jeigu mėginyje aptinkamas bent vienas patogenas, rezultatų stulpelyje rodomas žodis „Positive” (teigiamas), o prieš jį rodomas  ženklas.
- Jeigu neaptinkamas joks patogenas, o vidinė kontrolinė medžiaga galioja, rezultatų stulpelyje rodomas žodis „Negative” (neigiamas), o prieš jį rodomas  ženklas.
- Jei mėginyje aptinkamas bent vienas patogenas, o vidinė kontrolinė medžiaga netinkama, rezultatų stulpelyje rodomas terminas „Positive with warning” (teigiamas su įspėjimu), o prieš jį rodomas ženklas .
- Jeigu testo nepavyko sėkmingai užbaigti, rodomas pranešimas „Failed” (nepavyko) ir konkretus klaidos kodas.

Ekranu rodomi šie „Test Data” (testo duomenys) (85 pav.)

- „Sample ID/Patient ID” (mėginio ID/paciento ID)
- „Operator ID” (operatoriaus ID)
- „End day and time” (pabaigos data ir laikas)
- „Assay Type” (tyrimo tipas)

Išsamios testo informacijos peržiūra

Daugiau tyrimo duomenų, atsižvelgiant į operatoriaus prieigos teises, galima rasti paspaudus mygtuką „Details” (išsami informacija) ekrano dešinėje (pvz., amplifikacijos diagramos ir testo išsami informacija (86 pav.).

The screenshot displays the 'DETAILS' view of a test result. At the top, there is a navigation bar with 'TESTS' and 'RESULTS' tabs, and a 'DETAILS' sub-tab. The main content area is divided into several sections:

- Test Summary:** Assay Type: RP-SARS-CoV-2 IUO; Sample Type: UTM; Sample ID: 2091; Test Result: Positive; Internal Control: Passed; Test status: Completed.
- DETECTED:** A list of detected viruses: Parainfluenza virus 3, Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae, and SARS-CoV-2.
- TEST DETAILS:** Patient ID: 1015; Cartridge SN: 18004016; SW Version: 2.2.0 VER4; ADF Version: 1.2; Cartridge Expiration Date: 04-09-2022 00:00:00; Cartridge Load date: 14-06-2022 18:44:06; Instrument SN: 1234; Analytical module SN: 1231241241; Cartridge LOT: 180004; Operator Name: administrator; Test Start Date and Time: 14-06-2022 10:56:26; Test Execution Time: 1h 10min 30sec.
- Tested viruses:** A table listing various viruses and their detection status:

Tested viruses	Status	Value
Influenza A	Not detected	-
Influenza B	Not detected	-
Influenza A H1N1 pdm09	Not detected	-
Coronavirus 229E	Not detected	-
Coronavirus (CC4)	Not detected	-
Coronavirus NL63	Not detected	-
Coronavirus HKU1	Not detected	-
Parainfluenza virus 1	Not detected	-
Parainfluenza virus 2	Not detected	-
Parainfluenza virus 3	Detected	CI:EP: 37.1 / 102,154
Parainfluenza virus 4	Not detected	-
Influenza A H1	Not detected	-
Influenza A H3	Not detected	-
Rhinovirus/Enterovirus	Not detected	-
Adenovirus	Detected	CI:EP: 37.1 / 102,154

At the bottom, there are buttons for 'SUMMARY', 'AMPLIFICATION CURVE', and 'SAVE REPORT'.


86 pav. Išsamios testo informacijos ekranas.

Viršutinėje ekrano dalyje rodoma bendroji informacija apie testą. Ši informacija apima tyrimo ir mėginio tipą, mėginio ID, bendrą testo rezultatą, vidinės kontrolinės medžiagos būseną ir testo būseną.

Kairėje ekrano pusėje rodomi visi aptikti patogenai, vidurinėje ekrano dalyje rodomi visi patogenai, kuriuos galima aptikti atlikus tyrimą. Dešinėje ekrano pusėje rodoma ši testo informacija: mėginio ID, operatoriaus ID, kasetės partijos numeris, kasetės serijos numeris, kasetės galiojimo data, kasetės įkėlimo data ir laikas, testo vykdymo data ir laikas, testo vykdymo trukmė, programinės įrangos ir ADF versija ir analizės modulio serijos numeris.

Amplifikacijos kreivių peržiūra

Norėdami peržiūrėti testo amplifikacijos kreives, ekrano apačioje paspauskite skirtuką „Amplification Curves” (amplifikacijos kreivės) (87 pav.).

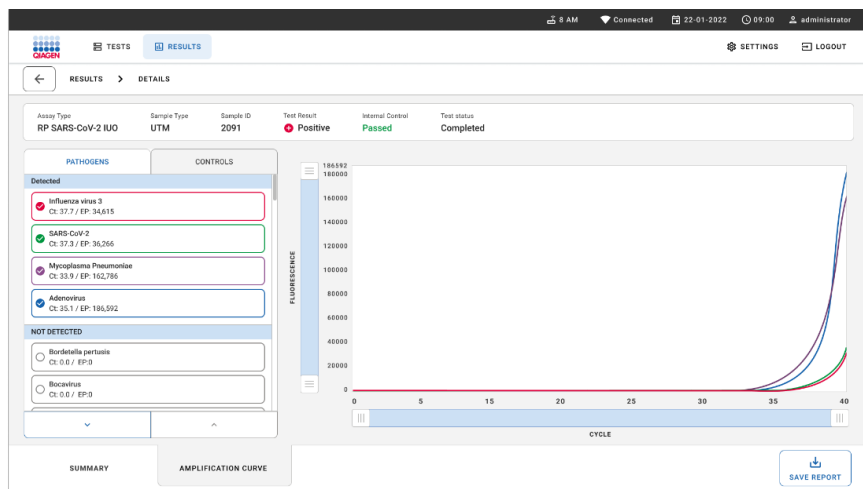

87 pav. Amplifikacijos kreivių ekranas.

Paspauskite skirtuką „**PATHOGENS**” (patogenai), esantį kairėje ekrano dalyje, jei norite peržiūrėti atitinkamas tirtų patogenų diagramas. Paspauskite **patogeno pavadinimą**, kad pasirinktumėte, kuriuos patogenus rodyti amplifikacijos diagramoje. Galima pasirinkti vieną, kelis patogenus arba nė vieno. Kiekvienam patogenui pasirinktųjų sąrašė priskiriama spalva, atitinkanti su patogenu susijusios amplifikacijos kreivės spalvą. Nepasirinkti patogenai nebus rodomi.

Atitinkamos C_T ir galutinio taško fluorescencijos reikšmės rodomos po kiekvieno patogeno pavadinimu. Patogenai sugrupuojami į **detected** (aptikti) ir **not detected** (neaptikti).

Paspauskite kairėje esantį skirtuką „**CONTROLS**” (kontrolinės medžiagos), jei norite peržiūrėti kontrolines medžiagas ir pasirinkti, kurias kontrolines medžiagas rodyti amplifikacijos diagramoje.

Ankstesnių testų rezultatų naršymas

Jei norite peržiūrėti ankstesnių testų rezultatus, kurie laikomi rezultatų saugykloje, pagrindiniame rezultatų ekrane naudokite paieškos funkciją (88 pav.).

Pastaba. Funkcija gali būti ribojama arba išjungta dėl naudotojo profilio nustatymų.

The screenshot shows a web interface for viewing test results. On the left, there is a 'SEARCH' section with a text input field for 'Patient or Sample ID'. Below it are 'FILTERS' for 'Start day / End day', 'Results', 'Assay Type', and 'Operator ID', each with a plus sign to expand the options. A 'CLEAR ALL FILTERS' button is at the bottom of the filter section. The main area displays a table of results with columns: Sample ID / Patient ID, Operator ID, End day & time, Assay Type, and Result. Each row includes a 'Details' button. The table contains 12 rows of data with alternating positive and negative results.

Sample ID / Patient ID	Operator ID	End day & time	Assay Type	Result
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Positive
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory Panel	Negative
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Negative
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory Panel	Positive
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Negative
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Negative
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Positive
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory Panel	Positive
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory Panel	Negative
23423 423435 ... 32453 88855 2341 2321 2489 4423	User Name	22-09-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Positive

88 pav. Paieškos funkcija rezultatų ekrane.

Rezultatų eksportavimas į USB atmintinę

Ekране „Results“ (rezultatai) pasirinkite kurį nors arba visus mygtuku „Select All“ (pasirinkti visus), norėdami eksportuoti ir įrašyti testo ataskaitų kopiją PDF formatu USB atmintinėje. USB prievadas yra prietaiso galinėje dalyje.

Pastaba. Rekomenduojama naudoti USB atmintinę tik duomenims trumpai įrašyti ir perkelti. USB atmintinės naudojimui yra taikomi apribojimai (pvz., apribojimai dėl atminties talpos arba perrašymo rizikos), į kuriuos reikėtų atsižvelgti prieš pradėdant naudoti.

Kokybės kontrolė

Pagal „QIAGEN“ ISO sertifikuotą kokybės vadybos sistemą, kiekviena „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ partija tikrinama pagal nustatytas specifikacijas, kad būtų užtikrinta nuosekli produktų kokybė.

Apribojimai

- „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ rezultatai nėra skirti naudoti kaip vienintelis diagnozės, gydymo arba kitų sprendimų dėl paciento priežiūros pagrindas.
- Teigiami rezultatai neleidžia atmesti bendros infekcijos, sukeltos į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ tyrimą neįtrauktų organizmų, galimybės. Aptikta medžiaga nebūtinai yra galutinė ligos priežastis.
- Neigiami rezultatai neleidžia atmesti viršutinių kvėpavimo takų infekcijos galimybės. Šiuo tyrimu aptinkami ne visi ūmios kvėpavimo takų infekcijos faktoriai, o kai kurių klinikinių parametrų jautrumas gali skirtis nuo pakuotės lapelyje aprašyto.
- Dėl neigiamo rezultato, gauto naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“, negalima atmesti simptomų infekcinės prigimties. Neigiami tyrimo rezultatai gaunami dėl įvairių veiksnių ir jų derinių, įskaitant mėginio tvarkymo klaidas, nukleorūgščių tikslinių tyrimo sekų variacijas, į tyrimą neįtrauktų organizmų sukeltas infekcijas, į tyrimą įtrauktų organizmų kiekį, nesiekiantį aptikimo ribos, ir tam tikrų vaistų, terapijų ar medžiagų naudojimą.
- „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ nėra skirtas tirti kitiems mėginiams, nei aprašyta šiose naudojimo instrukcijose. Testo veikimo charakteristikos buvo nustatytos naudojant tik nazofaringinių tamponų mėginius, surinktus transportavimo terpėje iš asmenų su ūmiais kvėpavimo takų simptomais.
- „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ skirta naudoti kartu su organizmo atsigavimo kultūros standartine priežiūra, serotipo nustatymu ir (arba) jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimu (kai taikoma).

- „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” rezultatus privalo interpretuoti išmokyti sveikatos priežiūros profesionalai visų susijusių klinikinių, laboratorinių ir epidemiologinių tyrimų rezultatų kontekste.
- „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” gali būti naudojama tik su „QIAstat-Dx Analyzer 1.0”, „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” ir „QIAstat-Dx Rise”*
- „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” – tai kokybinis tyrimas, nerodantis aptiktų organizmų kiekybinės reikšmės.
- Virusų ir bakterijų nukleorūgštys gali išlikti „in vivo”, net jei organizmas nėra gyvybingas arba užkrečiantis. Tikslinio žymens aptikimas nereiškia, kad atitinkamas organizmas yra priežastinė infekcijos arba klinikinių simptomų medžiaga.
- Virusų ir bakterijų nukleorūgščių aptikimas priklauso nuo tinkamo mėginio paėmimo, tvarkymo, transportavimo, laikymo ir perkėlimo į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę. Netinkamai atlikus bet kurį iš minėtųjų procesų rezultatai gali būti neteisingi, įskaitant klaidingai teigiamą arba klaidingai neigiamą rezultatą.
- Konkrečių organizmų ir visų organizmų bendrai tyrimo jautrumas ir specifiškumas yra konkretaus tyrimo vidinio našumo parametrai, kurie nesikeičia, atsižvelgiant į paplitimą. Priešingai, tiek neigiamos, tiek teigiamos testo rezultatų prognozuojamosios reikšmės priklauso nuo ligos/organizmo paplitimo. Atminkite, kad kuo didesnis paplitimas, tuo palankiau vertinama teigiama testo rezultato prognozuojamoji reikšmė, o kuo mažesnis paplitimas, tuo palankiau vertinama neigiama testo rezultato prognozuojamoji reikšmė.
- Nenaudokite pažeistų kasečių. Pažeistų kasečių apdorojimas aprašytas skyriuje „Saugos informacija”.

* „DiagCORE Analyzer” prietaisai, pagrįsti „QIAstat-Dx 1.3” arba naujesne programine įranga, gali būti naudojami kaip alternatyva „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” prietaisams.

Eksploatacinių ypatybių charakteristikos

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ (kat. nr. 691214) tyrimas sukurtas pridėdamas SARS-CoV-2 taikinį į atskirą „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ tyrimo (kat. Nr. 691211) reakcijos kamerą. Yra žinoma, kad mėginių paruošimas ir RT-qPCR „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetėje yra visiems tiksliniams organizmams bendri veiksmai. Jungtinis mėginys ir PGR fermento mišinys tolygiai paskirstomi kiekvienoje kasetės reakcijos kameroje. Dėl šios priežasties ir (arba) dėl SARS-CoV-2 klininių mėginių prieinamumo, kai kurie toliau pateikti tyrimai nebuvo atlikti ar pakartoti naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“.

Klinikinis efektyvumas

Toliau nurodytas klinikinis efektyvumas nustatytas naudojant „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ ir „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“. „QIAstat-Dx Rise“ naudojami tie patys analizės moduliai kaip ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, todėl „QIAstat-Dx Rise“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ neturi įtakos efektyvumui.

Skysti mėginiai transportavimo terpėje

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ tyrimo efektyvumo charakteristikos buvo įvertintos kelių centrų klinikiniais tyrimais aštuoniuose (8) geografiškai skirtinguose tyrimo vietose: penkiose (5) JAV vietose ir trijose (3) ES vietose. Nazofaringinio tampono bandinio efektyvumas buvo įvertintas universaliojoje transportavimo terpėje (Universal Transport Medium, UTM) („Copan Diagnostics“); „MicroTest™ M4®“, M4RT®, M5® ir M6™ („Thermo Fisher Scientific“); BD™ universaliojoje transportavimo (Universal Viral Transport, UVT) sistemoje („Becton Dickinson and Company“); „HealthLink®“ universaliosios virusinės transportavimo terpės (UTM) sistemoje („HealthLink Inc.“); universaliojoje transportavimo terpėje („Diagnostic Hybrids Inc.“); „V-C-M“ terpėje („Quest Diagnostics“); „UniTranz-RT®“ universaliojoje transportavimo terpėje („Puritan Medical Products Company“) ir sausuose nazofaringinio tampono bandiniuose („FLOQSwabs“, „Copan“, kat. Nr. 503CS01).

Kai naudojamas tamponas, po naudojimo jis įdedamas tiesiai į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės tampono angą vengiant perkėlimo į skystą terpę.

Šis tyrimas sukurtas kaip stebimasis, perspektyvusis-retrospektyvusis tyrimas, kurį atliekant naudojami likę mėginiai, gauti iš pacientų, kuriems pasireiškė ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiai ir simptomai. Dalyvaujančių šalių buvo paprašyta iširti šviežius ir (arba) užšaldytus klininius mėginius pagal protokolą ir vietas/konkrečias instrukcijas.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ naudojant tirti mėginiai buvo palyginti su standartinės priežiūros (standard of care, SOC) metodų rezultatais, taip pat su įvairių patvirtintų ir komercinių molekulinų metodų rezultatais. Šis būdas pateikė rezultatų apie SOC neaptiktus patogenus ir (arba) leido galutinai išspręsti prieštaringų rezultatų neatitikimą. „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ tyrimo rezultatai buvo palyginti su „FilmArray® Respiratory Panel“ 1.7 ir 2 versija ir „SARS-CoV-2 RT-PCR“ tyrimu, kurį sukūrė „Charité – Universitätsmedizin Berlin“ universitetinės ligoninės Virusologijos institute, esančiame Berlyne, Vokietijoje.

Į tyrimą buvo įtraukti iš viso 3 065 klininiai UTM pacientų mėginiai. Iš viso 121 mėginys neatitiko aprėpties ir išimtinumo kriterijų, todėl jie nebuvo įtraukti į analizę.

Klinikinis jautrumas arba teigiamų rezultatų procentinis sutapimas (Positive Percent Agreement, PPA) buvo apskaičiuotas taip: $100 \% \times (TP/[TP + FN])$. Teisingai teigiamas (True Positive, TP) rezultatas reiškia, kad „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ ir lyginamieji metodai parodė teigiamą rezultatą organizmui, o klaidingai neigiamas (False Negative, FN) rezultatas reiškia, kad „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ rezultatas buvo neigiamas, kai lyginamųjų metodų rezultatai buvo teigiami. \

Specifiškumas arba neigiamų rezultatų atitiktis procentais („Positive Percent Agreement“, NPA) buvo apskaičiuota taip: $100 \% \times (TN/[TN + FP])$. Teisingai neigiamas (True Negative, TN) rezultatas reiškia, kad „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ ir lyginamasis metodas parodė neigiamą rezultatą, o klaidingai teigiamas (False Positive, FP) rezultatas reiškia, kad „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ rezultatas buvo teigiamas, kai lyginamųjų metodų rezultatai buvo neigiami. Pavienių patogenų klinikiniam specifiškumui

apskaičiuoti bendrieji prieinami rezultatai buvo naudojami atimant teisingus ir neteisingus teigiamus organizmų rezultatus. Buvo apskaičiuotas kiekvieno skaičiavimo punktais tikslus binominis dvipusis 95 % pasiklovimo intervalas.

Bendras klinikinis jautrumas (PPA) ir bendras klinikinis specifiškumas (NPA) apskaičiuoti iš 2 579 mėginių rezultatų.

Iš viso nustatyti 2575 teisingai teigiami rezultatai ir 52925 teisingai neigiami „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ ir „QIAstat-Dx Respiratory SARS CoV-2 Panel“ rezultatai, taip pat 76 klaidingai neigiami rezultatai ir 104 klaidingai teigiami rezultatai.

4 lentelėje parodytas „QIAstat-Dx Respiratory SARS CoV-2 Panel“ klinikinis jautrumas (arba teigiamų rezultatų procentinis sutapimas) ir klinikinis specifiškumas (arba neigiamų rezultatų procentinis sutapimas) su 95 % patikimumo intervalu.

4 lentelė. „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ efektyvumo duomenys

	TP/ (TP + FN)	Jautrumas/ PPA (%)	95 % CI	TN/(TN + FP)	Specifiškumas/ NPA (%)	95 % CI
Bendrai	2 575/2 651	97,13	96,42–97,73	52 925/53 029	99,80	99,76–99,84
Virusai						
Adenovirusas	136/139	97,84	93,85–99,26	2 617/2 626	99,66	99,35–99,82
Koronavirusas 229E	38/39	97,44	86,82–99,55	2 735/2 735	100	99,86–100,00
Koronavirusas HKU1	73/74	98,65	92,73–99,76	2 690/2 696	99,78	99,52–99,90
Koronavirusas NL63	88/97	90,72	83,30–95,04	2 677/2 677	100	99,86–100,00
Koronavirusas OC43	66/66	100	94,50–100,00	2 704/2 705	99,96	99,79–99,99
Žmogaus metapneumovirusas A+B	142/147	96,60	92,29–98,54	2 627/2 629	99,92	99,72–99,98
A gripo virusas	327/329	99,39	97,81–99,83	2 407/2 430	99,05	98,58–99,37
A gripo virusas H1	0/0	NĖRA	NĖRA	2 774/2 774	100,00	99,86–100,00
A gripo virusas H1N1 pdm09	124/126	98,41	94,40–99,56	2 634/2 639	99,81	99,56–99,92

Tęsinys kitame puslapyje

4 lentelė (tęsinys iš ankstesnio puslapio)

	TP/ (TP + FN)	Jautrumas/ PPA (%)	95 % CI	TN/(TN + FP)	Specifiškumas/ mas/NPA (%)	95 % CI
A gripo virusas H3	210/214	98,13	95,29–99,27	2 558/2 561	99,88	99,66–99,96
B gripo virusas	177/184	96,20	92,36–98,15	2 591/2 591	100,00	99,85–100,00
1 paragripo virusas (PIV 1)	62/62	100,00	94,17–100,00	2 713/2 713	100,00	99,86–100,00
2 paragripo virusas (PIV 2)	8/8	100,00	67,56–100,00	2 768/2 768	100,00	99,86–100,00
3 paragripo virusas (PIV 3)	122/123	99,19	95,54–99,86	2 648/2 649	99,96	99,79–99,99
4 paragripo virusas (PIV 4)	38/40	95,00	83,50–98,62	2 732/2 733	99,96	99,79–99,99
Kvėpavimo sincitinis virusas A+B	319/325	98,15	96,03–99,15	2 442/2 443	99,96	99,77–99,99
Rinovirusas/enterovirusas	385/409	94,13	91,42–96,03	2 317/2 339	99,06	98,58–99,38
SARS-CoV-2	83/88	94,32	87,38–97,55	171/189	90,48	85,45–93,89
Bakterijos						
<i>Bordetella pertussis</i>	43/43	100	91,80–100,00	2 716/2 726	99,63	99,33–99,80
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	66/66	100	94,50–100,00	2 703/2 705	99,93	99,73–99,98
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>	68/72	94,44	86,57–97,82	2 701/2 701	100,00	99,86–100,00

Legionella pneumophila ir žmogaus bokaviruso atveju nebuvo vertinta tinkamų rezultatų, nes aptikta mažai šių patogenų (2 ir 3 aptikimai atitinkamai) ir todėl, kad nėra lyginamojo metodo rezultatų. Todėl kaip surogatiniai klinikiniai mėginiai buvo naudojami dirbtiniai mėginiai, siekiant papildyti ir testuoti bokaviruso ir *Legionella pneumophila* jautrumą ir specifiškumą. Į likusius neigiamus klinikiškus mėginius pridėta patogenų 2x, 5x, ir 10x LoD lygiais (50 kiekvieno).

Dirbtiniai teigiami mėginiai paruošti ir randomizuoti kartu su 50 neigiamų mėginių, į kuriuos nepridėta patogenų, taip, kad kiekvieno dirbtinio mėginio analizės būseną naudotojams, atliekantiems testavimą 1 klinikinėje vietoje, buvo nežinoma. Dirbtinio mėginio testavimo rezultatai pateikti 5 lentelėje.

5 lentelė. „QIAstat-Dx SARS-CoV-2 Respiratory Panel“ dirbtinių mėginių efektyvumo duomenys

Patogenas	Mėginio koncentracija	Aptikimo dažnis	Proporcija (%)	95 % CI
Bokavirusas	2x LoD	25/25	100,00	86,28–100
	5x LoD	15/15	100,00	78,20–100
	10x LoD	10/10	100,00	69,15–100
	Bendrai	50/50	100,00	92,89–100
Legionella pneumophila	2x LoD	25/25	100,00	86,28–100
	5x LoD	15/15	100,00	78,20–100
	10x LoD	10/10	100,00	69,15–100
	Bendrai	50/50	100,00	92,89–100

Atlikus „QIAstat-Dx Respiratory SARS CoV-2 Panel“ tyrimą aptikti keli organizmai 370 mėginių. Iš viso 316 mėginių buvo dvi infekcijos, 46 buvo trys infekcijos, o likusiuose mėginiuose buvo 4 bendros infekcijos (8 mėginiuose).

Sauso tampono bandinys

Iš viso 333 suporuoti klinikiniai mėginiai (NPS UTM ir NPS sauso tampono) buvo testuoti, siekiant įvertinti sauso tampono mėginių klinikinio efektyvumo charakteristikas, palyginti su UTM mėginių klinikinio efektyvumo charakteristikomis. Šis testas atliktas 4 klinikinėse vietose ES. Tikslas buvo pademonstruoti sauso tampono ir UTM mėginių efektyvumo charakteristikų tapatumą naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“.

Tyrimuose dalyvavę pacientai pateikė 2 nazofaringinius tamponus (po vieną iš kiekvienos šnervės). Vienas tamponas buvo tiesiogiai įdėtas į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę, o kitas buvo perkeltas į UTM, kad būtų galima atlikti lyginamąjį tyrimą naudojant atskirą „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetę (suporuoti mėginiai).

Klinikinis jautrumas (arba PPA) buvo apskaičiuotas taip: $100 \% \times (TP/[TP + FN])$. Teisingai teigiamas (True Positive, TP) rezultatas reiškia, kad sauso tampono ir UTM mėginio rezultatas konkretaus organizmo atveju buvo teigiamas, o klaidingai neigiamas (False Negative, FN) rezultatas reiškia, kad sauso tampono rezultatas buvo neigiamas, kai konkretaus organizmo UTM mėginio rezultatas buvo teigiamas. Specifiškumas (arba NPA) buvo apskaičiuotas taip: $100 \% \times (TN/[TN + FP])$. Teisingai neigiamas (True Negative, TN) rezultatas reiškia, kad konkretaus organizmo sauso tampono ir UTM mėginio rezultatas buvo neigiamas, o klaidingai teigiamas (False Positive, FP) rezultatas reiškia, kad konkretaus organizmo sauso tampono rezultatas buvo teigiamas, bet UTM mėginio rezultatas buvo neigiamas. Buvo apskaičiuotas kiekvieno skaičiavimo punktais tikslus binominis dvipusis 95 % pasiklovimo intervalas.

Iš pradinių tyrime dalyvavusių 333 suporuotų mėginių analizei buvo prieinama 319 vertinamų suporuotų mėginių rezultatų. Likę 14 suporuotų mėginių neatitiko įtraukimo kriterijų.

Bendrą klinikinį jautrumą (arba PPA) galima apskaičiuoti iš visų 189 teigiamų tikslinių rezultatų, gautų su UTM mėginiu. Bendras klinikinis specifiškumas (arba NPA) apskaičiuotas iš 6 969 atskirų neigiamų tikslinių rezultatų, kurie gauti naudojant UTM mėginį. Teigiami rezultatai apėmė skirtingus tikslus grupėje ir pateikė populiacijos, testuotos atliekant klinikinio efektyvumo tyrimą (įskaitant SARS-CoV-2 2 vietose), epidemiologinius duomenis.

Rasti iš viso 179 teisingai teigiami ir 6 941 teisingai neigiamas sauso tampono mėginio rezultatas, taip pat 10 klaidingai neigiamų (teigiamų su UTM mėginiu/neigiamų su sauso tampono mėginiu) ir 28 klaidingai teigiami (teigiami su sauso tampono mėginiu/neigiami su UTM mėginiu) rezultatai. Bendrai PPA buvo 94,71 % (95 % CI, 90,54–97,10 %), o NPA buvo 99,60 % (95 % CI, 99,42–99,72 %), o tai rodo didelę bendrą sauso tampono ir UTM mėginių tipų koreliaciją (6 lentelė).

6 lentelė. Bendrų „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ sauso tampono mėginių rezultatų ir bendrų „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ UTM mėginių rezultatų bendro jautrumo ir specifiškumo įvertinimų sutapimas.

Grupavimo kintamasis (-ieji)	Proporcija		Dvipusės 95 % pasikiojimo ribos	
	Dalis	Procentinis dydis	Apatinė	Viršutinė
NPA	6 941/6 969	99,60	99,42	99,72
PPA	179/189	94,71	90,54	97,10

Konkrečiai SARS-CoV-2 tikslui rasta 40 teisingai teigiamų rezultatų, palyginus UTM mėginius ir sauso tampono mėginius, testuotus, naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“. Lyginant šiuos mėginius nerasta klaidingai neigiamų rezultatų. Be to, rastas 181 teisingai neigiamas ir 3 klaidingai teigiami (sauso tampono mėginio teigiami, o UTM mėginio neigiami) SARS-CoV-2 rezultatai.

UTM mėginių ir sauso tampono mėginių rezultatų skirtumai gali būti priskirtini mėginių ir sauso tampono mėginių transportavimo terpėje skiedimo efekto mėginių paėmimo skirtumams. Sauso tampono mėginius galima tirti tik vieną kartą naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“, todėl šiam mėginio tipui nebuvo galima atlikti nesuderinamumo tyrimo.

Išvada

Šiuo plačiu keliuose centruose atliekamais tyrimais buvo siekiama įvertinti UTM bandinio efektyvumą, taip pat sauso tampono mėginio ekvivalentiškumą su UTM mėginio efektyvumu „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ tyrime.

UTM bandinio nustatytas bendras klinikinis jautrumas buvo 97,13 % (95 % CI, 96,42–97,73 %). Bendras klinikinis specifiškumas 99,80 % (95 % CI, 99,76–99,84 %).

Sauso tampono bandinio nustatytas bendras klinikinis jautrumas buvo 94,71 % (95 % CI, 90,54–97,10 %). Sauso tampono bandinio bendras klinikinis specifiškumas buvo 99,60 % (95 % CI, 99,42–99,72 %).

Analitinis efektyvumas

Toliau nurodytas analitinis efektyvumas nustatytas naudojant „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“. „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ naudojami tie patys analizės moduliai kaip ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, todėl „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ neturi įtakos efektyvumui.

„QIAstat-Dx Rise“ atžvilgiu buvo atlikti tam tikri tyrimai, siekiant pademonstruoti pernešimą ir pakartojamumą. Toliau nurodyti likę analitinio efektyvumo parametrai nustatyti naudojant „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“. „QIAstat-Dx Rise“ naudojamas tas pats analizės modulis kaip ir „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, todėl „QIAstat-Dx Rise“ neturi įtakos efektyvumui.

Jautrumas (aptikimo riba)

Analitinis jautris arba aptikimo riba (Limit of Detection, LoD) apibrėžiama kaip mažiausia koncentracija, kuriai esant $\geq 95\%$ tiriamų mėginių gaunamas teigiamas atsakas.

Naudojant pasirinktus štamus* reprezentuojančius atskirus patogenus, kuriuos galima nustatyti naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“, buvo nustatyta kiekvienos analizės LoD. Į sumodeliuotą NPS mėginio matricą („Copan UTM“ išaugintas žmogaus ląsteles), skirtą skystiems mėginiams transportavimo terpėje, ir į sumodeliuotą sauso tampono mėginių matricą (dirbtiniame NPS išaugintas žmogaus ląsteles), skirtą sauso tampono mėginiams, buvo pridėta vienas (1) ar daugiau patogenų ir testuota 20 kartotinių. Skysto mėginio darbo eigai naudojamas NPS, eliuuojamas UTM ir 300 μ l perkeliama į kasetę, kadangi sauso tampono darbo eiga leidžia NPS perkelti tiesiai į kasetę. Kontroliniai sauso tampono mėginiai paruošti ant tampono pipete užlašinus 50 μ l kiekvieno skiesto viruso išteklaus ir palikus išdžiūti mažiausiai 20 minučių. Tamponas testuotas laikantis sauso tampono mėginio protokolo (20 psl.).

* Dėl ribotos prieigos prie išauginto viruso, siekiant nustatyti SARS-CoV-2 taikinio LoD prisodrintoje klinikinėje neigiamoje matricoje ir bokaviruso taikiniui nustatyti ant LoD sauso tampono, buvo naudojama sintetinė medžiaga („gBlock“).

Atskiros kiekvieno taikinio LoD reikšmės pateiktos 7 lentelėje.

7 lentelė. Gautas skirtingų kvėpavimo takų štamų NPS mėginio matricoje („Copan UTM“ išaugintų žmogaus ląstelių) ir (arba) ant sauso tampono mėginio (dirbtiniame NPS išaugintų žmogaus ląstelių), tirtų su „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“, LoD reikšmės.

Patogenas	Štamas	Šaltinis	Koncentracija	Aptikimo rodiklis
A gripo virusas H1N1	A/Naujasis Džersis/8/76	ATCC® VR-897	28,1 CEID ₅₀ /ml	20/20
	A/Brisbanas/59/07	„ZeptoMetrix“® 0810244CFHI	0,04 TCID ₅₀ /ml	19/20
	A/Naujoji Kaledonija/20/99	„ZeptoMetrix“® 0810036CFHI	28,7 TCID ₅₀ /ml*	20/20
A gripo virusas H3N2	A/Virdžinija/ATCC6/2012	ATCC VR-1811	0,4 PFU/ml	19/20
	A/Viskonsinas/67/2005	„ZeptoMetrix“ 0810252CFHI	2,5 TCID ₅₀ /ml	20/20
	A/Port Čalmersas/1/73	ATCC VR-810	3000CEID ₅₀ /ml*	20/20
A gripo viruso potipis H1N1/2009	A/Virdžinija/ATCC1/2009	ATCC VR-1736	127 PFU/ml*	20/20
	A/SwineNY/03/2009	„ZeptoMetrix“ 0810249CFHI	14,1 TCID ₅₀ /ml	20/20

* Testuota naudojant skysto mėginio ir kontrolinio sauso tampono mėginio tipą.

Tęsinys kitame puslapyje

7 lentelė (tęsinys iš ankstesnio puslapio)

Patogenas	Štamas	Šaltinis	Koncentracija	Aptikimo rodiklis
B gripo virusas	B/Virdžinija/ATCC5/2012	ATCC VR-1807	0,08 PFU/ml	20/20
	B/FL/04/06	ATCC VR-1804	2050CEID ₅₀ /ml*	19/20
	B/Taivanas/2/62	ATCC VR-295	28,1 CEID ₅₀ /ml	20/20
Koronavirusas 229E	–	ATCC VR-740	9,47 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Koronavirusas OC43	–	ATCC-1558	0,1 TCID ₅₀ /ml	20/20
	–	„ZeptoMetrix“ 0810224CFHI	1,99 TCID ₅₀ /ml	19/20
Koronavirusas NL63	–	„ZeptoMetrix“ 0810228CFHI	0,70 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Koronavirusas HKU1	–	„ZeptoMetrix“ NATRVPI-DI	1/300 [†]	19/20
	–	Klinikinis, S510	240 000 kopijų/ml	19/20
SARS-CoV-2	–	IDT („gBlock“)	500 kopijų/ml	19/20
	Anglija/02/2020	NIBSC 20/146	19 000 kopijų/ml	20/20
1 paragripo virusas (PIV 1)	C35	ATCC VR-94	23,4 TCID ₅₀ /ml*	20/20
2 paragripo virusas (PIV 2)	Greer	ATCC VR-92	13,9 TCID ₅₀ /ml*	19/20
3 paragripo virusas (PIV 3)	C 243	ATCC VR-93	44,1 TCID ₅₀ /ml*	20/20
4 paragripo virusas (PIV 4)	M-25	ATCC VR-1378	3,03 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Kvėpavimo sincitinis virusas A	A2	ATCC VR-1540	2,8 TCID ₅₀ /ml [‡]	20/20
	A2	ATCC VR-1540	720 PFU/ml [‡]	20/20
Kvėpavimo sincitinis virusas B	9320	ATCC VR-955	0,02 TCID ₅₀ /ml	20/20
Žmogaus metapneumovirusas	Peru6-2003 (B2 tipas)	„ZeptoMetrix“ 0810159CFHI	1,1 TCID ₅₀ /ml	19/20
	hMPV-16, IA10-2003	„ZeptoMetrix“ 0810161CFHI	3,0 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Adenovirusas	GB (adenovirusas B3)	ATCC VR-3	94 900 TCID ₅₀ /ml	20/20
	RI-67 (adenovirusas E4)	ATCC VR-1572	15,8 TCID ₅₀ /ml	20/20
	Adenoidinis 75 (adenovirusas C5)	ATCC VR-5	5,0 TCID ₅₀ /ml	20/20
	Adenoidinis 71 (adenovirusas C1)	ATCC VR-1	5,0 TCID ₅₀ /ml	19/20
	Adenovirusas C2	ATCC VR-846	28,1 TCID ₅₀ /ml	20/20
	Adenovirusas C6	ATCC VR-6	505,6 TCID ₅₀ /ml	20/20

* Testuota naudojant skysto mėginio ir kontrolinio sauso tampono mėginio tipą.

[†] Santykinis skiedimas, naudojant turimą koncentraciją.

[‡] Naudotos dvi skirtingos to paties štamo partijos.

Tęsinys kitame puslapyje

7 lentelė (tęsinys iš ankstesnio puslapio)

Patogenas	Štamas	Šaltinis	Koncentracija	Aptikimo rodiklis
Enterovirusas	/US/IL/14-18952 (enterovirusas D68)	ATCC VR-1824	534,0 TCID ₅₀ /ml*	20/20
	Echovirusas 6 (D-1 (Cox))	ATCC VR-241	0,001 TCID ₅₀ /ml	19/20
Rinovirusas	1059 (rinovirusas B14)	ATCC VR-284	28,1 TCID ₅₀ /ml	20/20
	HPG (rinovirusas A2)	ATCC VR-482	169,0 TCID ₅₀ /ml*	20/20
	11757 (rinovirusas A16)	ATCC VR-283	8,9 TCID ₅₀ /ml	20/20
	1A tipas	ATCC VR-1559	5,0 TCID ₅₀ /ml	20/20
Chlamydomphila pneumoniae	TW183	ATCC VR-2282	0,5 TCID ₅₀ /ml [‡]	19/20
Chlamydomphila pneumoniae	TW183	ATCC VR-2282	85,3 IFU/ml [‡]	20/20
Mycoplasma pneumoniae	M129-B7	ATCC 29342	0,1 CFU/ml	20/20
Mycoplasma pneumoniae	PI 1428	ATCC 29085	6,01 CCU/ml	20/20
Legionella pneumophila	CA1	ATCC 700711	5 370 kopijų/ml	19/20
Bordetella pertussis	I028	ATCC BAA-2707	5,13 CFU/ml*	19/20
	A639	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI	1/10000 [†]	19/20

* Testuota naudojant skysto mėginio ir kontrolinio sauso tampono mėginio tipą.

† Santykinis skiedimas, naudojant turimą koncentraciją.

‡ Naudotos dvi skirtingos to paties štamo partijos.

Tyrimo vientisumas

Vientiso tyrimo veikimo patvirtinimas buvo atliktas analizuojant vidinės kontrolinės medžiagos veikimą, naudojant klininius nazofaringinių tamponų mėginius. Naudojant „QIAstat-Dx Respiratory Panel“, buvo išanalizuota trisdešimt (30) atskirų nazofaringinių tamponų mėginių, neigiamų visiems galimiems aptikti patogenams. Visi tirti mėginiai parodė „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ vidinės kontrolinės medžiagos teigimą rezultatą ir tinkamą veikimą.

Išimtinumas (analizinis specifiškumas)

Išimtinumo tyrimas buvo atliktas vykdant in silico analizę ir in vitro tyrimą, siekiant įvertinti analizinį specifiškumą kvėpavimo takų arba ne kvėpavimo takų organizmams, kurie netiriami multitestu. Tarp šių organizmų buvo bandinių, kurie susiję su tiriamais kvėpavimo takų

organizmais, tačiau skiriasi nuo jų, arba jų gali būti bandiniuose, paimtuose iš numatytosios tyrimo populiacijos. Pasirinkti organizmai kliniškai susiję (sudaro kolonijas viršutiniuose kvėpavimo takuose arba sukelia kvėpavimo takų simptomus), įprasta odos flora ar laboratorijos teršalai, arba mikroorganizmai, kuriais gali būti užsikrėtusi didžioji dalis populiacijos.

Mėginiai buvo paruošti įsodrinant potencialiai kryžminėse reakcijose dalyvaujančiais organizmais sumodeliuotą nazofaringinio tampono mėginio matricą didžiausia galima koncentracija, atsižvelgiant į organizmų išteklius, pageidautina 10^5 TCID₅₀/ml tikslinių virusų ir 10^6 CFU/ml tikslinių bakterijų.

Tam tikras kryžminio reaktyvumo su *Bordetella* rūšimis lygis buvo numatomas atliekant preliminarią sekos analizę ir buvo stebimas, kai buvo iširtos aukštos *Bordetella holmesii* ir kai kurių *Bordetella bronchiseptica* štamų koncentracijos. Pagal CDC rekomendacijas, taikomas tyrimams, kuriuose IS481 naudojamas kaip tikslinė sritis naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“, jei *Bordetella pertussis* CT reikšmė yra CT > 29, rekomenduojama atlikti patvirtinamąjį specifiškumo tyrimą. Kryžminis reaktyvumas nebuvo nustatytas, kai *Bordetella parapertussis* koncentracija yra didelė. *Bordetella pertussis* aptikti naudotas tikslinis genas (įterpimo elementas IS481) yra transpozonas, taip pat randamas kitose *Bordetella* rūšyse. 8 lentelėje pateiktas tirtų patogenų sąrašas.

8 lentelė. Tirtų patogenų analizinio specifiškumo sąrašas

Tipas	Patogenas	
Bakterijos	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	<i>Neisseria elongata</i>
	<i>Bordetella holmesii</i>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
	<i>Bordetella parapertussis</i>	<i>Neisseria meningitidis</i>
	<i>Chlamydia trachomatis</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
	<i>Enterobacter aerogenes</i>	<i>Serratia marcescens</i>
	<i>Escherichia coli</i> (O157)	<i>Staphylococcus aureus</i>
	<i>Haemophilus influenzae</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>
	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Streptococcus agalactiae</i>
	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
	<i>Moraxella catarrhalis</i>	<i>Streptococcus pyogenes</i>
	<i>Mycoplasma genitalium</i>	<i>Streptococcus salivarius</i>
	<i>Mycoplasma hominis</i>	
Virusai	Citomegalovirusas	2 tipo paprastas herpeso virusas
	Epšteino-Baro virusas	Tymų virusas
	1 tipo paprastas herpeso virusas	Kiaulytė

Grybeliai

Aspergillus fumigatus
Candida albicans
Cryptococcus neoformans

Tiriant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“, visų tirtų patogenų rezultatai buvo neigiami ir organizmų kryžminio reaktyvumo nebuvo pastebėta (išskyrus *Bordetella holmesii* ir kai kurių *Bordetella bronchiseptica* štamų, kaip aprašyta anksčiau).

Buvo atlikta visų į „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ įtrauktų pradmenų/zondų kompozicijų „in silico“ analizė, parodžiusi specifinę amplifikaciją ir aptikimą be kryžminio reaktyvumo.

In vitro būdu buvo ištirtas tik ribotas skaičius SARS-CoV-2 taikinio organizmų (*Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *Chlamydomphila pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Mycobacterium tuberculosis*, MERS koronavirusas, SARS koronavirusas). Kryžminis reaktyvumas nebuvo pastebėtas, tiek *in silico*, tiek *in vitro*, su kliniškai svarbiais patogenais (sudaro kolonijas viršutiniuose kvėpavimo takuose arba sukelia kvėpavimo takų simptomus), įprasta odos flora ar laboratorijos teršalai, arba mikroorganizmai.

Aprėptis (analitinis reaktyvumas)*

Aprėpties tyrimas buvo atliktas, siekiant išanalizuoti įvairių štamų, reprezentuojančių kiekvieno kvėpavimo takų tyrimų grupės tikslinio organizmo genetinę įvairovę („aprėpties štamai“), aptikimą. Į tyrimą buvo įtrauktos visos aprėpties štamų analitės, skirtingų organizmų rūšių/tipų atstovai (pvz., buvo įtraukti įvairūs A gripo štamai, izoliuoti iš įvairių geografinių vietų ir skirtingais kalendoriniais metais). 9 lentelėje pateiktas atliekant tyrimą tirtų kvėpavimo takų patogenų sąrašas.

* Netaikoma SARS-CoV-2 taikiniui, nes tada, kai buvo atliekamas tyrimas, buvo vienas štamai.

9 lentelė. Tirtų patogenų analitinio reaktyvumo sąrašas

Patogenas	Potipis/serotipas	Štamai	Šaltinis
A gripo virusas	H1N1	A/PR/8/34	ATCC VR-1469
		A/Naujasis Džersis/8/76	ATCC VR-897
		A/Brisbanas/59/07	„ZeptoMetrix“ 0810244CFHI
		A/Naujoji Kaledonija/20/99	„ZeptoMetrix“ 0810036CFHI

9 lentelė Tirtų patogenų analitinio reaktyvumo sąrašas (tęsinys)

Patogenas	Potipis/serotipas	Štamas	Šaltinis
A gripo virusas	H3N2	A/Virdžinija/ATCC6/2012	ATCC VR-1811
		A/Viskonsinas/67/2005	„ZeptoMetrix“ 0810252CFHI
		A/Port Čalmersas/1/73	ATCC VR-810
		A/Viktorija/3/75	ATCC VR-822
		A/Brisbanas/10/07	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI
	H1N1 (pandeminis)	A/Virdžinija/ATCC2/2009	ATCC VR-1737
		A/Virdžinija/ATCC3/2009	ATCC VR-1738
		A/Virdžinija/ATCC1/2009	ATCC VR-1736
		A/SwineNY/03/2009	„ZeptoMetrix“ 0810249CFHI
		H1N1/NY/02/09	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI
B gripo virusas	Nėra	B/Virdžinija/ATCC5/2012	ATCC VR-1807
		B/FL/04/06	ATCC VR-1804
		B/Taivanas/2/62	ATCC VR-295
		B/Panama/45/90	„ZeptoMetrix“ NATFLUB-ERCM
		B/Florida/02/06	„ZeptoMetrix“ 810037CFHI
		B/Merilendas/1/59	ATCC VR-296
Koronavirusas 229E	Nėra	Nėra	ATCC VR-740
		Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI
Koronavirusas OC43	Nėra	Nėra	ATCC-1558
		Nėra	„ZeptoMetrix“ 0810024CFHI
		Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI
Koronavirusas NL63	Nėra	Nėra	„ZeptoMetrix“ 0810228CFHI
		Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI
Koronavirusas HKU1	Nėra	Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI
1 paragripas	Nėra	C35	ATCC VR-94
		Nėra	„ZeptoMetrix“ NATPARA1-ST
		Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI
2 paragripas	Nėra	Greer	ATCC VR-92
		Nėra	„ZeptoMetrix“ 0810015CFHI
		Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI

9 lentelė Tirtų patogenų analitinio reaktyvumo sąrašas (tęsinys)

Patogenas	Potipis/serotipas	Štamas	Šaltinis	
3 paragripas	Nėra	C 243	ATCC VR-93	
		Nėra	„ZeptoMetrix“ NATPARA3-ST	
		Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI	
4 paragripas	A	M-25	ATCC VR-1378	
	B	CH 19503	ATCC VR-1377	
	B	Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI	
RSV A	Nėra	A2	ATCC VR-1540	
		Ilgas	ATCC VR-26	
RSV B	Nėra	Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI	
		9320	ATCC VR-955	
		18537	ATCC VR-1580	
Žmogaus metapneumovirusas	Nėra	WV/14617/85	ATCC VR-1400	
		Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRSVB-ST	
		B1	Peru2-2002	„ZeptoMetrix“ 0810156CFHI
		B1	IA18-2003	„ZeptoMetrix“ 0810162CFH
		B1	Peru3-2003	„ZeptoMetrix“ 0810158CFHI
		B2	Peru6-2003	„ZeptoMetrix“ 0810159CFHI
		B2	Peru1-2002	„ZeptoMetrix“ 0810157CFHI
		A1	hMPV-16, IA10-2003	„ZeptoMetrix“ 0810161CFHI
		A1	IA3-2002	„ZeptoMetrix“ 0810160CFHI
		A2	IA14-2003	„ZeptoMetrix“ 0810163CFH
Žmogaus metapneumovirusas	Nėra	B1	Peru2-2002	„ZeptoMetrix“ 0810156CFHI
		B1	IA18-2003	„ZeptoMetrix“ 0810162CFH
		B1	Peru3-2003	„ZeptoMetrix“ 0810158CFHI
		B2	Peru6-2003	„ZeptoMetrix“ 0810159CFHI
		B2	Peru1-2002	„ZeptoMetrix“ 0810157CFHI
		A1	hMPV-16, IA10-2003	„ZeptoMetrix“ 0810161CFHI
		A1	IA3-2002	„ZeptoMetrix“ 0810160CFHI
		A2	IA14-2003	„ZeptoMetrix“ 0810163CFH

(tęsinys kitame puslapyje)

9 lentelė Tirtų patogenų analitinio reaktyvumo sąrašas (tęsinys)

Patogenas	Potipis/serotipas	Štamas	Šaltinis
Adenovirusas B	B21	AV-1645 [128]	ATCC VR-256
	B7	Gomen	ATCC VR-7
	B3	GB	ATCC VR-3
	B3	Nėra	„ZeptoMetrix“ NATADV3-ST
Adenovirusas C	C1	Adenoidinis 71	ATCC VR-1
	C2	Nėra	ATCC VR-846
	C5	Adenoidinis 75	ATCC VR-5
	C6	Nėra	ATCC VR-6
Adenovirusas E	E4	RI-67	ATCC VR-1572
Bokavirusas	Nėra	Nėra	„ZeptoMetrix“ 0601178NTS
		Nėra	„ZeptoMetrix“ MB-004 (partija Nr. 317954)
Enterovirusas A	EV-A71	EV-A71	„ZeptoMetrix“ 0810236CFHI
Enterovirusas B	E-11	Gregory	ATCC VR-41
	E-30	Bastianni	ATCC VR-1660
	CV-A9	Griggs	ATCC VR-1311
	CV-B1	Conn-5	ATCC VR-28
	CV-B2	Ohio-1	ATCC VR-29
	CV-B3	Nancy	ATCC VR-30
	E-17	CHHE-29	ATCC VR-47
	Nėra	Echovirusas 6 (D-1 (Cox))	ATCC VR-241
Enterovirusas C	CV-A21	Kuykendall [V-024-001-012]	ATCC VR-850
Enterovirusas D	D68	US/IL/14-18952	ATCC VR-1824
	EV-D68	US/MO/14-18947	ATCC VR-1823
Rinovirusas A	A1	Nėra	„ZeptoMetrix“ NATRVP-IDI
	1A	Nėra	ATCC VR-1559
	A2	HGP	ATCC VR-482
	A16	11757	ATCC VR-283
	HRV-1B	B632	ATCC VR-1645
	HRV-A39	209	ATCC VR-340
Rinovirusas B	B14	1059	ATCC VR-284

(tęsinys kitame puslapyje)

9 lentelė Tirtų patogenų analitinio reaktyvumo sąrašas (tęsinys)

Patogenas	Potipis/serotipas	Štamas	Šaltinis
C. pneumoniae	Nėra	CWL-029	ATCC VR-1310
	1	PI 1428	ATCC 29085
M. pneumoniae	Nėra	M129	„ZeptoMetrix” NATMPN(M129)-ERCM
	Nėra	M129-B7	ATCC 29342
	Nėra	FH Eaton sukėlėjo štamas [NCTC 10119]	ATCC 15531
		CA1	ATCC 700711
		<i>Legionella pneumophila</i> porūš. <i>Pneumophila</i> /169-MN-H	ATCC 43703
L. pneumophila	Nėra	Nėra	„ZeptoMetrix MB-004” (partija 317955)
		porūš. <i>Pneumophila/Philadelphia-1</i>	ATCC 33152
		I028	ATCC BAA-2707
B. pertussis	Nėra	A639	„ZeptoMetrix” NATRVP-IDI
		18323 [NCTC 10739]	ATCC 9797

Visi tirti patogenai parodė teigiamus tirtų koncentracijų rezultatus.

Bendros infekcijos

Bendrų infekcijų tyrimas buvo atliktas norint patvirtinti, kad viename nazofaringinio tampono mėginyje galima aptikti kelias „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” analites.

Į vieną mėginį buvo įtraukti didelės ir mažos koncentracijų skirtingi organizmai. Organizmai buvo pasirinkti atsižvelgiant į svarbumą, paplitimą ir „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės schemą (tikslinių organizmų pasiskirstymą įvairiose reakcijos kameroje).

Didelės (50x LoD koncentracija) ir mažos koncentracijų (5x LoD koncentracija) analitės buvo įsodrintos į sumodeliuotą NPS mėginio matricą (išaugintos žmogaus ląstelės, patalpintos UTM) ir tirtos įvairiais deriniais. 10 lentelėje pateiktas šio tyrimo metu tirtų bendrų infekcijų sąrašas.

10 lentelė. Bendrų infekcijų derinių tyrimų sąrašas

Patogenai	Štamas	Koncentracija
A gripo virusas H3N2	A/Virdžinija/ATCC6/2012	50x LoD
Adenovirusas C5	Adenoidinis 75	5x LoD
A gripo virusas H3N2	A/Virdžinija/ATCC6/2012	5x LoD
Adenovirusas C5	Adenoidinis 75	50x LoD
3 paragripas	C243	50x LoD
A gripo virusas H1N1/2009	NY/03/09	5x LoD
3 paragripas	C243	5x LoD
A gripo virusas H1N1/2009	NY/03/09	50x LoD
Kvėpavimo sincitinis virusas A	A2	50x LoD
B gripo virusas	B/FL/04/06	5x LoD
Kvėpavimo sincitinis virusas A	A2	5x LoD
B gripo virusas	B/FL/04/06	50x LoD
Adenovirusas C5	Adenoidinis 75	50x LoD
Rinovirusas B, tipas HRV-B14	1059	5x LoD
Adenovirusas C5	Adenoidinis 75	5x LoD
Rinovirusas B, tipas HRV-B14	1059	50x LoD
Kvėpavimo sincitinis virusas A	A2	50x LoD
Rinovirusas B, tipas HRV-B14	1059	5x LoD
Kvėpavimo sincitinis virusas A	A2	5x LoD
Rinovirusas B, tipas HRV-B14	1059	50x LoD
Kvėpavimo sincitinis virusas B	9320	50x LoD
Bokavirusas	Nėra	5x LoD
Kvėpavimo sincitinis virusas B	9320	5x LoD
Bokavirusas	Nėra	50x LoD
Koronavirusas OC43	Nėra	50x LoD
Rinovirusas B, tipas HRV-B14	1059	5x LoD
Koronavirusas OC43	Nėra	5x LoD
Rinovirusas B, tipas HRV-B14	1059	50x LoD
Žmogaus metapneumovirusas B2	Peru6-2003	50x LoD
1 paragripas	C-35	5x LoD
Žmogaus metapneumovirusas B2	Peru6-2003	5x LoD
1 paragripas	C-35	50x LoD
Koronavirusas 229E	Nėra	50x LoD
Kvėpavimo sincitinis virusas A	A2	5x LoD
Koronavirusas 229E	Nėra	5x LoD
Kvėpavimo sincitinis virusas A	A2	50x LoD
Kvėpavimo sincitinis virusas B	9320	50x LoD
Koronavirusas NL63	Nėra	5x LoD

Kvėpavimo sincitinis virusas B	9320	5x LoD
Koronavirusas NL63	Nėra	50x LoD

Visos tirtos bendros infekcijos pateikė teigiamus dviejų mažos ir didelės koncentracijos patogenų rezultatus. Poveikio rezultatams dėl bendrų infekcijų nepastebėta.

Trukdančios medžiagos

Potencialiai trukdančių medžiagų poveikis „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ veikimui buvo įvertintas tyrimo metu. Trukdančios medžiagos apima endogenines ir egzogenines medžiagas, atitinkamai paprastai aptinkamas nosiaryklėje arba galinčias patekti į NPS bandinius juos imant.

Trukdančioms medžiagoms tirti buvo naudojamas pasirinktų mėginių rinkinys, apimantis visus kvėpavimo takų tyrimų grupės patogenus. Pasirinkti mėginiai trukdančiomis medžiagomis buvo įsodrinti iki lygio pagal prognozes viršijančio koncentraciją medžiagos, kurią galima būtų aptikti autentiškame nazofaringinio tampono bandinyje. Pasirinkti mėginiai buvo tirti pridėjus potencialiai slopinančios medžiagos arba jos nepridėjus, lyginant mėginius tiesiogiai. Papildomai neigiami patogenų mėginiai buvo įsodrinti potencialiai slopinančiomis medžiagomis.

Nė viena iš tirtų medžiagų netrukdė vidinei kontrolinei medžiagai arba patogenams kombinuotajame mėginyje. 11, 12 ir 13 lentelėse parodytos „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ veikimui trukdančių tirtų medžiagų koncentracijos.

11 lentelė. Tirtos endogeninės medžiagos

Medžiaga	Koncentracija
Žmogaus genomo DNR	50 ng/μl
Žmogaus visas kraujas	10 % v/v
Žmogaus mucinas	0,5 % v/v

12 lentelė. Tirti konkurencingi mikroorganizmai

Mikroorganizmas (šaltinis)	Koncentracija
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC CRM-6538)	1,70E+08 CFU/ml
<i>Streptococcus pneumoniae</i> (ATCC 6303)	1,25E+07 CFU/ml
<i>Haemophilus influenzae</i> (ATCC 49766)	6,20E+08 CFU/ml
<i>Candida albicans</i> (ATCC CRM-10231)	1,00E+06 CFU/ml
1 tipo paprastasis herpeso virusas (ATCC VR-1789)	1,60E+07 TCID ₅₀ /ml
Žmogaus citomegalovirusas (ATCC NATCMV-0005)	2,0E+04 TCID ₅₀ /ml

13 lentelė. Ištirtos egzogeninės medžiagos

Medžiaga	Koncentracija
„Utabor®“ nosies purškalkas (dekongestantas)	10 % v/v
„Rhinomer®“ nosies purškalkas (druskingo vandens tirpalas)	10 % v/v
Tobramicinas	6 mg/ml
Mupirocinas	2,5 % w/v

Pernešimas

Pernešimo tyrimas buvo atliktas, siekiant įvertinti potencialią kryžminio užteršimo galimybę, iš eilės vykdant tyrimus „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir „QIAstat-Dx Rise“, naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“.

Sumodeliuotos NPS matricos pakaitomis stipriai teigiami ir neigiami mėginiai buvo tirti naudojant vieną „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ ir du „QIAstat-Dx Rise“ prietaisus.

Pernešimo tarp mėginių, naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“, nepastebėta.

Atkuriamumas

Siekiant įrodyti „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ veikimo atkartojamumą, naudojant „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ analizatorių, buvo ištirtas pasirinktų skystų mėginių transportavimo terpėje ir sauso tampono mėginių rinkinys, kurį sudarė mažos koncentracijos analitės (3x LoD ir 1x LoD) ir neigiami mėginiai.

Skysti mėginiai transportavimo terpėje buvo tiriami su pakartojimais, naudojant skirtingų partijų „QIAstat-Dx Respiratory Panel” kasetes, ir skirtingi operatoriai skirtingomis dienomis atliko tyrimus, naudodami skirtingus „QIAstat-Dx Analyzers 1.0”.

Atkuriamumas ir pakartojamumas paveiks SARS-CoV-2 taikinį tokiu pat būdu, kaip ir kitus „QIAstat-Dx Respiratory Panel” patvirtintus tikslinius organizmus.

14 lentelė. Veikimo atkuriamumo tyrimo metu tirtų kvėpavimo takų patogenų skystuose mėginiuose transportavimo terpėje sąrašas

Patogenas	Štamas
A gripo virusas H1	A/Naujasis Džersis/8/76
A gripo virusas H3	A/Virdžinija/ATCC6/2012
A gripo virusas H1N1 pdm	A/SwineNY/03/2009
B gripo virusas	B/FL/04/06
Koronavirusas 229E	Nėra
Koronavirusas OC43	Nėra
Koronavirusas NL63	Nėra
Koronavirusas HKU1	Nėra
1 paragripo virusas	C35
2 paragripo virusas	Greer
3 paragripo virusas	C 243
4a paragripo virusas	M-25
Rinivirusas	A16
Enterivirusas	/US/IL/14-18952 (enterivirusas D68)
Adenovirusas	RI-67 (adenovirusas E4)
RSV B	9320
hMPV	Peru6-2003 (B2 tipas)
Bokavirusas	Klinikinis mėginys
Mycoplasma pneumoniae	M129-B7 (1 tipas)
Chlamydomphila pneumoniae	TW183
Legionella pneumophila	CA1
Bordetella pertussis	I028

15 lentelė. Atkuriamumo tyrimo teigiamų sutapimų ir neigiamų sutapimų skystuose mėginiuose transportavimo terpėje suvestinė

Koncentracija	Patogenas	Numatomi rezultatai	Aptikimo rodiklis	% sutapimas su numatomu rezultatu
3x LoD	A gripo virusas H1*	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Koronavirusas HKU1	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	PIV-2	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	C. pneumoniae	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	RSVB	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
1x LoD	A gripo virusas H1*	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Koronavirusas HKU1	„Positive“ (teigiamas)	19/20	95
	PIV-2	„Positive“ (teigiamas)	19/20	95
	C. pneumoniae	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	RSVB	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
„Negative“ (neigiamas)	A gripo virusas H1*	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	Koronavirusas HKU1	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	PIV-2	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	C. pneumoniae	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	RSVB	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
3x LoD	Bokavirusas	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
1x LoD	Bokavirusas	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
„Negative“ (neigiamas)	Bokavirusas	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
3x LoD	B gripo virusas	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Koronavirusas 229E	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	PIV-4a	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Enterovirusas D68	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	hMPV B2	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	B. pertussis	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
1x LoD	B gripo virusas	„Positive“ (teigiamas)	19/20	95
	Koronavirusas 229E	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	PIV-4a	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Enterovirusas D68	„Positive“ (teigiamas)	19/20	95
	hMPV B2	„Positive“ (teigiamas)	19/20	95
	B. pertussis	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
„Negative“ (neigiamas)	B gripo virusas	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	Koronavirusas 229E	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	PIV-4a	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	Enterovirusas D68	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	hMPV B2	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	B. pertussis	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100

* Aptikimo rodiklis taikomas abiem tikslams, A ir H1 gripui.

(tęsinys kitame puslapyje)

15 lentelė Atkuriamumo tyrimo teigiamų sutapimų ir neigiamų sutapimų sauso tampono mėginiuose suvestinė (tęsinys)

Koncentracija	Patogenas	Numatomi rezultatai	Aptikimo rodiklis	% sutapimas su numatomu rezultatu
3x LoD	Gripas H1N1 (pdm) [†]	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Koronavirusas OC43	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	PIV-3	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Rinovirusas A16	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	M. pneumoniae	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
3x LoD	Gripas H1N1 (pdm) [†]	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Koronavirusas OC43	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	PIV-3	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Rinovirusas A16	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	M. pneumoniae	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
1x LoD	Gripas H1N1 (pdm) [†]	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Koronavirusas OC43	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	PIV-3	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Rinovirusas A16	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	M. pneumoniae	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
„Negative“ (neigiamas)	Gripas H1N1 (pdm) [†]	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	Koronavirusas OC43	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	PIV-3	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	Rinovirusas A16	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	M. pneumoniae	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
3x LoD	A gripo virusas H3 [‡]	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Koronavirusas NL63	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	PIV-1	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Adenovirusas E4	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	L. pneumophila	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
1x LoD	A gripo virusas H3 [‡]	„Positive“ (teigiamas)	19/20	95
	Koronavirusas NL63	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	PIV-1	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	Adenovirusas E4	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
	L. pneumophila	„Positive“ (teigiamas)	20/20	100
„Negative“ (neigiamas)	A gripo virusas H3 [‡]	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	Koronavirusas NL63	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	PIV-1	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	Adenovirusas E4	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100
	L. pneumophila	„Negative“ (neigiamas)	80/80	100

* Aptikimo rodiklis taikomas abiem tikslams, A ir H1 gripui.

[†] Aptikimo rodiklis taikomas abiem tikslams, A ir H1/pandeminiam gripui.

[‡] Aptikimo rodiklis taikomas abiem tikslams, A ir H3 gripui.

Sauso tampono mėginiai buvo tiriami su pakartojimais, naudojant skirtingų partijų „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ kasetes, ir skirtingi operatoriai skirtingose vietose skirtingomis dienomis atliko tyrimus, naudodami skirtingus „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ prietaisus.

Tipinių patogenų skydelis buvo pasirinktas bent vienam RNR virusui, vienam DNR virusui ir vienai bakterijai, apimančiai visas (8) „QIAstat-Dx® Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės reakcijos kameras, įtraukti

16 lentelė. Veikimo atkuriamumo tyrimo metu tirtų kvėpavimo takų patogenų sauso tampono mėginiuose sąrašas

Patogenas	Štamas
B gripo virusas	B/FL/04/06
Koronavirusas OC43	Nėra
3 paragripo virusas	C 243
Rinovirusas	HPG (rinovirusas A2)
Adenovirusas	GB (adenovirusas B3)
Mycoplasma pneumoniae	P 1428
SARS-CoV-2	Anglija/02/2020

17 lentelė. Atkuriamumo tyrimo teigiamų sutapimų ir neigiamų sutapimų sauso tampono mėginiuose suvestinė

Koncentracija	Patogenas	Vieta	Numatomi rezultatai	Aptikimo rodiklis	% sutapimas su numatomu rezultatu
3x LoD	B gripo virusas	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	Koronavirusas OC43	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	PIV-3	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100

17 lentelė. Atkuriamumo tyrimo teigiamų sutapimų ir neigiamų sutapimų sauso tampono mėginiuose suvestinė

Koncentracija	Patogenas	Vieta	Numatomi rezultatai	Aptikimo rodiklis	% sutapimas su numatomu rezultatu
3x LoD	B gripo virusas	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	Koronavirusas OC4:	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	PIV-3	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	Rinovirusas	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	Adenovirusas	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
M. pneumoniae	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100	
	2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100	
	3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100	
	Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100	
SARS-CoV-2	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100	
	2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100	
	3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100	
	Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100	

17 lentelė (tęsinys)

Koncentracija	Patogenas	Vieta	Numatomi rezultatai	Aptikimo rodiklis	% sutapimas su numatomu rezultatu
1x LoD	B gripo virusas	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	Koronavirusas OC43	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	PIV-3	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	28/30	93,3
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	29/30	96,6
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	29/30	96,6
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	86/90	95,6
1x LoD	Rinovirusas	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	Adenovirusas	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100
	<i>M. pneumoniae</i>	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100
		3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	28/30	93,3
		Visi	„Positive“ (teigiamas)	88/90	97,8
SARS-CoV-2	1 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100	
	2 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100	
	3 vieta	„Positive“ (teigiamas)	30/30	100	
	Visi	„Positive“ (teigiamas)	90/90	100	
„Negative“ (neigiamas)	Visi	1 vieta	„Negative“ (neigiamas)	690/690	100
		2 vieta	„Negative“ (neigiamas)	690/690	100
		3 vieta	„Negative“ (neigiamas)	690/690	100
		Visi	„Negative“ (neigiamas)	2 070/2 070	100

Visų tirtų mėginių rezultatai buvo tokie, kaip prognozuota (95 – 100 % atitikimas), tai rodo atkartojamą „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ veikimą.

Atkuriamumo tyrimas parodė, kad „QIAstat-Dx Respiratory Panel“, vykdomas „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, užtikrina gerai atkuriamus tyrimo rezultatus, kai tuos pačius mėginius skirtingi operatoriai tiria keliuose vykdymuose skirtingomis dienomis keliose vietose ir naudodami skirtingus „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ prietaisus ir kelių partijų „QIAstat-Dx Respiratory Panel“ kasetes.

Pakartojamumo tyrimas atliktas naudojant du „QIAstat-Dx Rise“ prietaisus ir reprezentatyvų mėginių rinkinį, sudarytą iš mažos koncentracijos analitėmis (3x LoD ir 1x LoD) įsotintos dirbtinio NPS matricos ir neigiamų mėginių. Patogenai, įdėti į teigiamus mėginius buvo B gripo virusas, koronavirusas OC43, PIV3, rinovirusas, adenovirusas, *M. pneumoniae* ir SARS-CoV-2. Mėginiai testuoti kartotiniuose, naudojant dvi kasečių partijas. Į tyrimą palyginimo tikslais įtrauktas testavimas, naudojant aštuonis „QIAstat-Dx Analyzer“ prietaisus. Vykdyti iš viso 183 1x LoD teigiamų mėginių kartotiniai, 189 3x LoD teigiamų mėginių kartotiniai ir 155 neigiamų mėginių kartotiniai. Bendri rezultatai parodė atitinkamą 91,1–100 % ir 100,0 % 1x LoD ir 3x LoD mėginių aptikimo rodiklį. Neigiamų mėginių visų testo analizių neigiamų išskvietimų rodiklis buvo 100 %. Nustatyta, kad „QIAstat-Dx Rise“ veiksmingumas lygiavertis „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“.

Mėginio stabilumas

Siekiant išanalizuoti klinikinių mėginių klinikines sąlygas buvo atliktas mėginio stabilumo tyrimas (sumodeliuota skystų mėginių transportavimo terpėje ir sauso tampono mėginių tipų matrica), kad būtų galima atlikti testą su „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“.

Sumodeliuota NPS mėginio matrica (išaugintos žmogaus ląstelės, patalpintos „Copan“ UTM) buvo įsodrinta mažos koncentracijos (pvz., 3 x LoD) virusų arba bakterijų kultūrų medžiaga. Atliekant tyrimą mėginiai buvo laikomi toliau nurodytomis sąlygomis.

- Esant nuo 15 °C iki 25 °C, 4 val.
- Esant nuo 2 °C iki 8 °C, 3 dienas
- Esant nuo –15 °C iki –25 °C, 30 dienų
- Esant nuo –70 °C iki –80 °C, 30 dienų

Visi patogenai buvo sėkmingai aptikti skirtingą laiko tarpą laikant skirtingose temperatūrose, todėl mėginiai nurodytomis laikymo sąlygomis ir laiko tarpais buvo stabilūs.

Konkrečiai SARS-CoV-2 skirtas transportavimo terpėje sumodeliuotoje matricoje mėginio stabilumo tyrimas nebuvo atliktas. Tačiau bandinio stabilumo tyrimas buvo atliktas naudojant 229E, HKU1, OC43 ir NL63 koronaviruso patogenus iš to paties virusų pošeimio. Nustatyta, kad mėginių laikymas prieš analizę anksčiau nurodytomis sąlygomis neturi įtakos efektyvumui.

Prieš dedant ant tampono (sausio tampono mėginio tipas) į dirbtinio NPS ir HeLa ląstelių sumodeliuotą matricą įdėta mažos koncentracijos viruso ar bakterijos kultūros medžiagos (pvz., 1x LoD ir 3x LoD). Sausio tampono mėginius rekomenduojama testuoti nedelsiant po surinkimo. Tačiau buvo atliktas papildomas mėginio stabilumo testavimas, siekiant suteikti papildomo laiko sausam tamponui išimti iš surinkimo vietos ir įdėti į prietaisą. Atliekant tyrimą mėginiai buvo laikomi toliau nurodytomis sąlygomis.

- Esant nuo 15 °C iki 25 °C, 45 minutes
- Esant nuo 2 °C iki 8 °C, 7 val.

Visi patogenai buvo sėkmingai aptikti skirtingą laiko tarpą laikant skirtingose temperatūrose, todėl mėginiai nurodytomis laikymo sąlygomis ir laiko tarpais buvo stabilūs.

Priedai

A priedas. Tyrimo apibrėžimo failo diegimas

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ tyrimo apibrėžimo failas turi būti įdiegtas „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ prieš atliekant testus su „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetėmis.


Pastaba. Norėdami įkelti naujus tyrimo apibrėžimo failus į „QIAstat-Dx Rise“, kreipkitės į techninio klientų aptarnavimo tarnybą arba savo pardavimo atstovą.

Pastaba. Kai išleidžiama nauja „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ tyrimo versija, naują „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ tyrimo apibrėžimo failą būtina įdiegti prieš atliekant testus.

Pastaba. Tyrimo apibrėžimo failai pateikti adresu **www.qiagen.com**. Tyrimo apibrėžimo failas (.asy failo tipas) turi būti įrašytas USB įrenginyje prieš diegimą „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“. Šią USB atmintinę reikia formatuoti FAT32 failų sistema.


Norėdami importuoti naujus tyrimus iš USB į „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įstatykite USB atmintinę su tyrimo apibrėžimo failu į vieną iš „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ USB prievadų.
2. Paspauskite mygtuką „**Options**“ (parinktys), tada pasirinkite „**Assay Management**“ (tyrimo tvarkymas). Ekranu turinio srityje pasirodo ekranas „Assay Management“ (tyrimo tvarkymas) (89 pav.).

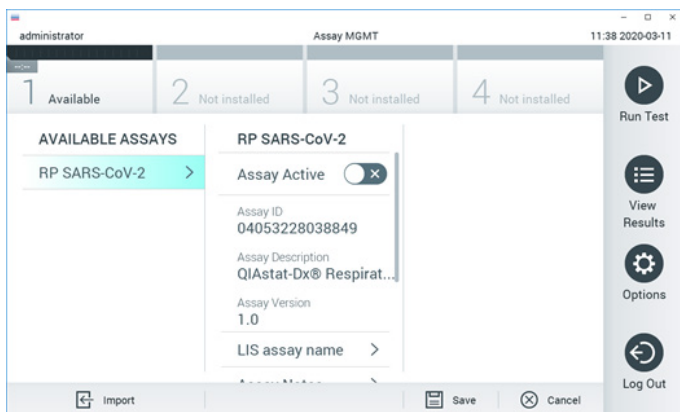

89 pav. Ekranas „Assay Management” (tyrimo tvarkymas).

3. Paspauskite piktogramą „Import” (importuoti) ekrano apačioje kairėje.
4. Pasirinkite tyrimą, atitinkantį failą, kurį reikia importuoti iš USB įrenginio.
5. Atsidarys dialogo langas, kuriame reikės patvirtinti failo įkėlimą.
6. Gali atsidaryti dialogo langas, kuriame klausiama, ar perrašyti esamą failo versiją nauja. Paspauskite „Yes” (taip), jei norite perrašyti.
7. Tyrimas tampa aktyvus pasirinkus „Assay Active” (tyrimas aktyvus) (90 pav.).

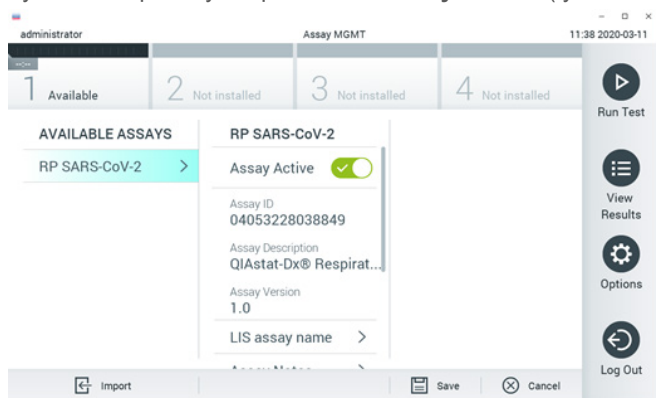

90 pav. Tyrimo aktyvinimas.

8. Aktyvų tyrimą naudotojui priskirkite paspausdami mygtuką „Options” (parinktys), tada mygtuką „User Management” (naudotojo tvarkymas). Pasirinkite naudotoją, kuriam turėtų būti leidžiama atlikti tyrimą. Tada dalyje „User Options” (naudotojo parinktys)

pasirinkite „Assign Assays” (priskirti tyrimus). Įgalinkite tyrimą ir paspauskite mygtuką „Save” (įrašyti) (91 pav.).



91 pav. Aktyvaus tyrimo priskyrimas.

B priedas. Specialiųjų terminų žodynas

Amplifikacijos kreivė: grafinė sudėtinės „real-time RT-PCR“ amplifikacijos duomenų pateiktis.

Analizės modulis (AM): Pagrindinis „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ arba „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ aparatinės įrangos modulis, atsakingas už testų vykdymą naudojant „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetes. Jį valdo operacinis modulis. Prie operacinio modulio galima prijungti kelis analizės modulius.

„QIAstat-Dx Analyzer 1.0“: „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“ sudaro operacinis modulis ir analizės modulis. Operaciniame modulyje arba viename operaciniame modulyje PRO yra elementai, kurie užtikrina ryšį su analizės moduliu ir įjungia naudotojo sąveiką su „QIAstat-Dx Analyzer 1.0“. Analizės modulyje yra mėginių tyrimo ir analizės aparatinė ir programinė įranga.

„QIAstat-Dx Analyzer 2.0“: „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ sudaro operacinis modulis PRO ir analizės modulis. Operaciniame modulyje PRO yra elementai, kurie užtikrina ryšį su analizės moduliu ir naudotojo sąveiką su „QIAstat-Dx Analyzer 2.0“. Analizės modulyje yra mėginių tyrimo ir analizės aparatinė ir programinė įranga.

„QIAstat-Dx Rise“: „QIAstat-Dx Rise Base“ yra in-vitro diagnostikos prietaisas, skirtas naudoti su „QIAstat-Dx“ tyrimais ir „QIAstat-Dx“ analizės moduliais ir suteikiantis visiškai automatizuotą mėginių paruošimą, skirtą „real-time PCR“ aptikti vykstant molekulinės biologijos procesams. Sistemos gali būti valdomos naudojant atsitiktinę prieigą ir paketinį testavimą, o sistemos našumas gali būti padidintas iki 160 testų per dieną, įtraukus iki 8 analizės modulius. Sistema taip pat apima kelių testų priekinį stalčių, kuriame vienu metu telpa iki 18 testų, ir atliekų stalčių, į kurį automatiškai išmetami atlikti testai, taip padidinant sistemos naudojimo neprižiūrint efektyvumą.

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetė: atskiras vienkartinis įtaisas, kuriame iš anksto supilstyti reagentai, reikalingi įvykdyti visiškai automatizuotą molekulinį tyrimą, skirtą kvėpavimo takų patogenams aptikti.

IFU: naudojimo instrukcijos.

Pagrindinė anga: „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės įleidimo anga skystiems mėginiams transportavimo terpėje.

Nukleorūgštys: biopolimerai arba mažos biomolekulės, sudarytos iš nukleotidų, kurie yra trijų komponentų monomerai; cukrus su 5 anglies atomais, fosfato grupė ir azoto bazė.

Operacinis modulis (OM): speciali „QIAstat-Dx Analyzer 1.0” aparatinė įranga, kuri suteikia naudotojo sąsają 1–4 analizės moduliams (AM).

Operacinis Modulis PRO (OM PRO): Speciali „QIAstat-Dx Analyzer 2.0” aparatinė įranga, kuri suteikia naudotojo sąsają 1–4 analizės moduliams (AM).

PCR: „Polymerase Chain Reaction” (polimerazės grandininė reakcija)

RT: Atvirkštinė transkripcija

Tampono anga: „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetės įleidimo anga sausiems tamponams.

Naudotojas: Asmuo, kuris eksploatuoja „QIAstat-Dx Analyzer 1.0”/„QIAstat-Dx Analyzer 2.0”/„QIAstat-Dx Rise” ir „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel” kasetę pagal numatytąją paskirtį.

C priedas. Garantijų atsakomybės atsisakymas

IŠSKYRUS, KAIP NURODYTA „QIAGEN“ „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės PARDAVIMO SĄLYGOSE, „QIAGEN“ NEPRISIIMA VISIŠKAI JOKIOS ATSAKOMYBĖS IR NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės NAUDOJIMU, ĮSKAITANT ĮSIPAREIGOJIMUS ARBA GARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU TINKAMUMU PREKIAUTI, TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI ARBA BET KOKIO PATENTO, AUTORIAUS TEISIŲ AR KITŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMU BET KURIOJE PASAULIO VIETOJE.

Literatūra

1. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai („Centers for Disease Control and Prevention“, CDC). Nacionalinis imunizacijos ir kvėpavimo takų ligų centras („National Center for Immunization and Respiratory Diseases“, NCIRD). Virusinių ligų skyriaus („Division of Viral Diseases“, DVD) svetainė.
2. Pasaulio sveikatos organizacija. PSO informacinis lapas Nr. 221, 2016 m. lapkritis. Gripas (sezoninis). www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/index.html. Žiūrėta 2016 m. lapkričio mėn.
3. Flu.gov svetainė. Apie gripą. www.cdc.gov/flu/about/index.html
4. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai („Centers for Disease Control and Prevention“, CDC). Ligos ir būklės. Žmogaus paragripo virusai (ŽPGV). www.cdc.gov/parainfluenza/index.html
5. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai („Centers for Disease Control and Prevention“, CDC). Ligos ir būklės. Respiracinio sincitinio viruso (RSV) infekcija. www.cdc.gov/rsv/
6. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai („Centers for Disease Control and Prevention“, CDC). Ligos ir būklės. Adenovirusai. www.cdc.gov/adenovirus/index.html
7. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai („Centers for Disease Control and Prevention“, CDC). Ligos ir būklės. Ne poliomieliito enterovirusas. www.cdc.gov/non-polio-enterovirus/about/index.html
8. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai („Centers for Disease Control and Prevention“, CDC). Ligos ir būklės. *Mycoplasma pneumoniae* infekcija. www.cdc.gov/pneumonia/atypical/mycoplasma/index.html
9. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai („Centers for Disease Control and Prevention“, CDC). Ligos ir būklės. Kokliušas. www.cdc.gov/pertussis/
10. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline (M29)*.
11. BLAST. Basic Local Alignment Search Tool. <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>

12. Schreckenberger, P.C. and McAdam, A.J. (2015) Point-counterpoint: large multiplex PCR panels should be first-line tests for detection of respiratory and intestinal pathogens. *J Clin Microbiol* **53**(10), 3110–3115.
13. Līgū kontrolēs ir prevencijas centri („Centers for Disease Control and Prevention”, CDC). Ligos ir būklēs. Koronavīrusas (COVID-19). www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Simboliai

Toliau esančioje lentelėje aprašomi simboliai, pateikiami etiketėse arba šiame dokumente.



Sudėtyje yra pakankamas reagentų kiekis <N> reakcijoms atlikti



Tinka naudoti iki

IVD

In vitro diagnostikos medicinos priemonė

REF

Katalogo numeris

LOT

Partijos numeris

MAT

Medžiagos numeris (t. y. komponento ženklینimas etikete)



Taikymai viršutiniams kvėpavimo takams

Rn

R – vadovo peržiūra, o n – peržiūros numeris



Temperatūros ribos



Gamintojas



Žr. naudojimo instrukcijas



Dėmesio



Europos atitikties CE žymėjimas

SN

Serijos numeris



Nenaudoti pakartotinai



Saugoti nuo saulės šviesos



Nenaudoti, jei pažeista pakuotė

GTIN

Visuotinis prekės numeris

Užsakymo informacija

Produktas	Turinys	Kat. Nr.
„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“	6 testams: 6 atskirai supakuotos „QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ kasetės ir 6 atskirai supakuotos perkėlimo pipetės	691214
Susiję produktai		
„QIAstat-Dx Analyzer 1.0“	1 „QIAstat-Dx“ analizės modulis, 1 „QIAstat-Dx Operational Module“ ir susijusi aparatinė ir programinė įranga, skirta molekulinės diagnostikos „QIAstat-Dx“ tyrimo kasetėms	9002824
„QIAstat-Dx Analyzer 2.0“	1 „QIAstat-Dx“ analizės modulis, 1 „QIAstat-Dx Operational Module PRO“ ir susijusi aparatinė ir programinė įranga, skirta molekulinės diagnostikos „QIAstat-Dx“ tyrimo kasetėms	9002828
„QIAstat-Dx Rise“	1 „QIAstat-Dx Rise“ prietaisas ir susiję priedai ir programinė įranga, skirta molekulinės diagnostikos „QIAstat-Dx“ tyrimo kasetėms	9003163

Naujausia informacija apie licencijavimą ir tam tikrų gaminių garantinių įsipareigojimų ribojimą pateikta atitinkamame QIAGEN rinkinio vadove arba naudotojo vadove. QIAGEN rinkinių vadovai ir naudotojo vadovai pateikiami interneto svetainėje www.qiagen.com arba susisiekus su QIAGEN techninės pagalbos tarnyba ar vietiniu platintoju.

Dokumento peržiūros istorija

Data	Keitimai
2 versija, 1 peržiūrėtas leidimas	Programinės įrangos 2.2 versijos išleidimas
2 versija, 2 peržiūrėtas leidimas	„QIAstat-Dx Analyzer 2.0“ įtraukimas

„QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel“ ribotoji licencinė sutartis

Naudodamas šį produktą, pirkėjas arba naudotojas sutinka su toliau išvardytomis sąlygomis.

1. Produktą galima naudoti tik vadovaujantis protokolais, pateiktais su šiuo produktu, šiuo vadovu ir tik su rinkinyje esančiais komponentais. QIAGEN nesuteikia jokios intelektualinės nuosavybės licencijos naudoti ar įtraukti pridėtus šio rinkinio komponentus su šiaime rinkinyje nepateiktais komponentais, išskyrus aprašytus protokoluose, pateiktuose su šiuo gaminiu, šiame vadove ir papildomuose protokoluose, kurie pateikti www.qiagen.com. QIAGEN naudotojams pateikiami keli papildomi protokolai QIAGEN naudotojams. Šių protokolų QIAGEN kruopščiai nepatikrino ir neoptimizavo. QIAGEN neteikia garantijų, kad šie protokolai nepažeidžia trečiųjų šalių teisių.
2. QIAGEN nesuteikia garantijos, kad šis rinkinys ir (arba) jo naudojimas nepažeis trečiųjų šalių teisių, išskyrus licencijose nurodytus atvejus.
3. Rinkiniui ir jo komponentams suteikta licencija naudoti vieną kartą; pakartotinai naudoti, atnaujinti ar perparduoti negalima.
4. QIAGEN aiškiai atsisako bet kokių kitų išreikštų ar numanomų licencijų, išskyrus aiškiai nurodytas licencijas.
5. Rinkinio pirkėjas ir naudotojas sutinka nesimti ir neleisti niekam kitam imtis veiksmų, kurie galėtų paskatinti arba palengvinti pirmiau nurodytus draudžiamus veiksmus. QIAGEN gali įgyvendinti šioje ribotoje licencinėje sutartyje nurodytų neteisėtų veiksmų draudimus bet kuriame teisme ir atgauti visas tyrimo ir teismo išlaidas, įskaitant išlaidas advokatams, pateikusi ieškinį dėl šios Ribotosios licencinės sutarties vykdymo arba su šiuo rinkiniu ir (arba) jo komponentais susijusių teisių į savo intelektualinę nuosavybę.

Atnaujintas licencijos sąlygas žr. www.qiagen.com.

Prekių ženklai: QIAGEN®, „Sample to Insight®“, „QIAstat-Dx“, „DiagCORE®“ (QIAGEN Group); ACGIH® („American Conference of Government Industrial Hygienists, Inc.”); ATCC® („American Type Culture Collection”); BD™ („Becton Dickinson and Company”); „FilmArray®“ („BioFire Diagnostics, LLC”); „Copan®“, „FLOQSwabs®“, UTM® („Copan Italia S.P.A.”); „Clinical and Laboratory Standards Institute®“ („Clinical Laboratory and Standards Institute, Inc.”); „HealthLink®“ („HealthLink Inc.”); „Rhinomer®“ („Novartis Consumer Health, S.A.”); OSHA® (Profesinės saugos ir sveikatos administracija, „UniTranz-RT®“ („Puritan Medical Products Company”); JAV darbo departamentas; „MicroTest™“, M4®, M4RT®, M5®, M6™ („Thermo Fisher Scientific“ arba jos antrinės bendrovės); „Utakon®“ („Uriach Consumer Healthcare, S.L.”); „ZeptoMetrix®“ („ZeptoMetrix Corporation”). Registruotieji pavadinimai, prekių ženklai ir t. t., naudojami šiame dokumente, net jei specialiai nepažymėti kaip tokie, neturi būti laikomi nesaugomais įstatymo.

HB-2934-002 V2 R2 08/2024 © 2022 QIAGEN, visos teisės saugomos.

Užsakymas www.qiagen.com/shop | Techninė pagalba support.qiagen.com | Svetainė www.qiagen.com