

QuantIFERON®-TB Gold Plus (QFT®-Plus)

1


Tubi tal-Ġbir tad-Demm

Pakkett ta' Pazjent Singolu
(Kat. nru. 622222) Għal użu bejn il-livell tal-baħar u 810 m
(Kat. nru. 623222) Għal użu bejn 1020 m u 1875 m

WERREJ

4x QFT-Plus tubi ta' ġbir tad-demm (Nil, TB1, TB2, Mitogen)

1 x Fuljett tal-Pakkett

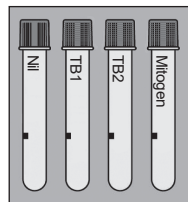


1085211MT Rev. 04 09/2018

Użu barra l-medda speċifikata tal-altitudni jista' jirriżulta f'tibdil fil-volum ta' demm miġbud. Għal użu f'kitt ta' QFT-Plus ELISA (Kat. nru. 622120 u 622822).



ĠBIR TAD-DEMM

2

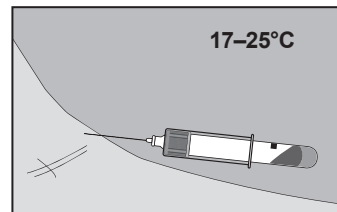

⚠ TWISSIJA:

- Japplikaw prekawzjonijiet standard ta' gestjoni tad-demm.
- It-tubi jistgħu jinħażnu fi, u għandhom jintużaw f'temperatura ambjentali (17°C–25°C).

Iġbor id-demm b'venepuntura.

Il-vakwu jimla sa 1 ml (il-marka s-sewda hija aċċettabbli medda 0.8 ml–1.2 ml).

Il-fluss tad-demm jista' jkun bil-mod.

Żomm tubu fuq labra għal 2-3 sekondi wara li jieqaf il fluss.


Irrepeti t-tubu jekk mhux qrib il-marka.

Suggeriment Tekniku

Labar 'friefet' — ipprajmja t-tubi b'tubu normali (mhux fornut) qabel il-mili tat-tubi QFT-Plus.

ĠBIR TAD-DEMM

3

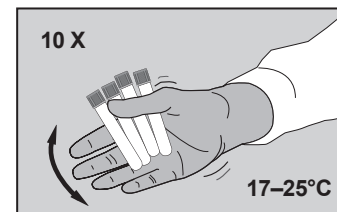

Minnufih wara li jimtlew it-tubi, hawwadhom għal għaxar (10) darbiet, bis-saħħa biżżejjed biex tiżgura li l-wiċċ kollu ta' ġewwa tat-tubu jinkesa bid-demm, sabiex l-antiġeni li jinsabu mal-wiċċ tat-tubu jinħallu.




It-tubu għandu jkun bejn 17–25°C fil-ħin tal-mili tad-demm.
It-taħlit bis-saħħa jista' jikkaguna sfaxxar tal-gell u jista' jwassel għal riżultati strambi.

Immarka t-tubi b'mod xieraq.

TBAĦHIR/INKUBAZZJONI

4

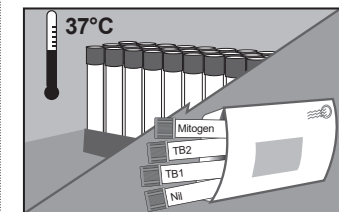

OPZJONI 1
Inkuba
fil-Laboratorju

Ittrasborda t-tubi lejn laboratorju fi 17–27°C. Id-demm għandu jiġi inkubat f'temperatura ta' 37°C kemm jista' jkun malajr (u fi żmien 16-il siegħa minn meta jinġabar).


Il-persunal tal-laboratorju għandu jħallat it-tubi mill-ġdid billi jaqlibhom 10 darbiet qabel l-inkubazzjoni f'37°C.

Suggeriment Tekniku

Immarka t-tubi bhala "Mhux Inkubati".

TBAĦHIR/INKUBAZZJONI

5

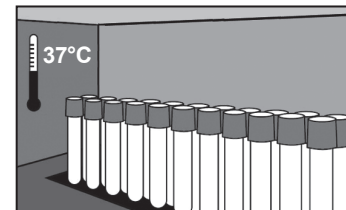

OPZJONI 2
Inkuba fis-sit
tal-Ġbir

Id-demm għandu jiġi inkubat wieqaf malajr kemm jista' jkun (u fi żmien 16-il siegħa mill-ġbir). Inkuba t-tubi wieqafin f'37°C għal 16 sa 24 siegħa.

Inkubaturi jistgħu jkunu disponibbli minn QIAGEN.


Suggeriment Tekniku

Umdità/CO₂ mhux meħtieġ.

Jekk it-tubi ma jiġux inkubati fi 37°C immedjament wara l-ġbir, **it-taħlit mill-ġdid tat-tubi billi dawn jinqelbu rashom 'l isfel 10 darbiet għandu jsir immedjament qabel l-inkubazzjoni.**

TBAĦHIR/INKUBAZZJONI

6

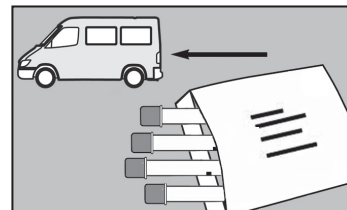

OPZJONI 2
(tkompli)

Tubi **inkubati** f'vapour għal ittestjar f'laboratorju (fi żmien 3 ijiem).

Żomm it-tubi f'4–27°C.

Suggeriment Tekniku


Tubi mmarkati bhala "Inkubati".



www.QuantiFERON.com

ĊENTRIFUGAZZJONI

7

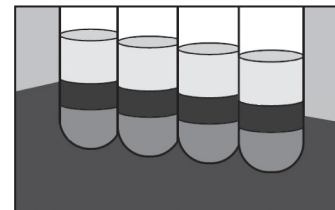

Tubi ta' ċentrifugi qabel it-tehid tal-kampjuni.

Dawwar b'2000–3000 g għal 15-il minuta.

It-Test Plasma bi QFT-Plus ELISA jew b'LIAISON® QuantiFERON-TB Gold Plus System (REF: 311010)

Il-plasma f'tubi ċentrifugati hija stabbli għal 28 jum meta maħżuna f'2–8°C.

Għal informazzjoni aġġornata dwar il-liċenzjar u r-rinunzi speċifiċi għall-prodott, ara l-QFT-Plus ELISA jew il-LIAISON QuantiFERON-TB Gold Plus System Fuljetti ta' Ġewwa l-Pakkett.

DETTALJI TA' KUNTATT

8

QIAGEN
Asia-Pacific: techservice-ap@qiagen.com
Europe: techserviceQFT-eu@qiagen.com
Middle East/Africa: techserviceQFT-eu@qiagen.com
Latin America (not including Brazil or Mexico):
techservice-latam@qiagen.com
Mexico: techservice-MX@qiagen.com
Brazil: techsebr@qiagen.com



QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
40724 Hilden
Germany
+49-2103-29-0

IVD

4°C 25°C

Marki kummerċjali: QIAGEN®, Sample to Insight®, QFT®, QuantiFERON® (Grupp QIAGEN); LIAISON® (DiaSorin).

© 2016-2018 QIAGEN, id-drittijiet kollha riservati.

— Sample to Insight —

